




WYPRODUKOWANY PRZEZ SDI.

POLA

ZAAWANSOWANY SYSTEM
WYBIELANIA ZĘBÓW.

TWÓJ
KATALOG
UŚMIECHÓW

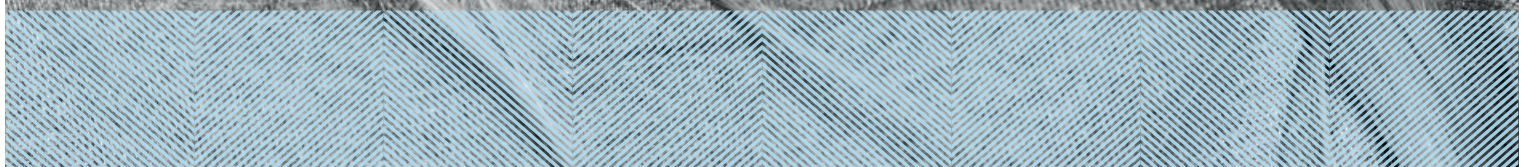



POROZMAWIJ
ZE SWOIM
PACJENTEM O
NAJLEPSZYM DLA
NIEGO SYSTEMIE
WYBIELANIA
ZĘBÓW

WYBIELANIE W GABINECIE

Pola Rapid	nadtlenek wodoru 6%	3 lub 4 x 15 minutowa aplikacja
Pola Professional	nadtlenek wodoru 35%	zgodnie z instrukcją
Pola Professional	nadtlenek wodoru 37,5%	zgodnie z instrukcją



WYBIELANIE W DOMU

Pola Day

nadtlenek wodoru 6%	nadtlenek wodoru 1 lub 2 x 30 min/dziennie LUB 1 x 45 min/dziennie
---------------------	--



Pola Night

nadtlenek karbamidu 10%	nadtlenek karbamidu minimum 2 godziny (lub przez całą noc)
nadtlenek karbamidu 16%	nadtlenek karbamidu minimum 90 minut (lub przez całą noc)

Uwaga: 1% nadtlenku wodoru równa się 2,77% nadtlenku karbamidu



Pola Light

nadtlenek wodoru 6%	Dwa 10 lub 15 minutowe zabiegi dziennie
---------------------	---



Pola For Aligners

nadtlenek karbamidu 10%	1 x 2 godziny w dzień lub w nocy
-------------------------	----------------------------------



ŻEL WYBIELAJĄCY W SZTYFCIE

Pola Luminare

nadtlenek wodoru 6%	3 x 30 min/dziennie
---------------------	---------------------



W GABINECIE

Produkty do wybielania gabinetowego

Komfort i satysfakcja pacjenta, minimalizacja czasu pracy lekarza.

Czas zabiegu wybielania zębów został ograniczony do minimum. Zwiększa to komfort pacjenta i jego zadowolenie oraz przynosi korzyści dla samego gabinetu. Nowa formuła z 6% zawartością nadtlenku wodoru gwarantuje szybkie uwalnianie się jonów nadtlenkowych i rozpoczęcie procesu rozjaśniania.



SZYBKIE
I BEZPIECZNE
WYBIELANIE



POLA RAPID



Pola Rapid to nowy produkt do wybielania zębów w gabinecie, który bezpiecznie wybiela zęby już po 45 minutach.

Unikalna formuła 6% nadtlenu wodoru, która natychmiast uwalnia składniki aktywne.

Wskazania:

1. Wybielanie przebarwionych, żywych zębów.
2. Wybielanie przebarwionych, martwych zębów.

Doskonała aplikacja i szybkie usuwanie

Żel Pola Rapid o wyższej lepkości umożliwia szybsze nakładanie i usuwanie dzięki specjalnie opracowanym właściwościom zapobiegającym przywieraniu. Pola Rapid można szybko i łatwo wycisnąć, a po nałożeniu pozostaje w miejscu aplikacji.

Zmodyfikowany niebieski żel dla szybszej aplikacji

Pola Rapid wykorzystuje zaawansowany niebieski żel, ułatwiający widoczność i aplikację. Łatwy do nałożenia, nieprzywierający żel, umożliwia szybszą aplikację oraz usunięcie.

Łatwa i precyzyjna aplikacja

Nie wymaga mieszania. Strzykawka zawierająca materiał jest dwudzielna. Żel miesza się w końcówce strzykawki, gdy jest nakładany

bezpośrednio na ząb. Dołączona końcówka i pędzelek zapewniają płynniejszą i bardziej precyzyjną aplikację.

Prosta procedura

Nie wymaga izolacji tkanek miękkich. Prosta procedura przygotowania zębów i krótki czas aplikacji, skraca czas zabiegu i poprawia efektywność.

Zawiera środki znoszące nadwrażliwość

Pola Rapid zawiera unikalne właściwości, które hamują nadwrażliwość pozabiegową. Azotan potasu, kluczowy składnik przeciwbólowy, zapobiega nadwrażliwości i działa kojąco. Wysoka zawartość wody w materiale Pola Rapid, zapewnia maksymalny komfort zarówno w czasie, jak i po zabiegu.

Uwalnianie fluoru w celu wzmocnienia zębów

Pola Rapid zawiera fluor, który pomaga wzmocnić zęby i chroni przed nadwrażliwością.

Może być używany z lampą lub bez lampy


Pola Rapid może być używany z lampą wybielającą lub bez, ponieważ nie wymaga ciepła do aktywacji żelu.

POLA RAPID INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

1. Oznacź i zarejestruj odcień zęba przed zabiegiem. Posłuż się kolornikiem Vita* zgodnie z rozmieszczeniem wskaźników stopnia jasności.
2. Oczyszć zęby pastą na bazie pumeksu, BEZ innych dodatków.
3. Załóż retraktor policzkowy i ostroń odsonięte powierzchnie warg żelem glicerynowym.
4. Szczelnie założyć końcówkę mieszającą na strzykawkę Pola Rapid i zamocować tłoczek, stojąc z dala od pacjenta. Wycisnąć niewielką ilość żelu na podkładkę do mieszania, aż do pojawienia się jednorodnego niebieskiego żelu.
5. Przy użyciu końcówki mieszającej zaaplikuj cienką warstwę żelu (dzięki temu materiał nie będzie spływał) na wszystkie zęby poddane wybielaniu. UWAGA: Nie odrywaj końcówki mieszającej podczas aplikacji żelu. Użyj ruchu ciągłego.
6. Pozostawić nałożony żel na 15 minut (opcjonalnie: na tym etapie można zastosować lampę polimeryzacyjną, Radii Xpert lub Radii Plus (SDI Limited)).
7. Usunąć żel wybielający korzystając ze ssaka chirurgicznego. Uwaga: niewielka ilość żelu może pozostać na powierzchni zębów.
8. Powtórzyć kroki 5 - 7 trzy razy (opcjonalnie cztery razy).
9. Po ostatniej aplikacji usuń cały żel i dokładnie wypłucz powierzchnię zębów.
10. Oznacź i zarejestruj odcień zęba po zabiegu.



Przed

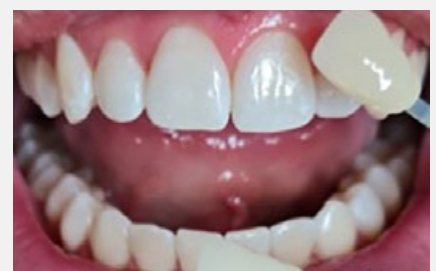

Po

Zdjęcia dzięki uprzejmości Dr. G. Kolling Niemcy

W GABINECIE

STWÓRZ
PIĘKNY
UŚMIECH

POLA PROFESSIONAL



Pola Professional to system do wybielania zębów na bazie nadtlenu wodoru przeznaczony do wybielania zębów po leczeniu endodontycznym. Dzięki zastosowaniu techniki „stopniowego wybielania”, Pola Professional to łatwy i skuteczny system wybielania zębów z martwą miazgą.

- Bardzo szybka aplikacja
- Zestaw dla 1 i 3 pacjentów

W zależności od potrzeb dostępne są dwa różne systemy dozujące produktów Pola Professional:

Strzykawka Automix – automatyczne mieszanie i bezpośrednie dozowanie

Automatyczne mieszanie to znacznie krótszy czas przygotowania, świeżo aktywowany żel zgodnie z potrzebami oraz poręczna bezpośrednia i precyzyjna aplikacja.

Proszek i płyn – mieszanie i nakładanie przez lekarza

Po zmieszaniu proszek i płyn tworzą jasnoniebieską pianę o konsystencji żelu, która nie lepi się i nie ciągnie, co ułatwia jej umieszczenie w otwartej komorze miazgi

POLA
DAY

POLA
NIGHT

Zgodnie z prawem

Pola Day 6% oraz Pola Night 10% i 16% spełniają wymogi przepisów Komisji Europejskiej zmieniających Dyrektywę 76/768/UE dotyczącą produktów kosmetycznych.

Naturalne ukojenie i ochrona zębów

Specjalne składniki minimalizują tworzenie się kamienia nazębnego i wspomagają remineralizację zębów, a ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej jest zminimalizowane.

Wysoka zawartość wody

Wysoka zawartość wody w żelu przeciwdziała odwodnieniu szkliwa i obniża nadwrażliwość pozabiegową.

Wysoka masa cząsteczkowa zagęszczacza

Przeciwdziała uczuciu klejenia i wysychaniu żelu, a dodatkowo redukuje nadwrażliwość zębów.

Lepkość

Dzięki wysokiej lepkości żelu, jego aplikacja do nakładek jest łatwa i bezpieczna, a żel pozostaje w miejscu przez cały czas trwania zabiegu.

Smak

Przyjemny miętowy smak żelu daje długotrwałe uczucie świeżości.

Uwalnianie fluoru

Zawarty w preparatach Pola Day i Pola Night fluor remineralizuje powierzchnię szkliwa i redukuje nadwrażliwość pozabiegową.

Zawartość środków łagodzących

Żele Pola Day i Pola Night zawierają środki znoszące nadwrażliwość. Środki te działają na zakończenia nerwowe, znieczulając je na styku miazgi z zębina, czego rezultatem jest minimalizacja nadwrażliwości pozabiegowej i maksymalizacja komfortu pacjenta.

Neutralne pH

Dzięki neutralnemu pH produktów Pola Day i Pola Night następuje całkowite uwolnienie nadtlenu bez narażania komfortu pacjenta.



POLA DAY & POLA NIGHT INSTRUKCJE

1. Wyszczotkować zęby.
2. Umieścić małą kroplę żelu w każdym pojemniczku nakładki odpowiadającemu zębom poddawanych zabiegowi.
3. Umieścić nakładkę z żelem na zębach
4. Za pomocą ściereczki lub miękkiego pędzelka wytrzeć nadmiar żelu w jamie ustnej.
5. Usunąć nakładkę po zakończeniu zabiegu. Wypluć nakładkę i jamę ustną letnią wodą.
6. Wyszczotkować zęby.



POLA LUMINATE



Teraz silniejszy niż kiedykolwiek

6% stężenie nadtlenu wodoru w Pola Luminat zapewnia szybkie rozpoczęcie procesu wybielania dając widoczne efekty w krótkim czasie.

Odświeżenie & utrzymanie jasnego uśmiechu

Pola Luminat jest idealnym preparatem do odświeżenia procedury rozjaśniania u pacjentów, którzy już wybielali swoje zęby tak aby podtrzymać efekt białych zębów.

Uwalnianie fluoru

Dodatek fluoru remineralizuje szkliwo i pomaga w zmniejszeniu nadwrażliwości pozabiegowej.

Szybko i łatwo

Nie ma potrzeby stosowania indywidualnych nakładek do wybielania. Pacjenci mogą nabyć zestaw w gabinecie i stosować go samodzielnie w domu. Pola Luminat to także rewelacyjne narzędzie marketingowe, zachęcające pacjentów do wybielania.

Szybkie i łatwe rozwiązanie dla pacjenta

Pacjenci mogą stosować Pola Luminat o dowolnej porze dnia i nocy - preparat jest niewidoczny.

Świetne odświeżenie koloru

Pola Luminat to świetne rozwiązanie dla pacjentów, którzy wcześniej wybielili zęby - pomaga odzyskać blask i jasny odcień.

Ekonomiczność

Ekonomiczność Pola Luminat to pierwszy krok, by zachęcić pacjentów do wybielania zębów. Nie wymagane są nakładki ani czas jaki trzeba poświęcić na zabieg w gabinecie.

Uwalnianie fluoru

Dodatek fluoru gwarantuje skuteczną remineralizację i redukuje nadwrażliwość pozabiegową.

Prostota i wygoda stosowania

Pacjent może zajmować się codziennymi czynnościami, nie zaprzężając sobie uwagi postępującym procesem wybielania.

Przyjemny smak

Długo utrzymujący się miętowy smak.

SOOTHE



Znoszenie nadwrażliwości

Soothe to żel charakteryzujący się stałym uwalnianiem azotanu potasu (stężenie 6%) i fluoru (stężenie 0.1%). Preparat znosi nadwrażliwość występującą na skutek oddziaływania bodźców termicznych i chemicznych. W przeciwieństwie do innych substancji o podobnym działaniu Soothe nie zaburza procesu wybielania.

Aplikacja przed lub po wybielaniu

Nadwrażliwość może pojawić się w trakcie lub po wybielaniu. Preparat Soothe można stosować zarówno w trakcie procesu wybielania jak i po jego zakończeniu.

POLA FOR ALIGNERS



JEDNOCZESNE PROSTOWANIE I WYBIELANIE ZĘBÓW

Przedstawiamy żel wybielający Pola, idealnie dopracowany w celu stosowania w nakładkach ortodontycznych. System Pola For Aligners można z łatwością wykorzystywać w domu, co zapewnia komfort pacjentom, którzy zyskują bielszy, jaśniejszy uśmiech bez konieczności noszenia dodatkowych nakładek.


Pola For Aligners ma te same zalety, co nagradzany preparat do wybielania Pola

- ✓ Największy komfort dla pacjenta przy stosowaniu zestawu do wybielania.
- ✓ Zawiera azotan potasu i fluor w celu zmniejszenia nadwrażliwości przy długoterminowym stosowaniu.
- ✓ Dzięki wysokiej lepkości żel daje się łatwo wprowadzać do nakładek, jest stabilny i pozostaje na miejscu.

Dostępny w wygodnych zestawach po 4 strzykawki – do stosowania w domu, w ciągu dnia albo w nocy

- ✓ System Pola For Aligners jest dostępny w postaci żelu Pola Night 10% nadtlenku karbamidu, starannie wybrany jako najlepszy środek wybielający, odpowiedni dla wszystkich rodzajów nakładek. Pacjent może indywidualnie dopasować sposób jego używania, stosując preparat między posiłkami przez zaledwie parę godzin w ciągu dnia, albo korzystając z wygodnej aplikacji na noc.
- ✓ W badaniach klinicznych uznaje się 10% nadtlenek karbamidu za złoty standard w wybielaniu zębów, gdyż zapewnia on optymalne efekty wybielania przy utrzymaniu maksymalnego bezpieczeństwa i zadowolenia pacjenta.*


*Źródło: Efficacy of Pola Night on tooth whitening. 24 months post treatment on Japanese 2006 - Tsubura Shuichi

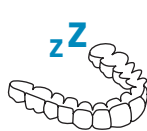

BEZPIECZNY
DO STOSOWANIA
PRZEZ CAŁĄ NOC



UWALNIANIE
FLUORU

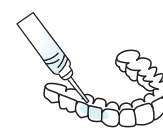


ŁATWY W UŻYCIU



STOSOWANY
I POLECANY PRZEZ
SPECJALISTÓW

PRZYPADKI KLINICZNE

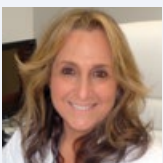

Dr Linda Greenwall

BDS MGDS RCS MSc MRD
RCS FFGDP FICD BEM

Lekarz dentysta, specjalista w stomatologii zachowawczej i estetycznej, protetyk, UK.



PRZED



PO

Pola Night 10% nadtlenku karbamidu do nakładek ortodontycznych

Pola Night 10% nadtlenku karbamidu do nakładek ortodontycznych, stosowany od 6 tygodni z przezroczystymi nakładkami ortodontycznymi.

POLA LIGHT

NOWY ZAAWANSOWANY SYSTEM WYBIELANIA Z TECHNOLOGIĄ LED, DO STOSOWANIA W DOMU

CIESZ SIĘ BIELSZYM, BARDZIEJ PEWNYM UŚMIECHEM JUŻ PO PIĘCIU DNIACH.

Pola Light to zaawansowany system wybielania zębów, łączący w sobie wielokrotnie nagradzaną formułę wybielającą Pola z ustnikiem LED, który umożliwia szybsze przeprowadzenie zabiegu wybielania.

- System Pola Light został połączony z żelem Pola Day.
- Szybkie działanie, zapewniające bielsze zęby już w przeciągu 5 dni.
- Formuła pozwalająca na usuwanie długoletnich przebarwień.
- Akumulatory pozwalające na ładowanie i ponowne wykorzystanie urządzenia przy kolejnych zabiegach.
- Remineralizacja w celu wzmocnienia zębów.
- Dodatkowe nawilżenie aby zapobiegać nadwrażliwości.



BIELSZE ZĘBY JUŻ W PIĘĆ DNI

Pięciodniowy okres wybielania.

Nie ma konieczności wizyty w gabinecie lub przygotowania indywidualnych nakładek, co pozwala zaoszczędzić czas zarówno pacjentowi jak i lekarzowi.



JUŻ OD 20 MINUT DZIENNIE

Dwa 10 lub 15 minutowe zabiegi dziennie.



PROSTA W UŻYCIU

Poręczny, wygodny w użyciu ustnik, bez kabla, do wielokrotnego ładowania. Ustnik Pola posiada uniwersalny rozmiar i jest dwustronny.



REKOMENDOWANY PROFESJONALNY SYSTEM WYBIELANIA

Pola to powszechnie znany i rekomendowany profesjonalny system wybielania, któremu ufają i który polecają dentyści swoim pacjentom w celu szybszego uzyskania zdrowego i bielszego uśmiechu.

Żele wybielające o dużej lepkości i neutralnym pH zapewniają pacjentowi najwyższy komfort dostępny w domowych zestawach wybielania.

Unikalna mieszanka czynników łagodzących, odżywek oraz duża zawartość wody pomagają ograniczyć nadwrażliwość.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU POLA LIGHT

- 1x Ustnik LED Pola
- 4x 3g strzykawki Pola Day zawierające 6% nadtlenku wodoru
- 1x kabel USB
- 1x Instrukcje



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co powoduje przebarwienia zębów?

Każdy ząb jest inny i wyjątkowy, dlatego przebarwia się w różny sposób. Plamy na zębach zazwyczaj powstają od kolorowego pożywienia jak kawa, czarna herbata, herbata ziołowa, zielona, czerwone wino, pikantne potrawy takie jak curry czy kurkuma oraz od palenia papierosów. Przebarwienia zębów mogą być również spowodowane efektami starzenia, przebytymi urazami, tetracyklinami, fluorozą itp.

Na czym polega wybielanie?

Żel wybielający założony na ząb, rozpada się na jony wody i tlenu. Jony tlenu wnikają do szkliwa i zębiny i atakują cząsteczki plam, aby skutecznie je rozbić i odbarwić. Te bezbarwne cząsteczki są następnie naturalnie usuwane z zęba przez ślinę. Efekty wybielania są związane z liczbą uwolnionych jonów i czasem trzymywania na zębach.



Jak długo trwa wybielanie?

W przypadku wybielania w gabinecie, efekty są już po 30 minutach.

Jeśli pacjent wybiela zęby w domu, może to potrwać około 5-14 dni, jednak dłuższy czas wybielania może być wymagany przy tetracyklinach. U pacjentów z fluorozą może to potrwać 2-6 miesięcy.

Jak długo utrzymują się efekty wybielania?

Efekty wybielania zależą od indywidualnych skłonności pacjenta. Wybielanie powinno się powtarzać co 1-3 lata zarówno w gabinecie jak i w domu.

Bez powtarzania zabiegu, zęby pacjentów zaczną się ponownie przebarwiać, jednak nigdy już nie powrócą do swoich oryginalnych odcieni.

Co jeśli pacjent ma odbudowy lub licówki? Czy one też zmieniają kolor?

Wybielanie usunie istniejące plamy, ale nie zmieni oryginalnego koloru.


Czy są jakieś skutki uboczne?

U większość pacjentów, którzy postępują zgodnie z instrukcją, nie występują żadne skutki uboczne. Niemniej jednak, niektórzy pacjenci doświadczają tymczasowej nadwrażliwości pozabiegowej (w szczególności na ciepło lub zimno), która mija po kilku godzinach od zakończenia zabiegu i nie pozostawia żadnych śladów. Czas aplikacji może zostać skrócony, żel może być nakładany rzadziej lub należy zastosować środek znoszący nadwrażliwość. Pacjent powinien powstrzymać się od spożywania napojów gazowanych, cytrusów itp, aby uniknąć nadwrażliwości.

Czy kobiety w ciąży mogą wybielać zęby?

Nie zaleca się wybielania zębów kobietom w ciąży i karmiącym.

PRZYPADKI KLINICZNE

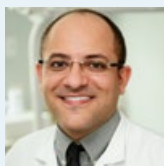

Prof. Leandro Martins

POLA NIGHT

Pola Night 10%

Jednym z największych problemów dotyczących wybielania jest nadwrażliwość pozabiegowa. W związku z tym, kluczowe jest znalezienie produktów zapewniających największe bezpieczeństwo z niskim stężeniem nadtlenku karbamidu.

Pola Night ma dużą zawartość wody, neutralne pH, środek znoszący nadwrażliwość i wysoką lepkość. Te cechy odpowiadają zapotrzebowaniu pacjenta na skuteczny efekt z jednoczesną ochroną przed nadwrażliwością i podrażnieniem dziąseł. Dlatego aby przeprowadzić wygodny, bezpieczny i skuteczny zabieg, należy wybrać produkt Pola Night 10%.




Dr. David Carralero Plaza

POLA DAY

Pola Day 6%

Pola Day to produkt, którego używam od ponad 10 lat, z bardzo dobrymi wynikami. Do wybielania domowego, wolę zastosować maksymalne stężenie nadtlenku wodoru, ponieważ efekt jest szybszy a proces bardziej komfortowy dla pacjentów, gdyż zęby są poddane działaniu żelu przez krótszy czas.

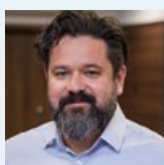

Lek.dent. Michał Kowalik

POLA NIGHT

Pola Night 10%

Biały uśmiech kojarzy nam się ze zdrowiem, pięknem, sukcesem i szczęściem. Równocześnie chcemy zapewnić pacjentom leczenie, które jest proste, ekonomiczne i bezpieczne.

Dlatego od wielu lat stosuję preparaty do wybielania Pola firmy SDI, oferując moim pacjentom nowy uśmiech, pewność siebie i radość z życia.



POLA W GABINECIE

Pola Professional 37.5% zestaw dla 3 pacjentów

3 x 2.8 ml strzykawki Pola Professional
3 x 1 g strzykawki Gingival barrier
Akcesoria
7700469 (37.5% HP)



Pola Professional 35% zestaw dla 3 pacjentów

6 x 0.3g Pola Professional pojemnik z proszkiem
6 x 2ml Pola Professional strzykawki
3 x 1 g strzykawki Gingival barrier
Akcesoria
7700259 (35% HP)



Pola Rapid zestaw dla 1 pacjentów

1 strzykawka Pola Rapid 2.8ml
Akcesoria
7700510 (6% HP)



Pola Professional 37.5% zestaw dla 1 pacjenta

1 x 2.8 ml strzykawka Pola Professional
1 x 1 g strzykawka Gingival barrier
Akcesoria
7700468 (37.5% HP)



Pola Professional 35% zestaw dla 1 pacjenta

3 x 0.3g Pola Professional pojemnik z proszkiem
3 x 2ml Pola Professional strzykawki
1 x 1 g strzykawka Gingival barrier
Akcesoria
7700258 (35% HP)



Pola Rapid zestaw dla 3 pacjentów

3 x 2.8 ml strzykawki Pola Professional
Akcesoria
7700511 (6% HP)



Bariera dziąsłowa

2 x 1g strzykawki uzupełniające
7750006



POLA W DOMU

Pola Day i Pola Night Zestaw ekonomiczny: 10 x 1.3g strzykawka

Pola Day
7700393 (6% HP)

Pola Night
7700394 (10% CP)
7700395 (16% CP)



Pola Night Zestaw: 45 x 1.3g strzykawka

Pola Night
7700398 (16% CP)



Soothe

8150002
4 X 1.2mL strzykawka
8150033
50 X 1.2mL strzykawka



Kosmetyczki Pola

7700999
10 sztuk

Pudełeczka na nakładki

7750008
opakowanie:
5 pudełeczek

Płytki do nakładek

7750005
20 sztuk
(uzupełnienie)

Żywica blokująca

7700012
2 x 1g strzykawka z żywicą blokującą

UWAGA: każde opakowanie zawiera akcesoria
CP: nadtlenek karbamiidu **HP:** nadtlenek wodoru

Pola Day, Pola Night Zestaw: 4 x 1.3g strzykawka

Pola Day
7700357 (6% HP)

Pola Night
7700369 (10% CP)
7700375 (16% CP)



Pola Night 36 x 3g opakowanie zbiorcze

7700089 (16% CP)

Pola Light

7700985 (6% HP)



Pola For Aligners

7700556 (10% CP)
4 x 3g strzykawka



POLA ŻEL WYBIELAJĄCY W SZTYFCIE

Pola Luminate

1 X 5.5mL Pola Luminate
7700092



MATERIAŁY MARKETINGOWE


MATERIAŁY MARKETINGOWE WSPIERAJĄCE PROMOWANIE WYBIELANIA ZĘBÓW



PLAKAT POLA DAY
Kod zamówienia M100419



PLAKAT POLA NIGHT
Kod zamówienia M100420

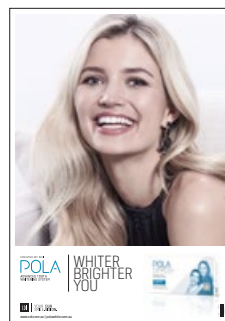

PLAKAT POLA OFFICE+
Kod zamówienia M100418



POLA LIGHT ULOTKA DLA PACJENTA
Kod zamówienia M100528



POLA LIGHT ULOTKA DLA DENTYSTY
Kod zamówienia M100544



STOJAK NA ULOTKI DLA PACJENTÓW
Kod zamówienia M100290



POLA ULOTKI DLA PACJENTÓW
Kod zamówienia M100250



POLA - KARTA WIZYT
Kod zamówienia M100102



POLA NAKLEJKA NA OKNO
Kod zamówienia M100417



TORBA PAPIEROWA POLA
Kod zamówienia M100143



POLA PREZENTACJA NA USB DO POCZEKALNI
Kod zamówienia M100245



DOSTOSOWANE MATERIAŁY MARKETINGOWE
Materiały marketingowe na indywidualne potrzeby gabinetu do pobrania na www.sdi.com.au

SDI LIMITED ZAJMUJE SIĘ
PRZEDE WSZYSTKIM
BADANIAM, ROZWOJEM,
PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ
SPECJALISTYCZNYCH
MATERIAŁÓW
STOMATOLOGICZNYCH.

PRODUKTY FIRMY SDI TO
POŁĄCZENIE INNOWACYJNOŚCI
I DOSKONAŁOŚCI, DLATEGO
STANOWIĄ IDEALNE
ROZWIĄZANIE DLA
STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ.



MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 022 55 734
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166



INSTAGRAM
@pola_smile



FACEBOOK
polasmiletoothwhitening

WIĘCEJ INFORMACJI NA
polawhite.com.au

05-2024

M770964 1



+D036M7709641E