

SDI | LUNA FLOW

RESINA UNIVERSAL FLUIDA



FLUIDEZ
PERFEITA
ESTABILIDADE
PERFEITA

CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DA SDI



50 ANOS
MELHORANDO A
ODONTOLOGIA

LUNA FLOW

A Luna Flow é uma nova resina composta fluida, disponível em duas viscosidades.

Com uma mistura de partículas de diferentes tamanhos ultrafinos para otimizar o manuseio, as propriedades mecânicas e ópticas da Luna Flow oferecem elevada radiopacidade, controle sobre a aplicação, facilidade na escolha de cor com estabilidade, excelente força e resistência contra o desgaste.

Estas propriedades fazem da Luna Flow uma opção universal fantástica de forramento; base; restauração provisória ou de reparo; e Classe V, entre outras indicações.

RESTAURAÇÕES COM A LUNA FLOW EM CONJUNTO COM A LUNA 2



Imagens cedidas pela Dra. Fay Goldstep e pelo Dr. George Freedman - Canadá



Imagens cedidas pelo Dr. Jose Amengual Lorenzo - Espanha

» "Produto espetacular! É muito fácil de aplicar. A Luna Flow é perfeita, principalmente a de viscosidade baixa. Adoro!" «

DR GERARD MELKI - CANADÁ



» "A Luna Flow reflete os esforços bem-sucedidos da SDI na melhoria dos materiais dentários." «

DR MARIO GONZALEZ BONILLA - ESPANHA



» "Os produtos da SDI tornam a prática diária mais rápida e lucrativa, permitindo aos dentistas poupar tempo de trabalho e obter ótimos resultados. As resinas da SDI apresentam excelente manuseio, acabamento fantástico e brilho natural." «

PROF DR MARCO AURELIO CHAVES - BRASIL



Imagens cedidas pelo Dr. Bill Gergis, Fundador da Biomimetic Aesthetic Dentistry - Austrália

FLUIDEZ E AJUSTE COM PERFEIÇÃO

A Luna Flow está disponível em duas viscosidades para responder às suas necessidades clínicas.

Utilize a Luna Flow para um manuseio superior e controle máximo durante a aplicação. Essa resina flui sempre que necessário, mantém a sua forma e não forma fios.

Para dentistas que preferem maior fluidez, utilize a Luna Flow LV - uma opção de viscosidade baixa.



LUNA FLOW
Viscosidade normal

LUNA FLOW LV
Viscosidade baixa

RESTAURAÇÃO COM A LUNA FLOW




Imagens cedidas pela Dra. Carla Cohn - Canadá

PROPRIEDADES SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS EM QUALQUER LUZ

Utilizando a tecnologia Logical Shade Matching com Chameleon Effect, as tonalidades Luna Flow foram desenvolvidas dando prioridade ao valor (quantidade de branco), enquanto os pigmentos foram dispostos de forma logicamente crescente, para uma correspondência mais simples e rápida com o Vita Classical Shade Guide®.

O Chameleon Effect da Luna Flow e a inovadora tecnologia Logical Shade Matching imitam as propriedades naturais dos dentes em todas as fontes de luz. Os seus pacientes desfrutarão de translucidez, opalescência e fluorescência naturais.

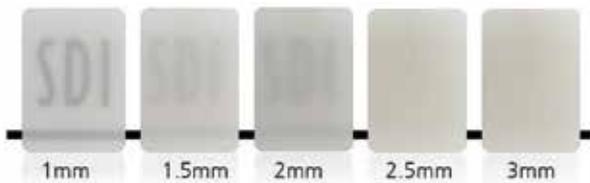


Translucidez em diferentes espessuras da tonalidade A2 da Luna Flow.



Escaneie o QR code para baixar gratuitamente o Guia Clínico de Translucidez da Luna Flow e para acessar mais conteúdos relacionados com a Luna Flow.

RADIOPACIDADE DA LUNA FLOW
265% AI

RADIOPACIDADE DA DENTINA
100% AI

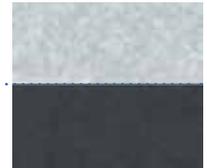

Fonte: dados de teste interno



ELEVADA FORÇA DE COMPRESSÃO 421 MPa

A Luna Flow oferece uma força de compressão excepcionalmente elevada de 421 MPa. Uma vez que a maioria das forças mastigatórias são de natureza compressiva, a Luna Flow é adequada para a utilização em restaurações posteriores, de forma a sustentar as cargas oclusais.



ELEVADA RESISTÊNCIA À FLEXÃO 128 MPa

A Luna Flow resiste às forças mastigatórias de uma forma semelhante à dentina. A Luna Flow é ideal para cavidades de Classe V, onde a flexibilidade é importante para garantir a longevidade da restauração e a satisfação do paciente.



RADIOPACIDADE EXCEPCIONAL 265% AI

A Luna Flow tem uma radiopacidade impressionante (265%), proporcionando um contraste significativo com a dentina/ esmalte natural (100%/170%). Este contraste auxilia num diagnóstico mais rápido e preciso.

RESTAURAÇÕES COM A LUNA FLOW EM CONJUNTO COM A LUNA 2



Imagens cedidas pelo Dr. Teo Vaca - Espanha


» "A correspondência de tonalidades e o manuseio da Luna Flow são excepcionais. As restaurações são perfeitas." «

DR FERNANDA ZEVIANI - DENTISTA BRASILEIRA ATUANDO NA AUSTRÁLIA




POLIMENTO PERFEITO

A composição da restauração da Luna Flow foi otimizada para obter excelentes resultados de polimento, resistência ao desgaste e longevidade.

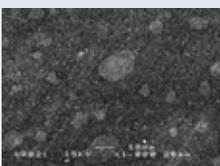

MEV (Microscopia eletrônica de varredura) antes do acabamento e polimento

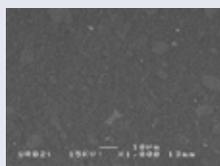

MEV depois do acabamento e polimento

FONTE: Testado de forma independente pela Unité de Recherches Biomatériaux Innovants et Interfaces (URB2i-EA 4462 Paris Descartes). Presidente: Dr. Jean-Pierre Attal.

INSTRUÇÕES

- 1 Condicionamento seletivo ou total: Condicionar a superfície do dente com Super Etch 37% ácido fosfórico durante 10 segundos.
- 3 Auto-condicionamento: Aplicar o adesivo universal Zipbond (SDI Limited) de acordo com as instruções do fabricante, jato de ar cuidadosamente durante 5 segundos e fotopolimerizar durante 10 segundos.



- 2 Enxaguar cuidadosamente, remover o excesso de água e manter úmido.
- 4 Aplicar a Luna Flow em incrementos de até 2mm, fotopolimerizar durante 20 segundos, efetuar o acabamento e o polimento com Polishing Paste (SDI Limited).



DETALHES DE PEDIDO



SERINGAS KIT DE INTRODUÇÃO LUNA FLOW

20 pontas descartáveis, calibre 20 (1 saco com 20)	8566125
2 seringas LUNA FLOW A2	
2 seringas LUNA FLOW A3	



LUNA FLOW SERINGAS DE 2 G

LUNA FLOW Ser A1 - Vita®	8566101
LUNA FLOW Ser A2 - Vita®	8566102
LUNA FLOW Ser A3 - Vita®	8566103
LUNA FLOW Ser A3,5 - Vita®	8566104
LUNA FLOW Ser B1 - Vita®	8566106
LUNA FLOW Ser B2 - Vita®	8566107
LUNA FLOW Ser C2 - Vita®	8566110
LUNA FLOW Ser Opaque OA2: opaca com tonalidade A2	8566115
LUNA FLOW Ser Opaque OA3: opaca com tonalidade A3	8566116
LUNA FLOW Ser I - mais translúcida, equivalente ao esmalte	8566118
LUNA FLOW Ser XB - Tonalidade de clareamento extra: equivalente à OM1 Vita®	8566121
LUNA FLOW Ser 2XB - 2x Extra Tonalidade de clareamento: equivalente à OM1 Vita®	8566122



SERINGAS KIT DE INTRODUÇÃO LUNA FLOW LV

20 pontas descartáveis, calibre 20 (1 saco com 20)	8566225
2 seringas A2 LUNA FLOW LV	
2 seringas A3 LUNA FLOW LV	



LUNA FLOW LV SERINGAS DE REFIL DE 2 G

LUNA FLOW LV Ser A1 - Vita®	8566201
LUNA FLOW LV Ser A2 - Vita®	8566202
LUNA FLOW LV Ser A3 - Vita®	8566203
LUNA FLOW LV Ser A3,5 - Vita®	8566204
LUNA FLOW LV Ser B1 - Vita®	8566206
LUNA FLOW LV Ser B2 - Vita®	8566207
LUNA FLOW LV Ser C2 - Vita®	8566210
LUNA FLOW LV Ser Opaque OA2: opaca com tonalidade A2	8566215
LUNA FLOW LV Ser Opaque OA3: opaca com tonalidade A3	8566216
LUNA FLOW LV Ser I - Incisal: mais translúcida, equivalente ao esmalte	8566218
LUNA FLOW LV Ser XB - Tonalidade de clareamento extra: equivalente à OM2 Vita®	8566221
LUNA FLOW LV Ser 2XB - 2x Extra Tonalidade de clareamento: equiva- lente à OM1 Vita®	8566222

LUNA FLOW KITS SERINGAS AVULSO

5 seringas LUNA FLOW 2 gr. 20 pontas para aplicador (1 saco com 20)	
LUNA FLOW KIT AVULSO A1 Equivalente à Vita® A1	8566130
LUNA FLOW KIT AVULSO A2 Equivalente à Vita® A2	8566131
LUNA FLOW KIT AVULSO A3 Equivalente à Vita® A3	8566132

LUNA FLOW LV KITS SERINGAS AVULSO

5 seringas LUNA FLOW LV 2 gr. 20 pontas para aplicador (1 saco com 20)	
LUNA FLOW LV KIT AVULSO A1 Equivalente à Vita® A1	8566230
LUNA FLOW LV KIT AVULSO A2 Equivalente à Vita® A2	8566231
LUNA FLOW LV KIT AVULSO A3 Equivalente à Vita® A3	8566232

DICA CLÍNICAS

As tonalidades XB e 2XB Bleach são ideais para utilizar em restaurações após um tratamento de clareamento dentário com Pola (SDI Limited), e também em dentes decíduos.

POLA
ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

A Luna Flow pode ser utilizada com o Zipbond Universal (SDI Limited) - um adesivo universal monocomponente e liberador de flúor, com excelente manuseio e efeito dessensibilizante.

SDI | ZIPBOND
UNIVERSAL ADHESIVE

VEJA UMA RESTAURAÇÃO COM LUNA FLOW

Escaneie o QR Code abaixo



YOUR SMILE. OUR VISION.



M100608 C

11-2023



+036M10060813

FABRICADO NA AUSTRÁLIA
por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRÁLIA 1800 337 003
ÁUSTRIA 00800 0225 5734
BRASIL 0800 770 1735
FRANÇA 00800 0225 5734
ALEMANHA 0800 100 5759

ITÁLIA 00800 0225 5734
NOVA ZELÂNDIA 0800 808 855
ESPANHA 00800 0225 5734
REINO UNIDO 00800 0225 5734
EUA E CANADÁ 1 800 228 5166