

# points

DISPOSABLE BRUSH APPLICATORS

EINWEG PINSELAPPLIKATOR

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS




MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES

PINCEAUX-APPLICATEURS JETABLES

APPLICATORI MONOUSO

ディスポーザブル・ブラシアプリケーター

拋棄式塗刷

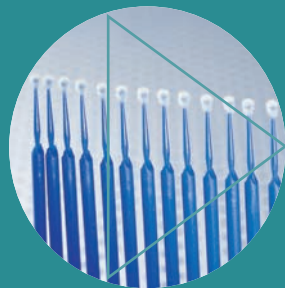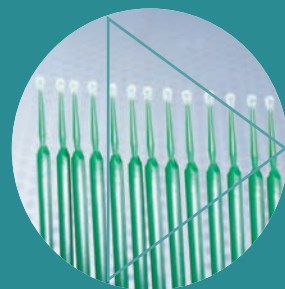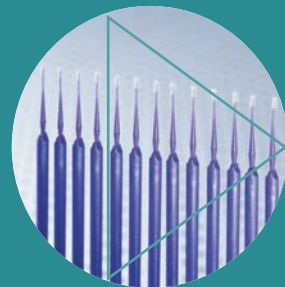

SDI

# points

Los micro-pinceles aplicadores desechables son usados para transferir rápidamente pequeñas cantidades de material dentro de áreas difíciles de alcanzar

Las puntas son resistentes a los solventes comunes presentes en materiales dentales

### Fibras resistentes a solventes

Las fibras del tip son resistentes a solventes y medios ambientes severos.

### Fibras no absorbentes, no se disgregan

Las fibras no se separan durante el proceso. La solución es suspendida entre las fibras hasta su aplicación.

### Tres tamaños

Puntas en tres tamaños, superfinas, finas y medianas, permiten transportar

Diferentes tamaños de gotas

### Selección de colores

Los variados colores son ideales para procesos de múltiples pasos como código de color.

### Material suave y flexible

Las puntas pueden ser dobladas para máxima accesibilidad.

### Indicaciones


- Aplicación de sellantes
- Colocación de agentes adhesivos
- Aplicación de grabadores
- Colocación de liners cavitarios
- Soluciones hemostáticas, astringentes, reveladoras
- Absorber excesos de resina
- Condensar hidróxido de calcio en canales radiculares.



#### Puntas púrpura – superfinas

N ° de pedido 8100122

1 x 400 puntas púrpura - superfinas

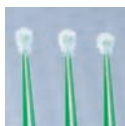

#### Puntas verde oscuro – finas

N ° de pedido 8100116

1 x 400 puntas verde oscuro – finas



#### Puntas azules - medianas

N ° de pedido 8100118

1 x 400 puntas azules – medianas

#### Puntas verde claro – finas

N ° de pedido 8100117

1 x 400 puntas verde claro – finas

#### Puntas celestes – medianas

N ° de pedido 8100119

1 x 400 puntas celestes

## INSTRUCCIONES

- 1 Las puntas pueden usarse rectas o curvadas

a



b



- 2 Sumerja la punta dentro de la solución, aplique en el lugar requerido

- 3 Deseche la punta después de la aplicación

**Sugerencia:** Cuando aplique más de una solución, use puntas de diferentes colores para evitar confusión



#### Puntas surtidas – todos los tamaños

N ° de pedido 8100123

1 x 100 puntas púrpura – superfinas

1 x 100 puntas verde – finas

1 x 100 puntas verde claro – finas

1 x 100 puntas azules

Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759

Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
www.sdi.com.au

