

points

DISPOSABLE BRUSH APPLICATORS

EINWEG PINSELAPPLIKATOR

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS




MICRO-PINCELES APPLICADORES DESECHABLES

PINCEAUX-APPLICATEURS JETABLES

APPLICATORI MONOUSO

ディスポーザブル・ブラシアプリケーター

拋棄式塗刷

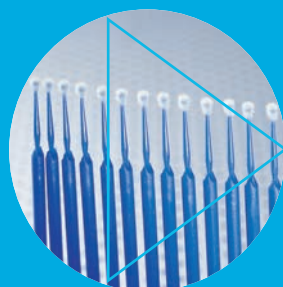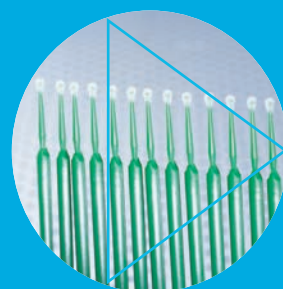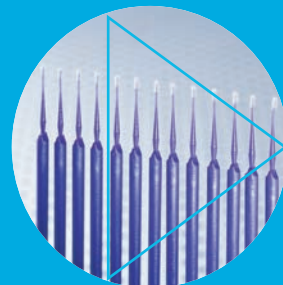

SDI

points

Pontas aplicadoras descartáveis são usadas para aplicar rapidamente pequenas quantidades de materiais em áreas de difícil acesso

As pontas são resistentes aos solventes normalmente encontrados nos materiais dentários

Fibras resistentes a solventes

As pontas em fibra são resistentes a solventes e adstringentes.

Fibras não absorventes, não soltam fios

Os fios em fibra não se soltam durante o procedimento. A solução se mantém nas fibras até a sua aplicação.

Três tamanhos

Os três tamanhos de Points, superfino, fino e médio, possibilitam o manuseio da quantidade de material desejado.

Opção de cores

Cores diferentes são ideais na diferenciação de materiais em procedimentos complexos.

Material macio e flexível

As pontas podem ser dobradas para facilitar o acesso desejado.

Indicações

- Aplicação de selante
- Aplicação de adesivos
- Aplicação de condicionador ácido
- Aplicação de selante de cavidades
- Soluções adstringentes e evidenciadoras
- Remoção de excesso de resina
- Condensação de hidróxido de cálcio em canal radicular



Points roxo - superfino

pedido 8100122
1 x 400 Points roxo - superfino



Points verde escuro - fino

pedido 8100116
1 x 400 Points verde escuro - fino



Points azul escuro - médio

pedido 8100118
1 x 400 Points azul escuro - médio

Points verde claro - fino

pedido 8100117
1 x 400 Points verde claro - fino

Points azul claro - médio

pedido 8100119
1 x 400 Points azul claro - médio



Points sortido - todos tamanhos

pedido 8100123
1 x 100 Points roxo - superfino
1 x 100 Points verde escuro - fino
1 x 100 Points verde claro - fino
1 x 100 Points azul escuro - médio

INSTRUÇÕES

- 1 As pontas podem ser usadas dobradas ou retas

a



b



- 2 Molhe a ponta com a solução e aplique na superfície desejada

- 3 Descarte a ponta após a aplicação

Sugestão: Use cores diferentes de pontas quando estiver aplicando mais de uma solução, a fim de evitar confusão



Fabricado na Austrália por
SDI Limited
Bayswater, Victoria, 3153
Austrália 1 800 337 003
E.U.A. e Canadá 1 800 228 5166
Brasil 0800 770 1735

Alemanha 0800 100 5759
França 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
Espanha 00800 022 55 734
Portugal 351 22 557 3320/1/2/3/4
www.sdi.com.au

