

d'hydrogène à 3%, 7.5% et 9.5%
 peroxyde d'urée à 10%, 16% et 22%
 Haute technologie dans le
 blanchiment des dents

MODE D'EMPLOI POUR LE

DENTISTE ET LE PATIENT

Pola Day et Pola Night sont des gels de blanchiment des dents ambulatoires au pH neutre à viscosité élevée. Ils sont agréables au goût et contiennent un mélange unique d'agents désensibilisants, de conditionneurs et d'eau à teneur suffisamment élevée pour réduire une éventuelle sensibilité dentinaire.

INDICATIONS D'UTILISATION:

- Blanchiment des dents vitales colorées
- Blanchiment des dents non-vitales colorées

COMPOSITION:

Pola Day Peroxyde d'hydrogène à 3.0-9.5% wt
 Additifs <47% wt
 Glycérol à 30% wt
 Eau à 20% wt
 Saveur à 0.1%

Pola Night Peroxyde de carbamide à 10.0-22.0% wt
 Additifs <40% wt
 Glycérol à 30% wt
 Eau à 20% wt
 Saveur à 0.1% wt

POIDS NET:

En fonction du coffret acheté, seringues de 1.3g ou de 3g

Voir description sur la boîte.

ÉQUIVALENCE AVEC LE PÉROXYDE D'HYDROGENE:

- Pola Night 10% de Peroxyde de Carbamide = 3.3% de Peroxyde d'Hydrogène
- Pola Night 16% de Peroxyde de Carbamide = 5.3% de Peroxyde d'Hydrogène
- Pola Night 22% de Peroxyde de Carbamide = 7.3% de Peroxyde d'Hydrogène


GUIDE DE TRAITEMENT

	3%	7.5%	9.5%
Pola Day	2 ou 3 x 30 minutes / jour ou 1 x 60 minutes / jour	1 ou 2 x 30 minutes / jour ou 1x45 minutes / jour	2x15 minutes / jour ou 1x30 minutes / jour
	10%	16%	22%
Pola Night	1x2heures / jour pendant la nuit	1x90 minutes / jour pendant la nuit	1x45 minutes / jour

Note: Les patients avec sensibilité dentinaire devront faire une pause d'un ou deux jours entre les traitements. On recommande également de raccourcir la durée du traitement.

PROCÉDURE DE MISE EN PLACE:

1. Placer une petite goutte de gel dans chaque réservoir de la gouttière pour les dents sous traitement.
2. Placer la gouttière avec du gel.
3. Éliminer le gel excédentaire dans la bouche avec une serviette ou une brosse sèche.
4. Une fois le traitement terminé, retirer la gouttière. Rincer la gouttière et la bouche avec de l'eau tiède.
5. Se brosser les dents.

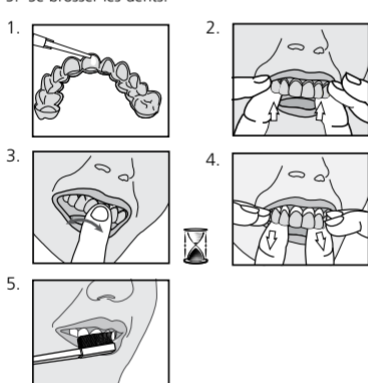

POUR UN RESULTAT OPTIMAL:

- Ne pas manger ou boire durant le traitement.
- Ne pas fumer immédiatement après le traitement – attendre au moins deux heures.
- Les aliments & les boissons fortement colorés doivent être évités pendant au moins 48 heures après le traitement ou consommer avec modération.
- Utiliser le gel à la température de la pièce.

STOCKAGE ET MANIPULATION :

- Conserver au frais et à l'abri de la lumière du soleil à une température comprise entre (2°-25°C / 35°-77°F).
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.

PRÉCAUTIONS:



- Doit être utilisé sous le contrôle d'un dentiste.
- Garder hors de portée des enfants et des animaux.
- Les femmes enceintes ou qui allaitent ainsi que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas utiliser ce produit.
- Les patients ayant un historique d'allergies aux produits chimiques devraient passer au préalable un test d'allergie sous le contrôle d'un médecin avant d'utiliser ces produits.
- Cesser l'utilisation si des réactions ou de la sensibilité se présentent et consulter votre dentiste.
- Ne pas injecter les produits Pola Day ou Pola Night dans le corps.
- MISE EN GARDE: LA LEGISLATION RESTREINT LA VENTE DE CES PRODUITS PAR OU SOUS L'ORDONNANCE D'UN DENTISTE.

- La fiche toxicologique est disponible au www.sdi.com.au ou contacter votre représentant régional.

PREMIERS SOINS:

- **Yeux (contact):** Laver soigneusement avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes persistent.
- **Peau (contact):** Laver soigneusement avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes persistent.
- **Ingestion (grande quantité):** Boire beaucoup de lait ou l'eau et consulter un médecin.

Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

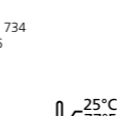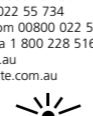

Attention



Cause l'irritation de la peau et des yeux