

35% de peróxido de carbamida

SISTEMA AVANÇADO DE  
CLAREAMENTO DENTALMODO DE USAR PARA  
PACIENTES E DENTISTAS

Pola Day CP é um gel de clareamento dental caseiro com peróxido de carbamida 35%, alta viscosidade, pH neutro. Gel transparente de sabor agradável, com liberação contínua e alto teor de água, suficiente para reduzir a sensibilidade.

**INDICAÇÕES DE USO:**

- Clareamento de dentes descoloridos vital.
- Clareamento de dentes descoloridos não vitais.

**COMPOSIÇÃO:** 35% de peróxido de carbamida  
40% de Água  
0,5% de Sabor  
24,5% agentes espessantes

**CONTEÚDO:**

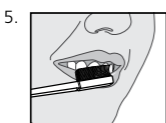
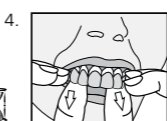
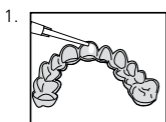
Seringas de 1,3g ou 3g, verificar conteúdo adquirido de acordo com embalagem.

**EQUIVALÊNCIA DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO:**

Pola Day CP 35% de peróxido de carbamida =  
11.7% de peróxido de hidrogênio

**INSTRUÇÕES:**

1. Coloque um pouco de gel no compartimento da moldeira em cada dente que deverá ser tratado.
2. Coloque a moldeira na boca de modo que o gel sobreponha os dentes
3. Remova o excesso com um lenço higiênico ou uma haste de algodão seca
4. Após tratamento retire a moldeira . Enxaguar a moldeira e a boca com água morna
5. Escove os dentes.

**TRATAMENTO DE JUMP START NO CONSULTÓRIO (PARA DENTISTAS)**

Quando utilizado como jump start no consultório dental, o tratamento é de 30 minutos.

**ARMAZENAGEM E MANUSEIO:**

- Conservar o produto refrigerado (2°-8° C / 35°-45° F).
- Não utilizar após a data de validade
- Mantenha o produto em temperatura ambiente.

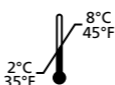
**PRECAUÇÕES:**

- Este produto deve ser usado sob a supervisão de um dentista.
- Não comer, beber ou fumar durante o tratamento.
- Não fumar imediatamente após o tratamento - aguardar pelo menos duas horas.
- Alimentos e bebidas que contenham cores fortes devem ser evitados ou consumidos com moderação durante o período de tratamento.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não deve ser usado por grávidas e ou lactantes ou crianças menores de 14 anos.
- Pacientes com histórico alérgico devem apresentar exame para um especialista antes de usar este produto.
- Descontinue o uso se apresentar alguma sensibilidade ou reação ao produto e consulte seu dentista.
- Não injete Pola Day CP no corpo.
- A LEI FEDERAL RESTRINGE A VENDA A DENTISTAS OU SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
- MSDS está disponível no [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou contate o representante da sua região.

**PRIMEIROS SOCORROS:**

- **Olhos (contato):** Lavar com água e consultar um médico se os sintomas persistirem.
- **Pele / Tecido (contato):** Lavar com água e consultar um médico se os sintomas persistirem.
- **Ingestão (grande quantidade):** Beba muita água ou leite e procurar orientação médica.

Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)



Cuidado



Causa irritação nos olhos e pele