

Materiales requeridos:


- Modelo de estudio – recorte la base del modelo, de manera que se extienda más allá del borde gingival.
- Material para cucharilla SDI (acetato)
- Resina Espaciadora de SDI
- Lámpara de fotocurado
- Termoformadora al vacío

PROCEDIMIENTO

1. Aplique aproximadamente 0.5 mm de Resina Espaciadora en el modelo de estudio, en la cara labial de los dientes seleccionados para el tratamiento. Aplíquela de 2,5 - 3,5 mm por debajo del borde de la encía.




2. Fotocure cada diente durante 20 segundos.

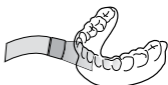

3. Coloque firmemente el acetato en el sujetador. Nota: Recomendamos que el sujetador de la termoformadora cuente con un empaque plástico. Esto evitará que el acetato se deslice durante el calentamiento.

4. Posicione el sujetador de la cucharilla para el calentamiento.

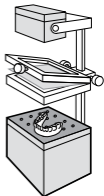


5. Coloque el modelo en el centro de la base.

6. Coloque el calentador, previamente calentado sobre la cucharilla.

7. Caliente hasta que el acetato comience a encorvarse. Apague el calentador. Nota: El grosor del acetato dependerá de varios factores, por ejemplo: el tiempo de calentamiento, posición del calentador sobre la cucharilla, etc.

8. Baje el acetato hacia el modelo.

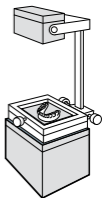


9. Aplique vacío por aproximadamente 10 segundos.

10. Permita que el modelo se enfríe antes de removerlo de la termoformadora.

11. Remueva cuidadosamente la cucharilla de la impresión.

12. Recorte la cucharilla 0.5 mm por debajo del borde gingival.

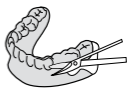

PRECAUCION: Asegúrese de que la punta dispensadora de la jeringa de Resina Espaciadora esté firmemente colocada, girándola con fuerza.

PRECAUCIONES: Evite el contacto prolongado de la Resina Espaciadora con la piel al momento de aplicarla, ya que puede causar sensibilidad o inflamación de la piel. Cualquier persona alérgica a las resinas debe discontinuar inmediatamente el uso de la Resina Espaciadora. La Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) está disponible en www.sdi.com.au o contacte a su representante regional.

NOTA: La primera vez que se utilice, o después de un almacenamiento prolongado, extruya una pequeña cantidad de la Resina Espaciadora en una loseta, para familiarizarse con la viscosidad y velocidad de extrusión. Utilizar a temperatura ambiente. No exponga el material a la luz directa.

2 jeringas de Resina Espaciadora, (repuesto)

Reorden 7700012

2 jeringas de Resina Espaciadora de 1 gr.

Accesorios

Material para cucharillas – 1 mm (repuesto)

Reorden 7750005

20 piezas