

MATERIALE NECESSARIO:


- Modello dei denti. Rifinire la base del modello in modo che essa receda di qualche millimetro rispetto al bordo gengivale
- Foglio di materiale termoplastico SDI
- Resina spaziatrice SDI
- Lampada fotopolimerizzatrice
- Apparecchiatura per il vuoto

PROCEDIMENTO

1. Prendere il modello ed applicare uno strato di 0,5 mm circa di resina spaziatrice sui denti da trattare. Applicare ad una distanza di circa 2.5 - 3.5 mm dal bordo gengivale.




2. Fotopolimerizzare la resina per circa 20 secondi su ogni dente.

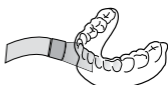

3. Posizionare saldamente un foglio termoplastico sull'apposito supporto contenitore. Nota: si consiglia di dotare il supporto contenitore di una guarnizione in gomma. Questo accorgimento eviterà che il materiale scivoli per effetto del calore.

4. Posizionare il supporto.

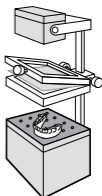


5. Posizionare l'impronta al centro della base dell'apparecchiatura.

6. Posizionare l'elemento riscaldante già caldo sul materiale termoplastico.

7. Scaldare finché il materiale inizia ad afflosciarsi. Spegnerne il calore. Nota: lo spessore della mascherina dipende da diversi fattori quali, il tempo di riscaldamento, la posizione dell'elemento riscaldante sul materiale, ecc.

8. Abbassare il supporto contenitore sul modello.

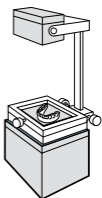


9. Applicare il vuoto per circa 10 secondi.

10. Attendere che il materiale si sia raffreddato completamente prima di togliere il modello dalla dall'apparecchiatura.

11. Rimuovere la mascherina dal modello con cautela.

12. Tagliare la mascherina a 0,5mm dal bordo gengivale

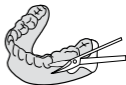

ATTENZIONE: Assicurarsi che il dispenser della resina spaziatrice sia ben avvitato alla siringa.

PRECAUZIONI: Durante l'utilizzo, evitare il contatto prolungato della Resina Spaziatrice con la pelle, in quanto potrebbe causare infiammazioni o sensibilizzazioni. Le persone soggette ad allergie alle resine, dovrebbero interrompere immediatamente l'utilizzo della Resina Spaziatrice. Le Schede di Sicurezza della Resina Spaziatrice sono disponibili su www.sdi.com.au oppure potete contattare il vostro rappresentante locale.

NOTA: Al primo utilizzo, o dopo una conservazione prolungata del prodotto, estrarre una piccola quantità di resina per controllarne la viscosità e la fluidità. Utilizzare a temperatura ambiente. Non esporre il materiale alla luce diretta.

Ricambio Resina Spaziatrice 2 siringhe

Riordino 7700012

Resina Spaziatrice in siringhe 2x1gr

Accessori

Materiale termoplastico – ricambio 1mm

Riordino 7750005

Ricambio da 20 pezzi