

## MATERIAIS NECESSÁRIOS:


- Modelo – recortar o modelo além da margem gengival
- Placa da SDI
- Spacer Resin da SDI
- Fotopolimerizador
- Plastificadora a vácuo

## PROCEDIMENTO

1. Aplicar uma camada de aproximadamente 0,5 mm de Spacer Resin nos dentes do modelo de gesso selecionados para tratamento. Manter uma distância de aproximadamente 2,5 - 3,5 mm da linha da gengiva.




2. Fotopolimerizar cada dente por 20 segundos.

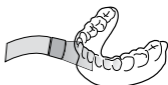

3. Posicionar bem a placa no compartimento. Observação: Recomendamos que o compartimento para placa tenha uma borracha para vedação. Isto evitará que o material escorregue durante o aquecimento.

4. Posicionar o compartimento para a placa para aquecimento.

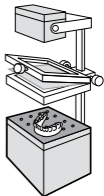


5. Colocar o modelo no centro da base.

6. Posicionar o compartimento pré-aquecido sobre a placa.

7. Aquecer até o material começar a derreter. Desligar o aquecimento. Observação: A espessura da moldeira depende de vários fatores como tempo de aquecimento, posicionamento do compartimento de aquecimento, etc.

8. Abaixar a moldeira sobre o modelo.

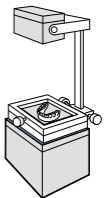

9. Ligar o vácuo por aproximadamente 10 segundos.

10. Deixar o modelo esfriar antes de tirá-lo da plastificadora a vácuo.

11. Remover a moldeira com cuidado do modelo.

12. Recortar a moldeira e manter uma distância de 0,5mm da margem gengival.



**CUIDADO: Verificar se a tampa da seringa de Spacer Resin está bem fechada.**

**PRECAUÇÕES:** Evitar contato prolongado de Spacer Resin com a pele, pois pode causar inflamação ou sensibilidade a pele. Pessoas com histórico alérgico devem interromper o uso de Spacer Resin. Para maiores informações sobre Spacer Resin, consultar o site [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou entrar em contato com um representante.

**OBSERVAÇÃO:** Ao usar pela primeira vez, ou após um longo período de armazenamento, dispensar uma quantidade pequena de Spacer Resin num bloco para espatular para se familiarizar com a viscosidade e quantidade de extrusão. Usar sob temperatura ambiente. Não expor o material a luz direta.

**Spacer Resin – kit com 2 seringas**

Pedido 7700012

2 seringas de 1g de Spacer Resin

acessórios

**Placa – 1 mm**

Pedido 7750005

20 placas