

含35%过氧化脲(carbamide peroxide) 高级牙齿漂白系统

患者和牙科专业人士使用说明书

Pola Zing是一种含35%过氧化脲(carbamide peroxide)、稠度高、pH值中性的家庭用牙齿漂白胶。有宜人的香味，为色泽透明如水晶的胶体，水分含量够高以降低刺激

使用适应症:

- 活牙的色渍漂白
- 死牙的色渍漂白

成分: 35% 过氧化脲 (Carbamide peroxide)
40% 水
0.5% 香味剂
24.5% 增稠剂

净重:


取决于购买的包装，有1.3g/支和3g/支。请留意盒外包装。

过氧化氢与过氧化脲的等效关系:

Pola Zing 35% 过氧化脲 = 11.7%过氧化氢

患者使用说明:

1. 治疗时，在托盘的每一格中挤入一小滴漂白胶。
2. 戴上托盘，漂白胶在牙齿周围。
3. 用纸巾或干的软毛刷擦掉口中多余的漂白胶。
4. 15分钟治疗后，取下托盘。清洗托盘和用温水漱口。
注意：如需要，治疗时间可以延至30分钟
5. 刷牙。

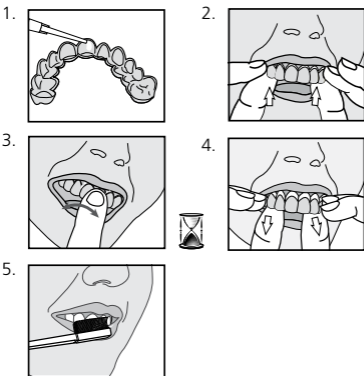

贮存和处理:

- 冰箱中贮存产品(2-8°C / 35-45°F)。
- 产品过期不宜使用
- 产品在室温下使用

警告:

- 在医生监督下使用。
- 在治疗中不可以吃、喝或吸烟。
- 治疗后不可以立即吸烟 —— 至少两小时以后。
- 在整个治疗期间，避免或适度食用含有深颜色的食品和饮料。
- 放在小孩和宠物接触不到的地方。
- 孕妇、哺乳期妇女及14岁以下儿童不宜使用。
- 对于有化学品敏感史的患者，治疗前应通知进行过敏测试。
- 如有有不寻常过敏或反应出现时，停止治疗，并咨询牙医。
- 不要将Pola Zing 注射入体内。
- 提示：联邦法律规定本材料只售给牙医或凭牙医处方购买。
- MSDS (产品安全资料) 可从网站www.sdi.com.au上获得或联系当地销售代表。

急救:

- 眼睛(接触): 用水冲洗, 如症状未改善接受治疗。
- 皮肤/组织(接触): 立即用水冲洗, 如症状未改善, 则接受治疗。
- 食入(大量): 喝大量的牛奶或水, 并接受治疗。

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

