

SDI**polazing****F
R
A
N
Ç
A
I
S**

peroxyde d'carbamide (35 %)
SYSTÈME DE POINTE
D'ÉCLAIRCISSEMENT DES DENTS

MODE D'EMPLOI POUR LE
DENTISTE ET LE PATIENT

Le Pola Zing est un gel d'éclaircissement des dents en ambulatoire, à base de 35 % de peroxyde d'carbamide, d'une haute viscosité et d'un pH neutre. C'est un gel au goût plaisant, transparent comme le cristal et dont la teneur en eau est suffisamment élevée pour éliminer toute sensibilité.

MODE D'EMPLOI :

- éclaircissement des dents non dévitalisées décolorées.
- éclaircissement des dents dévitalisées décolorées.

COMPOSITION : 35 % de peroxyde d'carbamide
 40 % d'eau
 0,5 % d'aromatisants
 24,5% d'agents épaississants

PODS NET:

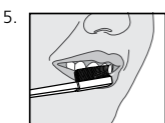
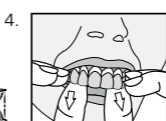
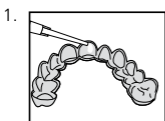
En fonction du coffret acheté, seringues de 1.3g ou de 3g
 Voir description sur la boîte.

ÉQUIVALENCE AVEC LE PEROXYDE D'HYDROGENE:

Pola Zing 35% de Peroxyde de Carbamide =
 11.7% de Peroxyde d'Hydrogène

INSTRUCTIONS:

1. Mettre une légère goutte de gel dans chaque compartiment de la gouttière pour que les dents soient traitées.
2. Mettre la gouttière en place; le gel doit se trouver autour des dents.
3. Retirer l'excédent de gel avec un tissu ou une brosse douce et sèche.
4. Au bout de 15 minutes de traitement, retirer la gouttière. A l'eau tiède, se rincer la bouche puis rincer la gouttière. Note : le temps de traitement peut être jusqu'à 30 minutes si nécessaire.
5. Brosser les dents.

**CONSERVATION ET DURÉE DE VALIDITÉ:**

- Conserver le produit au réfrigérateur (2°-8°C / 35°-45°F).
- Ne pas utiliser passée la date d'expiration.
- Utiliser le produit à température ambiante.

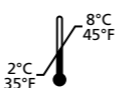
PRÉCAUTIONS :

- À n' utiliser que sous le contrôle d'un dentiste.
- Ne pas manger, boire ou fumer lors du traitement.
- Ne pas fumer tout de suite après le traitement ; patienter au moins deux heures.
- Les aliments et les boissons contenant des couleurs vives devraient être évités ou consommés avec modération lors de toute la durée du traitement.
- Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitant, ni par les enfants de moins de 14 ans.
- Les patients présentant des allergies aux produits chimiques doivent effectuer des tests allergiques auprès d'un spécialiste avant d'utiliser ce produit.
- Arrêter l'utilisation en cas de sensibilité ou de réactions inhabituelles et consulter votre dentiste.
- Ne pas injecter le Pola Zing dans le corps.
- ATTENTION : CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE LEGALEMENT VENDU QUE PAR UN DENTISTE OU SUR PRESCRIPTION D'UN DENTISTE.
- FDS consultable sur le lien www.sdi.com.au ou contacter le représentant SDI près de chez vous.

PREMIERS SOINS :

- **Contact avec les yeux :** rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si les symptômes persistent.
- **Dépôts sur les muqueuses et/ou la peau :** rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si les symptômes persistent.
- **Ingestion (en grande quantité) :** boire beaucoup de lait ou d'eau et consulter un médecin.

Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au



Attention



Cause l'irritation de la peau et des yeux