

Perossido di carbamide al 35%
SISTEMA AVANZATO PER LO
SBIANCAMENTO DEI DENTI

ISTRUZIONI
PER I PAZIENTI ED I DENTISTI

Pola Zing è un gel sbiancante domiciliare a base di perossido di carbamide al 35% con pH neutro ed elevata viscosità. Caratterizzato da un piacevole gusto alla menta, è un gel ad alto rilascio costituito da cristalli trasparenti. L'elevato contenuto di acqua consente di ridurre la sensibilità.

INDICAZIONI PER L'USO:

- Sbiancamento di denti discromici vitali
- Sbiancamento di denti discromici non vitali

COMPOSIZIONE: Perossido di carbamide al 35%
Acqua al 40%
Sapore di menta allo 0,5%
Agenti addensanti al 24,5%

PESO NETTO:


Siringhe da 1,3g oppure siringhe da 3g, in base alla confezione acquistata. Si prega di fare riferimento alla scatola.

PEROSSIDO DI IDROGENO EQUIVALENTE:

Pola Zing 35% Perossido di carbamide = 11.7% Perossido di idrogeno

ISTRUZIONI:

1. Posizionare una goccia di gel in ogni spazio della mascherina in corrispondenza dei denti da trattare.
2. Collocare la mascherina in bocca assicurandosi che il gel sia posizionato intorno ai denti.
3. Rimuovere dalla bocca il gel in eccesso usando un fazzoletto di carta o uno spazzolino morbido e asciutto.
4. Dopo 15 minuti di trattamento, rimuovere la mascherina. Risciacquare la bocca e la mascherina con acqua tiepida. Nota: se necessario, è possibile prolungare la durata del trattamento fino a 30 minuti.
5. Lavarsi i denti.

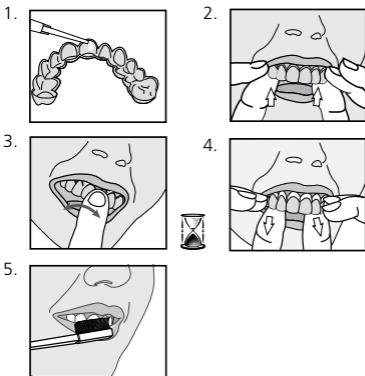

CONSERVAZIONE E UTILIZZO:

- Conservare il prodotto in frigorifero (2°-8 °C).
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente.


PRECAUZIONI:

- Da utilizzare con la supervisione di un dentista.
- Non fumare o consumare alimenti e bevande durante il trattamento.
- Non fumare immediatamente dopo l'uso, attendere almeno due ore.
- Consumare con moderazione o evitare alimenti e bevande contenenti coloranti aggressivi per l'intera durata del trattamento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in gravidanza o allattamento o in bambini di età inferiore ai 14 anni.
- I pazienti con un'anamnesi di allergie a sostanze chimiche devono sottoporsi a test allergici presso uno specialista prima di intraprendere il trattamento.
- In caso di ipersensibilità o reazioni avverse insolite, sospendere l'uso e consultare il dentista.
- Non iniettare Pola Zing nel corpo.
- **ATTENZIONE: IN BASE ALLA NORMATIVA DI LEGGE IN VIGORE, QUESTO PRODOTTO È VENDIBILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A MEDICI DENTISTI O SU ORDINE DI MEDICI DENTISTI.**
- Le schede di sicurezza dei materiali sono disponibili sul sito www.sdi.com.au o contattando il vostro agente di zona.

PRONTO SOCCORSO:

- **Contatto (occhi):** sciacquare abbondantemente con acqua e consultare uno specialista se i sintomi persistono.
- **Contatto (cute/tessuti):** sciacquare abbondantemente con acqua e consultare uno specialista se i sintomi persistono.
- **Ingestione (ingenti quantità):** bere latte o acqua in abbondanza e consultare uno specialista.

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

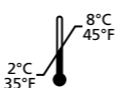

Attenzione



Causa irritazioni alla pelle e agli occhi.