

35% de peróxido de carbamida

SISTEMA AVANÇADO DE
CLAREAMENTO DENTALMODO DE USAR PARA
PACIENTES E DENTISTAS

Pola Zing é um gel de clareamento dental caseiro com peróxido de carbamida 35%, alta viscosidade, pH neutro. Gel transparente de sabor agradável, com liberação contínua e alto teor de água, suficiente para reduzir a sensibilidade.

INDICAÇÕES DE USO:

- Clareamento de dentes descoloridos vital.
- Clareamento de dentes descoloridos não vitais.

COMPOSIÇÃO: 35% de peróxido de carbamida
40% de Água
0,5% de Sabor
24,5% agentes espessantes

CONTEÚDO:

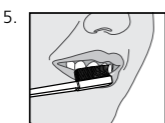
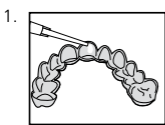
Seringas de 1,3g ou 3g, verificar conteúdo adquirido de acordo com embalagem.

EQUIVALÊNCIA DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO:

Pola Zing 35% de peróxido de carbamida =
11.7% de peróxido de hidrogênio

INSTRUÇÕES:

1. Coloque um pouco de gel no compartimento da moldeira em cada dente que deverá ser tratado.
2. Coloque a moldeira na boca de modo que o gel sobreponha os dentes
3. Remova o excesso com um lenço higiênico ou uma haste de algodão seca
4. Após tratamento retire a moldeira . Enxaguar a moldeira e a boca com água morna
5. Escove os dentes.

**ARMAZENAGEM E MANUSEIO:**

- Conservar o produto refrigerado (2°-8° C / 35°-45° F).
- Não utilizar após a data de validade
- Mantenha o produto em temperatura ambiente.

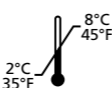
PRECAUÇÕES:

- Este produto deve ser usado sob a supervisão de um dentista.
- Não comer, beber ou fumar durante o tratamento.
- Não fumar imediatamente após o tratamento - aguardar pelo menos duas horas.
- Alimentos e bebidas que contenham cores fortes devem ser evitados ou consumidos com moderação durante o período de tratamento.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não deve ser usado por grávidas e ou lactantes ou crianças menores de 14 anos.
- Pacientes com histórico alérgico devem apresentar exame para um especialista antes de usar este produto.
- Descontinue o uso se apresentar alguma sensibilidade ou reação ao produto e consulte seu dentista.
- Não injete Pola Zing no corpo.
- A LEI FEDERAL RESTRINGE A VENDA A DENTISTAS OU SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
- MSDS está disponível no www.sdi.com.au ou contate o representante da sua região.

PRIMEIROS SOCORROS:

- **Olhos (contato):** Lavar com água e consultar um médico se os sintomas persistirem.
- **Pele / Tecido (contato):** Lavar com água e consultar um médico se os sintomas persistirem.
- **Ingestão (grande quantidade):** Beba muita água ou leite e procurar orientação médica.

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au



Cuidado

Causa irritação
nos olhos
e pele