

操作說明

材料說明：

SDI的內染色劑(Tints)和外染色劑(Masking Agents)可調出自然的牙齒顏色。這種自然的牙齒顏色來自於顏色較深的牙本質和顏色較淡的牙釉質，經由相互的反映、傳導、及吸收而成。

SDI的色調修正組盒，有單劑式光聚合的內染色劑(Tints)和外染色劑(Masking Agents)，可簡單快速的達到您要的色調。本色調修正組盒有9種半透明色的內染色劑，和4種顏色的外染色劑。

內染色劑：藍色、黃色、透明色、紅色、白色、橙色、灰色、棕色、綠色。

外染色劑：灰色、通用色(Universal)、白色、深黃色。

成份：

65% wt Methacrylic acid esters

35% wt Pyrogenic silica

適用範圍：

適用於牙釉質、牙本質、樹脂(Composite)、複合樹脂(Compomer)、瓷牙、酸蝕的玻璃離子(Etched glass ionomer)、及金屬。


操作說明：

清潔並隔離牙齒

1. 以含37%磷酸(Phosphoric acid)的Super Etch來酸蝕牙齒表面，至少20秒。
2. 用水徹底清洗乾淨。
3. 去除多餘的水份。保持濕潤。
4. 塗上Stae牙本質/牙釉質黏劑，使其完全滲透內部表層；或使用其他黏劑，並依其原廠使用說明來操作。
5. 塗上適量的SDI內染色劑(Tint)或外染色劑(Masking Agent) (<0.5mm)。

下面的圖表可供您作參考。

齒頸區 齒間區

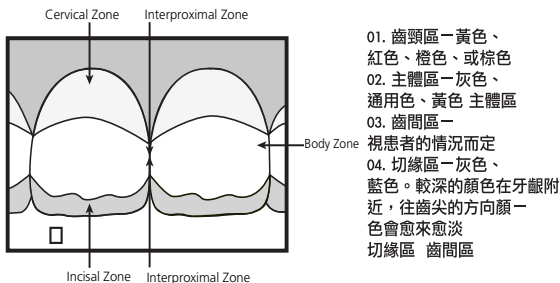

6. 光聚合20秒鐘。然後再塗一次內染色劑或外染色劑。
7. 最後塗上一層薄且透明的複合樹脂，如Glacier Incisal, Wave, 或其他修復材，並依照其使用說明操作。

特別注意事項：

1. 外染色劑的顏色須與牙本質和修復材的顏色相稱。
2. 外染色劑塗得位置愈深愈好。
3. 外染色劑塗得太多會使得顏色變得不自然。
4. 先上一層修復材，塗上外染色劑，最後再上一層齒尖/牙釉的顏色（透明色）。
5. 內染色劑須在修復材之前使用。
6. 不可將內染色劑及外染色劑與修復材調拌在一起，這樣會有多孔性的情形產生。
7. 多種顏色的選擇增加了成功的機率，因為每個人的牙齒顏色都不一樣。
8. 操作時請卸掉口紅。
9. 比對牙齒顏色時應保持牙齒的清潔及濕潤。
10. 室內燈光應使用自然燈光。
11. 建議患者配戴藍色的看診圍巾。
12. 瞄一眼就好，請勿凝視。
13. 請在自然光的環境下選色。
14. 色調往往會受到牆壁及患者衣服的顏色影響。
15. 內染色劑可與透明的內染色劑或其他的顏色互相混合，得到各種不同彩度的色調。重要：請在正常的室溫下（23°C/74°F）操作內染色劑和外染色劑。

保存方法：

1. 請勿放入冰箱冷藏。
2. 請儲存在10°C到25°C（50-77°F）的溫度下。
3. 請注意產品是否過期。
4. 請勿直接曝露在燈光下。

注意：

1. 避免皮膚和口腔組織長時間與內染色劑和外染色劑接觸，因為它可能會造成口腔發炎或皮膚過敏。
 2. 對樹脂過敏的患者，應立即停止使用內染色劑和外染色劑。
- 注意：聯邦法律嚴格禁止牙醫師販賣此類產品。

色調修正組盒

訂購編號7900000

9 X 1g 內染色劑 (Tint)

4 X 1g外染色劑 (Masking Agent)

其他配件

內染色劑補充包 / 1g入

訂購編號

7981414 黃色

7982424 灰色

7983333 棕色

7985252 白色

7985353 藍色

7985454 透明色

7985555 綠色

7985656 橙色

7985757 紅色

外染色劑補充包 / 1g入

訂購編號

7970202 通用色

7970404 深黃色

7975151 灰色

7975252 白色

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel +353 1 886 9577
www.sdi.com.au

