

GEBRAUCHSANWEISUNG

MATERIALBESCHREIBUNG:

Das SDI Farbcharakterisierungs- und Opaquermaterial simuliert einen lebensechten Zahn.

Die Zahnfarbe erscheint aufgrund der Lichtbrechung durch die Schmelzprismen auf das gefärbte Dentin natürlich und lebensecht.

Das SDI Farbcharakterisierungs-System liefert einfach und schnell optimale Ästhetik, es ist lichterhärtend und zur Direktapplikation geeignet. Das System besteht aus neun Farbtönen und vier Opaquern.

Farbtöne: Blau, Gelb, Clear, Rot, Weiß, Orange, Grau, Braun, Grün.

Opaquer: Grau, Universal, Weiß, Dunkelgelb.

ZUSAMMENSETZUNG:

65% Gew. Methacrylsäureester

35% Gew. Silikate


INDIKATIONEN:

Schmelz, Dentin, Komposit, Kompomer, Porzellan, geätzter Glasionomermert und Metall.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Zahn reinigen und isolieren

1. Zahnoberfläche 20 Sekunden mit Super Etch 37%iger Phosphorsäure anätzen.
2. Gründlich mit Wasser spülen.
3. Überschüssiges Wasser entfernen, feucht halten.
4. Stae Einkomponenten-Adhäsiv, oder ein anderes Adhäsiv, gemäß den Angaben des Herstellers auf alle inneren Flächen applizieren.
5. Farbe oder Opaquermaterial in dünner Schicht (weniger als 0,5mm) auftragen.

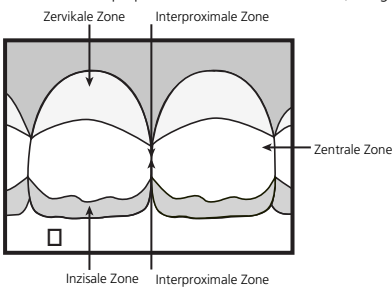

1. Zervikale Zone - Rot, Gelb, Orange, oder Braun
 2. Zentrale Zone - Grau, Gelb, Universal
 3. Interproximale Zone - individuelle Auswahl
 4. Inzisale Zone - Grau, Blau.
- Farben die gingival dunkler wirken, erscheinen inzisal heller

6. 20 Sekunden lichterhärten. Weitere Schichten Farbe oder Opaquermaterial können aufgetragen werden.

7. Eine maximal 2mm dünne Schicht Glacier Inzisal, Wave, oder ein anderes Komposit gemäß den Angaben des Herstellers applizieren.

BITTE BEACHTEN:

1. Das Opaquermaterial sollte passend zum Schmelz und der Farbe des Füllmaterials ausgesucht werden.
2. Das Opaquermaterial sollte so tief wie möglich plaziert werden.
3. Zuviel Opaquermaterial kann zu einem stumpfen, leblosen Effekt führen.
4. Eine dünne Schicht Füllmaterial sollte über den Opaquer gelegt werden. Danach eine abschließende, Schmelz- oder Inzisal-farbene Schicht.
5. Das Farbmateriale sollte direkt unter der letzten Schicht Füllmaterial gelegt werden.
6. Farbcharakterisierungs- und Opaquermaterial nicht mit dem Füllmaterial vermischen, da dies das Material porös werden läßt.
7. Die Farbauswahl sollte mehrmals überprüft werden, da Farbwahrnehmung sehr individuell ist.
8. Lippenstift sollte entfernt werden.
9. Der zu behandelnde Zahn sollte zur Farbauswahl sauber und feucht sein.
10. Sowohl Tageslicht als auch künstliches Licht benutzen.
11. Blaue Patientenserviette wird empfohlen.
12. Augen zwischen Arbeitsschritten entspannen.
13. Farbauswahl in natürlicher Umgebung vornehmen.
14. Die Farbwahrnehmung kann durch die Wände und die Kleidung des Patienten beeinflusst werden.
15. Die Farbtöne können beliebig gemischt werden.

WICHTIG: Material nur bei normaler Raumtemperatur (23°C/74°F) verarbeiten.

AUFBEWAHRUNG:

1. Nicht im Kühlschrank lagern.
2. Bei Zimmertemperatur (23°C/74°F) lagern.
3. Verfallsdatum beachten.
4. Material vor direktem Licht schützen.

VORSICHT:

1. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Haut oder oralem Gewebe, da dies zu Hautirritationen oder Entzündungen des oralen Gewebes führen könnte.
2. Nicht zur Anwendung bei Personen mit bekannten Resin Allergien geeignet. Ausschließlich für zahnärztlichen Gebrauch.

Shade Modification Kit

Artikelnummer 7900000

9 x 1g Farben

4 x 1g Opaquermaterial

Zubehör

Farben 1 g Einzelspritze

Artikelnummer

7981414

Gelb

7982424

Grau

7983333

Braun

7985252

Weiß

7985353

Blau

7985454

Clear

7985555

Grün

7985656

Orange

7985757

Rot

Opaquermaterial 1 g Einzelspritze

Artikelnummer

7970202

Universal

7970404

Dunkelgelb

7975151

Grau

7975252

Weiß

Hergestellt in Australien von SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australien 1 800 337 003

Österreich 00800 022 55 734

Brasilien 0800 770 1735

Frankreich 00800 022 55 734

Deutschland 0800 100 5759

Irland 01 886 9577

Italien 800 780625

Neuseeland 0800 734 034

Spanien 00800 022 55 734

UK 00800 022 55 734

USA & Kanada 1 800 228 5166

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Irland

Tel +353 1 886 9577

www.sdi.com.au