

## INSTRUCCIONES DE USO

## DESCRIPCION DEL MATERIAL:

Los tintes y agentes enmascaradores SDI imitan vivamente a un diente natural. El color natural del diente se deriva desde el color saturado de la dentina, en conjunción con la luz que penetra el esmalte translúcido y es reflejada, transmitida y absorbida.

El sistema modificador de tonos SDI es simple y rápido, logra óptimos resultados estéticos con solo pintar tintes y agentes enmascaradores líquidos fotopolimerizables y monocomponentes.

El sistema contiene nueve tintes translúcidos y cuatro agentes enmascaradores.

Tintes: Azul, Amarillo, Claro, Rojo, Blanco, Naranja, Gris, Café, Verde.

Agentes enmascaradores: Gris, Universal, Blanco, Amarillo Oscuro.

## COMPOSICION:

65% peso esters ácido de metacrilato

35% peso sílice pirogénica

## INDICACIONES DE USO:

Adecuado para esmalte, dentina, composite, compomero, porcelana, vidrio ionomero grabado y metal.

## INTRUCCIONES:

Lave y aisle el diente

1. Grabe la superficie del diente con Super Etch ácido fosfórico 37% por 20 segundos.


2. Lave minuciosamente con agua.

3. Remueva los excesos de agua. Mantenga húmedo.

4. Aplique Stae adhesivo esmalte / dentina saturando todas las superficies internas, u otro agente adhesivo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

5. Aplique adecuadamente los tintes o agentes enmascaradores SDI (<0.5 mm).

El siguiente diagrama puede ser usado como una guía para crear restauraciones naturales y vivas.

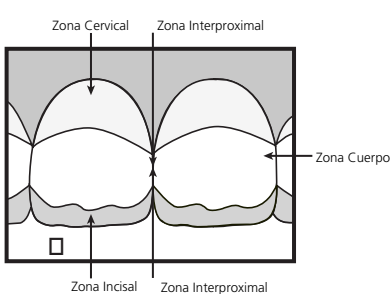

1. Zona Cervical - Rojo, Amarillo, Naranja o Café
2. Zona Cuerpo - Gris, Amarillo, Universal
3. Zona Interproximal - Desigual entre pacientes
4. Zona Incisal - Gris, Azul. Colores oscuros en áreas gingivales llegan a ser luminosos próximo a la cuña incisal

6. Fotopolimerice por 20 segundos. Capas adicionales de tintes o agentes enmascaradores pueden ser aplicadas.

7. Cubra con una delgada capa de composite translúcido tal como Glacier Incisal, Wave u otro material restaurador de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

## NOTAS ESPECIALES:

1. Los tonos modificadores pueden enfrentar la dentina y el tono del material restaurador.
2. Los agente enmascaradores deberían ser colocados lo más profundo posible.
3. Usar mucho agente enmascarador da como resultado una apariencia sin vida e insípida.
4. Una delgada capa de material restaurador, podría ser colocada sobre el agente enmascarador, seguida por una capa final de tono incisal o esmalte.
5. Los tintes podrían ser usados bajo la capa final de material restaurador.
6. No mezcle tintes y agentes enmascaradores con material restaurador, hacer esto podría crear porosidad.
7. La selección de color por consenso aumenta las posibilidades de éxito, ya que cada uno tiene diferente percepción de color.
8. Debe ser removido el lápiz labial.
9. Para la selección de color el diente debe estar limpio y húmedo.
10. Use preferentemente luz natural.
11. Se recomienda babero color azul.
12. Mire brevemente. No fije la vista.
13. Seleccione el color en un ambiente neutral y natural.
14. La percepción del color es afectada por el color de las paredes y las ropas del paciente.
15. Los tintes pueden ser mezclados con tintes claros o con otros para obtener diferentes grados de saturación y tonos.

IMPORTANTE: Aplique los tintes y agentes enmascaradores a temperatura ambiente (23°C/74°F).

## CONDICIONES DE ALMACENAJE:

1. No refrigere.
2. Almacene a temperaturas entre 10° a 25°C (50°-77°F).
3. No use después de la fecha de vencimiento.
4. No exponga el material a la luz solar directa.

## PRECAUCIONES Y ALERGIAS:

1. Evite el contacto prolongado de tintes y agentes enmascaradores con la piel o tejidos orales, esto puede causar inflamación de los tejidos orales o sensibilidad en la piel.
2. En personas alérgicas a las resinas, debe discontinuarse inmediatamente el uso de tintes y agentes enmascaradores.

Advertencia: Las Leyes Federales restringen la venta de este producto por o en la orden de un dentista.

## Kit Modificador de Tonos

Nº de Pedido 7900000

9 x 1gr. Tintes

4 x 1gr. Agentes Enmascaradores

accesorios

## Tintes Repuesto 1gr.

Nº de Pedido

7981414

Amarillo

7982424

Gris

7983333

Café

7985252

Blanco

7985353

Azul

7985454

Claro

7985555

Verde

7985656

Naranja

7985757

Rojo

## Agentes Enmascaradores Repuesto

Nº de Pedido

7970202

Universal

7970404

Amarillo Oscuro

7975151

Gris

7975252

Blanco

Hecho en Australia por SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Alemania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nueva Zelanda 0800 734 034

España 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1 800 228 5166

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Irlanda

Tel +353 1 886 9577

www.sdi.com.au

