



kit de modification des nuances

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU MATÉRIAU:

Les teintes et agents de masquage SDI simulent la couleur d'une vraie dent naturelle. La dent naturelle tire sa couleur de celle de l'ivoire saturé et de la pénétration de la lumière au travers de l'émail translucide où elle est reflétée, transmise et absorbée.

Le Système SDI de modification des nuances accomplit de façon simple et rapide une esthétique optimale en utilisant des teintes et des agents et de masquage liquides vulcanisés que l'on peint sous forme d'un seul composant.

Le système comprend neuf teintes translucides et quatre agents de masquage.

Teintes : Bleu, Jaune, Transparent, Rouge, Blanc, Orange, Gris, Marron, Vert.

Agents de masquage : Gris, Universel, Blanc, Jaune Foncé

COMPOSITION:

65% en poids d'ester acide méthacrylique

35% en poids de silice pyrogéné

INDICATIONS D'UTILISATION:

Convient pour l'émail, l'ivoire, les complexes, les compomères, la porcelaine, le verre à graver, les monomères et les métaux.

INSTRUCTIONS:

Nettoyez et isolez la dent

1. Corrodez la surface de la dent à l'aide d'acide phosphorique Super Etch à 37%, pendant 20 secondes.


2. Lavez à fond à l'eau.

3. Retirez l'excès d'eau. Maintenir humide.

4. Appliquez un adhésif Stae pour ivoire/émail pour saturer toutes les surfaces internes, ou une autre colle conformément aux instructions du fabricant.

5. Appliquez la teinte ou l'agent de masquage SDI approprié (< 5 mm). Le diagramme suivant peut être utilisé comme guide pour la création d'une restauration naturelle.

restaurations naturelles.

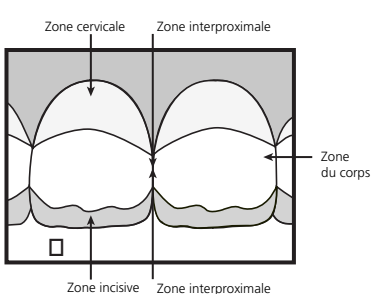

1. Zone cervicale - Rouge, Jaune, Orange ou Marron
2. Zone du corps - Gris, Jaune, Universel
3. Zone interproximale - peut varier d'un patient à l'autre
4. Zone incisive - Gris, Bleu. Les couleurs plus foncées dans les régions gingivales deviennent plus claires vers la zone incisive

6. Vulcanisez légèrement pendant 20 secondes. On peut appliquer des couches supplémentaires de teintes ou d'agents de masquage.

7. Couvrez d'une fine couche d'un composite translucide tel que Glacier Incisal, Wave ou avec un autre matériau de restauration conformément aux instructions du fabricant.

NOTES SPÉCIALES:

1. La teinte de masquage doit être assortie à la fois à l'ivoire et à la nuance du matériau de restauration.
2. Les agents de masquage doivent être placés aussi profondément que possible.
3. Trop de masquage a pour résultat une apparence matte et sans vie.
4. Une fine couche du matériau de restauration doit être placée sur l'agent de masquage, suivi d'une couche finale de teinte incisive/émail.
5. Les teintes doivent être utilisées sous la couche finale du matériau de restauration.
6. Ne pas mélanger les teintes et les agents de masquage avec le matériau de la porosité.
7. Le choix d'une nuance par consensus augmente les chances de succès car tout un chacun a une différente perception des couleurs.
8. Retirez le rouge à lèvres.
9. La dent à assortir doit être propre et humide.
10. Utilisez la lumière naturelle ainsi que l'éclairage des locaux.
11. On recommande un bavoir de couleur bleue.
12. Donnez juste des coups d'œil. Ne fixez pas du regard.
13. Choisissez la nuance dans un cadre naturel et neutre.
14. La perception des couleurs est influencée par la couleur des murs et les habits des patients.
15. On peut mélanger les teintes avec les teintes claires, ou entre elles, afin d'obtenir des degrés de saturation et des tons différents.

IMPORTANT: Appliquez les teintes et les agents de masquage à la température ambiante (23°C/74°F).

CONDITIONS DE RANGEMENT:

1. Ne pas réfrigérer
2. Rangez à une température comprise entre 10° et 25°C (50°-77°F).
3. Ne pas utiliser après la date périmée
4. Ne pas exposer le matériau à la lumière directe du soleil

PRÉCAUTIONS ET ALLERGIES:

1. Évitez un contact prolongé des teintes et des agents de masquage avec la peau ou le tissu buccal ; ils peuvent causer une inflammation des tissus buccaux ou une sensibilisation de la peau.
 2. Toute personne ayant des antécédents connus d'allergies aux résines doit immédiatement arrêter l'utilisation des teintes et des agents de masquage.
- Attention : la loi fédérale ne permet la vente de ce dispositif qu'aux dentistes ou que sur la commande d'un dentiste.

Kit de modification des nuances

N° de réapprovisionnement 7900000

9 teintes, 1g

4 agents de masquages, 1g

accessoires

Recharge de teinte, 1g

N° de réapprovisionnement

7981414	Jaune
7982424	Gris
7983333	Marron
7985252	Blanc
7985353	Bleu
7985454	Transparent
7985555	Vert
7985656	Orange
7985757	Rouge

Recharge d'agent de masquage, 1g

N° de réapprovisionnement

7970202	Universel
7970404	Jaune Foncé
7975151	Gris
7975252	Blanc



Fabriqué en Australie par SDI Limitée
 Bayswater, Victoria 3153
 Australie 1 800 337 003
 Autriche 00800 022 55 734
 Brésil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Allemagne 0800 100 5759
 Irlande 01 886 9577
 Italie 800 780625
 Nouvelle Zélande 0800 734 034
 Espagne 00800 022 55 734
 Royaume-Uni 00800 022 55 734
 États-Unis et Canada 1 800 228 5166

EC REP

SDI Dental Limited
 Block 8, St Johns Court
 Swords Road, Santry
 Dublin 9, Irlande
 Tél +353 1 886 9577
 www.sdi.com.au

