

SDI

POLALIGHT

ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

ENJOY A  
BRIGHTER, MORE  
CONFIDENT  
SMILE IN 5 DAYS



EASY TO USE



FROM JUST  
20 MINUTES  
A DAY



PROFESSIONALLY  
USED AND  
RECOMMENDED



WHITER  
TEETH IN  
FIVE DAYS

# PROFESSIONAL TOOTH WHITENING SYSTEM

Millions of people across 100 countries have trusted Pola to achieve a safer, quicker and whiter smile.

The Pola Light advanced tooth whitening system combines Pola's award winning whitening formula, with targeted LED technology. And all from the comfort of your home.


- Fast acting, delivering you whiter teeth in 5 days
- Formulated to safely remove long term stains
- Returns your smile to your whitest natural shade possible
- Extra hydration to minimise sensitivity
- Remineralisation to strengthen your teeth
- Fully rechargeable LED light for your future tooth whitening treatments

## DIRECTIONS FOR USE



1

Clean your teeth and record your tooth shade on the last page.

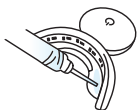

2

Attach the syringe tip provided to the syringe. Apply a small line of Pola gel evenly along the inner front of the top and bottom of your Pola LED mouthpiece.

Using the markings on the syringe as a guide, allow one fifth of the syringe (0.6g) per tooth whitening session on both top and bottom of the tray.



3

Fit the Pola LED mouthpiece to your mouth and bite down.

- Press 'on' button twice for the **Blue** and **Red** LED light. LED light will activate for 10 minutes

Or the treatment time can be 15 minutes if there are no signs of sensitivity.

- Press 'on' button once for **Blue** LED light. LED light will activate for 15 minutes

When the LED light activation ends, your whitening session is complete. Repeat twice a day for 5 days.

For best results, we recommend completing the two applications one after the other.



4

After reaching your treatment duration, remove the mouthpiece and wipe away any excess gel/saliva with a dry tissue. Rinse the mouthpiece and wash it with lukewarm water. Do not submerge it in water.



5

Rinse mouth or brush teeth once whitening session is complete.

# INSTRUCTIONS FOR USE

## FOR PATIENTS AND DENTAL PROFESSIONALS

### **Pola Day 6% hydrogen peroxide Advanced tooth whitening system**

Pola Day is a neutral pH take home tooth whitening solution. Pola Day is pleasantly flavoured, crystal clear with a unique blend of soothers, conditioners and a water content high enough to further reduce sensitivity.

#### **INDICATIONS FOR USE:**

- Whitening of discoloured vital teeth.
- Whitening of discoloured non-vital teeth.

#### **STORAGE AND SHELF LIFE**

- Store in a cool place and out of direct sunlight at temperatures between [2°-25°C / 35°-77°F].
- Do not use after expiration date.
- A warranty period of one (1) year is provided for the Pola LED mouthpiece. Please retain proof of purchase for you to claim the warranty.
- To charge the Pola Led mouthpiece : Once the LED light starts to flash, charge the Pola mouthpiece using the supplied USB charger cord. The light will continue to flash while charging and will stop flashing once fully charged.

#### **FOR EFFECTIVE RESULTS**

- Do not eat, drink or smoke during treatment.
- Do not smoke immediately after treatment - wait for at least two hours.
- Foods and drinks containing strong colours should be avoided for at least 48 hours after the treatment period or consumed in moderation.
- Use gel at room temperature.

#### **PRECAUTIONS**

- To be used under the supervision of a dentist.
- Keep out of reach of children and pets.
- Not to be used by pregnant or lactating women.
- Certain countries have age restrictions for whitening products where it is not to be used under a certain age. All European countries : under 18 years of age ;  
New Zealand : under 16 years of age ;
- Patients with a history of chemical allergies are advised to carry out allergy testing by a specialist before using these products.
- Discontinue use if any unusual sensitivity or reactions occur and consult your dentist.
- Do not inject Pola Day into the body.
- **CAUTION : FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A DENTIST.**  
SDS available at [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) or contact your regional representative.

Note : Patients with sensitivity will require a day or two break between treatments. Shortening treatment time is also suggested.

#### **FIRST AID**

**Eye [contact]:** Hold eyelids apart and flush with running water for at least 15 minutes. Seek medical advice if symptoms persist.

**Skin [contact]:** Wash thoroughly with water and seek medical advice if symptoms persist.

**Ingestion [large amount]:** If swallowed, do NOT induce vomiting. Rinse mouth. Drink plenty of milk or water and seek medical advice.

**Inhalation:** No symptoms expected.

# PROFESSIONELLES ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM

Millionen Menschen in 100 Ländern vertrauen auf Pola, um sicherer und schneller ein helleres Lächeln zu erreichen.


Pola Light, das moderne Zahnaufhellungssystem, vereint die preisgekrönte Aufhellungsformel von Pola mit gezielter LED-Technologie. Und all das nutzen Sie komfortabel zu Hause.

- Schnell wirksam, für weißere Zähne in 5 Tagen
- Formuliert für sichere Entfernung von Langzeitverfärbungen
- Verleiht Ihren Zähnen wieder die hellstmögliche natürliche Farbe
- Extra-Hydratisierung minimiert Empfindlichkeit
- Remineralisation stärkt Ihre Zähne
- LED-Lampe für zukünftige Zahnaufhellungen voll wiederaufladbar

## GEBRAUCHSANWEISUNG



- 1** Die Zähne reinigen und die Zahnfarbe auf der letzten Seite festhalten.

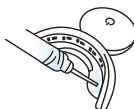

- 2** An der Spritze die beiliegende Kanüle anbringen. Je einen schmalen Streifen Pola Gel oben und unten auf die Innen-seite des Pola LED-Mundstücks gleich-mäßig auftragen.

Anwendertipp: Anhand der Markierungen auf der Spritze pro Anwendung ein Fünftel des Inhalts (0,6 g) oben und un-ten auf das Mundstück geben.



- 3** Das Pola LED-Mundstück in den Mund einsetzen und darauf beißen.
  - Die Ein-Taste für die **blaue/rote** LED zweimal drücken.  
Die LED leuchtet 10 Minuten.

Eine Anwendung für 15 Minuten ist auch mög-lich, wenn keine Empfindlichkeit auftritt.

- Die Ein-Taste für die **blaue** LED einmal drücken  
Die LED leuchtet 15 Minuten.

Wenn die LED erlischt, ist die Anwendung abgeschlossen. An 5 Tagen zweimal täglich wiederholen.

Für beste Ergebnisse empfehlen wir, die zwei Anwendungen nacheinander durchzuführen.



- 4** Am Ende der Anwendung das Mundstück herausnehmen und mit einem trockenen Tuch Gel/Speichel abwischen. Das Mundstück ausspülen und mit lauwarmem Wasser waschen. Nicht in Wasser tauchen



- 5** Nach der Anwendung den Mund ausspü-len oder die Zähne putzen.

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## FÜR PATIENTEN UND ZAHNÄRZTE

### **Pola Day mit 6 % Wasserstoffperoxid** **Modernes Zahnaufhellungssystem**

Pola Day ist ein pH-neutraler Zahnaufheller zur häuslichen Anwendung. Das Gel schmeckt angenehm, ist kristallklar und hat eine einzigartige Mischung schonender Zusatzstoffe sowie einen hohen Wasseranteil zur Verringerung von Empfindlichkeiten.

#### **INDIKATIONEN:**

- Aufhellung verfärbter vitaler Zähne.
- Aufhellung verfärbter devitaler Zähne.

#### **LAGERUNG UND HALTBARKEIT**

- Kühl und vor direktem Sonnenlicht geschützt bei Temperaturen von 2°C-25°C lagern.
- Nach dem Verfallsdatum nicht mehr benutzen.
- Für das Pola LED-Mundstück gilt eine Garantie von einem (1) Jahr. Bitte den Kaufbeleg aufbewahren, um die Garantie nutzen zu können.
- Aufladen des Pola LED-Mundstücks: Wenn die LED-Lampe zu blinken beginnt, das Pola Mundstück mit dem beiliegenden USB-Ladekabel aufladen. Die LED blinkt beim Laden weiter und stoppt, wenn das Mundstück voll aufgeladen ist.

#### **FÜR BESTE RESULTATE**

- Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
- Nicht sofort nach der Anwendung rauchen – mindestens zwei Stunden warten.
- Nahrung und Getränke mit starken Farben sollten nach der Anwendung mindestens 48 Stunden nicht oder nur mäßig konsumiert werden.
- Das Gel bei Zimmertemperatur verwenden.

#### **VORSICHTSMASSNAHMEN**

- Unter der Aufsicht eines Zahnarztes anwenden.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Nicht in Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden.
- In einigen Ländern gibt es Altersgrenzen, unter denen Zahnaufheller nicht verwendet werden dürfen. Alle europäischen Länder: unter 18 Jahren; Neuseeland: unter 16 Jahren.
- Patienten mit bekannten Chemikalienallergien sollten vor Gebrauch des Produkts bei einem Spezialisten einen Allergietest machen.
- Die Anwendung abbrechen, falls ungewöhnliche Empfindlichkeiten oder Reaktionen auftreten, und den Zahnarzt um Rat fragen.
- Pola Day nicht in den Körper spritzen.
- BEACHTEN: DIESES PRODUKT IST NUR ÜBER DEN ZAHNARZT ODER DEN FACHHANDEL ZU BEZIEHEN.
- SDB erhältlich unter [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) oder bei Ihrem regionalen SDI-Vertreter.

Hinweis: Patienten mit Empfindlichkeiten benötigen einen oder zwei Tage Pause zwischen den Anwendungen. Eine kürzere Anwendungsdauer ist auch ratsam.

#### **RSTE HILFE**

**Augen (Kontakt):** Die Augenlider offenhalten und mindestens 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Symptomen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

**Haut (Kontakt):** Gründlich mit Wasser waschen und bei anhaltenden Symptomen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

**Verschlucken (größere Menge):** KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Viel Milch oder Wasser trinken und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Einatmen: Keine Symptome zu erwarten.

# SISTEMA DE CLAREAMENTO DENTAL PROFISSIONAL

Milhões de pessoas em 100 países confiaram no Pola para obter um sorriso mais branco de maneira segura e rápida.


O sistema de clareamento dental avançado Pola Light combina a premiada fórmula de clareamento Pola com a tecnologia LED Tudo isso, no conforto de da sua casa.

- Ação rápida, proporcionando dentes mais brancos em 5 dias.
- Formulado para remover de maneira segura as manchas mais antigas
- Devolve ao seu sorriso de forma natural o tom mais branco possível
- Hidratação extra para minimizar a sensibilidade
- Remineralização para fortalecer seu dente
- Luz de Led recarregável para clareamentos futuros

## RECOMENDAÇÕES PARA USO



- 1 Limpe os dentes e registre a cor de seu dente na última página.

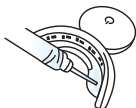

- 2 Encaixe a ponta na seringa. Aplique uma pequena linha com quantidade uniforme do gel Pola na parte interna superior e inferior da sua moldeira Pola Led.

Dica de uso: use os marcadores da seringa como guia, use um quinto da seringa (0.6g) para cada sessão de clareamento. Na parte superior e inferior da moldeira.



- 3 Encaixe a moldeira Pola LED em sua na boca e morda.


- Aperte o botão 'on' duas vezes o LED **Azul/Vermelha**  
A luz LED será ativada por 10 minutos

Ou o tempo de tratamento pode ser de 15 minutos ,se não houver sinais de sensibilidade.

- Aperte o botão 'on' uma vez para a luz o LED **Azul**  
A luz LED será ativada por 15 minutos

Quando a ativação do LED terminar, sua sessão de clareamento estará concluída.

Repetir duas vezes ao dia por 5 dias. Para melhores resultados, recomendamos completar as duas aplicações uma após a outra.

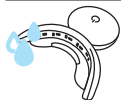

- 4 Quando o tempo de seu tratamento acabar, remova a moldeira Pola Led e limpe o gel/saliva com um seco.Enxague a moldeira e lave com água morna. Não submergir na água.



- 5 Enxague a boca ou escove os dentes quando terminar o clareamento.

# INSTRUÇÕES DE USO

## PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA

### **Pola Day 6% de peróxido de hidrogênio** **Sistema de clareamento dental avançado**

O Pola Day é um gel de clareamento caseira com pH neutro. Pola Day tem sabor agradável, aparência cristalina e uma composição única de dessensibilizante, condicionadores e alto teor de água, o suficiente para reduzir a sensibilidade.

#### **INDICAÇÕES DE USO:**

- Clareamento de dentes vitais descoloridos
- Clareamento de dentes não vitais descoloridos.

#### **ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE**

- Armazene em local fresco e fora da luz direta do sol em temperaturas entre [2°-25°C / 35°-77°F].
- Não usar após o prazo de validade.
- Um período de garantia de um (1) ano é fornecido para a moldeira Pola LED. Por favor guarde a nota da compra para que você possa usar a garantia.
- Para carregar a moldeira Pola Led: Assim que a luz de Led começar a piscar, carregue a moldeira Pola Led usando o carregador USB fornecido. A luz continuará piscando quando estiver sendo carregado e irá parar de piscar quando estiver totalmente carregado..

#### **PARA RESULTADOS EFICIENTES**

- Não coma, beba ou fume durante o tratamento.
- Não fume imediatamente após o tratamento -aguarde pelo menos duas horas.
- Alimentos e bebidas com cores fortes devem ser evitadas por pelo menos 48 horas após o tratamento ou consumidos com moderação.
- Usar o gel na temperatura ambiente.

#### **PRECAUÇÕES**

- Deve ser usado sob a supervisão de um dentista
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação
- Não usar durante a gravidez ou amamentação
- Alguns países restringem o uso de produtos de clareamento para certas idades. Todos países europeus: menores de 18 anos; Nova Zelândia: menores de 16 anos.
- Pacientes com histórico de alergia a substâncias químicas devem fazer um teste de alergia acompanhado por um especialista antes de usar estes produtos.
- Interrompa o uso se houver sensibilidade ou reação anormal e consulte o seu dentista.
- Não injetar Pola Day em seu corpo.
- **ADVERTÊNCIA: A LEGISLAÇÃO RESTRINGE A VENDA DESTE PRODUTO AO DENTISTA.**  
SDS disponível em [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou entre em contato com seu representante regional.

Nota: Pacientes com sensibilidade precisarão de um ou dois dias de intervalo entre os tratamentos. A redução do tempo de tratamento também é recomendada.

#### **PRIMEIROS SOCORROS**

**Olho [contato]:** Mantenha as pálpebras abertas e enxague com água corrente por pelo menos 15 minutos. Procure orientação médica se os sintomas persistirem.

**Pele [contato]:** Lave abundantemente com água e consulte um médico se os sintomas persistirem.

**Ingestão (grande quantidade):** Se ingerido, NÃO induza o vômito. Enxágue a boca. Beba bastante leite ou água e consulte um médico.

**Inalação:** Nenhum sintoma é esperado.

# SISTEMA PROFESIONAL DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Millones de personas en 100 países han confiado en Pola para lograr una sonrisa más segura, más rápida y más blanca.


El sistema avanzado de blanqueamiento dental Pola Light combina la premiada fórmula de blanqueamiento Pola con la tecnología LED. Y todo desde la comodidad de su casa.

- Acción rápida, proporcionándole dientes más blancos en 5 días
- Formulado para retirar de manera segura manchas de larga duración
- Le devuelve a su sonrisa el tono blanco más natural
- Hidratación adicional para minimizar la sensibilidad
- Remineralización para fortalecer sus dientes
- Luz LED recargable para sus futuros tratamientos de blanqueamiento dental

## INSTRUCCIONES DE USO



- 1 Lávese los dientes y registre el color de sus dientes en la última página.

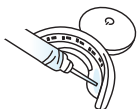

- 2 Una la punta suministrada a la jeringa. Aplique una pequeña línea de gel uniformemente en la parte frontal interior de la parte superior e inferior de su férula Pola LED.

Consejo de usuario: Utilizando las marcas de la jeringa como guía, utilice una quinta parte de la jeringa (0,6 g / 0,02 Oz) por sesión de blanqueamiento dental tanto en la parte superior como inferior de la férula.



- 3 Coloque la férula LED Pola en su boca y muérdala.
  - Pulse dos veces el botón 'on' para el LED **azul/rojo**  
El LED se activará durante 10 minutos

El tiempo de tratamiento puede ser de 15 minutos si no hay signos de sensibilidad.

- Pulse una vez el botón 'on' para el LED **azul**  
El LED se activará durante 15 minutos

Cuando la activación del LED finalice, su sesión de blanqueamiento se habrá completado. Repítalo dos veces al día durante 5 días. Para obtener mejores resultados, recomendamos completar las dos aplicaciones, una después de la otra.



- 4 Una vez finalizada la duración del tratamiento, retire la férula y limpie cualquier exceso de gel o saliva con un pañuelo seco. Enjuáguese la boca o cepílese los dientes una vez finalizada la sesión de blanqueamiento.



- 5 Enjuáguese la boca o cepílese los dientes una vez finalizada la sesión de blanqueamiento.



# INSTRUCCIONES DE USO

## PARA PACIENTES Y PROFESIONALES DENTALES

### Peróxido de hidrógeno al 6% Pola Day Sistema avanzado de blanqueamiento dental

Pola Day es una solución blanqueadora de dientes para llevar a casa con pH neutro. Pola Day tiene un sabor agradable, es cristalino con una mezcla única de chupetes, acondicionadores y un contenido de agua lo suficientemente alto como para reducir aún más la sensibilidad.

#### INDICACIONES DE USO:

- Blanqueamiento de dientes vitales decolorados.
- Blanqueamiento de dientes no vitales decolorados.

#### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

- Almacenar en un lugar fresco y lejos de la luz solar directa a temperaturas entre 2° a 25°C / 35° a 77°F.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- La férula Pola LED cuenta con una garantía de un (1) año. Conserve el justificante de compra para poder hacer uso de la garantía.
- Para cargar Pola Led: Una vez que la luz LED comience a parpadear, cargue la férula Pola con el cable del cargador USB suministrado. La luz seguirá parpadeando durante la carga y dejará de hacerlo una vez que se haya cargado completamente.

#### PARA OBTENER RESULTADOS EFECTIVOS

- No coma, beba ni fume durante el tratamiento.
- No fume inmediatamente después del tratamiento, espere al menos dos horas.
- Las comidas y bebidas que contengan colores fuertes deberán evitarse al menos 48 horas después del periodo de tratamiento o consumirse con moderación.
- Utilice el gel a temperatura ambiente.

#### PRECAUCIONES

- Utilizar bajo la supervisión de un dentista.
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No debe ser utilizado por mujeres embarazadas o lactantes.
- Ciertos países tienen restricciones de edad para los productos blanqueadores, en los que no se deben usar por debajo de cierta edad. Todos los países europeos: menores de 18 años; Nueva Zelanda: menores de 16 años.
- Se recomienda a los pacientes con un historial de alergias clínicas que realicen una prueba de alergia con un especialista antes de utilizar estos productos.
- Deje de utilizar el producto si se produce una sensibilidad o alguna reacción inusual y consulte con su dentista.
- No inyecte Pola Day en el organismo.
- **ADVERTENCIA: LA LEY FEDERAL RESTRINGE LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO EXCLUSIVAMENTE A DENTISTAS.**

FDS disponible en [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) o poniéndose en contacto con su representante regional. Nota: Los pacientes con sensibilidad necesitarán un día o dos de descanso entre tratamientos. Se recomienda también acortar el tiempo de tratamiento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

**Ojos [contacto]:** Mantenga los párpados separados y lave con abundante agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si los síntomas persisten.

**Piel [contacto]:** Lave con abundante agua y busque atención médica si los síntomas persisten.

**Ingestión [en gran cantidad]:** Si se ha tragado, NO induzca el vómito. Enjuague la boca. Beba mucha leche o agua y busque atención médica.

**Inhalación:** No se espera ningún síntoma.

# PAR DES PROFESSIONNELLS

À travers 100 pays, des millions de personnes ont fait confiance à Pola pour bénéficier d'un sourire plus éclatant, de manière plus sûre et plus rapide.


Le système avancé de blanchiment des dents Pola Light combine la formule de blanchiment déjà primée de Pola à une technologie LED ciblée. Et tout cela sans quitter votre maison.

- Action rapide, garantissant des dents plus blanches en 5 jours
- Une formule qui permet d'éliminer en toute sécurité les tâches présentes depuis longtemps
- Redonne à votre sourire sa teinte naturelle la plus blanche possible
- Hydratation supplémentaire pour réduire la sensibilité
- Reminéralisation pour renforcer vos dents
- Lampe à LED entièrement rechargeable pour vos futurs traitements de blanchiment des dents

## MODE D'EMPLOI



- 1** Nettoyer vos dents et prendre note de leur teinte sur la dernière page.

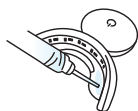

- 2** Attacher l'embout fourni à la seringue. Appliquer uniformément une fine ligne de gel Pola tout au long de la surface intérieure des parties supérieure et inférieure de votre gouttière à LED Pola.

Conseil d'utilisation : se servir des marquages sur la seringue comme valeurs guide, utiliser un cinquième de la seringue (0,6 g) par session de blanchiment des dents sur chacune des parties supérieure et inférieure de la gouttière.



- 3** Ajuster la gouttière à LED Pola à votre bouche et serrer les dents.
- Appuyer sur le bouton « On » deux fois pour la LED **bleu/rouge**  
La LED s'activera durant 10 minutes

Le traitement peut aussi durer 15 minutes en l'absence de signes de sensibilité.

- Appuyer sur le bouton « On » une fois pour la LED **bleu**  
La LED s'activera durant 15 minutes

Une fois que la LED est désactivée, votre session de blanchiment est terminée. Répéter deux fois par jour durant 5 jours.

Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons d'effectuer les deux applications l'une après l'autre



- 4** Une fois le temps de traitement écoulé, retirer la gouttière et essuyer tout excédent de gel/salive à l'aide d'un mouchoir sec. Rincer la gouttière et la laver à l'eau tiède. Ne pas l'immerger dans l'eau.



- 5** Se rincer la bouche ou se brosser les dents une fois la session de blanchiment terminée.

# MODE D'EMPLOI

## POUR LES PATIENTS ET LES PROFESSIONNELS DES SOINS DENTAIRES

### **Pola Day à 6 % de peroxyde d'hydrogène** **Système avancé de blanchiment des dents**

Pola Day est une solution de blanchiment des dents au pH neutre, applicable à domicile. Pola Day a un goût agréable, il est parfaitement clair grâce à son mélange unique d'agents adoucissants, de conditionneurs et une teneur en eau suffisamment élevée pour réduire davantage la sensibilité.

#### **INDICATIONS D'UTILISATION:**

- Blanchiment des dents vitales décolorées.
- Blanchiment des dents dévitalisées décolorées.

#### **CONSERVATION ET DURÉE DE VIE**

- Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 2° et 25°C (35° - 77°F).
- Ne pas l'utiliser après la date limite d'utilisation.
- La gouttière à LED Pola bénéficie d'une garantie d'un (1) an. Conserver la preuve d'achat pour faire valoir la garantie.
- Pour charger la gouttière à LED Pola : Une fois que la lampe à LED commence à clignoter, charger la gouttière Pola à l'aide du câble USB fourni. La lampe continuera de clignoter tout en chargeant et s'arrêtera de clignoter lorsqu'elle sera complètement chargée.

#### **POUR DES RÉSULTATS EFFICACES**

- Ne pas manger, boire et fumer durant le traitement.
- Ne pas fumer directement après le traitement - attendre au moins deux heures.
- Il est recommandé d'éviter ou de consommer avec modération les aliments et boissons contenant des couleurs fortes durant 48 heures au moins après le traitement.
- Utiliser le gel à température ambiante.

#### **PRÉCAUTIONS**

- Utiliser sous le contrôle d'un dentiste.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Certains pays prévoient que les produits de blanchiment ne peuvent pas être utilisés en dessous d'un certain âge. Tous les pays européens : en dessous de 18 ans ; Nouvelle-Zélande : en dessous de 16 ans.
- Il est conseillé aux patients qui ont des antécédents d'allergies aux produits chimiques de passer un test d'allergie auprès d'un spécialiste avant d'utiliser ces produits.
- Interrompre l'utilisation en cas de réactions ou de sensibilité inhabituelles et consulter votre dentiste.
- Ne pas injecter Pola Day dans le corps.
- ATTENTION : SELON LA LÉGISLATION FÉDÉRALE, LA VENTE OU LA COMMANDE DE CE PRODUIT EST RÉSERVÉE AUX DENTISTES.  
La fiche de données de sécurité est disponible sur [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou contacter un représentant SDI.

Remarque : il est conseillé aux patients sensibles d'espacer les traitements d'un ou deux jours. Il leur est également recommandé d'écourter la durée du traitement.

#### **PREMIERS SOINS**

**Yeux (contact) :** maintenir les paupières ouvertes et rincer à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

**Peau (contact) :** rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si les symptômes persistent.

**Ingestion (quantité importante) :** en cas d'ingestion, ne pas faire vomir la personne. Rincer la bouche. Boire de l'eau/du lait en grande quantité et demander l'avis d'un médecin.

**Inhalation :** aucun symptôme.

# SISTEMA PROFESSIONALE DI SBIANCAMENTO DENTALE

Milioni di persone in 100 Paesi si sono affidate a Pola per ottenere rapidamente un sorriso più bianco e più sano.


Il sistema avanzato di sbiancamento dentale Pola Light combina la premiata formula di sbiancamento di Pola con una tecnologia a LED mirata. Il tutto comodamente da casa propria.

- Con la sua azione rapida, consente di ottenere denti più bianchi in 5 giorni
- Formulato per rimuovere in maniera sicura anche le macchie meno recenti
- Riporta il sorriso alla sua naturale tonalità di bianco
- Extra idratazione per ridurre al minimo la sensibilità
- Remineralizzazione per rinforzare i denti
- Lampada a LED completamente ricaricabile per i trattamenti di sbiancamento dentale successivi

## ISTRUZIONI PER L'USO



- 1** Lavare i denti e annotare la loro tonalità nell'ultima pagina.

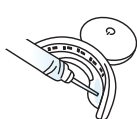

- 2** Fissare alla siringa il puntale fornito. Applicare uniformemente una linea sottile di gel Pola lungo il lato interno della parte superiore e della parte inferiore della mascherina LED Pola.

Suggerimento: utilizzare le marcature sulla siringa come guida, applicare un quinto della siringa (0,6 g) per ogni sessione di sbiancamento dentale sia sulla parte superiore che inferiore della mascherina.



- 3** Inserire in bocca la mascherina LED Pola, quindi chiudere a morso.


- Premere due volte il pulsante "on" per il LED **blu/rosso**; il LED si attiverà per 10 minuti

In alternativa, la durata del trattamento può ammontare a 15 minuti qualora non ci siano segni di sensibilità.

- Premere una volta il pulsante "on" per il LED **blu**  
Il LED si attiverà per 15 minuti

La sessione di sbiancamento è completa al termine dell'attivazione del LED. Ripetere due volte al giorno per 5 giorni.

Per risultati migliori, si raccomanda di completare le due applicazioni una dopo l'altra.

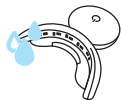

- 4** Al completamento del trattamento, estrarre la mascherina e rimuovere eventuali eccessi di gel/saliva con un panno asciutto. Sciacquare la mascherina e lavarla con acqua tiepida. Non immergere in acqua.



- 5** Una volta completata la sessione di sbiancamento, sciacquare la bocca o lavare i denti.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## PER PAZIENTI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE ODONTOIATRICO

### **Pola Day perossido di idrogeno 6%**

#### **Sistema avanzato di sbiancamento dentale**

Pola Day è una soluzione per sbiancamento dentale a pH neutro da usare a casa. Pola Day ha un aroma piacevole, è completamente trasparente e composto da una miscela di lenitivi, condizionatori e un contenuto di acqua sufficientemente elevato da ridurre ulteriormente la sensibilità.

#### **INDICAZIONI D'USO:**

- Sbiancamento di denti vitali discromici.
- Sbiancamento di denti non vitali discromici.

#### **CONSERVAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ**

- Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce diretta del sole a temperature tra 2° e 25°C (35°-77°F).
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Per la mascherina LED Pola è concesso un periodo di garanzia di un (1) anno. Conservare la prova di acquisto per poter richiedere la garanzia.
- Per caricare la mascherina LED Pola: quando la spia del LED inizia a lampeggiare, caricare la mascherina Pola utilizzando il cavo di ricarica USB in dotazione. La spia continuerà a lampeggiare durante il caricamento e smetterà di lampeggiare a carica completa.

#### **PER RISULTATI EFFICACI**

- Non mangiare, bere o fumare durante il trattamento.
- Non fumare subito dopo il trattamento; attendere almeno due ore.
- Evitare cibi e bevande altamente pigmentati per almeno 48 ore dopo il periodo di trattamento, oppure consumarli con moderazione.
- Utilizzare il gel a temperatura ambiente.

#### **PRECAUZIONI**

- Utilizzare sotto la supervisione di un dentista.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare in gravidanza e allattamento.
- Alcuni Paesi prevedono limitazioni per le quali l'utilizzo di prodotti sbiancanti non è autorizzato al di sotto di una certa età. Tutti i Paesi europei: sotto i 18 anni; Nuova Zelanda: sotto i 16 anni.
- I pazienti con anamnesi di allergie chimiche sono invitati a sottoporsi a test allergici presso uno specialista prima di utilizzare questi prodotti.
- Interrompere l'uso in caso di insorgenza di sensibilità o reazioni insolite, quindi consultare il dentista.
- Non iniettare Pola Day nel corpo.
- ATTENZIONE: LA LEGGE FEDERALE LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO UNICAMENTE A O SU ORDINE DI UN DENTISTA.  
Per le schede su dati e sicurezza visitare il sito [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) o contattare il rappresentante locale.

Nota: i pazienti con sensibilità dovranno osservare uno o due giorni di pausa tra i trattamenti. Si raccomanda anche una durata del trattamento ridotta.

#### **PRIMO SOCCORSO**

**Occhi (contatto):** sollevare le palpebre e sciacquare con acqua corrente per almeno 15 minuti. Consultare un medico se i sintomi persistono.

**Pelle (contatto):** lavare accuratamente con acqua e consultare un medico se i sintomi persistono.

**Ingestione (elevate quantità):** in caso di ingestione, NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca. Bere molto latte o acqua, quindi consultare un medico.

**Inalazione:** nessun sintomo previsto.

# SYSTEM PROFESJONALNEGO WYBIELANIA ZĘBÓW

Miliony ludzi w 100 krajach ufają produktom Pola i wierzą, że dzięki nim w bezpieczniejszy sposób będą mogli szybciej cieszyć się bielszym uśmiechem.


Zaawansowany system wybielania zębów Pola Light łączy nagradzaną formułę wybielania Pola z ukierunkowaną technologią LED. Jednocześnie rozwiązaniem tym można się cieszyć w komfortowych warunkach we własnym domu.

- Szybkie działanie zapewniające bielsze zęby w 5 dni
- Bezpieczne usuwanie długotrwałych przebarwień
- Przywraca możliwie najbielszy, naturalny odcień uśmiechu
- Dodatkowe nawadnianie w celu zminimalizowania wrażliwości
- Remineralizacja wzmacniająca zęby
- W pełni przystosowana do wielokrotnego ładowania lampka LED pozwalająca na przeprowadzanie w przyszłości kolejnych zabiegów wybielania zębów.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA



- 1** Wyczyść zęby i zapisz odcień na ostatniej stronie.

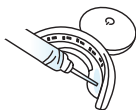

- 2** Załóż dostarczoną końcówkę na strzykawkę. Równomiernie nałóż niewielką ilość żelu Pola wzdłuż wewnętrznej przedniej górnej i dolnej części wkładki doustnej Pola LED.

Rada dla użytkownika: w czasie każdego zabiegu wybielania nałóż jedną piątą strzykawki (0,6 g) na górną i dolną część tacki. Na strzykawce znajdują się oznaczenia pozwalające ustalić odpowiednią ilość.




- 3** Włóż wkładkę doustną Pola LED do ust i zagryź.
- Dwukrotnie wciśnij przycisk „on” (włącz), aby uzyskać **niebieskie/czerwone** światło LED dioda włączy się na 10 minut

Jeśli nie występuje nadwrażliwość, zabieg można wykonywać przez 15 minut.

- Jeden raz wciśnij przycisk „on” (włącz), aby uzyskać **niebieskie** światło LED dioda włączy się na 15 minut

Po wyłączeniu się diody LED zabieg wybielania jest zakończony. Powtarzaj go dwa razy dziennie przez 5 dni.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy wykonanie dwóch aplikacji, jedna po drugiej.

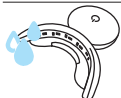

- 4** Po upływie odpowiedniego czasu trwania zabiegu wyjmij wkładkę doustną i wytrzyj suchą chusteczką nadmiar żelu i śliny. Przepłucz wkładkę doustną i umyj ją letnią wodą. Nie zanurzaj w wodzie.



- 5** Po zakończeniu zabiegu wybielania wypłucz usta lub wyczyść zęby.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DLA PACJENTÓW I LEKARZY

## **Pola Day 6% nadtlenuku wodoru** **Zaawansowany system wybielania zębów**

Pola Day to roztwór o neutralnym pH do wybielania zębów w domu. Produkt ma przyjemny aromat, jest krystalicznie czysty, zawiera wyjątkową mieszankę środków znoszących nadwrażliwość i odżywek oraz wodę w ilości niezbędnej, aby dodatkowo zmniejszyć wrażliwość.

### **WSKAZANIA:**

- Wybielanie przebarwionych żywych zębów.
- Wybielanie przebarwionych martwych zębów.

### **PRZECHOWYWANIE I OKRES WAŻNOŚCI**

- Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego (2-25°C / 35-77°F).
- Nie stosować po upływie daty ważności.
- Wkładka doustna Pola LED objęta jest gwarancją przez okres jednego (1) roku. Aby możliwe było skorzystanie z gwarancji, należy zachować dowód zakupu.
- Ładowanie wkładki doustnej Pola LED: gdy dioda LED zacznie migać, naładuj wkładkę doustną Pola za pomocą dołączonego kabla ładowarki USB. Podczas ładowania światło będzie nadal migać i przestanie migać po całkowitym naładowaniu.

### **ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY**

- Nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu podczas zabiegu.
- Nie pal bezpośrednio po zabiegu — odczekaj co najmniej dwie godziny.
- Przez co najmniej 48 godzin po zabiegu unikaj pokarmów i napojów o silnym zabarwieniu lub spożywaj je z umiarem.
- Stosuj żel w temperaturze pokojowej.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Produkt przeznaczony do stosowania pod nadzorem dentysty.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety w ciąży i karmiące matki.
- W niektórych krajach obowiązują ograniczenia wiekowe dotyczące produktów do wybielania i nie mogą one być stosowane poniżej określonego wieku. Wszystkie kraje europejskie: poniżej 18 roku życia, Nowa Zelandia: poniżej 16 roku życia.
- Pacjentom z alergią na substancje chemiczne w wywiadzie zaleca się, aby przed zastosowaniem tych produktów poddali się testom alergicznym przeprowadzanym przez specjalistę.
- W przypadku wystąpienia nietypowej wrażliwości lub reakcji należy przerwać stosowanie i skontaktować się z dentystą.
- Nie wstrzykiwać produktu Pola Day do ciała.
- UWAGA: PRZEPISY ZEZWALAJĄ NA SPRZEDAŻ TEGO WYROBU WYŁĄCZNIE PRZEZ DENTYSTĘ LUB NA JEGO ZLECENIE.

Karta charakterystyki dostępna na [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) lub u regionalnego przedstawiciela.

Uwaga: w przypadku pacjentów z nadwrażliwością między zabiegami powinna być stosowana przerwa trwająca jeden lub dwa dni. Sugeruje się również skrócenie czasu zabiegu.

### **PIERWSZA POMOC**

**Kontakt z oczami:** otworzyć powieki i przepłukiwać bieżącą wodą przez przynajmniej 15 minut. W przypadku utrzymujących się negatywnych objawów zwrócić się po pomoc lekarską.  
**Kontakt ze skórą:** przemywać dokładnie wodą i zwrócić się po pomoc lekarską, jeżeli objawy się utrzymują.

**Spżycie (duże ilości):** w przypadku połknięcia, NIE wywoływać wymiotów. Płukać jamę ustną. Wypić duże ilości mleka lub wody i zwrócić się o pomoc lekarską.

**Wdychanie:** brak spodziewanych negatywnych objawów.

# PROFESYONEL DİŞ BEYAZLATMA SİSTEMİ

100 ülkede milyonlarca insan, daha güvenli, hızlı ve beyaz bir gülüş elde etmek için Pola'ya güveniyor.

Pola Light gelişmiş diş beyazlatma sistemi, Pola'nın ödüllü beyazlatma formülünü LED teknolojiyle birleştirir ve herşey evinizin rahatlığında gerçekleşir.


- Uzun süreli diş lekelerini, güvenle kaldırmak için formüle editmiştir.
- Gülüşünüzü mümkün olan en beyaz doğal diş tonunuza döndürür.
- Ekstra hidrasyonu sayesinde diş hassasiyeti riskini en aza indirir.
- Dişlerinizi güçlendirmek için yeniden mineralleştirme sağlar.
- Gelecekteki diş beyazlatma tedavileriniz için tamamen şarj edilebilir LED ışık kaynağına sahiptir.

## KULLANIM TALİMATLARI



1

Dişlerinizi temizleyin ve diş renk tonunuzu son sayfadaki yere kaydedin.

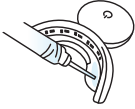

2

Verilen şırınga ucunu şırıngaya takın. Pola LED ağızlığınızın üst ve alt kısmının iç ön kısmına eşit olarak küçük bir miktar Pola jeli çizgi şeklinde uygulayın.

İpucu: Şırınganın üzerindeki işaretleri bir kılavuz olarak kullanın, her diş beyazlatma seansı için şırınganın beşte birini (0,6 gr) kaşığın hem üstünde hem de altında bırakın.



3

Pola LED ağızlığı ağızınıza takın ve ısırın.

- **Mavi / Kırmızı** LED "on" düğmesine iki kez basın  
LED 10 dakika boyunca etkinleşecektir

Hassasiyet belirtisi yoksa tedavi süreniz 15 dakika olabilir.

- **Mavi** LED "açma" düğmesine bir kez basın.  
LED 15 dakika olarak etkinleşecektir

LED aktivasyonu sona erdiğinde beyazlatma seansınız tamamlanmıştır. 5 gün boyunca günde iki kez tekrarlayın.

En iyi sonuçlar için iki uygulamayı arka arkaya tamamlamanızı öneririz.



4

Tedavi sürenize ulaştıktan sonra, ağızlığı çıkarın ve fazla jel / tükürüğü kuru bir mendille silin. Ağızlığı çalkalayın ve ılık suyla yıkayın. Suya daldırmayın.



5

Beyazlatma seansı tamamlandıktan sonra ağızınızı çalkalayın veya dişlerinizi fırçalayın.



# KULLANMA KILAVUZU

## HASTALAR VE DİŐ PROFESYONELLERİ İÇİNDİR

### **Pola Day % 6 hidrojen peroksit ierir.**

#### **GeliŐmiŐ diŐ beyazlatma sistemi.**

Pola Day, n6tr pH'lı evde diŐ beyazlatma sistemidir. Pola Day, hoŐ aromalı, kristal berraklıđında, benzersiz bir yatıŐtırıcı, d6zeltici olup hassasiyeti daha da azaltacak kadar yeterince su ieren bir s6l6syondur.

#### **ENDİKASYONLAR:**

- RenklenmiŐ canlı diŐlerin beyazlatılması.
- RenklenmiŐ cansız diŐlerin beyazlatılması.

#### **SAKLAMA VE RAF 6MR6**

- [2 6 -25 6 C / 35 6 -77 6 F] arasındaki sıcaklıklarda serin bir yerde ve dođrudan g6neŐ iŐiđından uzak bir yerde saklayın.
- Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
- Pola LED ađızlık iin bir (1) yıllık garanti s6resi verilmektedir. L6tfen garantiyi talep etmek iin faturanızı saklayın.
- Pola Led ađızlıđı Őarj etmek iin: LED iŐiđı yanıp s6nmeye baŐladıđında, verilen USB Őarj kabl6sunu kullanarak Pola ađızlıđı Őarj edin. IŐık Őarj olurken yanıp s6nmeye devam edecek ve tamamen Őarj olduđunda yanıp s6nmeyi bırakacaktır.

#### **DAHA ETKİLİ SONULAR İİN**

- Tedavi sırasında herhangi birŐey yemeyin, imeyin ve sigara kullanmayın.
- Tedaviden hemen sonra sigara imeyin - en az iki saat bekleyin.
- G6l6 renkler ieren yiyecek ve ieceklerden tedavi s6resinden sonra en az 48 saat uzak durulmalı veya 6l6l6 t6ketilmelidir.

#### **6NLEMLER**

- DiŐ hekimi g6zetimin altında kullanılmak iindir.
- ocukların ve evcil hayvanların eriŐemeyeceđi yerde saklayın.
- Hamile veya emziren kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.
- Belli bir yaŐın altında kullanılmaması gereken bazı 6lkelerde beyazlatma 6r6nleri iin yaŐ sınırlaması vardır. T6m Avrupa 6lkeleri: 18 yaŐın altında; Yeni Zelanda: 16 yaŐın altında.
- Kimyasal alerji 6yk6s6 olan hastalara, bu 6r6nleri kullanmadan 6nce bir uzman tarafından alerji testi yaptırılması tavsiye edilir.
- OlađandıŐı y6ksek bir hassasiyet veya reaksiyon meydana gelirse kullanmayı bırakın ve diŐ hekiminize danıŐın.
- Pola Day'ı v6cuda enjekte etmeyin.
- DİKKAT: FEDERAL YASASI, BU CİHAZIN BİR DİŐ HEKİMİ TARAFINDAN VEYA EMRİ İLE SATILMASINI KISITLAMAKTADIR.  
SDS'yi [6r6n G6venlik Formu] [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) adresinde bulabilirsiniz veya b6lge temsilcinizle iletiŐime gein.

Not: Hassasiyet riski olan hastalar, tedaviler arasında bir veya iki g6n beklemelidir. Tedavi s6resinin kısaltılması da 6nerilmektedir.

#### **İLK YARDIM**

**G6z (temas):** G6z kapaklarını aık tutun ve en az 15 dakika akan su ile yıkayın. Semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın.

**Deri (temas):** Suyla iyice yıkayın ve semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın.

**Yutma (b6y6k miktarda):** Yutulması halinde kusturmaya ALIŐMAYIN. Ađzı alkalayın. Bol s6t veya su iin ve tıbbi yardım alın.

**Soluma:** Semptom beklenmiyor.

# PROFESSIONEEL SYSTEEM VOOR HET BLEKEN VAN TANDEN

Miljoenen mensen in meer dan 100 landen vertrouwen op Pola om sneller en veiliger een wittere glimlach te krijgen.


Het geavanceerde Pola Light-systeem voor het bleken van tanden combineert de beproefde Pola-bleekformule met gerichte ledtechnologie. En dat allemaal gewoon thuis.

- Snel werkend: binnen 5 dagen wittere tanden
- Formule om hardnekkige vlekken veilig te verwijderen
- Brengt uw glimlach terug met de wilst mogelijke natuurlijke tint
- Extra hydratatie om gevoeligheid te minimaliseren
- Nieuwe mineralisatie om uw tanden te versterken
- Volledig oplaadbaar ledlampje voor toekomstige tandbleekbehandelingen

## GEBRUIKSAANWIJZING



- 1 Maak uw tanden schoon en noteer de kleur van uw tanden op de laatste pagina.

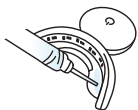

- 2 Maak de tip van de injectiespuit vast aan de injectiespuit. Breng een klein beetje Pola-gel gelijkmatig aan langs de binnenkant aan de boven- en onderkant van uw Pola LED-mondstuk.

Tip voor gebruikers: Gebruik de markeringen op de injectiespuit als richtlijn. Zorg dat per tandbleeksessie een vijfde van de injectiespuit (0,6 g) aan de boven- en onderkant wordt aangebracht.



- 3 Plaats het Pola LED-mondstuk in uw mond en klem het tussen uw tanden.

- Druk twee keer op de 'on'-knop voor het **blauwe/rode** ledlampje. Het ledlampje zal 10 minuten branden.

De behandelduur kan tot 15 minuten worden verlengd als er geen sprake is van gevoeligheid;

- Druk één keer op de 'on'-knop om het **blauwe** ledlampje te activeren. Het ledlampje zal 15 minuten branden.

Als het ledlampje uit gaat, is uw bleeksessie voltooid. Herhaal de behandeling 5 dagen lang 2 keer per dag.

Voor het beste resultaat raden we u aan om de twee toepassingen na elkaar uit te voeren.



- 4 Verwijder het mondstuk na elke behandeling en veeg overtollig gel/speeksel af met een droog doekje. Spoel het mondstuk af met lauw water. Dompel het niet onder in water.



- 5 Spoel de mond of poets uw tanden na de bleeksessie.

# GEBRUIKSAANWIJZING

## VOOR PATIËNTEN EN TANDHEELKUNDIG PROFESSIONALS

### **Pola Day 6% waterstofperoxide**

#### **Geavanceerd systeem voor het bleken van tanden**

Pola Day is een pH-neutrale oplossing waarmee u thuis uw tanden kunt bleken. Pola Day is een kristalheldere mix met een prettige smaak en verzachtende bestanddelen, conditioners en voldoende water om gevoeligheid verder te verminderen.

#### **INDICATIES VOOR GEBRUIK:**

- Bleken van verkleurde vitale tanden;
- Bleken van verkleurde niet-vitale tanden.

#### **OPSLAG EN DE HOUDBAARHEIDSDATUM**

- Bewaar het product in een koele omgeving, buiten bereik van direct zonlicht, bij temperaturen tussen [2-25 °C/ 35-77 °F];
- Niet gebruiken wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken;
- Het Pola LED-mondstuk wordt geleverd met 1 jaar garantie. Bewaar het aankoopbewijs voor de garantie;
- Om het Pola LED-mondstuk op te laden: Laad het Pola-mondstuk op met behulp van de meegeleverde oplader met USB-aansluiting zodra het ledlampje begint te knipperen. Het ledlampje blijft knipperen tijdens het opladen en stopt met knipperen als de batterij helemaal is opgelade.

#### **VOOR EFFECTIEVE RESULTATEN**

- Eet, drink of rook niet tijdens de behandeling.
- Rook niet direct na de behandeling; wacht tenminste twee uur;
- Voedsel en dranken met veel kleurstoffen moeten tot minimaal 48 uur na de behandeling worden vermeden of matig worden gebruikt;
- Gebruik de gel op kamertemperatuur.

#### **VOORZORGSMAATREGELEN**

- Dit product moet worden gebruikt onder toezicht van een tandarts.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren;
- Dit product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven;
- In bepaalde landen gelden beperkingen op basis van leeftijd voor bleekproducten, waarbij het product niet mag worden gebruikt onder een bepaalde leeftijd. Alle Europese landen: jonger dan 18 jaar; Nieuw-Zeeland: jonger dan 16 jaar.
- Laat patiënten die in het verleden allergisch zijn gebleken voor chemische stoffen een allergietest bij een specialist ondergaan voordat ze deze producten gebruiken;
- Stop het gebruik als er sprake is van ongebruikelijke gevoeligheid of reacties, en neem contact op met uw tandarts;
- Injecteer Pola Day niet in het lichaam;
- LET OP: DIT PRODUCT MAG OP GROND VAN FEDERALE WETGEVING UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT DOOR OF NAMENS EEN TANDARTS;  
Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) of via uw regionale vertegenwoordiger;

NB: Patiënten die gevoelig zijn, moeten een of twee dagen wachten tussen behandelingen. Ook wordt aanbevolen om de behandeltijd te verkorten.

#### **ERSTE HULP**

**Contact met de ogen:** Houd de oogleden uit elkaar en spoel minimaal 15 minuten doorlopend met stromend water. Raadpleeg een arts als de symptomen blijven bestaan.

**Contact met de huid:** Spoel het oppervlak grondig met water en raadpleeg een arts wanneer de symptomen niet overgaan;

**Bij inslikken (grote hoeveelheid):** Wek na inslikken GEEN braken op. De mond spoelen. Drink veel melk of water en raadpleeg een arts;

**Inademing:** Geen symptomen verwacht.

# AMMATTIMAINEN HAMPaidEN VALKAISUJÄRJESTELMÄ

Miljoonat ihmiset 100 maassa ovat luottaneet Polaan saavuttaakseen valkoisemman hymyn turvallisesti ja nopeasti.

Pola Light -hampaiden valkaisuajrjestelmässä yhdistyy Polan palkittu valkaisuakaava ja kohdennettu LED-tekniikka. Ja kaikki mukavasti kotonasi.


- Nopeasti toimiva, saat valkoisemmat hampaat viidessä päivässä
- Suunniteltu poistamaan turvallisesti pitkäaikaiset värjäymät
- Palauttaa hymysi valkoisimpaan luonnolliseen sävyyn
- Enemmän hydraatiota herkkyyden minimoimiseksi
- Remineralisaatio vahvistaa hampaita
- Täysin ladattava LED-valo tulevia hampaidenvalkaisuhoitojasi varten

## KÄYTTÖOHJEET



1

Puhdista hampaasi ja kirjaa hampaiden sävy viimeiselle sivulle.

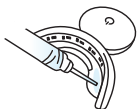

2

Kiinnitä ruiskun kärki ruiskuun. Levitä pieni jana Pola-geeliä tasaisesti Pola LED suukappaleen ylä- ja alaosan sisäosaa pitkin.

Käyttäjän vinkki: Käytä ruiskun merkintöjä ohjeina, salli viidesosa ruiskusta [0,6 g] per hampaiden valkaisuokerta sekä ylä- että alapuolelle lusikkaa.



3

Aseta Pola LED -suukappale suuhusi ja pure yhteen.


- Paina 'on' -painiketta kahdesti saadaksesi **sinisen/ punaisen** LED-valon - LED aktivoituu 10 minuutiksi

Tai hoitoaika voi olla 15 minuuttia, jos herkkyydestä ei ole merkkejä.

- Paina "on" -painiketta kerran saadaksesi **sinisen** LED-valon LED syttyy 15 minuutiksi

Kun LED-valojen aktivointi päättyy, valkaisuhoitokerta on valmis. Toista kahdesti päivässä 5 päivän ajan.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme kahden applikaation tekemistä peräkkäin.

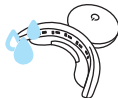

4

Kun olet suorittanut hoidon, poista suukappale ja pyyhi ylimääräinen geeli/ sylki kuivalla liinalla. Huuhtelee suukappale ja pese se haalealla vedellä. Älä upota sitä veteen.



5

Huuhtelee suu tai harjaa hampaat, kun valkaisu on valmis.

# KÄYTTÖOHJEET

## POTILAILLE JA HAMMASLÄÄKETIETEEN AMMATTILAISILLE

### **Pola Day 6 % vetyperoksidi**

#### **Kehittynyt hampaiden valkaisujärjestelmä**

Pola Day on pH-arvoltaan neutraali kotiin vietävä hampaidenvalkaisu-geeli. Pola Day on miellyttävän makuinen, kristallinkirkas, ja siinä on ainutlaatuinen sekoitus lievittäviä aineita, hoitoaineita ja riittävän korkea vesipitoisuus vähentääkseen herkkyyttä.

#### **INDIKAATIOT:**

- Värjäytyneiden vitaalien hampaiden valkaisu.
- Värjäytyneiden ei-vitaalien hampaiden valkaisu.

#### **VARASTOINTI JA SÄILYVYYS**

- Säilytä viiteässä paikassa ja poissa suorasta auringonvalosta [2° -25° C / 35° -77° F] lämpötilassa.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Pola-LED-suukappaleelle annetaan yhden (1) vuoden takuu. Säilytä ostotodistus, jotta voit vaatia takuun.
- Pola Led -suukappaleen lataaminen: Kun LED-valo alkaa vilkkua, lataa Pola-suukappale mukana toimitetulla USB-laturilla. Valo vilkkuu edelleen latauksen aikana ja lakkaa vilkkumasta, kun se on ladattu täyteen.

#### **TEHOKKAIDEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI**

- Älä syö, juo tai tupakoi toimenpiteen aikana.
- Älä tupakoi välittömästi toimenpiteen jälkeen - odota ainakin kaksi tuntia.
- Voimakkaasti värjääviä ruokia ja juomia tulisi välttää vähintään 48 tunnin ajan hoitajakson jälkeen ja niitä tulisi käyttää maltillisesti.
- Käytä geeliä huoneenlämpöisenä.

#### **VAROITUKSET**

- Käytetään hammaslääkärin valvonnassa.
- Pidä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Ei saa käyttää raskaana oleville tai imettäville naisille.
- Joissakin maissa on ikärajoituksia valkaisuotteille, ja valkaisuaineiden käytölle on määritelty alaikäraja. Kaikki Euroopan maat: alle 18-vuotiaat; Uusi-Seelanti: alle 16-vuotiaat.
- Potilaat, joilla on esiintynyt allergiaa kemikaaleille, pitäisi tehdä allergiatestaus ennen tuotteen käyttöä.
- Lopeta käyttö, jos epätavallista herkkyyttä tai reaktioita esiintyy. Ota yhteys hammaslääkäriisi.
- Älä ruiskuta Pola Day -valmistetta kehoon.
- VAROITUS: LIITTOVALTION LAKI RAJOITTA TÄMÄN LAITTEEN MYNNIN VAIN HAMMASLÄÄKÄREIDEN TOIMESTA TAI HEIDÄN MÄÄRÄYKSESTÄÄN  
Käyttöturvallisuustiedote on saatavana osoitteesta [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) tai ota yhteyttä alueelliseen edustajaan.

Huomaa: Herkät potilaat tarvitsevat päivän tai kaksi taukoa hoitojen välillä. Myös hoitoaikojen lyhentämistä suositellaan.

#### **ENSIAPU**

**Silmät (kosketus):** Pidä silmäluomet avoimina ja huuhtelee juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.

**Iho (kosketus):** Pese perusteellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin hoitoon, jos oireet jatkuvat.

**Nieleminen (suuri määrä):** Älä aiheuta oksentelua. Huuhtelee suu. Juo runsaasti maitoa tai vettä ja hakeudu lääkäriin.

**Hengitys:** Ei oireita odotettavissa.

# PROFESJONELT TANNBLEKINGSSYSTEM

Millioner av mennesker i 100 land bruker Pola for å få et hvitere smil på en trygg og rask måte.


Pola Light avansert tannblekingssystem kombinerer Polas prisvinnende tannblekingsformel med målrettet LED-teknologi. Du kan utføre behandlingen i ditt eget hjem.

- Hurtigvirkende, gir deg hvitere tenner på 5 dager
- Laget for å fjerne gjenstridige misfarginger på en trygg måte
- Gir deg tilbake smilet ditt i den hviteste naturlige tonen som er mulig
- Tilfører ekstra fuktighet for å minimere følsomheten
- Remineralisering for å styrke tennene dine
- Fullt oppladbart LED-lys for dine fremtidige tannblekingsbehandlinger

## BRUKSANVISNING



- 1** Rengjør tennene dine og registrer fargenyansen på tennene dine på den siste siden.

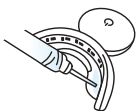

- 2** Fest den medfølgende sprøytespissen på sprøyten. Påfør en liten strek med Pola-gel jevnt langs den indre fronten nederst og øverst på ditt Pola LED-munnstykke.

Brukertips: Bruk markeringene på sprøyten som en guide, bruk en femtedel av sprøyten (0,6 g) per tannblekingsøkt både øverst og nederst på brettet.



- 3** Sett Pola LED-munnstykket i munnen din og bit sammen.
- Trykk på "på"-knappen to ganger for **blå/rød** LED LED-en vil aktiveres i 10 minutter

Eller behandlingen kan vare i 15 minutter hvis det ikke er tegn på følsomhet.

- Trykk på "på"-knappen en gang for den **blå** LED-en LED-en vil aktiveres i 15 minutter

Når LED-aktivering er avsluttet, er blekingsøkten fullført. Gjenta to ganger hver dag i fem dager.

For best mulige resultater anbefaler vi at du fullfører de to påføringene rett etter hverandre



- 4** Etter at behandlingsperioden din er ferdig, må du fjerne munnstykket og tørke vekk gel/spytt med en tørr serviett. Skyll munnstykket og vask det med lunkent vann. Ikke senk det ned i vann.



- 5** Skyll munnen eller børst tennene med en gang når behandlingen er ferdig.

# BRUKSANVISNING

## FOR PASIENTER OG TANNHELSEPERSONELL

### **Pola Day 6 % hydrogenperoksid**

#### **Avansert tannblekingsystem**

Pola Day er en hjemmeblekingsløsning med nøytral pH. Pola Day har en behagelig smak, krystallklar med en unik blanding av lindrende og smørende midler, og et vanninnhold som er høyt nok til å redusere følsomheten.

#### **BRUKSANVISNING:**

- Bleking av misfargede vitale tenner.
- Bleking av misfargede ikke-vitale tenner.

#### **LAGRING OG HOLDBARHET**

- Lagres på et tørt sted og unna direkte sollys ved temperaturer mellom [2-25 °C / 35-77 °F].
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Pola LED-munnstykket har en garantiperiode på ett (1) år. Behold kvitteringen for å kunne benytte deg av garantien.
- Slik lader du Pola LED-munnstykket: når LED-lyset begynner å blinke, må du lade munnstykket ved bruk av den medfølgende USB-ladeledningen. Lyset vil fortsette å blinke mens man lader, og vil slutte å blinke når munnstykket er helt oppladet..

#### **FOR EFFEKTIVE RESULTATER**

- Under behandlingen må du ikke spise, drikke eller røyke.
- Ikke røyk umiddelbart etter behandlingen - vent minst to timer.
- Mat og drikke som inneholder sterke fargestoffer må unngås i minst 48 timer etter behandlingsperioden, eller inntas i moderate mengder.
- Bruk gelen ved romtemperatur.

#### **FORHOLDSREGLER**

- Skal brukes under oppsyn av tannlege.
- Oppbevar utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Skal ikke brukes av gravide eller ammende kvinner.
- Visse land har aldersbegrensninger for tannblekingsprodukter. Produktene skal da ikke brukes under en viss alder. Alle europeiske land: under 18 år; New Zealand: under 16 år.
- Pasienter med historikk med kjemiske allergier anbefales å få utført allergitest av en spesialist før bruk av disse produktene.
- Hvis det oppstår uvanlig følsomhet eller reaksjoner, må du avbryte bruken og rådføre deg med tannlegen din.
- Pola Day må ikke injiseres i kroppen.
- FORSIKTIG: FØDERAL LOV BEGRENSER DENNE ENHETEN TIL SALG AV ELLER PÅ ORDRE FRA EN TANNLEGE.

SDS er tilgjengelig på [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) eller du kan kontakte din regionale representant.

Merk: Pasienter med følsomhet må ha et opphold på en dag eller to mellom behandlingene. Det er også anbefalt å forkorte behandlingstiden.

#### **FØRSTEHJELP**

**Øyne (kontakt):** Hold øyelokkene fra hverandre og skyl med rennende vann i minst 15 minutter. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.

**Hud (kontakt):** Skyl nøyte med vann og oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.

**Inntak (stor mengde):** Ved svelging må man IKKE fremkalle oppkast. Skyl munnen. Drikk masse melk eller vann og oppsøk medisinsk hjelp.

**Inhalering:** Ingen forventede symptomer.

# PROFESSIONELLT TANDBLEKNINGSSYSTEM

Miljontals människor i 100 länder har använt sig av Pola för att få ett säkrare, snabbare och vitare leende.

Det avancerade tandblekningssystemet i Pola Light kombinerar Polas prisbelönta blekningsformula med riktad LED-teknik. Allt kan göras hemma.


- Snabb effekt, ger vitare tänder på 5 dagar
- Utvecklad för att på ett säkert sätt avlägsna bestående fläckar.
- Återställer ditt leende så att det blir så skinande vitt som möjligt.
- Extra återfuktning för att minimera ilningar
- Remineralisering för att stärka tänderna.
- Fullt uppladdningsbar LED-lampa säkerställer framtida tandblekningsbehandlingar.

## ANVISNINGAR



1

Rengör tänderna och skölj din Pola LED skena före användning.

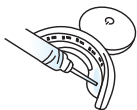

2

Fäst den medföljande sprutspetsen på sprutan. Applicera en tunn sträng av Pola Day eller Pola Night gel längst ned i skenan mot vinkeln.

Användartips: Använd markeringarna på sprutan som vägledning. Använd en femtedel av sprutan (0,6g) per blekningstillfälle på både under- och översida av skenan.



3

Sätt in Pola LED-munstycket i munnen och bit ihop.


- Tryck två gånger på "on"-knappen för **blå/röd** LED - lysdioden lyser i 10 minuter

Behandlingstiden kan förlängas till 15 minuter om det inte finns några tecken på känslighet eller ilningar.

- Tryck en gång på "on"-knappen för att tända den **blå** LED-lampan  
Lysdioden lyser i 15 minuter.

När LED-lampan slocknar är tandblekningen klar. Upprepa två gånger om dagen i 5 dagar.

För bästa resultat rekommenderar vi att du utför de båda appliceringarna efter varandra.

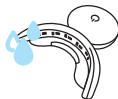

4

När behandlingen är klar tar du ur munstycket och torkar bort överflödigt gel/saliv med en torr servett. Skölj munstycket och tvätta det med ljummet vatten. Doppa inte ned det i vatten.



5

Skölj munnen eller borsta tänderna när blekningen är klar..



# BRUKSANVISNING

## FÖR PATIENTER OCH TANDLÄKARE

### **Pola Day 6% väteperoxid Avancerat tandblekningssystem**

Pola Day är en pH-neutral gel för tandblekning i hemmet. Pola Day har en god smak, är transparent och består av en unik blandning av lugnande och mjukgörande ingredienser samt en vattenhalt som är tillräckligt hög för att minska känsligheten ytterligare.

#### **ANVÄNDINGSOMRÅDEN:**

- Vitgörande effekt på missfärgade friska tänder.
- Vitgörande effekt på missfärgade icke friska tänder.

#### **FÖRVARING OCH HÅLLBARHET**

- Förvaras svalt och ej i direkt solljus vid temperaturer mellan 2°-25 °C / 35°-77 °F.
- Används ej efter utgångsdatum.
- Polas LED-munstycke omfattas av en garanti på ett [1] år. Spara inköpsbeviset så att du kan göra anspråk på garantin.
- Så här laddar du Pola LED-munstycket: När LED-lampan börjar blinka laddar du Pola-munstycket med hjälp av den medföljande USB-laddningskabeln. Lampan fortsätter att blinka under laddningen och slutar blinka när batteriet är fulladdat.

#### **FÖR EFFEKTIVA RESULTAT**

- Ät, drick eller rök inte under behandlingen.
- Rök inte direkt efter behandlingen - vänta i minst två timmar.
- Mat och dryck som innehåller starka färgämnen ska undvikas i minst 48 timmar efter behandlingsperioden.
- Använd rumstempererad gel.

#### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

- Ska användas under övervakning av tandläkare.
- Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
- Får inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
- Vissa länder har åldersrestriktioner för tandblekningsprodukter, vilket innebär att de inte får användas av personer under en viss ålder. Alla europeiska länder: under 18 år, Nya Zeeland: under 16 år.
- Patienter med historisk kemisk allergi rekommenderas att utföra allergitester hos en specialist innan dessa produkter tas i bruk.
- Avbryt användningen om du upplever ovanlig känslighet eller reaktion, och kontakta din tandläkare.
- Injicera inte Pola Day i kroppen.
- FÖRSIKTIGHET: ENLIGT LAG FÅR FÖRSÄLJNING AV DENNA PRODUKT ENDAST SKE AV TANDLÄKARE.  
Säkerhetsdatablad finns på [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au), eller kan fås genom att kontakta din lokala representant.

OBS! Patienter med känslighet behöver ha 1-2 dagars mellanrum mellan behandlingarna. Dessutom rekommenderas kortare behandlingstid.

#### **FÖRSTA HJÄLPEN**

**Kontakt med ögonen:** Håll isär ögonlocken och spola med rinnande vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare om symtomen kvarstår.

**Hudkontakt:** Tvätta noga med vatten och kontakta läkare om symtomen kvarstår.

**Förtäring** [stor mängd]: Framkalla INTE kräkning vid förtäring. Skölj munnen. Drick mycket mjölk eller vatten och kontakta läkare.

**Inandning:** Inga symtom förväntas.

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

Εκατομμύρια ανθρώπων σε 100 χώρες έχουν εμπιστευτεί τα Pola για να επιτύχουν ένα λευκότερο χαμόγελο γρηγορότερα και ασφαλέστερα.


Το προηγμένο σύστημα λεύκανσης δοντιών Pola Light, συνδυάζει τη βραβευμένη φόρμουλα λεύκανσης του Pola με στοχευμένη τεχνολογία LED. Και όλα αυτά από την άνεση του σπιτιού σας.

- Γρήγορης δράσης, σας προσφέρει λευκότερα δόντια σε 5 ημέρες.
- Παρασκευασμένο να αφαιρεί με ασφάλεια μακροχρόνιες χρωσσεις.
- Επαναφέρει το χαμόγελο σας στην όσο το δυνατόν λευκότερη φυσική σας απόχρωση.
- Επιπλέον ενυδάτωση για ελαχιστοποίηση της ευαισθησίας.
- Επαναμεταλλικοποίηση για ενίσχυση των δοντιών σας.
- Πλήρως επαναφορτιζόμενο φως LED για τις μελλοντικές θεραπείες λεύκανσης των δοντιών σας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



- 1** Καθαρίστε τα δόντια σας και καταγράψτε την απόχρωση των δοντιών σας στην τελευταία σελίδα.

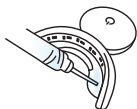

- 2** Προσαρτήστε το παρεχόμενο άκρο στη σύριγγα. Τοποθετήστε μια μικρή γραμμή του ζελέ Pola ομοιόμορφα κατά μήκος του εσωτερικού μετώπου της κορυφής και του κάτω μέρους του ενδοστοματικού στέλεχους του Pola LED σας.

Συμβουλή προς τον χρήστη: Χρησιμοποιήστε τις σημάνσεις επάνω στη σύριγγα ως οδηγό. Χορηγήστε ένα πέμπτο της σύριγγας(0,6g)για κάθε συνεδρία λεύκανσης συνολικά στην κορυφή και το κάτω μέρος του διακαρίου.



- 3** Προσαρμόστε το ενδοστοματικό στέλεχος του Pola LED στο στόμα σας και δαγκώστε το.

- Πιέστε το κουμπί "on" δύο φορές για το **Μπλε/Κόκκινο** LED. Το LED θα ενεργοποιηθεί για 10 λεπτά.

Η ο χρόνος θεραπείας μπορεί να είναι 15 λεπτά εάν δεν υπάρχουν σημάδια ευαισθησίας.

- Πιέστε το κουμπί "on" μία φορά για το **Μπλε** LED. Το LED θα ενεργοποιηθεί για 15 λεπτά.

Όταν τελειώσει η ενεργοποίηση του LED, η συνεδρία λεύκανσης έχει ολοκληρωθεί. Επαναλάβετε δύο φορές την ημέρα για 5 ημέρες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συστήνουμε να ολοκληρώνετε τις δύο εφαρμογές τη μία μετά την άλλη.



- 4** Αφού φτάσετε τη διάρκεια θεραπείας, αφαιρέστε το ενδοστοματικό στέλεχος και απομακρύνετε οποιαδήποτε περίσσεια ζελέ/ σάλιου σκουπίζοντας με ένα στεγνό ύφασμα. Ξεπλύνετε το ενδοστοματικό στέλεχος και πλύνετε το με χλιαρό νερό. Μην το βυθίζετε σε νερό.



- 5** Ξεπλύνετε το στόμα ή βουρτσώστε τα δόντια μόλις ολοκληρωθεί η συνεδρία λεύκανσης.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

### **Pola Day 6% υπεροξειδίο του υδρογόνου**

#### **Προηγμένο σύστημα λεύκανσης δοντιών**

Το Pola Day είναι μια, ουδέτερου pH, λύση λεύκανσης δοντιών για το σπίτι. Το Pola Day έχει ευχάριστη γεύση, είναι κρυσταλλικά διαυγές με ένα μοναδικό μείγμα καταπραϊντικών και ρυθμιστικών παραγόντων και περιεκτικότητα νερού αρκετά υψηλή για περαιτέρω μείωση της ευαισθησίας.

#### **ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

- Λεύκανση αποχρωματισμένων ζωντανών δοντιών.
- Λεύκανση αποχρωματισμένων νεκρών δοντιών.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**

- Αποθηκεύστε σε ένα δροσερό μέρος και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες μεταξύ 2°-25°C (35°-77°F).
- Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
- Μια περίοδος εγγύησης ενός(1) έτους παρέχεται για το Pola LED mouthpiece.
- Παρακαλείσθε να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς για να διεκδικήσετε την εγγύηση.
- Για να φορτίσετε το Pola LED mouthpiece: Όταν το φως LED αρχίσει να αναβοσβήνει, φορτίστε το Pola mouthpiece χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φορτιστή USB. Το φως θα συνεχίσει να αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και θα σταματήσει μόλις φορτιστεί πλήρως.

#### **ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Μην καπνίζετε αμέσως μετά τη θεραπεία- περιμένετε για τουλάχιστον δύο ώρες.
- Τρόφιμα και ποτά που περιέχουν έντονα χρώματα θα πρέπει να αποφεύγονται για τουλάχιστον 48 ώρες μετά τη θεραπεία ή να καταναλώνονται με μέτρο.
- Το ζελέ να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου.

#### **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

- Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη οδοντίατρου.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Να μην χρησιμοποιείται από εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες.
- Ορισμένες χώρες έχουν ηλικιακούς περιορισμούς για λευκαντικά προϊόντα όπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κάτω από μια ορισμένη ηλικία. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες: κάτω από την ηλικία των 18, Νέα Ζηλανδία: κάτω από την ηλικία των 16.
- Ασθενείς με ιστορικό αλλεργιών σε χημικά συνιστάται να πραγματοποιήσουν τεστ αλλεργίας από ειδικό, πριν χρησιμοποιήσουν αυτά τα προϊόντα.
- Εάν οποιαδήποτε ασυνήθιστη ευαισθησία ή αντιδράσεις λάβουν χώρα, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο σας.
- Μην ενίετε το Pola Day εντός του σώματος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ.

Τα SDS είναι διαθέσιμα στο [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Σημείωση: Ασθενείς με ευαισθησία θα χρειάζονται διάλειμμα μιας ή δύο ημερών μεταξύ των θεραπειών. Προτείνεται.

#### **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

**Μάτι (επαφή):** Κρατήστε τα βλέφαρα χωριστά και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Δέρμα(επαφή):** Πλύνετε σχολαστικά με νερό και εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Κατάποση(μεγάλη ποσότητα):** Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Πιείτε άφθονο γάλα ή νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Εισπνοή:** Δεν αναμένονται συμπτώματα

	1	2	3	4	5	6	7	8
upper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lower	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name:	<input type="text"/>							
Date:	<input type="text"/>					ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM		



YOUR SMILE. OUR VISION.

SDI Limited  
3-15 Brunsdon Street,  
Bayswater, Victoria 3153 Australia

**AUSTRALIA** 1 800 337 003

**AUSTRIA** 00800 022 55 734

**BRAZIL** 0800 770 1735

**FRANCE** 00800 022 55 734

**GERMANY** 0800 100 5759

**ITALY** 00800 0225 5734

**SPAIN** 00800 022 55 734

**UNITED KINGDOM** 00800 022 55 734

**USA & CANADA** 1 800 228 5166

Connect with us! Share your Pola Light moments!  
We look forward to hearing from you.



INSTAGRAM  
@pola\_smile



FACEBOOK  
Pola Smile

FOR MORE INFORMATION VISIT

[polawhite.com.au](http://polawhite.com.au)

**Got questions**, please scan the QR code to see our frequently asked questions.



PAK41396 B