

P O L A



Systém pro obnovu
barvy zubní skloviny
v ordinaci Pola



Kompozitní



Zařízení



SDI

P
O
L
A

Přizpůsobte bělicí kúru potřebám vašeho pacienta



Domácí bělení

Pola Day

6% hydrogen peroxid

1x nebo 2x po 30 minutách nebo
1x po 45 minutách

Pola Night

Poznámka: 1% hydrogen peroxidu odpovídá 2,77 % karbamid peroxidu

10% karbamid peroxid

1 × 2 hodiny až celou noc

16% karbamid peroxid

1 × 2 hodiny až celou noc

Pola For Aligners

10% karbamid peroxid

1x 2 hodin během dne nebo přes noc

Pola Light

6% hydrogen peroxidu

2x 10 minut denně nebo 2x 15 minut denně




Na cesty

Pola Luminare

6% hydrogen peroxidu

2x 30 minut denně

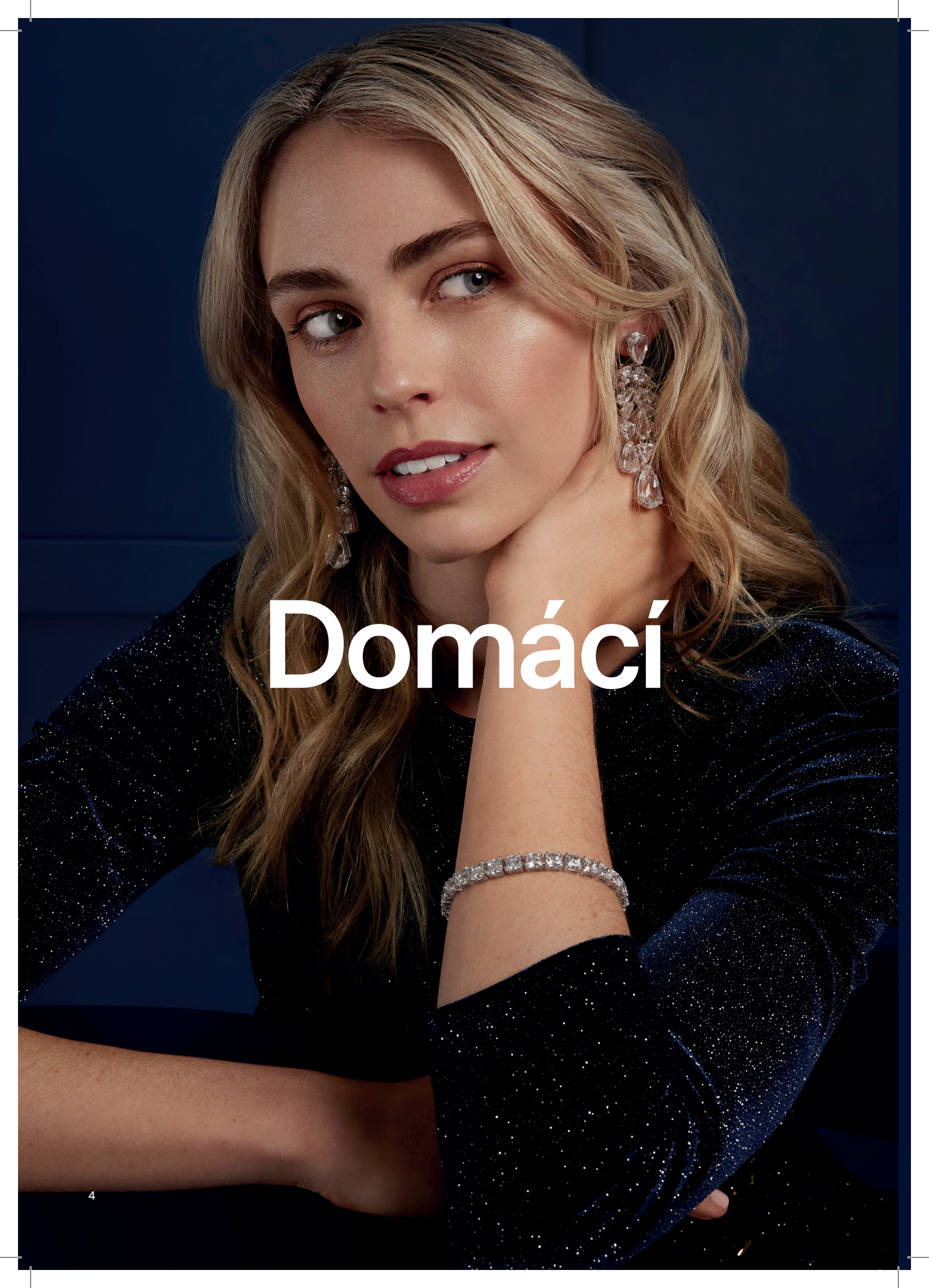A close-up portrait of a woman with long, wavy blonde hair and light blue eyes. She is wearing a dark blue, long-sleeved dress with a fine, sparkling texture. Her jewelry includes large, ornate diamond earrings with multiple facets and a matching diamond bracelet on her left wrist. She is resting her chin on her left hand, looking directly at the camera with a slight smile. The background is a solid, deep blue.

Domáci



Pola Day

Pola Night





Uvolňování fluoridů

Pola Day a Pola Night obsahují fluorid, který pomáhá posilovat zuby proti přecitlivění.

Bezpečný a pohodlný

Pola Day a Pola Night je jedinečný přípravek s vysokým obsahem vody má neutrální pH k ochraně dásní a zubů během léčby.

Efektivní bělení

Požadovaný efekt může být dosažen za pouhých 30 min nebo gel může být aplikován pohodlně přes noc během spánku. Existují různé varianty Pola Day a Pola Night, které pacienti mohou užívat doma. Vyberte produkt, který je pro vašeho pacienta nejvhodnější.

Technologie pro znecitlivění (PDT)

Pola Day a Pola Night obsahuje PDT, která pomáhá při prevenci citlivosti zubů.

Jaký je rozdíl mezi poladay a Pola Night?

Pola Day je vyrobena z hydrogen peroxidu, což vede k rychlejšímu uvolňování kyslíku a proto se aplikuje kratší dobu vyhovuje to pacientům, kteří nemohou aplikovat přes noc. Pola Day je řada gelů, které jsou speciálně navrženy pro dosažení výsledků bělení u pacientů s omezeným časovým rozvrhem.

Pola Night je vyrobena z karbamid peroxidu pro pomalé uvolňování kyslíku a doporučena pro použití v noci.

Pola Night je řada gelů, které poskytují optimální výsledky bělení pacientům, kteří mají citlivější zuby.

Obě varianty jsou k dispozici v různých koncentracích, přičemž nižší koncentrace jsou zaměřeny na citlivější zuby.

Pola For Aligners

Srovnáno a vyběleno současně

Představujeme Vám Pola bělicí gel s ideálním složením pro použití s fóliovými rovnátky.

Představujeme Vám Pola bělicí gel s ideálním složením pro použití s fóliovými rovnátky. Může být snadno použito pro domácí bělení. Skvělá uživatelská přívětivost, zajistí světlejší úsměv bez dodatečného nošení nosičů na bělení.

Pola For Aligners poskytuje stejné benefity jako oceňovaná Pola bělicí receptura

- Nejlepší komfort pro pacienta mezi bělicími sety
- Obsahuje dusičnan draselný a fluoridy pro účinnou redukci citlivosti při dlouhodobém používání
- Díky vysoké viskozitě lze gel snadno a bezpečně nanést do aligneru, ve kterém poté zůstává

Dostupné v praktickém balení se 4 stříkačkami – pro domácí bělení v průběhu dne nebo přes noc

- Pola For Aligners systém je k dispozici s Pola Night 10% gelem karbamid peroxidu, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělicí prostředek pro jakékoliv alignery. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc*.



BEZPEČNÉ PRO BĚLENÍ PŘES NOC



JEDNODUCHÉ POUŽITÍ



UVOLŇUJE FLUORIDY



POUŽÍVÁNO A DOPORUČOVÁNO ODBORNÍKY



Pola Light

Pokročilý systém domácího bělení zubů s LED světlem

Užijte si zářivější a sebevědomější úsměv za 5 dní

Pola Light je pokročilý systém bělení zubů, který spojuje oceňovaný bělicí gel Pola Day s LED náústkem pro rychlejší bělicí ošetření.

- Systém Pola Light se používá v kombinaci s Pola Day.
- Rychle účinkuje – bělejší zuby již za 5 dní.
- Vyvinuto pro bezpečné odstranění dlouhodobých skvrn.
- Plně dobíjecí náústek pro další bělicí ošetření.
- Remineralizace pro posílení zubů.
- Zvýšená hydratace pro minimalizaci citlivosti.



JIŽ OD 20 MINUT DENNĚ

Stačí pouze 2x 10 minut denně nebo 2x 15 minut denně



SNADNÉ POUŽITÍ

Přenosné, dobíjecí a pohodlné na nošení – bez kabelu připojeného k náústku. LED náústek Pola je určen pro oba zubní oblouky a má univerzální velikost.



BĚLEJŠÍ ZUBY ZA PĚT DNÍ

Ošetření trvá 5 dní.

Není třeba návštěva ordinace ani individuálně zhotovené nosiče, což šetří čas pacientovi i zubnímu lékaři.



PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ A DOPORUČENÍ

Pola je profesionální systém bělení zubů, kterému důvěřují zubní lékaři a doporučují ho pro bezpečnější, rychlejší a bělejší úsměv.

Vysoce viskózní gely s neutrálním pH zajišťují maximální komfort pacienta při domácím použití.

Jedinečná směs zklidňujících složek, kondicionérů a vysoký obsah vody pomáhá snižovat citlivost.



Naskenujte QR kód pro podrobné instrukce krok za krokem.



Pola Luminare



Obnovte zářivý úsměv s Pola Luminare! S obsahem 6 % hydrogen peroxidu je Pola Luminare náš nejsilnější bělicí přípravek s aplikací pomocí štětečku. Je navržen tak, aby se snadno vešel do kapsy nebo tašky vašeho pacienta a mohl být používán kdykoli na cestách! Skvělý nástroj pro udržení již vyběleného úsměvu.



POLA LIGHT
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

POLA LIGHT
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM



POLA RAPID

SDI

P
O
L
A

LA RAPID
TOOTH WHITENING SYSTEM

SDI

P
O
L
A


POLA DAY
ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

SDI





KLINICKÉ PŘÍPADY

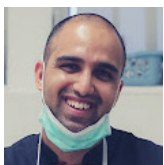

Dr. Vijay Vadher
Velká Británie

Pola Night 16%



Dr. Linda Greenwall
Velká Británie

Pola Night 10 % For Aligners



Dr. David Carralero Plaza
Španělsko

Pola Day 6%



**Dr. Mohamed
Abdulmonem Abdulsalam**
Egypt

Pola Light 6%




F A Q

Co způsobuje zabarvení zubů?

Každý má zuby jedinečné, a proto se zbarvují a znečišťují různými způsoby. Zabarvení nebo skvrny na zubech jsou obvykle způsobeny silně zbarvenými potravinami a nápoji, jako je káva, kari, nebo kouřením cigaret.

Jak funguje bělení zubů?

Když je na zub aplikován bělicí přípravek, rozkládá se na vodu a kyslíkové ionty. Kyslíkové ionty pronikají do skloviny a napadají dlouhé molekuly skvrn, čímž je účinně rozkládají na krátké a bezbarvé. Tyto krátké a bezbarvé molekuly jsou pak přirozeně odstraněny ze zubu slinami. Intenzita bělení závisí na množství dostupných iontů a na době jejich působení na zub.

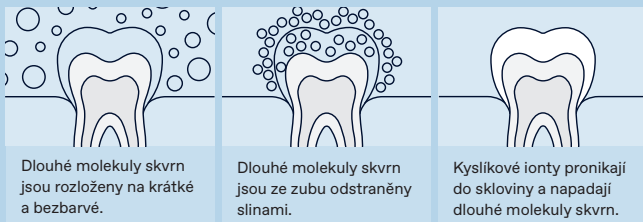

Jak dlouho bělení vydrží?

Jak dlouho trvá pacientovi bělení. Bělicí prostředky používané v ordinaci mohou ukázat výsledky již po 45 minutách.

Jak dlouho bělení vydrží?

Bělení zubů je nevratný stomatologický zákrok a délka jeho účinku závisí na individuálním pacientovi a jeho ústních návycích. Bělení lze opakovat po 6–12 měsících, a to jak při bělení v ordinaci, tak doma.

Jak bělení ovlivňuje výplně a fasety?

Bělení odstraní veškeré existující skvrny z výplní a fazet, ale nezmění jejich původní odstín.

Existují nějaké vedlejší účinky?

Prosím konzultujte návod k použití. Většina lidí nepocituje žádné vedlejší účinky. U některých se však může dočasně objevit citlivost (tupá nebo ostrá, citlivost na horké či studené podněty). Ta během několika hodin odezní a nezanechá žádné trvalé následky. Doby nošení gelu lze zkrátit nebo aplikace provádět méně často. Pacient by se měl během bělení vyhnout syceným nápojům, citrusovým plodům a kyselým nápojům, aby se minimalizovala citlivost.

Je bělení zubů bezpečné během těhotenství?

Používání bělicích přípravků během těhotenství se nedoporučuje.

Pola domácí bělení

Poznámka: Každé balení obsahuje příslušenství
CP: karbamid peroxidu; HP hydrogen peroxidu

POLA DAY

Pola Day 4 × 1,3 g stříkačka (6% HP)	7700357
Pola Day 10 × 1,3 g stříkačka (6% HP)	7700359
Pola Day 50 × 1,3 g stříkačka (6% HP)	7700361
Pola Day 50 × 3 g stříkačka (6% HP)	7700079

POLA FOR ALIGNERS

Pola For Aligners (10% CP) 4 × 3 g stříkačka	7700556
---	---------

POLA LIGHT

Pola Light (6% HP) 4 × 3g Pola Day stříkačka	7700985
---	---------

POLA NIGHT

Pola Night 4 × 1,3 g stříkačka (10% CP) (16% CP)	7700369 7700375
Pola Night 10 × 1,3 g stříkačka (10% CP) (16% CP)	7700371 7700377
Pola Night 50 × 1,3 g stříkačka (10% CP) (16% CP)	7700373 7700379

POLA KRABÍČKA NA NOSIČE

5 x krabička na nosiče	7750008
------------------------	---------

MATERIÁL NA NOSIČE

20 x folie na nosiče	7750005
----------------------	---------

PODLOŽKOVÁ PRYSKYŘICE PRO NOSIČ STŘÍKAČKY REFILL

2x 1 g Spacer stříkačka	7700012
-------------------------	---------

10X KOSMETICKÁ TAŠTIČKA

10 x pouzdro	7700994
--------------	---------

Pola na cesty

POLA LUMINATE

Pola Luminate 1 × 5,5 ml tuba	7700092
----------------------------------	---------

Marketingové materiály

Marketingové materiály, které pomáhají při podpoře bělení zubů u pacientů



Plakát Pola Day
Objednávací kód M110182



Plakát Pola Night
Objednávací kód M110183



Stojánek pola před & po
Objednávací kód M110185




Pola tašky
Objednávací kód M100332



Letáček pro pacienta
Objednávací kód M110186



Pola Light Letáček pro pacienta
Objednávací kód M110039

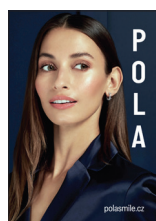

Objednávkové kartičky
Objednávací kód SDM152050SH



Pola tašky
Objednávací kód M100331



USB video v čekárni Pola
Objednávací kód M100245
Video je v anglickém jazyce.



Reklamní materiály na míru
Další propagační materiály na míru jsou k dispozici ke stažení.
Navštivte: www.sdi.com.au

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

SYSTÉM PRO
OBNOVU BARVY
ZUBNÍ SKLOVINY
V ORDINACI

Pola Office+

Pola Office+ se používá k lékařsky indikovanému restaurování zabarvených zubů, jejichž barvu nelze obnovit stávajícími domácími systémy.

Součástí je štětečkový hrot pro snadnou aplikaci



Pola Office+ se doporučuje v případech, kdy změna barvy zubů negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta související se zdravím.

Pola Office+ nabízí méně invazivní možnost ve srovnání s výplněmi, korunkami nebo fazetami a měla by být považována za první volbu.

Minimální doba v křesle

Doba ošetření je maximálně 32 minut (4 × 8 minut). Závisí na úrovni a povaze zabarvení u jednotlivých pacientů.

Není potřeba žádné světlo

Pola Office+ lze používat se2 světlem i bez něj, protože nevyžaduje aktivaci.

²External bleaching therapy with activation by heat, light or laser—A systematic review. Wolfgang Buchalla, Thomas Attin. Dental Materials 23 (2007) 586–596

Obsahuje dusičnan draselný

Není potřeba žádný další produkt proti citlivosti. Pola Office+ má zabudované jedinečné desenzibilizační vlastnosti.

Dusičnan draselný, klíčová složka snižující bolest¹, proniká do nervových zakončení a blokuje přenos citlivých nervových impulsů.


Jednoduché doručení

Nevyžaduje míchání. Systém dvojité stříkačky míchá gel při jeho přímé aplikaci na zub. Tím je zajištěna konzistentní směs čerstvě aktivovaného gelu. Čerstvě aktivovaný gel maximalizuje efekt obnovy. Jemná špička aplikátoru umožňuje snadnou aplikaci, zejména na těžko přístupných místech.

Jen jedna tenká vrstva

Stačí tenká vrstva gelu. Pomocí špičky rozetřete gel tak, aby byly pokryty všechny povrchy zubů.

ODHADOVANÁ DOBA OŠETŘENÍ[‡]

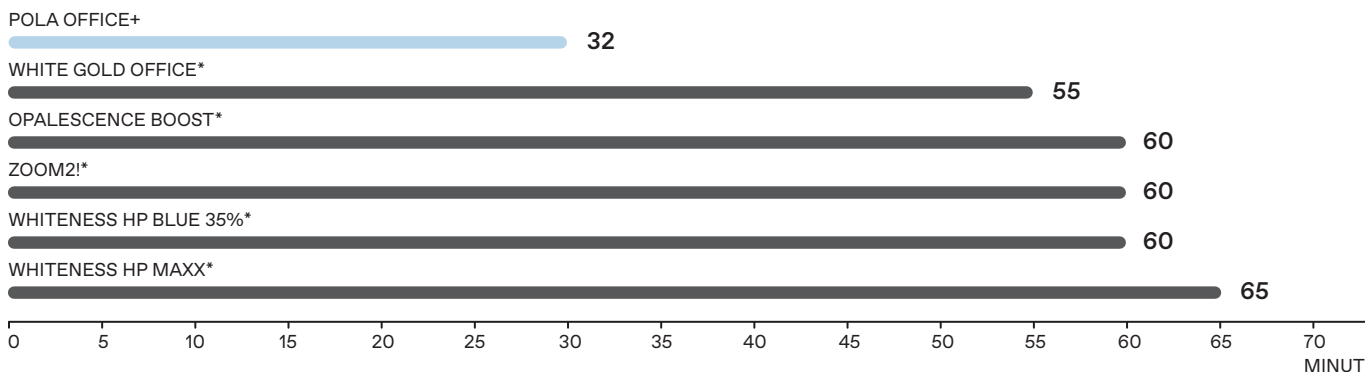

¹Wang et Al. Journal of Dentistry, Volume 43, Issue 8, August 2015, Pages 913-923

[‡] Données publiées et données de test SDI.

* Ce ne sont pas des marques déposées de SDI Limited.

KLINICKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE S POUŽITÍM PŘÍPRAVKU POLA OFFICE+ NA ZUBECH ZBARVENÝCH TETRACYKLINEM.



José Amengual Lorenzo

Docent : Univerzita ve
Valencii, Španělsko



Marta Peydro Herrero

Bývalý docent : Univerzita ve
Valencii, Španělsko



Ana Roig Vanaclocha

Docent : Univerzita ve
Valencii, Španělsko



Rubén Agustín Panadero

Docent : Univerzita ve
Valencii, Španělsko

System pro obnovu barvy zubů Pola

POLA OFFICE+

Sada stříkaček Pola Office+ 37,5 % s 1 aplikátorem
1 x 2,8 ml stříkačka Pola Office+

7700464

Sada 3 stříkaček Pola Office+ 37,5 %
3 stříkačky Pola Office+ o objemu 2,8 ml

7700461

STOJAN NA BĚLENÍ ZUBŮ POLA


1 x stojan
1 x držák pro SDI Radii Plus
1 x držák pro SDI Radii Xpert
Příslušenství

7700989

Univerzální kompozit Luna 2



Luna 2 je univerzální kompozit Luna nové generace. Luna 2 obsahuje vylepšenou směs plniv, která byla vyvinuta ve společnosti SDI s cílem zajistit lepší zpracovatelnost, velmi vysokou rentgenovou kontrastnost a spolehlivé mechanické vlastnosti. Luna 2 neobsahuje BPA, což je důležité pro pacienty, kteří dbají na své zdraví.

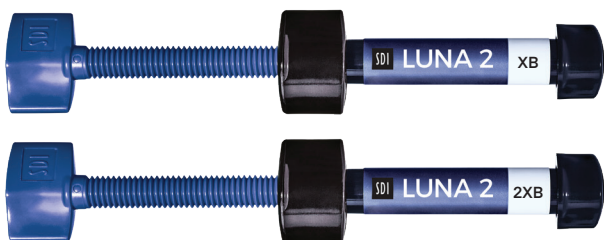

BĚLICÍ ODSÍNY

NÁHRADNÍ STŘÍKAČKY LUNA 2 4 G

Odstín: XB (ekvivalent OM2 Vita®)	8452021
Odstín: 2XB (ekvivalent OM1 Vita®)	8452022

LUNA 2 KOMPLETNÍ NÁPLNĚ (0,25 gx 20 náplní; celkem 5 g)

Odstín: XB (ekvivalent OM2 Vita®)	8452071
Odstín: 2XB (ekvivalent OM1 Vita®)	8452072

Radii Xpert Vícevltná

- Širokospektrální vícevltná špička
- Optimálně kolimovaný paprsek
- Inteligentní technologie pro snadné používání
- Ergonomicky vyvážená rukojeť
- Konzistentní intenzita světla



LED POLYMERACNÍ LAMPA RADII XPERT

Vytvřzovací lampa Radii Xpert LED	5600312
- 1 x nástavec s vícevltnými LED diodami	
- 1 x ruční nástavec Radii Xpert	
- 1 x nabíječka	
- 1 x multiregionální napájecí adaptér	
- 5 x malý světelný štít	
- 1 x velký světelný štít	
- 3 x náhradní kryt optiky	
- 100 x ochranný návalek	

Pola Stojan na bělení zubů

- Jednoduchý design
- Široký rozsah pohybů a nastavení
- Univerzální
- Vybavený kolečky
- Lehký, bezdrátový a kompaktní



STOJAN NA BĚLENÍ ZUBŮ POLA

1 x stojan	7700989
1 x držák pro SDI Radii Plus	
1 x držák pro SDI Radii Xpert	
Príslušenství	



Naskenujte QR kód a získejte pokyny krok za krokem.

SDI

Společnost SDI Limited se primárně zabývá výzkumem a vývojem, výrobou a marketingem specializovaných dentálních materiálů. Produkty SDI spojují inovaci a špičkovou kvalitu, aby poskytly ideální materiály pro stomatologii.

MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 022 55 734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166
ČESKÁ REPUBLIKA 00420 725 662 842



INSTAGRAM
[@polasmile_cz](https://www.instagram.com/polasmile_cz)



FACEBOOK
Bělení zubů Pola

Více informací na
polasmile.cz



11-2025

M110199 A