



# SET & SET PP

SELBSTSTÄTZENDER, SELBSTKLEBENDER  
KUNSTSTOFFZEMENT



5  
FARBEN

4  
Misch-  
kanülen

BPA  
FREI



# DER HOCHBEWERTETE ZEMENT, SET UND SET PP ERHÄLTICH IN SPRITZEN UND KAPSELN

SeT und SeT PP sind selbstätzende, selbsthaftende Kunststoffzemente, die zum endgültigen Zementieren von Restaurationen auf Metall-, Kunststoff-, und Keramikbasis entwickelt wurden.

SeT und SeT PP haften chemisch am Zahn sowie an allen Arten von Stumpfaufbaumaterialien. SeT ist in Kapseln erhältlich und SeT PP in der Automix Spritze.

SeT und SeT PP nutzt SDIs speziellen **ionglass™** Füllstoff, der von unseren Glasspezialisten entwickelt wurde. **ionglass™** ist ein röntgensichtbares, hoch Ionen freisetzendes, reaktives Glas, welches in SDIs gesamter Produktpalette von Dentalzementen eingesetzt wird. SeT und SeT PP setzt weitaus mehr Fluoride frei, welche die Remineralisierung der natürlichen Zähne unterstützt.



**BPA & HEMA FREI**

## DUALE AUSHÄRTUNG

Die Vorteile von Lichthärtung und Selbsthärtung werden hier kombiniert und machen SeT zum idealen Befestigungszement für alle Indikationen<sup>^</sup>.

## RÖNTGENSICHTBARKEIT

Durch die hohe Röntgenopazität von SeT und SeT PP lassen sich die Restaurationsränder bei den regelmäßigen Kontrollen sehr gut kontrollieren.

## MINIMALE BIS KEINE POSTOPERATIVEN SENSITIVITÄTEN

Mit SeT muss nicht separat geätzt und abgespült werden. So bleibt die Schmierschicht unbeschädigt um den Zahn zu schützen. Dadurch werden postoperative Sensitivitäten drastisch minimiert und mitunter sogar völlig verhindert.

<sup>^</sup> Im Falle von Veneers empfiehlt sich die Nutzung eines Adhäsivs (Go!, Stae, o.ä., gemäß den Angaben des Herstellers, auch mit eventuellem Ätzen) bevor SeT angewendet wird, so dass die Haftkraft gesteigert wird. Nicht geeignet für Veneers die eine längere Arbeitszeit erfordern.




## 5 FARBEN ERHÄLTICH UNTERSTÜTZT DIE MAXIMALE ÄSTHETIK

Transparent | A1 | A2 | OA3 | opak weiß

## MISCH- UND APPLIKATIONSSPITZEN

Für die SeT PP-Spritze gibt es eine Vielzahl von Applikationsspitzen wobei die reguläre Mischspitze überwiegend zur Applikation des Materials in die Restauration verwendet wird. Zusätzlich sind auch Applikationsspitzen mit einer breiten, einer endodontischen und intraorale Öffnungen verfügbar.

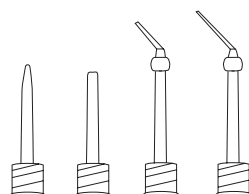


# EIGENSCHAFTEN

## HOHE FLUORIDFREISETZUNG

SeT und SeT PP ermöglichen den freien Austausch von Fluoridionen, der für die Zähne zahlreiche Vorteile bietet. Fluorid spielt mehrere wichtige Rollen in der Kariesprävention. Es ist unter anderem an der Bildung von Fluorapatit beteiligt, das weitaus widerstandsfähiger gegen Säuren ist als Hydroxylapatit. Fluorapatit ist sehr wichtig für den Langzeitschutz der Zähne.

### KUMULATIVE FLUORIDABGABE <sup>[1]</sup>

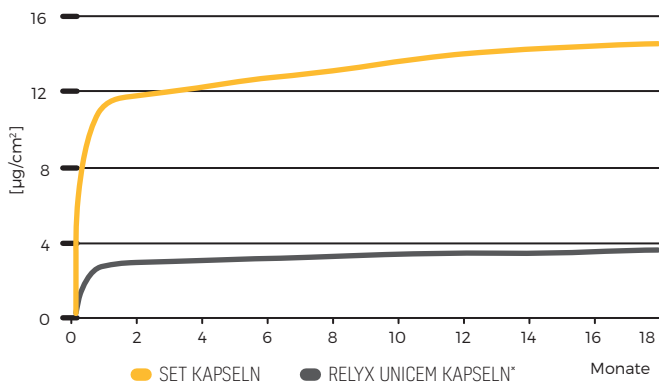

[1] Source: Al-Naimi O.T., McCabe J. F. Fluoride release of seT self-etch/self-adhesive resin cement with that of Competitor Products. [18 months report] Newcastle University, U.K. September 2005.

## VORTEILE

Enthält kein Bisphenol A oder HEMA

Hohe Haftungswerte

5 Farben als Kapsel und Automix Spritze erhältlich

Einfache Entfernung der Überschüsse

Kein Ätzen notwendig - minimiert postoperative Sensitivitäten

Härtet in 5 Minuten von selbst aus, oder in 20 Sekunden mit einer LED Härtelampe

Gute Röntgensichtbarkeit

Nahezu keine dimensionale Veränderung

Spezielle *ionglass™* Technologie - hohe Fluoridfreisetzung

Nicht wasserlöslich

## INDIKATIONEN


Zementieren von Inlays, Onlays, Brücken und Kronen auf Metall-, Kunststoff-, Vollkeramik und Keramikbasis.

Zementieren von Stiften und Schrauben


## SCHNELL UND EINFACH

SeT and SeT PP ist ein "all in one" Befestigungszement. Ätzen, bonden und füllen mit lediglich diesem einen Material. Einfach SeT auftragen und die Restauration einsetzen. SeT verteilt sich durch die ideale Fließfähigkeit und der geringen Materialsicht einfach und schnell.


### ZIRKONIA - HAFTUNGSWERTE (SELBSTHÄRTUNG) <sup>[2]</sup>

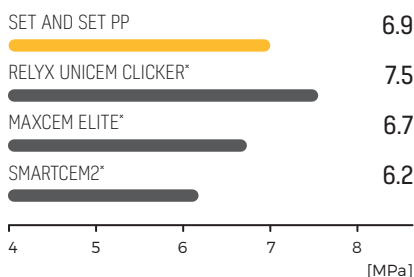

### DENTIN - HAFTUNGSWERTE (SELBSTHÄRTUNG) <sup>[2]</sup>

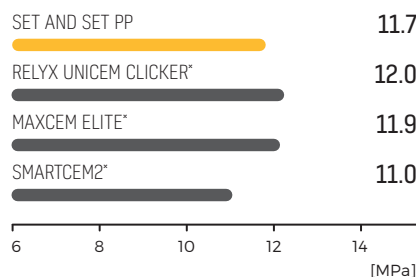

### REXILLIUM - HAFTUNGSWERTE (SELBSTHÄRTUNG) <sup>[2]</sup>

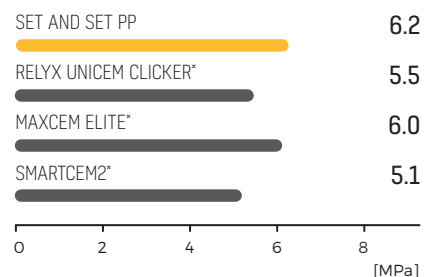

\*Kein eingetragenes Warenzeichen von SDI Limited.  
[2] SDI Test Data.

# GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SPRITZEN<sup>^</sup>

- 1** Zementreste des Provisoriums entfernen und gründlich spülen. Überschüssiges Wasser entfernen, leicht feucht belassen.
- 2** Restauration gemäß den Angaben des Herstellers vorbereiten und den Sitz prüfen.
- 3** Den Zement gleichmäßig auf alle Oberflächen von Zahn und Restauration auftragen.
- 4** Restauration einsetzen und 30 Sekunden warten. Überschuss 2 Sekunden lichterhärten oder 2 Minuten warten.
- 5** Überschüssiges Material entfernen.
- 6** Zahn isoliert belassen bis die Aushärtung abgeschlossen ist (für ca. 5 Minuten) oder für mindestens 20 Sekunden durch die lichtdurchlässige Restauration hindurch lichterhärten.

<sup>^</sup> Anweisungen für Kapseln finden Sie in der Gebrauchsanweisung

## BESTELLINFORMATION

### SPRITZEN



#### seT PP Automix Spritzen Packung

2 x seT PP 7g Automix Spritze  
28 Automix Mixaufsätze

|              |         |
|--------------|---------|
| A1           | 8805101 |
| A2           | 8805102 |
| OA3          | 8805103 |
| White Opaque | 8805104 |
| Translucent  | 8805105 |

#### seT PP Sortimentspackung Automix Spritzen

Jeweils 1x A1, A2, OA3,  
weiß opak & transparent  
seT PP 7g Automix Spritze  
70 Automix Mixaufsätze



### APPLIKATOR

Riva Applikator

5545009

### KAPSELN



#### seT Kapseln Sortimentspackung

Jeweils 10 A1, A2, OA3, weiß opak & transparent  
seT Kapseln


8810000

#### seT Kapseln

50 seT Kapseln

|             |         |
|-------------|---------|
| A1          | 8805001 |
| A2          | 8805002 |
| OA3         | 8805003 |
| weiß opak   | 8805004 |
| transparent | 8805005 |

### MISCHSPITZEN

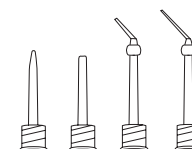

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 50 x seT PP Mischspitze - Normal                                                  | 8810003 |
| 10 x seT PP Mischspitze - Breit                                                   | 8810004 |
| 10 x seT PP Oral Mischspitze<br>[Zu verwenden mit der SET PP-Mischspitze - Breit] | 8810005 |
| 10 x seT PP Endo Mischspitze<br>[Zu verwenden mit der SET PP-Mischspitze - Breit] | 8810006 |



YOUR SMILE. OUR VISION.

06-2024

M880553 D



+DO36M8805531A

MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1800 337 003  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRIA** 00800 0225 5734  
**BRASILien** 0800 770 1735  
**FRANKREICH** 00800 0225 5734  
**DEUTSCHLAND** 0800 100 5759  
**ITALIEN** 00800 0225 5734

**NEUSEELAND** 0800 808 855  
**SPANIEN** 00800 0225 5734  
**UK** 00800 0225 5734  
**USA & KANADA** 1 800 228 5166