

SDI | ULTRAMAT S

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT



SO SIMPEL, LEDIGLICH 3 SIMPLE KNÖPFE

Es gibt drei verschiedene Mischzeiten, 6, 8 und 10 Sekunden um alle gängigen Materialien in Kapseln anzumischen. Das Gerät kann jederzeit angehalten werden, indem diese Knöpfe gedrückt werden, oder der Deckel einfach geöffnet wird.

SO EINFACH ZU REINIGEN!

Die hygienefreundliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Infektionskontrolle denn die glatte Kunststoffoberfläche kann mit herkömmlicher Desinfektionslösung gereinigt werden.

GERINGE VIBRATION UND EXTREM GERÄUSCHARM

Im Gegensatz zu anderen Mischgeräten ist der Ultramat S ausgesprochen geräuscharm. Durch die minimale Vibration aller äußeren Teile steht er fest an seinem Platz.

GEEIGNET FÜR ALLE ARTEN VON KAPSELN

In die biegsamen Mischgabeln passen eine Vielzahl von abgerundeten Kapseln (Amalgamkapseln) sowie Kapseln mit vorstehenden Applikationsdüsen (Glasionomerzementkapseln).



EIGENSCHAFTEN

GLEICHMÄSSIGER UND GENAUER MISCHVORGANG

Der Ultramat S bietet einen per Mikroprozessor gesteuerten Timer für genaues und gleichmäßiges Mischen.

HOCHFREQUENZLEISTUNG

Mit einer Mischfrequenz von 4550 Oszillationen pro Minute (+/- 1%), stellt der Ultramat S sicher, dass alle Materialien vollständig angemischt sind. Dabei benötigt er relativ wenig Energie..

DUALE SPANNUNG

Der Ultramat S funktioniert bei Spannungen von 100 -120V Und 220 - 240V, 50Hz und 60Hz. Er kann somit in unterschiedlichen Stromspannungsnetzen betrieben werden.

0-10

SEKUNDEN
MIKROPROZESSOR

4550

SCHWINGUNGEN/MIN

120 & 240v

VORTEILE

Gleichmäßiger und genauer Mischvorgang

Geringe Vibration und extrem geräuscharm

Einfache Anwendung - lediglich 3 Knöpfe

Geeignet für alle Arten von Kapseln

Einfache Reinigung

Easy to clean

Anzeige bei ungenügender Stromversorgung und Sicherheitsstopp

2 Jahre Garantie

Duale Spannung

TECHNISCHE DATEN

Breite	217mm	8.5"
Tiefe	173mm	6.75"
Höhe	180mm	7.12"
Spannung	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Gewicht	2.43kg	5.4lbs

ANZEIGE BEI UNGENÜGENDER STROMVERSORGUNG UND SICHERHEITSSTOPP

Sollte die Stromversorgung unter die benötigte Spannung von 100 - 120V und 220 - 240V fallen, so wird die Anzeige blau aufleuchten und das Gerät wird erst dann arbeiten, wenn eine korrekte Stromversorgung gewährleistet ist. So werden ungenügende Mischergebnisse vermieden.

SICHERHEITSSTOPP

Der Ultramat S unterbricht sofort den Mischvorgang wenn der durchsichtige Deckel geöffnet wird.


FÜR ALLE KAPSELN GEEIGNET

Im Ultramat S können alle Arten von Kapseln angemischt werden. Glasionomer und Amalgamkapseln, sowohl von SDI als auch von anderen Anbietern.

KAPSELARTEN	ANMISCHZEIT (SEKUNDEN)
Lojic+	6 ± 1
Permite Gr. 1, 2, 3 GS-80 Gr. 1, 2, 3 Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
Permite Gr. 5 / GS-80 Gr. 5	6 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus / Riva Self Cure (Regular and Fast)	10



BESTELLINFORMATION

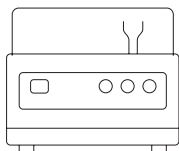

KAPSELMISCHER

Ultramat S (inkl. Anschlusskabel)	5546058
Ultramat 2 (inkl. Anschlusskabel)	5546052

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, are not registered trademarks of SDI Limited.



YOUR SMILE. OUR VISION.



ACN 008 075 581



MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILIEN 0800 770 1735
FRANKREICH 00800 0225 5734
DEUTSCHLAND 0800 100 5759
ITALIEN 00800 0225 5734

NEUSEELAND 0800 734 034
SPANIEN 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166