




AURA BULK FILL

COMPOSITE BULK FILL UNIVERSEL

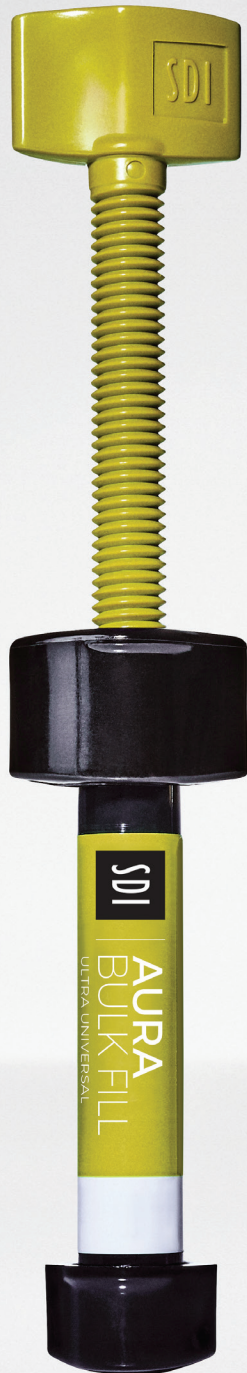

"FILL,
PACK
AND GO"



LA SIMPLICITÉ DE L'OBTURATION PAR APPLICATION EN BLOC

RESTAURATIONS POSTÉRIEURES RAPIDES ET SIMPLES EN COMPOSITE

- Fini d'aspect naturel avec seulement une teinte universelle.
- Profondeur de polymérisation élevée sans besoin d'une couche de surface.
- Mise en place facile en quelques secondes seulement.
- La consistance est compactable et non collante pour optimiser la manipulation.


5mm
APPLICATION
EN BLOC AURA
BULK FILL

"FILL, PACK AND GO"



LA MISE EN PLACE DU
MATÉRIAU D'OBTURATION EN
BLOC AVEC UNE PROFONDEUR
DE POLYMERISATION POUVANT
ATTEINDRE 5 MM

20sec
POLYMERISATION PAR
LUMIÈRE DEL

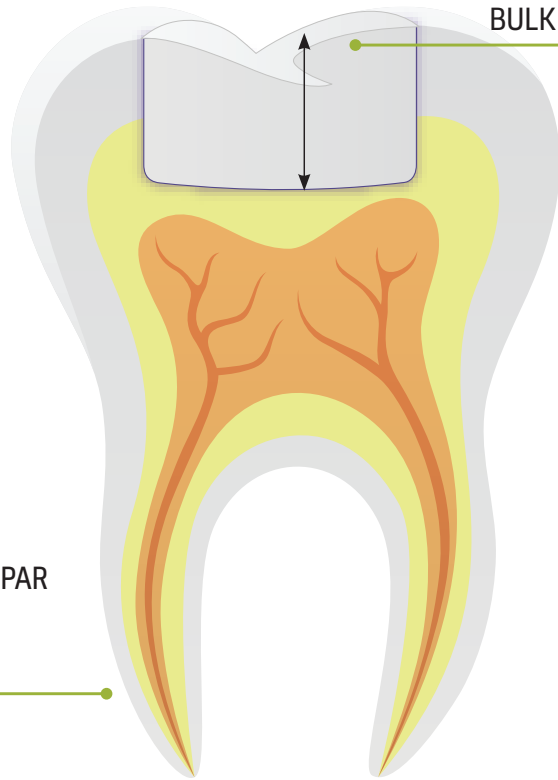

ESTHÉTIQUE RÉALISABLE ÉTUDES DE CAS

DR BOB LOWE (É.-U.)



AVANT



APRÈS

DR. GREGOR THOMAS (GERMANY)



AVANT



APRÈS

UNE TEINTE UNE OBTURATION.

FAIBLE RÉTRÉCISSEMENT VOLUMÉTRIQUE*

Aura Bulk Fill offre un stress réduit pour assurer des restaurations durables.

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA FLEXION*

Aura Bulk Fill résiste aux déformations importantes sans se fracturer.

FORTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION*

Aura Bulk Fill résiste aux forces élevées de compression dans la bouche.

2.21%

115MPa

375MPa

*Données internes de SDI

INDICATIONS

Restaurations postérieures

Reconstitution coronaire

Attelle

Technique sandwich » avec verre ionomère




PROFONDEUR DE POLYMÉRISATION

L'opacité d'Aura Bulk Fill est une fonction de la différence de l'indice de réfraction de ses deux composants, les particules et la résine.


Le processus de polymérisation modifie légèrement l'indice de réfraction de la résine pour correspondre à l'indice de réfraction des particules.

Cela réduit temporairement l'opacité, permettant une pénétration plus profonde de la lumière pour une grande profondeur de polymérisation.

En polymérisant, les indices se modifient de nouveau pour atteindre l'opacité idéale pour le fini brillant et caméléon d'Aura Bulk Fill.

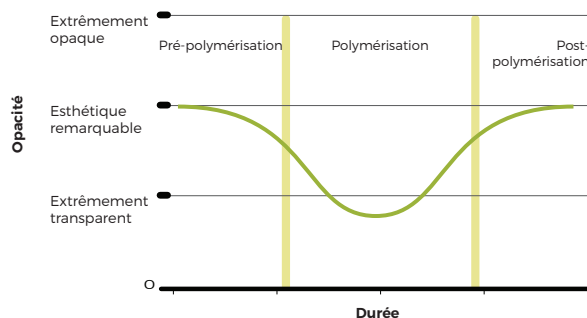


DÉTAILS DE LA COMMANDE

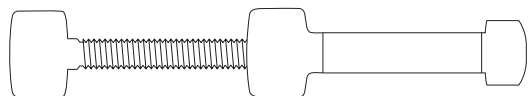

SERINGUES

Recharge de seringue - 4g

8560012

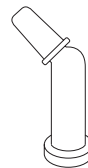

COMPULES

Recharge complète - 20x 0.25g = 5g total

8565012

» Cela fait à présent trois ans que j'utilise Aura Bulk Fill. Lors de l'extrusion, le composite est lisse et il se place et se polymérise très bien. Le fini est incroyable et mes composites précédents n'ont jamais été aussi beaux. Les caractéristiques sont idéales pour toute restauration, dents primaires ou permanentes. J'ai recommandé ce produit à de nombreux associés et j'ai l'intention de continuer à utiliser Aura Bulk Fill comme mon principal composite. «

DR LIEL GRINBAUM DMD

GAMME DE PRODUITS AURA

Aura
Aura Easy
Aura Bulk Fill



YOUR SMILE. OUR VISION.



CE
0297

04-2024

M100663 C



+036M10066317

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
par SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUTRICHE 00800 0225 5734
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
ITALIE 00800 0225 5734

NOUVELLE ZÉLANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 0225 5734
ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166