



POLISHING PASTE

PATE A POLIR



INDICATIONS

Restaurations composite

Restaurations à l'amalgame

Restaurations compomère

Finissage à la céramique et à l'or

PÂTE À POLIR

La pâte à polir SDI confère un brillant miroir aux restaurations en composite, compomère, amalgame, céramique et en or.

Grâce aux particules d'oxyde d'aluminium en cristaux primaires micronisés, la pâte à polir SDI laisse un état de surface lisse et brillant.

- Les particules fines de la pâte à polir améliorent le lustre pour des résultats naturels
- Améliore le rendu esthétique de toutes les restaurations en composite ou en compomère
- Rend la surface lisse et brillante
- Élimine les débris éventuels des instruments de polissage au caoutchouc
- Le polissage améliore la résistance du composite à l'usure et sa longévité
- La pâte à polir SDI laisse un goût agréable
- Idéal pour les séances de soins et d'hygiène en prophylaxie et le repolissage des restaurations en composite
- Idéal pour l'utilisation du fil dentaire en usage interproximal
- Facile à appliquer pour des résultats de longues durées
- Efficace et rapide, minimise ainsi le temps au fauteuil
- Se rince sans laisser de résidu

CONDITIONNEMENTS

Seringue de pâte à polir

Seringue de 4 g de pâte à polir

8100150

INSTRUCTIONS

1 Mordancer la surface de la dent à l'acide phosphorique 37 % Super Etch pendant 20 secondes

2 Rincer soigneusement

3 Chasser l'excédent d'eau, mais garder humide

4 Appliquer l'adhésif Zipbond universel jusqu'à saturation de toutes les surfaces internes, ou un autre adhésif selon les instructions du fabricant



5 Souffler doucement de l'air sec sans huile pendant 2 secondes afin d'évaporer le solvant. Laisser la surface brillante

6 Photopolymériser pendant 20 secondes


7 Placer Luna Composite universel, ou Wave, composite fluide libérateur de fluor, pour les restaurations antérieures ou postérieures



8 Polymériser pendant 20 secondes par couches de 2mm

9 Au besoin, utiliser des instruments de polissage pour tailler et façonner la surface de la restauration

10 Appliquer la pâte de polissage SDI à une cupule ou disque en caoutchouc. À l'aide de la cupule ou du disque en caoutchouc, étaler une fine couche de pâte sur la restauration

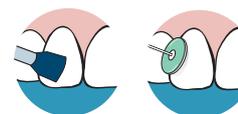

11 Ajouter un peu d'eau à la dent et à la cupule ou au disque Polir pendant 30 secondes à petite vitesse et en exerçant une légère pression. Il est possible d'utiliser la pâte à polir SDI dans l'espace interproximal avec du fil dentaire

12 Rincer et sécher



YOUR SMILE. OUR VISION.

CE
0297

11-2021

M810506 B



+D036M81050611

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
Par SDI Limited
3-15 Brunson Street,
Bayswater, Victoria 3153
www.sdi.com.au

AUSTRALIE 1 800 337 003
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
ITALIE 800 780625

NOUVELLE ZÉLANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 022 55 734
ROYAUME-UNI 00800 022 55 734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166