



SET & SET PP

RÉSINE DE SCELLEMENT AUTO-ADHÉSIVE
AUTO-MORDANÇANT



5

TEINTES

4

EMBOUS

SANS

BISPHENOL A



LA RESINE DE SCELLEMENT EST DISPONIBLE EN 2 VERSIONS : SET PP EN SERINGUE AUTOMELANGEUSE OU SET EN CAPSULES

seT PP est une résine de scellement auto adhésive, auto-mordançante conçue pour le scellement définitif des prothèses en métal, en composite et en céramique. seT se lie chimiquement à la structure des dents et à tous types de matériau de base et est disponible en gélules et en pâte adhésive/ système de pâte à seringue d'automélange (seT PP).

SeT et seT PP utilise le procédé breveté des verres ionomères *ionglass™* seT PP utilise le procédé breveté des verres ionomères. *ionglass™* est un, verre réactif radio-opaque, à libération d'ions fluor, utilisé dans la gamme de ciments dentaires de SDI. SeT PP libère une dose considérablement plus élevée de fluor afin d'aider à la reminéralisation de la dentition naturelle.



SANS BISPHENOL A, NI HEMA

POLYMÉRATION DUALE

Conçu pour associer les avantages de la photopolymérisation et de l'autopolymérisation, seT est le ciment de scellement idéal pour la plupart de vos besoins en scellement^.

RADIO-OPACITÉ

SeT est radio-opaque donc parfait pour les rappels de contrôle régulier des zones marginales afin d'en déterminer l'intégrité.

ABSENCE DE SENSIBILITE POST OPERATOIRE

SeT et SeT PP ne nécessite pas de mordançage et de nettoyage séparés. La couche hybride supérieure reste intacte pour protéger la dent. Ceci réduit considérablement, voire supprime, la sensibilité post-opératoire.

^ Dans le cas de facettes et de coiffes (in-ceram), utilisez un adhésif (Go!, Stae, etc. selon les instructions du fabricant, y compris une procédure de mordançage) avant le seT pour améliorer la force de rétention. Ne convient pas aux facettes et coiffes nécessitant un temps de travail prolongé.




5 TEINTES
POUR PLUS D'ESTHÉTIQUE

Translucide	A1	A2	OA3	Opaque Blanc
-------------	----	----	-----	--------------

LA SERINGUE SET PP DISPOSE DE 4 EMBOUTS MÉLANGEUR


L'embout mélangeur standard est surtout utilisé pour appliquer dans les couronnes et les bridges. En plus de l'embout large, un embout endontique et un embout intraoral sont aussi disponibles

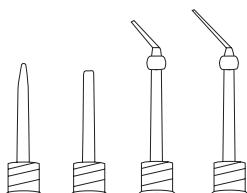

HAUTE TENEUR EN FLUOR

La libération en continu du fluor de seT PP bénéficie à la dent. Le fluor assure plusieurs rôles significatifs dans toute action anti-caries. Il s'agit de la formation de fluorapatite, qui est plus résistante aux attaques acides que l'hydroxyapatite. La fluorapatite est plus dure que les autres minéraux dentaires. Elle procure une protection contre les caries dentaires.

LIBERATION DE FLUOR PAR ACCUMULATION (MG/CM²) [1]

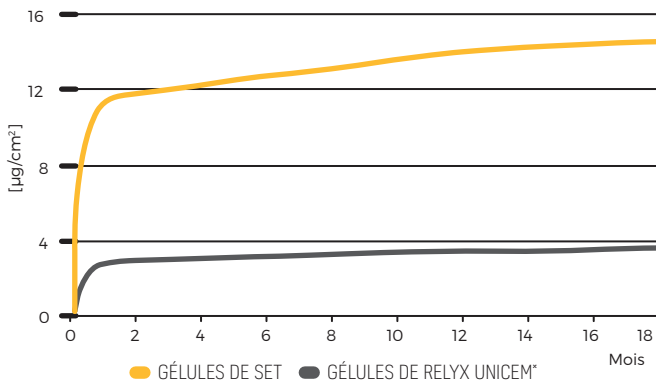

[1] Source: Al-Naimi O.T., McCabe J. F. Fluoride release of seT self-etch/self-adhesive resin cement with that of Competitor Products. (18 months report) Newcastle University, U.K. September 2005.

AVANTAGES

Pas de bisphénol A ni d'HEMA

Force de liaison élevée

5 teintes en capsules et seringue à mélange automatique

Facile à nettoyer

Pas de mordantage - minimise la publication sensibilité post opératoire

Auto-Polymérisé en 5 minutes ou 20 secondes avec une lampe à polymériser à LED

Bonne radio-opacité

Stabilité dimensionnelle élevée

Technologie brevetée *ionglass™*
- libération élevée de fluorure

Bonne résistance à l'eau

INDICATIONS

Scellement de prothèses métalliques, composites, céramiques, d'obturation prothétiques indirectes (inlays et onlays^)

Scellement de tenons et de vis



[seT capsules]



[seT PP syringes]




[seT PP syringes]


RAPIDE ET FACILE

SeT et SeT PP sont des ciments de scellement tout en un. Ils assurent un mordantage, une liaison et un scellement en un seul geste. Il vous suffit d'appliquer SeT et de mettre en place la prothèse. SeT ne nécessite qu'une faible épaisseur du joint de scellement et présente une fluidité idéale à la mise en place de prothèses scellées.


ZIRCONIA SOLIDITÉ DE LA LIAISON MÉCANIQUE (AUTOPOLYMERISATION) [2]

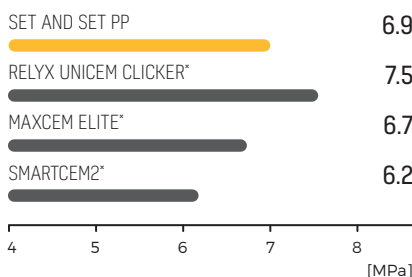

DENTINE SOLIDITÉ DE LA LIAISON MÉCANIQUE (AUTOPOLYMERISATION) [2]

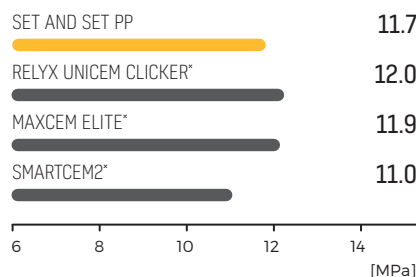



REXILLIUM SOLIDITE DE LA LIAISON MÉCANIQUE (AUTOPOLYMERISATION) [2]

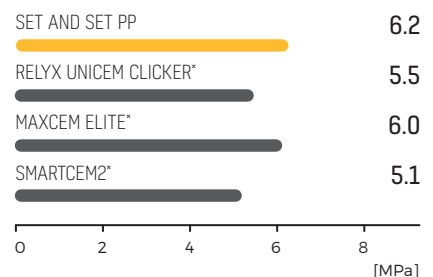



*Ne sont pas des marques déposées de SDI limited.
[2] Données de test de SDI.

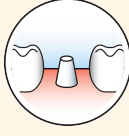
MODE D'EMPLOI[^]


- 

1 Éliminer tout résidu de ciment provisoire puis rincer soigneusement. Éliminer l'excès d'eau, préserver une certaine humidité.
- 

2 Préparer la prothèse conformément aux instructions du fabricant et vérifier son ajustage.
- 

3 Appliquer le ciment de manière uniforme sur toutes les surfaces de liaison de la prothèse et de la dent.
- 

4 Mettre en place la prothèse et laisser fixer pendant 30 secondes. Photopolymériser pendant 2 secondes.
- 

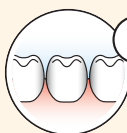5 Nettoyer l'excès.
- 

6 Maintenir l'isolation jusqu'à ce que la prise soit vérifiée (approximativement 5 minutes) ou photopolymériser à travers la prothèse pendant au moins 20 secondes.

[^] Pour l'utilisation des capsules, se référer au mode d'emploi spécifique

GAMME DISPONIBLE



SERINGUES

Coffret de 2 seringues de seT PP


2 seringues de 7 g
28 embouts de mélange

A1	8805101
A2	8805102
OA3	8805103
Opaque Blanc	8805104
Translucide	8805105

Kit assorti de seringues de seT PP

1 teinte de chaque A1, A2, OA3, Opaque blanc et translucide
5 seringues de 7 g
70 embouts de mélange

8810002

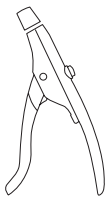

APPLICATOR

Riva Applicator

5545009



CAPSULES

Coffret assortiment de 50 capsules


10 capsules de chaque teintes A1, A2, OA3, Opaque
Blanc et translucide

8810000

seT Capsules

50 seT Capsules

A1	8805001
A2	8805002
OA3	8805003
Opaque Blanc	8805004
Translucide	8805005

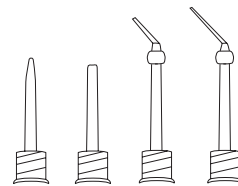

EMBOUTS

50 x seT PP Mixing Tips - Normal

8810003

10 x seT PP Mixing Tips - Large

8810004

10 x seT PP Oral Tips

(à utiliser en conjonction avec les embouts mélangeur seT PP - Large)

8810005

10 x seT PP Endo Tips

(à utiliser en conjonction avec les embouts mélangeur seT PP - large)

8810006

SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

06-2024

M880556 F



+D036M8805561D

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
par SDI Limited,
Bayswater, Victoria 3153
Australie 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUTRICHE 00800 0225 5734
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
ITALIE 00800 0225 5734

NOUVELLE-ZÉLANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 0225 5734
ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166