

P O L A



System odtwarzania
odcienia zębów w
gabinecie Pola



Kompozyt



Wyposażenie



SDI

P
O
L
A

Porozmawiaj ze swoim pacjentem o programie wybielania, który będzie dla niego najlepszy.



Wybielanie w domu

Pola Day

nadtlenek wodoru 6%

nadtlenek wodoru 1 lub 2 × 30 min/dziennie LUB 1 × 45 min/dziennie

Pola Night

Uwaga: 1% nadtlenku wodoru równa się 2.77% nadtlenku karbamidu

nadtlenek karbamidu 10%

nadtlenek karbamidu minimum 90 minut (lub przez całą noc)

nadtlenek karbamidu 16%

nadtlenek karbamidu minimum 2 godziny (lub przez całą noc)



Pola for Aligners

nadtlenek karbamidu 10%

1 × 2 godziny w dzień lub w nocy

Pola Light

nadtlenek wodoru 6%

Dwa 10 lub 15 minutowe zabiegi dziennie




Żel wybielający w sztyfcie

Pola Luminare

nadtlenek wodoru 6%

3 × 30 min/dziennie

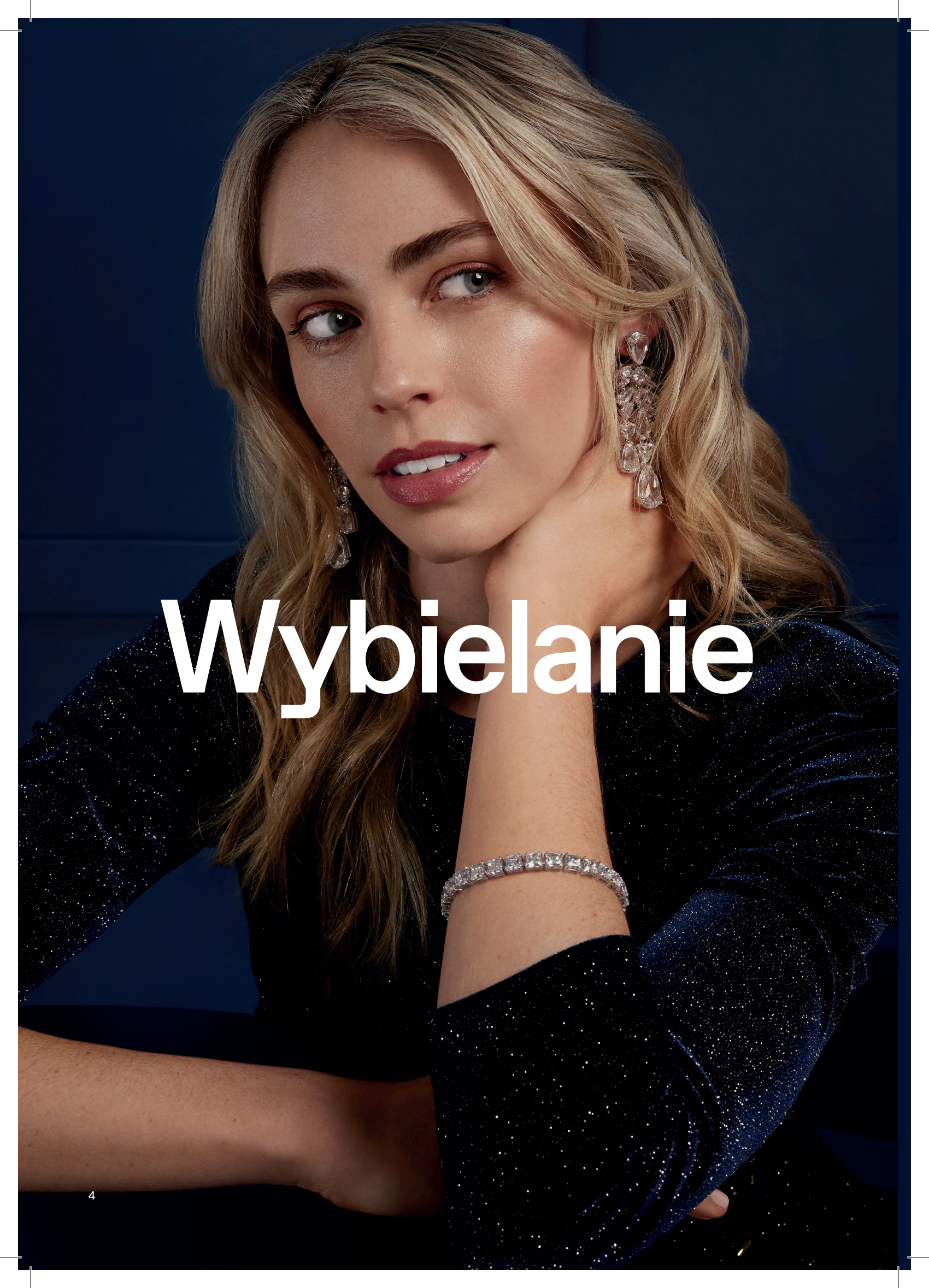A close-up portrait of a woman with long, wavy blonde hair and light blue eyes. She is wearing a dark blue, long-sleeved dress with a fine, sparkling texture. Her jewelry includes large, ornate diamond earrings and a matching diamond bracelet on her left wrist. She is resting her chin on her left hand, looking directly at the camera with a slight smile. The background is a solid dark blue.

Wybielanie

A woman with long brown hair, wearing a dark blue blazer, is looking slightly upwards and to the right. The blazer has a deep V-neckline and a single button visible. The background is dark and out of focus.

w domu

Pola Day

Pola Night





Zgodnie z prawem

Pola Day 6% oraz Pola Night 10% i 16% spełniają wymogi przepisów Komisji Europejskiej zmieniających Dyrektywę 76/768/UE dotyczącą produktów kosmetycznych.

Naturalne ukojenie i ochrona zębów

Specjalne składniki minimalizują tworzenie się kamienia nazębnego i wspomagają remineralizację zębów, a ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej jest zminimalizowane.

Wysoka zawartość wody

Wysoka zawartość wody w żelu przeciwdziała odwodnieniu szkliwa i obniża nadwrażliwość pozabiegową.

Wysoka masa cząsteczkowa zagęszczacza

Przeciwdziała uczuciu klejenia i wysychaniu żelu, a dodatkowo redukuje nadwrażliwość zębów.

Lepkość

Dzięki wysokiej lepkości żelu, jego aplikacja do nakładek jest łatwa i bezpieczna, a żel pozostaje w miejscu przez cały czas trwania zabiegu.

Smak

Przyjemny miętowy smak żelu daje długotrwałe uczucie świeżości.

Uwalnianie fluoru

Zawarty w preparatach Pola Day i Pola Night fluor remineralizuje powierzchnię szkliwa i redukuje nadwrażliwość pozabiegową.

Zawartość środków łagodzących

Żele Pola Day i Pola Night zawierają środki znoszące nadwrażliwość. Środki te działają na zakończenia nerwowe, znieczulając je na styku miazgi z zębina, czego rezultatem jest minimalizacja nadwrażliwości pozabiegowej i maksymalizacja komfortu pacjenta.

Neutralne pH

Dzięki neutralnemu pH produktów Pola Day i Pola Night następuje całkowite uwolnienie nadtlenu bez narażania komfortu pacjenta.

Pola For Aligners

Jednoczesne prostowanie i wybielanie zębów

Przedstawiamy żel wybielający Pola,
idealnie dopracowany w celu stosowania
w nakładkach ortodontycznych.

System Pola For Aligners można z łatwością wykorzystywać w domu, co zapewnia komfort pacjentom, którzy zyskują bielszy, jaśniejszy uśmiech bez konieczności noszenia dodatkowych nakładek.

**Pola For Aligners ma te same zalety, co nagradzany preparat
do wybielania Pola**

- Największy komfort dla pacjenta przy stosowaniu zestawu do wybielania.
- Zawiera azotan potasu i fluor w celu zmniejszenia nadwrażliwości przy długoterminowym stosowaniu.
- Dzięki wysokiej lepkości żel daje się łatwo wprowadzać do nakładek, jest stabilny i pozostaje na miejscu.

**Dostępny w wygodnych zestawach po 4 strzykawki – do
stosowania w domu, w ciągu dnia albo w nocy**

- System Pola For Aligners jest dostępny w postaci żelu Pola Night 10% nadtlenku karbamidu, starannie wybrany jako najlepszy środek wybielający, odpowiedni dla wszystkich rodzajów nakładek. Pacjent może indywidualnie dopasować sposób jego używania, stosując preparat między posiłkami przez zaledwie parę godzin w ciągu dnia, albo korzystając z wygodnej aplikacji na noc.
- W badaniach klinicznych uznaje się 10% nadtlenek karbamidu za złoty standard w wybielaniu zębów, gdyż zapewnia on optymalne efekty wybielania przy utrzymaniu maksymalnego bezpieczeństwa i zadowolenia pacjenta.*



BEZPIECZNY DO STOSOWANIA PRZEZ CAŁĄ NOC



ŁATWY W UŻYCIU



UWALNIANIE FLUORU



STOSOWANY I POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW



Pola Light

Nowy zaawansowany system wybielania z technologią led, do stosowania w domu

Ciesz się bielszym, bardziej pewnym uśmiechem już po pięciu dniach.

Pola Light to zaawansowany system wybielania zębów, łączący w sobie wielokrotnie nagradzaną formułę wybielającą Pola z ustnikiem LED, który umożliwia szybsze przeprowadzenie zabiegu wybielania.

- System Pola Light został połączony z żelem Pola Day.
- Szybkie działanie, zapewniające bielsze zęby już w przeciągu 5 dni.
- Formuła pozwalająca na usuwanie długoletnich przebarwień.
- Akumulatory pozwalające na ładowanie i ponowne wykorzystanie urządzenia przy kolejnych zabiegach.
- Remineralizacja w celu wzmocnienia zębów.
- Dodatkowe nawilżenie aby zapobiegać nadwrażliwości.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.



JUŻ OD 20 MINUT DZIENNIE

2 aplikacje po 10 lub 15 minut dziennie.



PROSTA W UŻYCIU

Poręczny, wygodny w użyciu ustnik, bez kabla, do wielokrotnego ładowania. Ustnik Pola posiada uniwersalny rozmiar i jest dwustronny.



BIELSZE ZĘBY JUŻ W PIĘĆ DNI

Pięciodniowy okres wybielania.

Nie ma konieczności wizyty w gabinecie lub przygotowania indywidualnych nakładek, co pozwala zaoszczędzić czas zarówno pacjentowi jak i lekarzowi.



REKOMENDOWANY PROFESJONALNY SYSTEM WYBIELANIA

Pola to powszechnie znany i rekomendowany profesjonalny system wybielania, któremu ufają i który polecają dentyści swoim pacjentom w celu szybszego uzyskania zdrowego i bielszego uśmiechu.

Żele wybielające o dużej lepkości i neutralnym pH zapewniają pacjentowi najwyższy komfort dostępny w domowych zestawach wybielania.

Unikalna mieszanka czynników łagodzących, odżywek oraz duża zawartość wody pomagają ograniczyć nadwrażliwość.



Pola Luminare



Teraz silniejszy niż kiedykolwiek 6% stężenie nadtlenu wodoru w Pola Luminare zapewnia szybkie rozpoczęcie procesu wybielania dając widoczne efekty w krótkim czasie. Odświeżenie i utrzymanie jasnego uśmiechu. Pola Luminare jest idealnym preparatem do odświeżenia procedury rozjaśniania u pacjentów, którzy już wybielali swoje zęby tak aby podtrzymać efekt białych zębów. Dodatek fluoru remineralizuje szkliwo i pomaga w zmniejszeniu nadwrażliwości pozabiegowej.



POLA LIGHT
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

POLA LIGHT
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM



POLA RAPID

SDI

P
O
L
A

LA RAPID
TOOTH WHITENING SYSTEM

SDI

P
O
L
A

POLA DAY
ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

SDI





PRZYPADKI KLINICZNE



Dr Vijay Vadher
UK

Pola Night 16%




Dr Linda Greenwall
UK

Pola Night 10% for Aligners



Dr. David Carralero Plaza
Spain

Pola Day 6%

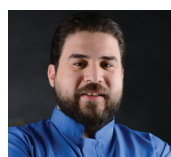

**Dr. Mohamed
Abdulmonem Abdulsalam**
Egypt

Pola Light 6%




F A Q

Co powoduje przebarwienia zębów?

Każdy ząb jest inny i wyjątkowy, dlatego przebarwia się w różny sposób. Plamy na zębach zazwyczaj powstają od kolorowego pożywienia jak kawa, czarna herbata, herbata ziołowa, zielona, czerwone wino, pikantne potrawy takie jak curry czy kurkuma oraz od palenia papierosów. Przebarwienia zębów mogą być również spowodowane efektami starzenia, przebytymi urazami, tetracyklinami, fluorozą itp.

Na czym polega wybielanie?

Żel wybielający założony na ząb, rozpada się na jony wody i tlenu. Jony tlenu wnikają do szkliwa i zębiny i atakują cząsteczki plam, aby skutecznie je rozbić i odbarwić. Te bezbarwne cząsteczki są następnie naturalnie usuwane z zęba przez ślinę. Efekty wybielania są związane z liczbą uwolnionych jonów i czasem trzymywania na zębach.

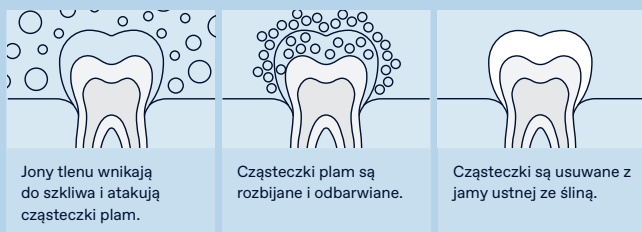

Jak długo trwa wybielanie?

W przypadku wybielania w gabinecie, efekty są już po 30 minutach. Jeśli pacjent wybiela zęby w domu, może to potrwać około 5-14 dni, jednak dłuższy czas wybielania może być wymagany przy tetracyklinach. U pacjentów z fluorozą może to potrwać 2-6 miesięcy.

Jak długo utrzymują się efekty wybielania?

Efekty wybielania zależą od indywidualnych skłonności pacjenta. Wybielanie powinno się powtarzać co 1-3 lata zarówno w gabinecie jak i w domu.

Bez powtarzania zabiegu, zęby pacjentów zaczną się ponownie przebarwiać, jednak nigdy już nie powrócą do swoich oryginalnych odcieni.

Co jeśli pacjent ma odbudowy lub licówki? Czy one też zmieniają kolor?

Wybielanie usunie istniejące plamy, ale nie zmieni oryginalnego koloru.

Czy są jakieś skutki uboczne?

U większość pacjentów, którzy postępują zgodnie z instrukcją, nie występują żadne skutki uboczne. Niemniej jednak, niektórzy pacjenci doświadczają tymczasowej nadwrażliwości pozabiegowej (w szczególności na ciepło lub zimno), która mija po kilku godzinach od zakończenia zabiegu i nie pozostawia żadnych śladów. Czas aplikacji może zostać skrócony, żel może być nakładany rzadziej lub należy zastosować środek znoszący nadwrażliwość. Pacjent powinien powstrzymać się od spożywania napojów gazowanych, cytrusów itp., aby uniknąć nadwrażliwości.

Czy kobiety w ciąży mogą wybielać zęby?

Nie zaleca się wybielania zębów kobietom w ciąży i karmiącym.

Pola w domu

UWAGA: każde opakowanie zawiera akcesoria
CP: nadtleneek karbamidu HP: nadtleneek wodoru

POLA DAY

Pola Day Mini Kit 4 × 1.3g strzykawka (6% HP)	7700357
Pola Day 10 × 1.3g Zestaw ekonomiczny strzykawka (6% HP)	7700393

POLA FOR ALIGNERS

Pola For Aligners (10% CP) 4 × 3g strzykawka	7700556
---	---------

POLA LIGHT

Pola Light (6% HP) 4 × 3g Pola Day strzykawka	7700985
--	---------

POLA LIGHT DISPLAY STAND

1 x Stand	7700979
-----------	---------

POLA NIGHT

Pola Night Mini Kit 4 × 1.3g strzykawka (10% CP) (16% CP)	7700369 7700375
Pola Night 10 × 1.3g Zestaw ekonomiczny strzykawka (10% CP) (16% CP)	7700394 7700395
Pola Night Zestaw: 45 × 1.3g strzykawka (16% CP)	7700398
Pola Night 36 × 3g opakowanie zbiorcze (16% CP)	7700089

KOSMETYCZKI POLA

10 sztuk	7700999
----------	---------

PUDEŁECZKA NA NAKŁADKI

Opakowanie: 5 pudełeczek	7750008
--------------------------	---------

PŁYTKI DO NAKŁADEK

20 sztuk (uzupełnienie)	7750005
-------------------------	---------

ŻYWICA BLOKUJĄCA

2 × 1g strzykawka z żywicą blokującą	7700012
--------------------------------------	---------

Pola żel wybielający w sztyfcie

POLA LUMINATE

Pola Luminate 1 × 5.5mL	7700092
----------------------------	---------

Materiały marketingowe

Materiały marketingowe wspierające promowanie wybielania zębów



Plakat Pola Day
Kod zamówienia M110096




Plakat Pola Night
Kod zamówienia M110097



Broszura stołowa Pola Przed i Po
Kod zamówienia M110094



Torba papierowa POLA
Kod zamówienia M100332

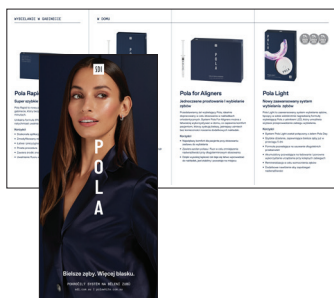

Pola ulotki dla pacjentów
Kod zamówienia M110103



Pola Light dla pacjentów
Kod zamówienia M110100



Torba papierowa POLA
Kod zamówienia M100331



POLA prezentacja na USB do poczekalni
Kod zamówienia M100245



Dostosowane materiały marketingowe
Materiały marketingowe na indywidualne potrzeby gabinetu do pobrania na www.sdi.com.au

WYROBY MEDYCZNE

SYSTEM ODTWARZANIA
ODCIENIA ZĘBÓW
W GABINECIE

Pola Office+

Produkt Pola Office+ służy do medycznie wskazanego odtwarzania odcienia przebarwionych zębów, które jest niemożliwe do przeprowadzenia przy użyciu dostępnych systemów do stosowania w warunkach domowych.

Zawiera ułatwiającą aplikację końcówkę pędzelkową



Produkt Pola Office+ jest zalecany, gdy przebarwienie zębów negatywnie wpływa na jakość życia pacjenta pod względem zdrowotnym.

W porównaniu z wypełnieniami, koronami lub licówkami Pola Office+ stanowi mniej inwazyjne rozwiązanie i należy traktować ją jako pierwszy wybór.

Minimalny czas interwencji

Czas trwania zabiegu wynosi maksymalnie 32 minuty (4 × 8 minut). Zależy od stopnia i charakteru przebarwień u poszczególnych pacjentów.

Bez aktywacji światłem

Preparat Pola Office+ nie wymaga aktywacji światłem.

[†]External bleaching therapy with activation by heat, light or laser—A systematic review. Wolfgang Buchalla, Thomas Attin. Dental Materials 23 (2007) 586–596

Zawiera azotan potasu

Nie jest potrzebny żaden oddzielny środek odczulający. Pola Office+ ma wyjątkowe właściwości znieczulające. Azotan potasu, kluczowy składnik¹ zmniejszający ból, przenika do zakończeń nerwowych, blokując przekazywanie impulsów odpowiedzialnych za odczuwanie bólu.


Uproszczona aplikacja

Mieszanie składników produktu nie jest wymagane. System podwójnej strzykawki powoduje mieszanie żelu w trakcie nakładania go bezpośrednio na ząb. Dzięki temu uzyskuje się spójną mieszaninę świeżo aktywowanego żelu. Świeżo aktywowany żel maksymalizuje efekt odtworzenia odcienia zęba. Cienka końcówka aplikatora umożliwia łatwą aplikację, szczególnie w ciasnych przestrzeniach.

Tylko jedna cienka warstwa

Wystarczy nałożyć cienką warstwę żelu. Rozprowadzić żel końcówką, dbając, aby pokrył wszystkie powierzchnie zębów.

SZACOWANY CZAS ZABIEGU[†]

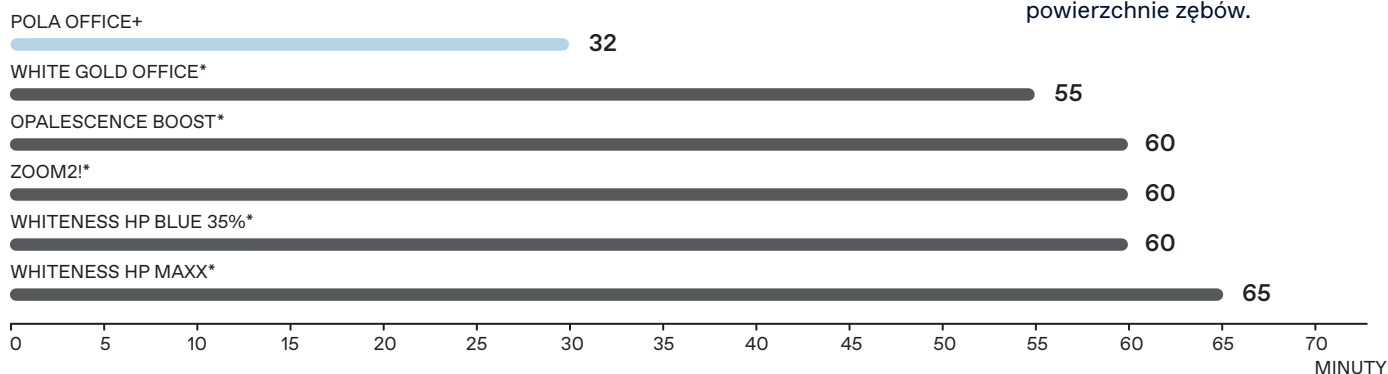

[†]Wang et Al. Journal of Dentistry, Volume 43, Issue 8, August 2015, Pages 913-923

‡ Opublikowane dane badawcze SDI.

* Nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SDI Limited.

STUDIA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH UŻYCIA PREPARATU POLA OFFICE+ NA ZĘBACH PRZEBARWIONYCH TETRACYKLINĄ.



José Amengual Lorenzo
Profesor nadzwyczajny:
Uniwersytet w Walencji,
Hiszpania



Marta Peydro Herrero
Były profesor nadzwyczajny:
Uniwersytet w Walencji,
Hiszpania



Ana Roig Vanaclocha
Profesor nadzwyczajny:
Uniwersytet w Walencji,
Hiszpania



Rubén Agustín Panadero
Profesor nadzwyczajny:
Uniwersytet w Walencji,
Hiszpania



System odtwarzania odcienia zębów Pola

POLA OFFICE+

Pola Office+ – zestaw z 1 strzykawką 37,5% 1 × 2,8 ml strzykawka Pola Office+	7700464
Pola Office+ – zestaw z 3 strzykawkami 37,5% 3 × 2,8 ml strzykawki Pola Office+	7700461


STATYW DO WYBIELANIA POLA

1 x statyw 1 x uchwyt do lampy SDI Radii Plus 1 x uchwyt do lampy SDI Radii Xpert Akcesoria	7700989
--	---------

Uniwersalny kompozyt Luna 2



Luna 2 to uniwersalny kompozyt Luna nowej generacji. Luna 2 zawiera ulepszoną mieszanę wypełniaczy, które zostały przebadane i opracowane przez firmę SDI w celu usprawnienia pracy z materiałem, oraz uzyskania bardzo wysokiej nieprzepuszczalności dla promieni rentgenowskich i niezawodnych właściwości mechanicznych. Luna 2 nie zawiera BPA, co czyni ten środek idealnym rozwiązaniem dla pacjentów dbających o zdrowie.

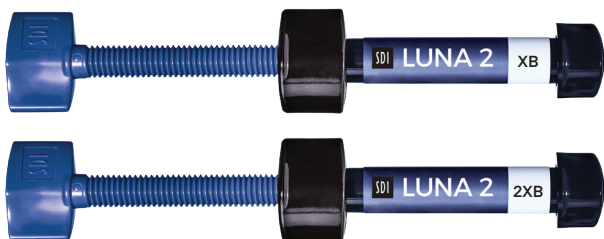

ODCIEŃ WYBIELAJĄCE

LUNA 2 STRZYKAWKI Z WKŁADAMI 4G

Odcień: XB (odpowiednik OM2 Vita®)	8452021
Odcień: 2XB (odpowiednik OM1 Vita®)	8452022

LUNA 2 KOMPLETNE WKŁADY (0,25 g x 20 wkładów; łącznie 5 g)

Odcień: XB (odpowiednik OM2 Vita®)	8452071
Odcień: 2XB (odpowiednik OM1 Vita®)	8452072

Lampa Radii Xpert Uniwersalna szerokość fali

- Końcówka wielofalowa o szerokim spektrum
- Optymalnie skolimowana wiązka
- Inteligentna technologia ułatwiająca użytkowanie
- Ergonomicznie wyważony uchwyt
- Stała intensywność światła



LAMPA UTWARDZAJĄCA LED RADII XPERT

Lampa utwardzająca Radii Xpert LED	5600312
- 1 x nakładka LED Multiwave	
- 1 x rękojeść Radii Xpert	
- 1 x ładowarka	
- 1 x zestaw wtyczek uniwersalnych	
- 5 małych osłon świetlnych	
- 1 x duża osłona świetlna	
- 3 x zapasowe dekielki na obiektyw	
- 100 x rękawów barierowych	

Statyw do wybielania Pola

- Prosta konstrukcja
- Szeroki zakres ruchów i regulacji
- Wszechstronny
- Wyposażony w kółka
- Lekki, bezprzewodowy i kompaktowy



STATYW DO WYBIELANIA POLA

1 x statyw	7700989
1 x uchwyt do SDI Radii Plus	
1 x uchwyt do SDI Radii Xpert	
Akcesoria	



Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić instrukcję krok po kroku.

SDI

Sdi limited zajmuje się przede wszystkim badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą specjalistycznych materiałów stomatologicznych. Produkty firmy sdi to połączenie innowacyjności i doskonałości, dlatego stanowią idealne rozwiązanie dla stomatologii odtwórczej.

MADE IN AUSTRALIA

by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 022 55 734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166



INSTAGRAM
[@pola_smile](https://www.instagram.com/pola_smile)



FACEBOOK
[polasmiletoothwhitening](https://www.facebook.com/polasmiletoothwhitening)

Więcej informacji na
polawhite.com.au



11-2025

M110203 A