



SET & SET PP

SAMOTRAWIĄCY, SAMOADHEZYJNY
CEMENT KOMPOZYTOWY



5
ODCIENI

4
KOŃCÓWKI

BPA
NIE ZAWIERA BPA



NAJNOWSZY CEMENT W OFERCIE SDI

SeT i SeT PP to samotrawiący, samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym mechanizmie wiązania, przeznaczony do osadzania uzupełnień wykonanych z ceramiki, metalu lub materiału kompozytowego.

SeT i SeT PP łączy się chemicznie z tkankami zęba i wszystkimi typami materiałów do odbudowy zrębu koronowego.

SeT i SeT PP jest dostępny w postaci kapsułek lub w strzykawkach z samomieszającymi końcówkami (automix SeT i SeT PP).

Opatentowana technologia **ionglass™**. W materiale SeT i SeT PP wykorzystano najnowszą technologię ionglass™ opracowaną w laboratoriach firmy SDI. **ionglass™** to nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, uwalniające jony, reaktywne szkło stanowiące wypełniacz w cementach SDI. SeT i SeT PP charakteryzuje się wysokim uwalnianiem fluoru i umożliwia remineralizację tkanek zęba.



NIE ZAWIERA BPA I HEMA

MINIMALNA NADWRAŻLIWOŚĆ POZABIEGOWA

SeT i SeT PP nie wymaga osobnego wytrawiania i dodatkowego przemywania powierzchni zęba. Dzięki temu nie zostaje usunięta warstwa mazista, która zamyka światło kanalików zębinowych, a nadwrażliwość zęba po zacementowaniu uzupełnienia jest minimalna lub nie występuje wcale.

NIE ZAWIERA BISFENOLU A I METAKRYLATU HEMA

SeT i SeT PP nie zawiera bisfenolu A (i jego pochodnych) oraz HEMA, dzięki czemu jego stosowanie jest w pełni bezpieczne dla zdrowia pacjenta.

PODWÓJNY MECHANIZM WIĄZANIA

SeT i SeT PP łącząc zalety cementów światłoutwardzalnych i chemoutwardzalnych, doskonale sprawdza się w większości przypadków klinicznych. ^




5 ODCIENI

MAKSYMALIZUJE ZACHOWANIE ESTETYKI

Translucent | A1 | A2 | OA3 | Opaque White

RÓŻNE KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE

W zależności od potrzeb można zastosować różne końcówki mieszające. Do cementowania koron i mostów przeważnie używana jest regularna końcówka. Oprócz szerokiej końcówki mieszającej dostępne są także końcówki : endodontyczna i wewnątrzrętna.

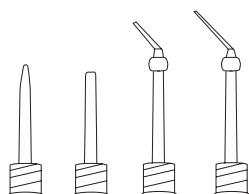

^ W przypadku licówek przed aplikacją seT należy użyć systemu wiążącego (Go!, Stae itp. zgodnie z instrukcją producenta i z uwzględnieniem procedury wytrawiania tkanek zęba) w celu zwiększenia siły wiązania. Nie nadaje się do osadzania licówek, jeśli wymagany jest wydłużony czas wiązania.


**seT PP i seT PP.

FUNKCJE

WYSOKIE UWALNIANIE FLUORU

Istotną zaletą materiału SeT i SeT PP jest możliwość uwalniania jonów fluoru, pełniącego kluczową rolę w profilaktyce próchnicy. Tworzący się fluoroapatyt charakteryzuje się mniejszą rozpuszczalnością w kwaśnym środowisku niż hydroksyapatyt i jest bardziej trwały niż inne materiały wchodzące w skład tkanek zęba. Powstanie fluoroapatytu zapewnia długotrwałą ochronę tkanek zęba przed próchnicą.

CAŁKOWITE UWALNIANIE FLUORU [G/CM²] [1]

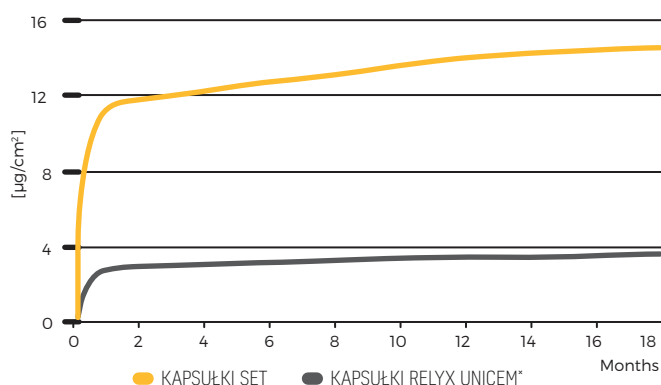

[1] Źródło: Al-Naimi O.T., McCabe J. F. F. Uwalniający fluor samotrawiący / samoadhezyjny cement kompozytowy seT z produktami konkurencji. [Raport za 18 miesięcy] Newcastle University, U.K. Wrzesień 2005 r.

ZALETY

Nie zawiera bisfenolu A i metakrylatu HEMA

Wysoka siła wiązania

5 odcieni w kapsułkach i strzykawkach

Łatwe usuwanie nadmiaru cementu

Bez wytrawiania - mniejsza nadwrażliwość pozabiegowa

Wiązanie chemiczne 5 minut lub polimeryzacja 20 sekund

Widoczny w RTG

Niemal zerowa zmiana wymiarów

Opatentowana technologia *ionglass™* - wysokie uwalnianie fluoru

Dobra odporność na wodę

WSKAZANIA

Osadzanie wkładów, nakładów, koron i mostów wykonanych z metalu, ceramiki lub materiałów kompozytowych.

Osadzanie wkładów koronowo-korzeniowych z metalu i włókna szklanego.



[seT kapsułki]



[seT PP strzykawki]




[seT PP strzykawki]


SZYBKI I ŁATWY W UŻYCIU

SeT i SeT PP jest niezwykle łatwy w użyciu. Nie trzeba stosować wytrawiacza ani systemów wiążących. Wystarczy zaaplikować jednoskładnikowy materiał seT i osadzić uzupełnienie protetyczne. Niewielka grubość warstwy cementu i doskonałe zapytywanie umożliwiają bardzo dokładne osadzenie uzupełnień protetycznych.


SIŁA WIĄZANIA Z TLENKIEM CYRKONU (WIĄZANIE CHEMICZNE) [2]

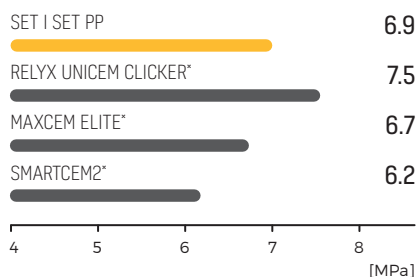

SIŁA WIĄZANIA Z ZĘBINĄ (WIĄZANIE CHEMICZNE) [2]

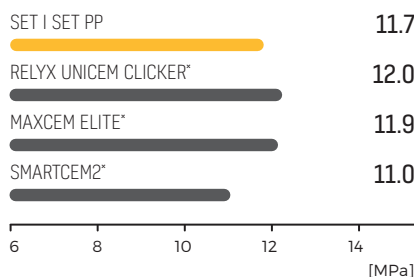



SIŁA WIĄZANIA ZE STOPEM CHROMOWO-KOBALTOWYM (WIĄZANIE CHEMICZNE) [2]

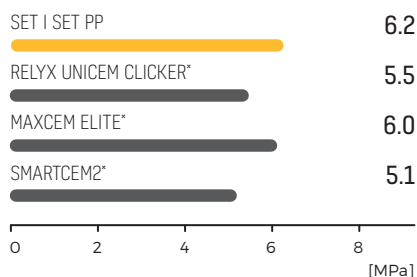



*RelyX Unicem Capsules, RelyX Unicem Clicker, Maxcem Elite i SmartCem 2 nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi SDI limited.

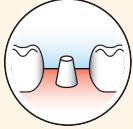
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

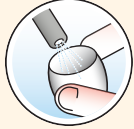
- 

Usuń pozostałości cementu tymczasowego i dokładnie wypłucz powierzchnię filaru. Usuń nadmiar wody, zachowaj wilgoć.
- 

Przygotuj zgodnie z zaleceniami uzupełnienie protetyczne, sprawdź jego przyleganie do zęba.
- 

Dokładnie rozprowadź cement po odpowiednich powierzchniach zęba i uzupełnienia protetycznego.
- 

Osadź uzupełnienie i przed rozpoczęciem polimeryzacji poczekaj 30 sekund. Polimeryzuj cement światłem przez 2 sekundy lub poczekaj 2 minuty.
- 

Usuń nadmiary cementu.
- 

Pozostaw pole zabiegowe odizolowane od śliny do momentu ostatecznego związania cementu (około 5 minut) lub w przypadku przeziernych odbudów polimeryzuj cement światłem przez przynajmniej 20 sekund.

^ Aby użyć kapsułek, należy zapoznać się z instrukcją stosowania.

KODY ZAMÓWIEŃ



STRZYKAWKI


seT PP automix strzykawki
2 strzykawki 7g seT PP automix
28 końcówek mieszających

A1	8805101
A2	8805102
OA3	8805103
White Opaque	8805104
Translucent	8805105

seT PP zestaw

A1, A2, OA3, White
Opaque, Translucent
7g strzykawki seT PP Automix z każdego koloru po jednej
70 końcówek mieszających

8810002

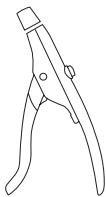

APLIKATORY

Aplikator Riva

5545009




KAPSUŁKI

seT kapsułki asortyment
po 10 sztuk w odcieniach A1, A2, OA3, White
Opaque, Translucent

8810000

seT kapsułki
50 kapsułek seT

A1	8805001
A2	8805002
OA3	8805003
White Opaque	8805004
Translucent	8805005

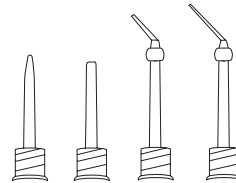

KOŃCÓWKI

50 x sztuk końcówek mieszających seT PP - regularnych	8810003
10 sztuk końcówek mieszających seT PP - szerokich	8810004
10 x sztuk końcówek wewnętrznych (Do stosowania z szeroką końcówką mieszającą seT PP)	8810005
10 x sztuk końcówek endodontycznych (Do stosowania z szeroką końcówką mieszającą seT PP)	8810006



YOUR SMILE. OUR VISION.

06-2024

M880559 E



+D036M8805591G

WYPRODUKOWANO W AUSTRALII
przez SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALII 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZYLIA 0800 770 1735
FRANCJA 00800 0225 5734
NIEMCY 0800 100 5759

WŁOCHY 00800 0225 5734
NOWA ZELANDIA 0800 808 855
HISZPANIA 00800 0225 5734
WIELKA BRYTANIA 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166