

**SDI****soothe****E  
N  
G  
L  
I  
S  
H****INSTRUCTIONS FOR USE**

Soothe is a topical desensitising gel containing 6% potassium nitrate and 0.10% fluoride ions. It is designed to relieve tooth sensitivity caused by chemical and thermal changes.

**COMPOSITION:**

Potassium Nitrate	6.0%
Fluoride ions	0.10%
Water	89.60%
Thickener	4.20%
Sodium benzoate	0.10%

**INSTRUCTIONS:**

- Rub onto the affected area for 2 minutes.
- Do not eat or drink for at least 10 minutes.
- Repeat every 2 - 3 hours until symptoms have subsided.

**PRECAUTION:**

To be used under the supervision of a dental professional. Do not use if you have any known allergies to the listed composition.

Keep product out of heat and sunlight.

Store at room temperature.

Excessive amounts should not be swallowed by children with developing teeth.

Keep out of reach of children

**CAUTION:**


Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Last revision : 08-2017

Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 0225 5734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 0225 5734  
Germany 0800 1005759  
Ireland 00800 0225 5734  
Italy 00800 0225 5734  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 0225 5734  
United Kingdom 00800 0225 5734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
www.sdi.com.au

**EC REP**

SDI Germany GmbH  
Hansestrasse 85  
51149 Cologne  
Germany  
T+49 2203 9255 0

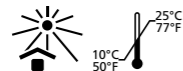

PAK41067 F

**SDI****soothe****D  
E  
U  
T  
S  
C  
H****GEBRAUCHSANLEITUNG**

Soothe ist ein desensibilisierendes Gel mit den Wirkstoffen Kaliumnitrat (6%) und Fluoridionen (0.10%). Soothe lindert Sensitivitäten die durch chemische Veränderungen an der Zahnoberfläche auftreten können.

**ZUSAMMENSETZUNG**

6,0% Kaliumnitrat
0,10% Fluoridionen
89,60% Wasser
4,20% Verdickungsstoffe
0,10% Natriumbenzoat

**GEBAUCHSANWEISUNG**

- Auf die betroffenen Zähne auftragen und 2 Minuten einwirken lassen.
- Für mindestens 10 Minuten weder Essen noch Trinken.
- Alle 2-3 Stunden wiederholen bis Beschwerden nachlassen.

**VORSICHT:**

Nur zur Anwendung unter zahnärztlicher Aufsicht. Nicht bei bekannten Allergien auf einen der Wirkstoffe verwenden. Vor Hitze und Sonnenlicht schützen. Bei Zimmertemperatur aufbewahren und verwenden. Keine zu grossen Mengen des Produkts verschlucken. Von Kindern fernhalten.

**WARNUNG:**

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.

**SDI****soothe****P  
O  
R  
T  
U  
G  
U  
Ê  
S****INSTRUÇÕES PARA USO**

Soothe é um gel dessensibilizante tópico, que contém 6% de nitrato de potássio e 0,10% de íons de flúor. Foi desenvolvido para aliviar sensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos.

**COMPOSIÇÃO:**

Nitrato de potássio	6,0%
Íons de flúor	0,10%
Água	89,60%
Espessante	4,20%
Benzoato de sódio	0,10%

**INSTRUÇÕES**

- Aplicar sobre os dentes por 2 minutos.
- Evitar comer ou beber por pelo menos 10 minutos.
- Repetir o processo a cada 2 ou 3 horas até aliviar os sintomas.

**PRECAUÇÕES:**

O produto deve ser usado com a supervisão de um profissional em odontologia.

Não usar em pessoas com histórico de alergia aos componentes da fórmula.

Mantenha o produto ao abrigo do calor e luz do sol.

Armazene em temperatura ambiente.

Evitar que o produto seja engolido por crianças com dentes em formação.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças.

**ATENÇÃO:** A lei federal restringe a venda deste produto a dentistas ou à sua ordem.

**SDI****soothe****E  
S  
P  
A  
Ñ  
O  
L****INSTRUCCIONES DE USO**

Soothe es gel desensibilizante tópico que contiene nitrato de potasio 6% e iones de flúor 0.10%. Está diseñado para aliviar sensibilidad dental causada por químicos y cambios térmicos.

**COMPOSICION:**

Nitrato de Potasio	6.0%
Iones de Flúor	0.10%
Agua	89.60%
Espezantes	4.20%
Benzoato de Sodio	0.10%

**INSTRUCCIONES:**

- Frotar sobre el área afectada por 2 minutos.
- No comer o beber a lo menos por 10 minutos después de aplicar.
- Repetir cada 2 - 3 horas hasta que los síntomas hayan descendido.

**PRECAUCION:**

Debe ser usado bajo la supervisión de un profesional dental.

No usar si es alérgico a los elementos mencionados en el listado de composición.

Mantener el producto fuera de la luz solar y calor.

Almacenar a temperatura ambiente.

Cantidades excesivas no deberían ser ingeridas por niños con dientes en desarrollo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**ADVERTENCIA:**

Leyes Federales restringen la venta de este artículo por o bajo la orden de un dentista.

**SDI****soothe****F  
R  
A  
N  
C  
A  
I  
S****MODE D'EMPLOI**

Soothe est un gel désensibilisant en topique contenant 6 % de nitrate de potassium et 0,10 % d'ions fluorure. Il sert à soulager les sensibilités des dents, causée par des variations chimiques et thermiques.

**COMPOSITION:**

Nitrate de potassium	6,0 %
Ions fluorure	0,10 %
Eau	89,60 %
Épaississant	4,20 %
Benzoate de sodium	0,10 %

**INSTRUCTIONS :**

- Frotter la zone affectée avec le gel pendant 2 minutes.
- Ne rien boire ni manger pendant au moins 10 minutes.
- Répéter toutes les 2-3 heures jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.

**PRÉCAUTION :**

À utiliser sous contrôle d'un praticien.

Ne pas utiliser si vous êtes allergique aux substances qui entrent dans la composition du gel.

Tenir le produit à l'abri de la chaleur et du soleil.

Conservé à la température ambiante.

Les enfants dont les dents se développent doivent éviter d'avaler des quantités excessives de gel.

Tenir hors de portée des enfants

**ATTENTION :**

Les lois fédérales n'autorisent ce dispositif à être vendu que par un dentiste ou sur la prescription d'un dentiste.

SDI

soothe

I  
T  
A  
L  
I  
A  
N  
O

## ISTRUZIONI PER L'USO

Soothe è un gel desensibilizzante per uso topico, contenente il 6% di nitrato di potassio e lo 0,10% di ioni fluoruro. Soothe contrasta la sensibilità dentale causata da agenti chimici e da cambiamenti termici.

## COMPOSIZIONE:

Nitrato di potassio	6,0%
Ioni fluoruro	0,10%
Acqua	89,60%
Addensanti	4,20%
Benzoato di sodio	0,10%

## ISTRUZIONI:

- Massaggiare il prodotto sulla zona interessata per 2 minuti.
- Non consumare cibo e bevande per almeno 10 minuti.
- Ripetere ogni 2-3 ore, fino alla scomparsa dei sintomi.

## AVVERTENZE:

Da utilizzare sotto il controllo del dentista.

Non utilizzare in caso di allergie accertate verso uno o più componenti.

Conservare al riparo dalla luce e dal calore.

Conservare a temperatura ambiente.

Non fare ingerire il prodotto ai bambini che stanno sviluppando la dentizione definitiva.

Tenere fuori della portata dei bambini.

## ATTENZIONE:

La legge Federale limita l'uso di questo dispositivo ai dentisti o dietro prescrizione di un dentista.

SDI

soothe

P  
O  
L  
S  
K  
I

## INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Soothe to żel znośzący nadwrażliwość zawierający 6% azotanu potasu i 0.10% jonów fluorkowych. Soothe ma za zadanie łagodzić nadwrażliwość zębiny spowodowaną bodźcami termicznymi i chemicznymi.

## SKŁAD:

Azotan potasu	6.0%
Jony fluorkowe	0.10%
Woda	89.60%
Zagęstnik	4.20%
Benzoesan sodu	0.10%

## INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

- Wcieraj żel w obszar, w którym występują dolegliwości przez 2 minuty.
- Powstrzymaj się od picia i jedzenia przez co najmniej 10 minut.
- Powtarzaj zabieg co 2-3 godziny do momentu ustąpienia dolegliwości.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Nie stosować u osób z alergią na poszczególne składniki preparatu.

Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić dzieci przed połknięciem nadmiernych ilości preparatu w trakcie rozwoju zębów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## UWAGA:

Pod rygorem prawa preparat może być sprzedawany wyłącznie na polecenie lekarza dentystry.

SDI

soothe

T  
Ü  
R  
K

## KULLANIM KILAVUZU

Soothe % 6 Potasyum Nitrat ve % 0.10 Florür lyonları içeren yüzeysel bir hassasiyet giderici jeldir. Kimyasal ve Isısal değişikliklerin neden olduğu diş hassasiyetini hafifletmek için yapılmıştır.

## BİLEŞİMİ:

Potasyum Nitrat :	% 6
Florür lyon :	% 0.10
Su :	% 89.60
Koyulaştırıcı :	% 4.2
Sodyum Benzoat:	% 0.10

## AÇIKLAMALAR:

a. Jeli hassasiyeti olan alana 2 dakika boyunca sürünüz.

b. En az 10 dakika hiç birşey yiyip içilmemelidir.(hassasiyeti ani bir şekilde keser)

c. Eğer ağrı geçmez ise ağrı geçene kadar her 2-3 saatte bir tekrarlayınız.

## ÖNLEM:

Dental profesyonel idaresi altında kullanılmalıdır.

Bileşim bölümüne listelenenlere karşı herhangi bir alerjiniz varsa kullanmayınız.

Isıdan ve Güneş Işığından uzak tutunuz.

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Çocukların gelişmekte olan dişlerinde fazla miktarda kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza ediniz.