




aura eASY

ULTRA UNIVERSAL
RESTORATIVE MATERIAL
INSTRUCTIONS FOR USE

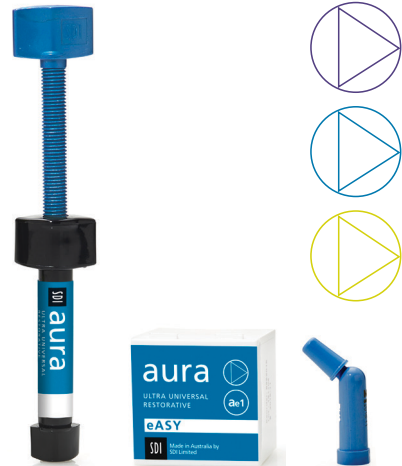

PRM1133_A



aura eASY

ULTRA UNIVERSAL
RESTORATIVE MATERIAL
INSTRUCTIONS FOR USE

E
N
G
L
I
S
H

INTRODUCTION

aura eASY is a light cured, radiopaque, high strength, universal composite designed to meet most of your aesthetic restorative needs with just four simple shades. Each **aura eASY** shade is perfectly equally spaced out in colour intensity so that you can customise shades if needed. The **aura eASY** range has a 3mm depth of cure which reduces the standard number of incremental layering when restoring deep cavities.

INDICATIONS

- Anterior restorations
- Posterior restorations
- Indirect inlays, onlay and veneers
- Core buildup
- Splinting
- Sandwich technique with glass-ionomer

CONTRA-INDICATIONS

- Pulp capping.
- Do not use in conjunction with any eugenol containing materials.
- Anyone with allergy to acrylics

SHADE SELECTION



1. Do not over dry the tooth before shade matching.
2. Use the **aura eASY** shade guide to select your shade before placement of rubber dam.
3. When the adjacent teeth are significantly different in shade, try to match the lighter shade.
4. For visual confirmation of shade selected, place small amounts of composite on a surrounding tooth surface and light cure before bonding

Approximate reference to
VITA classical
A1-D4® shades

A1/B1 ≈ ae1
A2/B2 ≈ ae2
A3/B3 ≈ ae3
A3.5/B4 ≈ ae4

Shade selection for non layering technique:

The **aura eASY** range is most suitable for non-layering requirements where high aesthetics are not necessary. To choose an **aura eASY** shade, look at the overall body of the tooth using the **aura eASY** shade tabs.

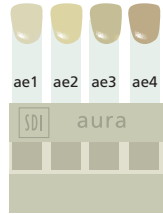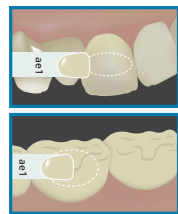

PLACEMENT PROCEDURE:

1. Isolate tooth.
2. Prepare cavity using standard technique for composite resin restorations.
- Note:** In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner.
3. Apply a dentin/enamel bonding agent such as SDI Go! as per manufacturer's instructions.
4. Place selected shade(s) of **aura eASY** composite in increments of 3mm or less.
5. Light cure each increment for at least 20 seconds (460 - 480nm wavelength, high power LED curing light).
6. Finish restoration using standard technique.

STORAGE AND HANDLING

- Store at temperatures between 10° and 25°C (50°-77°F).
- Use at room temperature between 20° and 25°C (68°- 77°F).
- Syringe system: when not in use replace the cap tightly.

PRECAUTIONS

- Avoid prolonged contact of **aura eASY** with the skin or oral tissue, as it may cause inflammation of the oral tissues or skin sensitization.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light.
- Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
- SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

FIRST AID

- **Eye (contact):** Wash thoroughly with water and seek medical attention.
- **Skin (contact):** Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
- **Ingestion:** Rinse mouth thoroughly. Drink plenty of water/milk. Seek medical attention if symptoms persist.
- **Inhalation:** No symptoms expected.



aura eASY

ULTRA UNIVERSAL
RESTORATIONS MATERIAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

D
E
U
T
S
C
H

EINLEITUNG

aura eASY ist ein lichterhärtendes, röntgensichtbares, hochfestes, universelles Kompositmaterial, das die meisten Ihrer ästhetischen Restaurationen mit nur vier einfachen Farben erfüllt. Jede **aura eASY** Farbe ist perfekt in der Farbinintensität auf die Folgefarbe abgestimmt, sodass Sie die Farben ideal wählen können. **aura eASY** ist in Schichtstärken bis zu 3mm polymerisierbar, was die Anzahl der Inkremente bei großen Füllungen stark reduziert.

INDIKATIONEN

- Restaurationen der Frontzähne
- Restaurationen der Seitenzähne
- Indirekte Inlays, Onlays & Veneers
- Stumpfaufbauten
- Splinting
- Sandwich Technik mit Glasionomer



KONTAINDIKATION

- Pulpenüberkappung
- Nicht in Verbindung mit Eugenolhaltigen Materialien verwenden
- Allergien gegen Acrylate

FARBAUSWAHL

1. Zahn vor der Farbauswahl nicht über trocknen
2. Farbe vor Legen des Kofferdams auswählen
3. Sollten die Nachbarzähne eine deutlich andere Farbe haben, wählen Sie einen helleren Farbton.
4. Zur visuellen Bestätigung des ausgewählten Farbtons legen Sie eine kleine Menge von Komposit auf den ungebondeten Nachbarzahn und polymerisieren dies.

Farbauswahl für nichtgeschichteten Füllungen:
aura eASY eignet sich hervorragend für Füllungen die nicht geschichtet werden und bei denen keine hohe Ästhetik erforderlich ist. Zur Farbauswahl vergleichen Sie den kompletten Zahn mit der **aura eASY** Farbskala.

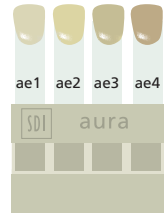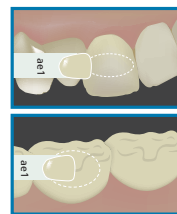

ANWENDUNG:

1. Isolieren Sie den Zahn.
2. Kavität mit gewohnter Technik für Komposit Restaurationen vorbereiten.
- Beachten:** In Fällen in denen die Pulpa geschützt werden muss, kann ein Liner aus Kalzium-Hydroxyd benutzt werden.
3. Ein Bonding für Dentin/Schmelz, wie beispielsweise Go! von SDI nach den Angaben des Herstellers auftragen.
4. Die ausgesuchte(n) Farbe(n) von **aura eASY** Komposit auftragen in einer Schichtdicke von 3mm oder weniger applizieren.
5. Jede Schicht mindestens 20 Sekunden lichterhärten (460 - 480nm Wellenlänge, LED Härtlampe)
6. Restauration wie gewohnt fertig stellen.

LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Bei Temperaturen zwischen 10° und 25° C (50° -77° F) aufbewahren.
- Bei Raumtemperaturen zwischen 20° und 25° C (68° - 77° F) verwenden.
- Spritzensystem: Bei Nichtgebrauch die Kappe wieder aufsetzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Längeren Kontakt der Haut und Schleimhaut mit Ätzmittel, Adhäsiven und Kompositen vermeiden, da Hautirritationen hervorgerufen werden könnten.
- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.
- Von Kindern fernhalten.
- Nicht verschlucken.
- Nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verwenden.
- Das Material nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Beachten: Nur über den Zahnarzt oder den zahnärztlichen Fachhandel zu beziehen.
- Sicherheitsdatenblätter unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem zuständigen Dental-Depot

ERSTE HILFE:

- **Augen (Kontakt):** Gründlich mit klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- **Haut (Kontakt):** Mit einem in Alkohol getränkten Tuch oder Schwamm abwischen. Gründlich mit klarem Wasser spülen.
- **Verschlucken:** Reichlich Wasser oder Milch trinken. Falls sich Übelkeit einstellt einen Arzt aufsuchen.
- **Einatmen:** Es werden keine Symptome erwartet.



aura eASY

MATERIAL RESTAURADOR
ULTRA UNIVERSAL
INSTRUÇÕES DE USO

P
O
R
T
U
G
U
Ê
S

INTRODUÇÃO

aura eASY é um composto universal fotopolimerizável, radiopaco, de alta resistência, desenvolvido para atender a maioria de suas necessidades restauradoras estéticas com apenas quatro cores. Cada cor da **aura eASY** foi perfeitamente equilibrada entre as intensidades de cor para que você possa, se necessário, customizar cores. O alcance de 3mm de profundidade de polimerização da **aura eASY** reduz a quantidade de camadas incrementais quando restaurando cavidades profundas.

INDICAÇÕES

- Restaurações anteriores
- Restaurações posteriores
- Restaurações indiretas inlays, onlay e facetas
- Construção de núcleo
- Ferulização
- Técnica sanduiche com ionômero de vidro



CONTRA-INDICAÇÕES

- Capejamento pulpar
- Não utilizar em conjunto com quaisquer materiais contendo eugenol.
- Qualquer pessoa com alergia a acrílicos

SELEÇÃO DE COR

1. Não seque demasiadamente o dente antes de escolher a cor correspondente
2. Use o guia de cores **aura eASY** para selecionar sua cor antes da colocação do isolamento de borracha.
3. Quando o dente adjacente tiver uma cor significativamente diferente, tente encontrar a cor mais clara correspondente.
4. Para confirmação visual da cor escolhida, coloque pequenas quantidades do composto na superfície de um dente vizinho e fotopolimerize antes de realizar adesão.

Seleção de cor para técnica sem estratificação
O alcance da **aura eASY** é mais apropriado para necessidades sem estratificação e onde uma estética elevada não é necessária. Para escolher uma cor **aura eASY**, observe o corpo geral do dente usando a escala de cores **aura eASY**.

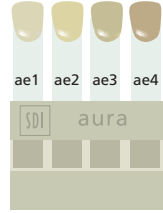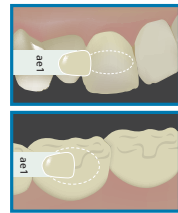

PROCEDIMENTO::

1. Isole o dente.
2. Prepare a cavidade utilizando a técnica padrão para restauração de resina composta.
- Nota:** Em casos onde é necessário a proteção da polpa, use um forramento de hidróxido de cálcio.
3. Aplique um agente de união na dentina/esmalte como o SDI GO! e usar de acordo com as instruções do fabricante.
4. Aplique a(s) cor(es) selecionada(s) do composto **aura eASY** em incrementos de até 3 mm.
5. Fotopolimerizar cada incremento durante pelo menos 20 segundos (comprimento de onda de 460 - 480 nm, fotopolimerizador LED de alta potência).
6. Finalize a restauração usando a técnica padrão.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

- Armazene em temperaturas entre 10°e 25°C (50°-77°F).
- Usar em temperatura ambiente entre 20°e 25°C (68°-77°F).
- Sistema de seringa: Quando não estiver em uso, tampar firmemente.

PRECAUÇÕES

- Evitar o contato prolongado de **aura eASY** com a pele ou tecido oral pois pode causar inflamação dos tecidos orais ou sensibilidade na pele.
- Apenas para uso profissional.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não ingerir.
- Não usar depois da data de validade.
- Não expor o material à luz direta.
- Atenção: As leis federais limitam a venda deste produto apenas para dentistas.
- SDS disponível em www.sdi.com.au ou contate seu representante regional.

PRIMEIROS-SOCORROS

- **Olhos (contato):** Lavar com água abundante e procurar assistência médica.
- **Pele (contato):** Remover utilizando um pano ou esponja embebido em álcool. Lavar com água abundante.
- **Ingestão:** Lavar a boca com água abundante. Beber bastante água/leite. Procurar um médico se os sintomas persistirem.
- **Inalação:** Não são esperados sintomas.



aura eASY

MATERIAL RESTAURATIVO
ULTRA UNIVERSAL
INSTRUCCIONES DE USO

E
S
P
A
Ñ
O
L

INTRODUCCIÓN

aura eASY es un compuesto universal de alta resistencia radiopaco curado con luz diseñado para satisfacer la mayoría de las necesidades restaurativas con tan solo cuatro sencillos tonos. Cada tono de **aura eASY** cuenta con una intensidad de color perfectamente equilibrada para permitir la personalización del tono en caso necesario. La gama de color de **aura eASY** cuenta con una profundidad de cura de 3 mm, que reduce el número estándar de capas adicionales al restaurar caries profundas.

INDICACIONES

- Restaurações anteriores
- Restaurações posteriores
- Incrustaciones indirectas, revestimientos y coronas
- Reconstrucciones
- Reestructuraciones
- Técnica sandwich con ionómero de vidrio

CONTRAINDICACIONES



- Revestimiento pulpar
- No utilice el producto junto con materiales que contengan eugenol
- Alergias a los acrílicos

SELECCIÓN DEL TONO

1. No seque el diente en exceso antes de confirmar el tono.
2. Utilice la guía de tonos de **aura eASY** para seleccionar el tono antes de aplicar el dique de goma.
3. Si los dientes contiguos presentan un tono significativamente diferente, intente imitar el tono más claro.
4. Para confirmar visualmente el tono seleccionado, aplique pequeñas cantidades del compuesto sobre la superficie de un diente contiguo y cúrelo con luz antes de fijarlo.

Selección del tono para la técnica sin capas:

La gama de color de **aura eASY** es más adecuada para aplicaciones que no requieren capas ni un acabado estético perfecto. Para elegir un tono de **aura eASY**, observe el cuerpo completo del diente utilizando las tablas de tonos de **aura eASY**.

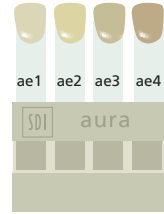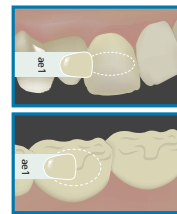

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

1. Aísle el diente.
2. Prepare la cavidad utilizando la técnica estándar para restauraciones de compuesto de resina.
- Nota:** Si se requiere protección de la pulpa, utilice hidróxido de calcio.
3. Aplique un adhesivo para dentina/esmalte como SDI Go! de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Aplique los tonos seleccionados del compuesto **aura eASY** en incrementos de hasta 3 mm.
5. Fotocure cada incremento por lo menos durante 20 segundos (longitud de onda de 460 - 480nm, lámpara LED de fotocurado de alta potencia).
6. Finalice la restauración usando una técnica estándar.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacene el producto a temperaturas entre 10 °C y 25 °C (50 °F - 77 °F).
- Utilice el producto a temperatura ambiente entre 20 °C y 25 °C (68 °F - 77 °F).
- Jeringa: al finalizar su uso, coloque el tapón de nuevo con firmeza.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado de **aura eASY** con la piel y con el tejido bucal, pues puede causar inflamación del tejido bucal y sensibilización cutánea.
- Exclusivo para uso profesional.
- Mantenga el producto alejado de los niños.
- No tome el producto de forma interna.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
- No exponga el producto a la luz directa.
- Precaución: La ley federal restringe la venta de este dispositivo exclusivamente a profesionales odontólogos.
- FDS disponible en www.sdi.com.au o contactando con su representante regional.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos (contacto):** Lavar abundantemente con agua y solicite atención médica.
- **Piel (contacto):** Retire el producto con un paño o esponja empapados en alcohol. Lave abundantemente con agua.
- **Ingestión:** Aclare la boca abundantemente. Beba gran cantidad de agua o leche. Solicite atención médica si los síntomas persisten.
- **Inhalación:** No se espera ningún síntoma.



aura eASY

MATÉRIAU DE RESTAURATION
ULTRA UNIVERSEL
MODE D'EMPLOI

F
R
A
N
Ç
A
I
S

INTRODUCTION

aura eASY est un composite universel nanohybride, photo polymérisable, radio-opaque, hautement résistant, universel conçu pour répondre à la plupart de vos besoins de restauration esthétique antéro postérieure avec seulement quatre teintes. Chaque teinte **aura eASY** est parfaitement équilibrée de manière égale en intensité de couleur de sorte que vous pouvez personnaliser les teintes si nécessaire. La gamme **aura eASY** possède une profondeur de 3mm de durcissement qui réduit le nombre standard de stratifications progressives lors de restaurations de cavités profondes.

INDICATIONS

- Restaurações antérieures
- Restaurações posteriores
- Incrustations indirectes, implants et facettes
- Reconstruction de moignon
- Atelles
- Technique sandwich avec verre ionomère

CONTRA-INDICATIONS



- CoCoiffage pulpaire.
- Ne pas utiliser avec des matériaux contenant de l'eugénol.
- Les personnes allergiques aux acryliques

CHOIX DE LA TEINTE

1. Ne pas sécher excessivement la dent avant de sélectionner la teinte du composite.
2. Utilisez le guide de teinte **aura eASY** pour choisir votre teinte avec la mise en place de la digue en caoutchouc.
3. Lorsque les dents adjacentes ont une teinte nettement différente, essayez de faire correspondre la teinte la plus claire.
4. Pour une confirmation visuelle de la teinte choisie, placez une petite quantité de composite sur la surface d'une dent voisine et photopolymérisez avant de coller.

Choix de la teinte pour la technique de non superposition :

La gamme **aura eASY** est plus adaptée pour les conditions de non stratification où des esthétiques élevées ne sont pas nécessaires. Pour choisir une teinte **aura eASY**, regardez l'ensemble de la dent à l'aide des teintiers **aura eASY**.

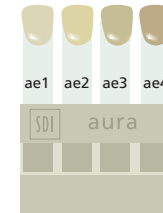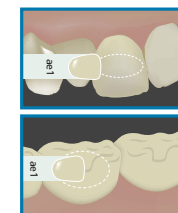

PROCEDURE DE MISE EN PLACE :

1. Isoler la dent.
2. Préparer la cavité au moyen de la technique standard pour les restaurations en résine composite.
- Remarque :** dans les cas où la protection de la pulpe est nécessaire, utiliser une protection à base d'hydroxyde de calcium.
3. Appliquer un adhésif amélo dentinaire tel que le GO de SDI en suivant les instructions du fabricant.
4. Mettre en place le composite **aura eASY** dans la/les teintes choisies par couches de 3 mm maximum.
5. Photopolymériser chaque couche pendant au moins 20 secondes (longueur d'onde 460 - 480nm, lampe à photopolymériser LED mode pleine puissance)
6. Terminer la restauration en utilisant la technique standard.

CONSERVATION ET MANIPULATION

- Conserver à des températures entre 10° et 25°C (50°-77°F).
- Utiliser à température ambiante entre 20° et 25°C (68°- 77°F).
- Système de seringue : lorsqu'elle n'est pas utilisée bien rfrmer le bouchon.

PRECAUTIONS

- Éviter un contact prolongé de **aura eASY** avec la peau ou un tissu buccal, car cela pourrait entraîner une inflammation des tissus imbibés d'alcool. Laver abondamment à l'eau.
- Uniquement destiné à un usage professionnel.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas ingérer.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Ne pas exposer le matériau à la lumière directe.
- Matériau exclusivement réservé à usage dentaire
- SDS disponible sur www.sdi.com.au ou veuillez contacter votre représentant régional.


PREMIERS SECOURS

- **Ceil (contact) :** laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- **Peau (contact) :** retirer à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imbibée d'alcool. Laver abondamment à l'eau.
- **Ingestion :** rincer abondamment la bouche. Boire une grande quantité d'eau de lait. Si vous ressentez une gêne, consulter un médecin.
- **Inhalation :** aucun symptôme attendu.

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734
Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



SDI Germany GmbH
Hansstrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0

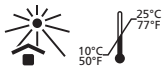

10°C
50°F



25°C
77°F



SDI aura eASY

WYJĄTKOWY UNIWERSALNY
MATERIAŁ DO UZUPEŁNIEŃ
INSTRUKCJA STOSOWANIA

P
O
L
S
K
I

WPROWADZENIE

aura eASY to światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, niezwykle wytrzymały, uniwersalny kompozyt spełniający większość potrzeb w zakresie estetycznej uzupełnień dostępny w czterech podstawowych odcieniach. Intensywność kolorów wszystkich odcieni kompozytu **aura eASY** jest idealnie równomiernie rozłożona, aby w razie potrzeby umożliwić indywidualny dobór odcienia. Głębokość utwardzania produktów z grupy **aura eASY** wynosi 3 mm, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie standardowej liczby kolejnych warstw w przypadku głębszych ubytków.

WSKAZANIA

- Uzupełnienia w odcinku przednim
- Uzupełnienia w odcinku tylnym
- Uzupełnienia typu inlay, onlay i licówki
- Odbudowa zębów koronowego
- Szynowanie zębów
- Technika kanapkowa przy zastosowaniu cementów szklonoionomerowych


PRZECIWWSKAZANIA

- Pokrycie miąży
- Nie stosować wraz z jakimikolwiek materiałami zawierającymi eugenol
- Pacjenci z alergią na akryl

WYBÓR ODCIENIA

- Przed doбором odcienia nie wysuszać nadmiernie zęba.
- Przed założeniem koferdamu posłużyć się kolornikiem **aura eASY**, aby wybrać odcień.
- Jeżeli odcień sąsiednich zębów jest znacznie inny, spróbować dobrać jaśniejszy odcień.
- W celu wiarygodnego potwierdzenia wybranego odcienia umieścić niewielką ilość kompozytu na sąsiednim zębie i utwardzić światłem przed zastosowaniem środka wiążącego.

Wybór odcienia w przypadku niestosowania techniki warstwowej: Gama produktów **aura eASY** jest najbardziej odpowiednia w przypadku zastosowań, w których nie zostanie wykorzystana technika warstwowa, gdzie nie jest wymagany wysoki poziom estetyki. Aby wybrać odcień kompozytu **aura eASY**, należy przyrzyć się koronie zęba, wykorzystując listki z odcieniami **aura eASY**.

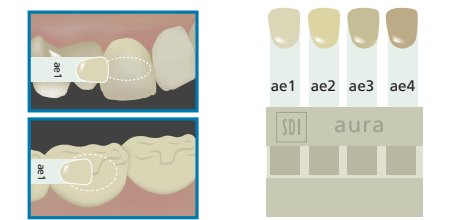

PROCEDURA PRZYKŁADANIA:

- Odziłować ząb.
- Przygotować ubytek normalnie, jak w przypadku uzupełnień z wykorzystaniem żywic kompozytowych.
- Uwaga:** jeżeli konieczne jest zabezpieczenie miąży, należy zastosować wodorotlenek wapnia w postaci wkładki.
- Zgodnie z instrukcją producenta nałożyć materiał wiążący zębinę/ szklivo, np. SDI Go!
- Nalożyć wybrany odcień lub odcienie kompozytu **aura eASY** w warstwach o grubości 3 mm.
- Polimeryzuj każdą warstwę materiału przez co najmniej 20 sekund (długość fal 460 - 480nm Korzystaj z lampy polimeryzacyjnej LED o dużej mocy)
- Zakończyć przy pomocy technik używanych standardowo.

PRZECHEWYWANIE I POSTĘPOWANIE

- Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C.
- Stosować w temperaturze pokojowej od 20°C do 25°C.
- System strzykawek: na nieużywaną strzykawkę szczelnie nałożyć zatyczkę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Unikać dłuższego kontaktu kompozytu **aura eASY** ze skórą i tkanką jamy ustnej, ponieważ może on powodować zapalenie tkanek jamy ustnej lub podrażnienie skóry.
- Wyłącznie do użytku przez specjalistów.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie stosować wewnętrznie.
- Nie stosować po upływie daty ważności.
- Nie wystawiać materiału na działanie bezpośredniego światła.
- Uwaga: przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez dentystę lub na jego zlecenie.
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna pod adresem www.sdi.com.au lub prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem.

PIERWSZA POMOC

- Kontakt z oczami:** przemywać dokładnie wodą i zwrócić się po pomoc lekarską.
- Kontakt ze skórą:** usunąć ściereczką lub gąbką zamoczoną w alkoholu. Przemyc dokładnie wodą.
- Spóźycie:** obficie przepłukać usta wodą. Wypić dużą ilość wody lub mleka. W przypadku utrzymujących się negatywnych objawów zwrócić się po pomoc lekarską.
- Wdychanie:** brak spodziewanych negatywnych objawów.

SDI aura eASY

ULTRA UNIVERSAL
RESTAURERINGSMATERIALE
INSTRUKSJON FOR BRUK

N
O
R
W
E
G
I
A
N

INTRODUKSJON

aura eASY er en lysherdende, radiopak, svært sterk, universell komposit utformet for å møte de fleste av dine estetiske, restaureringsbehov med bare fire enkle farger. Hver **aura eASY** farge er helt perfekt, jevnt fordelt på fargemetningskalanen så du kan skreddersy fargene ved behov. **aura eASY** utvalget har et 3 mm herdedybde noe redusere antall sjikt som trengs ved fylling av dype kaviteter..

INDIKASJONER

- Anteriore restaureringer
- Posteriore restaureringer
- Indirekte innlegg, onlays og fasetter
- Kjerne oppbygging
- Splinting
- Sandwich-teknikk med glass-ionomer

KONTRAINDIKASJONER


- Pulpateksjon
- Skål ikke brukes sammen med materialer som inneholder eugenol
- Allergi mot akryl

FARGEUTTAK

- Ikke uttørk tannen før fargeuttak
- Bruk **aura eASY** fargeskala for å ta ut fargen for plasseringen av koferdam.
- I tiffeller hvor fargen på nabotennene varierer betydelig, velg den lyseste fargen.
- For en visuell bekreftelse av den valgte fargen: Plasser en liten mengde komposit på tannoverflaten og lysherd.

Fargevalg for ett-lagsteknikk:

aura eASY utvalget passer best for tiffeller for tiffeller hvor de estetiske krav ikke er så høye. Bestem tannens hovedfarge ved hjelp av **aura eASY** fargeskalaen.

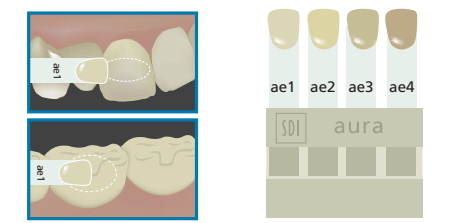

PROSEDYRE FOR LEGGING AV FYLLINGEN:

- Isoler tannen.
- Preparer kaviteten etter standard prinsipper for komposittfylling. **NB!** I de tiffeller hvor underføring er nødvendig, anbefales kalsiumhydroksyd som foringsmateriale.
- Bruk en bonding (som f.eks. SDI Go!) etter fabrikantens anvisninger.
- Plasser den/de valgte fargene med **aura eASY** kompositt i sjikt på 3 mm eller mindre.
- Lysherd hvert sjikt i minst 20 sekunder (460 – 480 nm bølglengde, høy effektiv LED herdelampe).
- Fullfør restaureringen ved hjelp av standard teknikker.

LAGRING OG HÅNTERING

- Lagres ved temperaturer på mellom 100 og 250 C (500 – 770 F)
- Brukes i romtemperatur mellom 200 og 250C (680 - 770 F).
- Sprøytesystem: når ikke i bruk sett korken godt på.

FORHÅNDSREGELER

- Unngå langvarig kontakt mellom **aura eASY** med hud eller oral vev ettersom dette kan forårsake betennelser i oral vevet eller hudsensibilisering.
- Kun for profesjonelt bruk
- Oppbevares utlignegelig for barn.
- Kun til utvortes bruk
- Ikke bruk etter utløpsdatoen
- Må ikke utsettes for direkte lys.
- Advarsel: Federal lovgivning spesifiserer at dette produktet kun kan selges til eller bestilles av en tannlege.
- SDS tilgjengelig på www.sdi.com.au eller ved å kontakte din regionale representant.

FØRSTEHJELP

- Øye (kontakt):** Vask nøyе med vann og få medisinsk hjelp.
- Hud (kontakt):** Fjern ved hjelp av en klut eller svamp blottlagt i alkohol. Vask nøyе med vann.
- Inntak:** Kall munnen grundig. Drikk mye vann/melk. Oppsøk medisinsk assistanse hvis symptomene vedvarer.
- Inndåning:** Ingen symptomer forvenet.

SDI aura eASY

ULTRAUNIVERSELLT
RESTAURERINGSMATERIAL
ANVÄNDARINSTRUKTIONER

S
W
E
D
I
S
H

INLEDNING

aura eASY är en ljushärdande, radiopak och stark universalkomposit framtagen för att uppfylla de flesta estetiska restaureringsbehoven och finns i fyra olika nyanser. Alla nyanser har samma perfekta färgintensitet så dessa kan anpassas för att stämma med annan nyans vid behov. **aura eASY**–sortimentet kan hårdas i 3mm skikt vilket reducerar antalet lager som behövs läggas vid restaurering av djupa kaviteter.

INDIKATIONER

- Anteriora restaurationer
- Taka-alueen korjaukset
- Inlays, onlays och fasader
- Core oppbyggnad
- Splinting
- Sandwich-teknikka med glasjonomeria

KONTRAINDIKATIONER


- Pulpa överkapping
- Får inte användas tillsammans med eugenol-innehållande material
- Allergi mot akrylater

SHADE VAL

- Torka inte ut tanderna innan färgtagning.
- Använd vår **aura eASY** nyansguide för att välja nyans innan utplacering av gumminförämningen.
- När intilliggande tänder är signifikant olika i nyans, försök att matcha den ljusare nyansen.
- För visuell konfirmation av nyans som valts, placeras en liten mängd komposit på omgivande tandyta som gnids in lätt tills den fäster.

Nyansval vid elagersteknikk:

aura eASY sortimentet är mest lämpligt vid icke-lagringskrav där estetiken inte är det viktigaste. För att välja en **aura eASY**- nyans, titta på hela tanden genom att använda **aura eASY**-proverna.

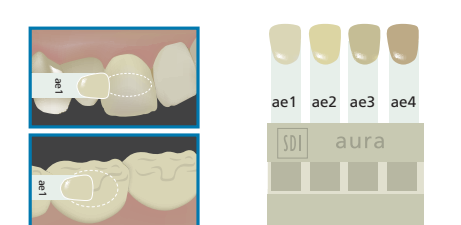

UTPLACERINGSPROCEDUREN

- Isolera tanden.
- Preparera kaviteten genom att använda standardteknik för rekonstruktioner med resinbaserad komposit.
- Obs!** Om tandroten behöver skyddas, används kalsiumhydroxid-beläggning.
- Applacera en emalj/dentinbonding enligt tillverkarens instruktioner, exempelvis SDI Go!
- Placera vald nyans(er) av **aura eASY**-komposit i lager om 3 mm eller mindre.
- Ljushärda materialet i 20 sek (460-480nm våglängd high power LED-ljus)
- Avsluta rekonstruktionen med standardteknik.

LAGRING OCH HANTERING

- Förvaras vid temperaturer mellan 10°- 25°C (50°-77°F).
- Används vid rumstemperaturer mellan 20°- 25°C (68°- 77°F).
- Sprutsystem: när den inte används ska kapsylen sättas på ordentligt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Undvíd långvarig kontakt med **aura eASY** mot hud och munslemhinnor, eftersom detta kan ge inflammation i vävnaden och irritation i huden.
- Endast för professionell användning.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Får inte förtäras.
- Får inte användas efter utgångsdatum.
- Får inte exponeras för direkt ljus.
- Varning: Federala lagar begränsar försäljning av denna produkt till tandläkare endast.
- SDS finns på www.sdi.com.au eller kontakta Din lokala representant.

FÖRSTA HJÄLPEN

- Ogon (kontakt):** Tvätta noggrant med vatten och kontakta läkare.
- Hud (kontakt):** Ta bort med en trasa eller svamp i vatten. Tvätta noggrant med vatten.
- Förtäring:** Skölj munnen ordentligt. Drikk mycket vatten / mjölk. Sök läkavård om symptomen kvarstår.
- Inandning:** Inga symtom förväntas.

SDI aura eASY

TÄYSIN UNIVERSAALI
TÄYTEMATERIAALI
KÄYTTÖOHJEET

F
I
N
N
I
S
H

ESITTELY

aura eASY on valokovetteinen röntgenopaakki, kestävä, universaali kompositi utformet for at uppfylla de flesta estetiska restaureringsbehoven och finns i fyra olika nyanser. Alla nyanser har samma perfekta färgintensitet så dessa kan anpassas för att stämma med annan nyans vid behov. **aura eASY**–tättytet voidaan aplikoida 3 mm:n kerroksena, mikä vähentää lisakerrosten määrää syvä kaviteetteja paikkaattaessa.

INDIKAATIOI:

- Etualueen korjaukset
- Taka-alueen korjaukset
- Epäsuorat inlayt, onlayt ja laminaatit
- Pilarin rakennus
- Hampaiden kytkeminen
- Sandwich-teknikka lasi-ionomeerilla

KONTRAINDIKAATIOI


- Pulpan kattaminen
- Älä käytä yhdessä minkään eugenolia sisältävien materiaalien kanssa.
- Akryyliikutallergia

SÄVYN VALINTA

- Älä kuivaa liikaa hampaita ennen sävyn määrittämistä
- Ennen hampaan eristämistä valitaan värisävy käyttäen apuna **aura eASY** -sävyopasta
- Kun vierailet hampaat ovat merkittävästi eri sävyisiä, yritä sovittaa väleämpää sävyä.
- Visuaaliseksi varmistukseksi sävyn valinta, asetetaan pieni määrä täytemateriaalia ympäröivän hampaan pintaan ja valokoveta ennen siostamista

Sävyn valinta ei-kerrostustekniikkaan:

aura eASY -sävyt soveltuvat parhaiten ei-kerrostustekniikan vaatimuksiin, missä korkea estetiikka ei ole välttämätöntä. Kun valitset **aura eASY** -sävyä, katso ja vertaa **aura eASY** -sävyliuskoja hampaan pinnan eri alueilla.

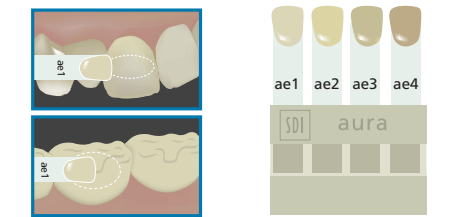

KAVITTIEN TÄYTÖ

- Eitää hartmas.
- Valmistele kaviteetti kompositiinen hyväksytyjä käyttöperiaatteita noudattaen. **Huomautus:** Jos hammasytimen suojaus on tarpeellista, käytä kalsiumhydroksidia eristeenä.
- Levitä dentini-/kiilleidosaine, esim. SDI Go!, valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aseta valittu sävy tai sävyt **aura eASY** -kompositiita kaviteettiin korkeintaan 3 mm:n kerroksena.
- Valokoveta jokaista kerrosta vähintään 20 sekuntia (460 - 480 nm aallonpituudella, tehokas LED-valokovetus).
- Viimeistelee restauraatio tavanomaisella tekniikalla.

SÄILYTYYS JA KÄSITTELY

- Säilytettävä lämpötilojen 10-25 °C välillä (50-77 ° F).
- Käytä huoneenlämmössä 20-25 ° C välillä (68-77 ° F).
- Ruiskujärjestelmä: kun ei käytössä, kierrä korkki tiukasti.

VAROTOIMET

- Vältä pitkäaikaista **aura eASY** -kontaktia iholle tai suun limakalvolle, koska se voi aiheuttaa tulehduksen suun kudoksissa tai ihoa herkistymistä.
- Vain ammattikäyttöön.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä sisäisesti.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Älä altista materiaalia suoralle valolle.
- Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltiolaki rajoittaa tämän tuotteen myynnin ja käytön vain hampaalääkärin määräyksestä tapahtuvaksi.
- Käyttöturvatieotoitteet saatavissa osoitteessa: www.sdi.com.au tai ota yhteyttä paikalliseseen jälleenmyyjäisi.

ENSIAPU

- Silmäkontakti:** Pese huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin vastaantolille.
- Ihokontakti:** Poista alkoholiin kastetulla sienellä tai kankaalla. Huuhtelee huolellisesti vedellä.
- Nieleminen:** Huuhtelee suu huolellisesti. Juo paljon vettä tai maitoa. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Hengittäminen:** Ei odotettavissa oireita.

SDI aura eASY

ULTRA UNIVERSEEL
RESTAURATIEMATERIAAL
GEBRUIKSAANWIJZING

D
U
T
C
H

VOORSTELLING

aura eASY bestaat uit lichthardend, radiopak en hoogwaardig universeel composietmateriaal ontworpen om te voldoen aan het merendeel van uw esthetische, restauratieve behoeften en is verkrijgbaar in vier eenvoudige tinten. De **aura eASY** -tinten hebben een perfect afgestemde kleurntensiteit, zodat u, indien nodig, de tinten kunt aanpassen. Het **aura eASY**-assortiment heeft een uithardingsdiepte van *3mm wat het aantal standaard incrementele lagen reduceert bij de opvulling van diepe caviteiten.

INDICATIES

- Anterior-restauraties
- Posterior-restauraties
- Indirecte inlays, onlays en veneren
- Kernopbouw
- Splinting
- Sandwichtechniek met glasionomeercement

CONTRA-INDICATIES


- Pulp-afropping
- Niet gebruiken in combinatie met producten die eugenol bevatten.
- Niet gebruiken bij patiënten met acrylaallergie

TINTSELECTIE

- Kleurselectie de tand niet voor het afstemmen van de tint
- Gebruik de **aura eASY** tintengids om de juiste tint te kleurenkaart voorafgaande aan de plaatsing van een rubberdam.
- Wanneer de kleuren van aangrenzende tanden aanzienlijk verschillend zijn, raden we aan om een lichtere kleur toe te passen.
- Voor de visuele bevestiging van de geselecteerd kleur, voeg u kleine hoeveelheden van het composietmateriaal toe op een omringend tandoppervlak en pas lichtuitharding toe voor hechting

Kleurselectie voor niet-gelaaide technieken:

Het **aura eASY**-assortiment is het meest geschikt voor niet-gelaaide uitvoering waarbij esthetiek minder belangrijk is. Om een **aura eASY**-tint te selecteren, neem u het gehele tandoppervlak in beschouwing met behulp van de **aura eASY**-kleurvoorbeelden.

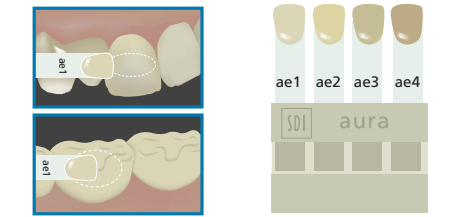

PLAATSINGSPROCEDURE:

- Tand isoleren.
- Bereid de holte voor behulp van de standaardtechnieken voor composietrestauraties. **Opmerking:** Wanneer het pulp bescherming nodig heeft, moet calciumhydroxide aangebracht worden.
- Breng een dentine/glaazuur-bindmiddel aan, zoals SDI Go! volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Breng de geselecteerde **aura eASY**-composietint(en) aan in lagen van maximum 3 mm.
- Hard elke composietlaag 20 seconden uit (460 - 480 nm golf lengte, hoogintensief LED-licht).
- Werk de restauratie af met behulp van standaardtechnieken.

BEWAAR EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Bewaren bij een temperatuur tussen 10° en 25°C (50°-77°F).
- Gebruiken bij een kamertemperatuur tussen 20° en 25°C (68°-77°F).
- Injectiesysteem: na gebruik de dop goed aanschroeven.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Vermijd langdurig contact met de huid of mondweefsel, daar **aura eASY** ontstekingen van de orale weefsels of de huid kan veroorzaken.
- Enkel voor professioneel gebruik.
- Bewaren buiten het bereik van kinderen.
- Niet oraal innemen.
- Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.
- Niet gebruiken niet blootstellen aan direct licht.
- Opgeliet: Wettelijk gezien mag dit apparaat uitsluitend door, aan of per verzoek van tandartsen verkocht worden.
- Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op www.sdi.com.au of door contact op te nemen met uw regionale vertegenwoordiger.

EERSTE HULP

- Oogcontact:** Grondig spoelen met water en medische hulp inroepen.
- Huidcontact:** Verwijderen met een in alcohol gedrenkte doek of spons. Grondig naspoelen met water en zeep.
- Orale inname:** Mond grondig spoelen. Drink een ruime hoeveelheid water of melk. Zoek medische hulp indien de symptomen aanhouden.
- Inademing:** Geen gekende symptomen.

SDI aura eASY

MATERIALE DI RESTAURO
ULTRA UNIVERSALE
ISTRUZIONI PER L'USO

I
T
A
L
I
A
N
O

INTRODUZIONE

aura eASY è un composito universale fotopolimerizzante, radiopaco, ad alta resistenza progettato per andare incontro alla maggior parte delle vostre esigenze estetiche nei restauri con appena 4 semplici tinte. Ogni tinta **aura eASY** è perfettamente equilibrata nell'intensità di colore in modo da poter personalizzare la tonalità se necessario. La gamma **aura eASY** ha una profondità di 3 mm di indurimento che riduce il numero standard di stratificazione incrementale durante il ripristino delle cavità profonde.

INDICAZIONI

- Restauri anteriori
- Restauri posteriori
- Intarsi inlays, onlay e faccette
- Ricostruzioni di monconi
- Splintaggi
- Tecnica sandwich con vetro ionomero


CONTROINDICAZIONI

- Rivestimento pulpare
- Non utilizzare in combinazione con materiali contenenti eugenolo
- Allergie a resine acriliche

SELEZIONE DEL COLORE

- Non lasciare asciugare eccessivamente il dente prima di selezionare la tinta del composito.
- Utilizzare la guida **aura eASY** per selezionare la vostra tonalità prima di posizionare la diga di gomma.
- Quando i denti vicini presentano un colore significativamente diverso, fare prima una prova per abbinare la tonalità più tenue.
- Per una conferma ottica della tonalità selezionata, posizionare piccole quantità di composito sulla superficie del dente vicino e fotopolimerizzare prima di incollare

Selezione della tonalità per la tecnica di non stratificazione : La gamma **aura eASY** è più adatta in condizioni di non stratificazione per le quali non è necessaria un'alta estetica. Per scegliere una tonalità di **aura eASY**, guardare l'insieme complessivo del dente con l'aiuto dei campioni prova **aura eASY**.

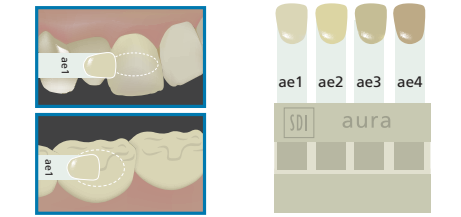

PROCEDURA DI POSIZIONAMENTO:

- Isolare il dente.
- Preparare la cavità usando la tecnica standard per i restauri in resina composita. **Nota:** Nei casi in cui è necessaria la protezione della polpa, utilizzare un rivestimento a base di idrossido di calcio.
- Applicare un agente adesivo smalto-dentinale come SDI Go! seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il composito **aura eASY** nella tonalità scelta in strati di massimo 3 mm.
- Fotopolimerizzare ogni strato per almeno 20 secondi (lunghezza d'onda 460-480 nm, lampada fotopolimerizzatrice LED ad alta potenza).
- Terminare il restauro usando la tecnica standard.

CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO

- Conservare a temperature comprese tra i 10 e i 25 °C (50-77 °F).
- Utilizzare a temperatura ambiente tra i 20 e i 25 °C (68-77 °F).
- Siringa: quando non in uso, chiudere bene il cappuccio.

PRECAUZIONI

- Evitare il contatto prolungato di **aura eASY** con la pelle o i tessuti orali, in quanto potrebbe causare infiammazione dei tessuti orali o sensibilizzazione cutanea.
- Solo per uso professionale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente.
- Non utilizzare