

Mais branco.
Mais brilhante. Você.



o clareador mais rápido do mundo

SDI

polaoffice+




Super Rápido

O Pola Office+ requer tempo mínimo na cadeira do dentista. O tempo total do tratamento levará menos de 30 minutos. Menos tempo na cadeira significa mais conforto e satisfação ao seu paciente.

A fórmula única de peróxido de hidrogênio a 37.5% garante rapidez na liberação dos íons para o início do processo de clareamento.

apresentamos

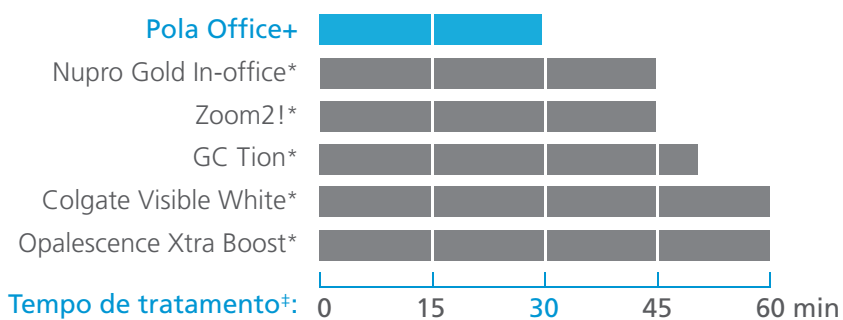

Não requer luz para clarear

O Pola Office+ pode ser usado com ou sem luz de clareamento, já que não requer ativação. Você certamente poderá utilizar uma luz para clareamento ou qualquer outra luz de cura para acelerar o processo ou para impressionar seus pacientes. Mas, a luz não é necessária.

Máximo conforto

O pH neutro do Pola Office+ garante o máximo de conforto durante e depois do tratamento. Quanto menor o tempo de tratamento menor o desconforto e sensibilidade.

Apresenta desensibilizante na composição


Não há necessidade do uso de um desensibilizante. O Pola Office+ tem uma exclusiva propriedade desensibilizante em sua fórmula que inibe a sensibilidade pós-operatória. O nitrato de potássio, ingrediente essencial para reduzir a dor, penetra nas extremidades do nervo bloqueando a transmissão da sensibilidade nervosa, promovendo assim, um efeito calmante.

Simple manuseio

Não requer mistura prévia. O sistema de auto-mistura da seringa fará com que o produto se misture durante a aplicação do gel diretamente no dente. Isso garante uma mistura consistente do gel ativado naquele instante. A ponta do aplicador permite que a aplicação seja simples, mesmo nas regiões mais difíceis.

Fina camada

Somente uma fina camada do gel é necessária. Use a ponta para espalhar o gel garantindo que toda a superfície esteja coberta. A fórmula pegajosa do gel adere firmemente na superfície do dente maximizando o efeito do clareador.




“89% dos avaliados
recomendariam
o Pola Office+
aos colegas+”

a nova geração de clareador




Instruções:


- 1 Registre a cor no pré-operatório.
- 2 Limpe os dentes com pedra-pome.
- 3 Coloque o afastador de bochecha e cubra os lábios expostos com vaselina.
- 4 Seque os dentes e aplique uma barreira gengival; fotopolimerize em movimentos circulares.

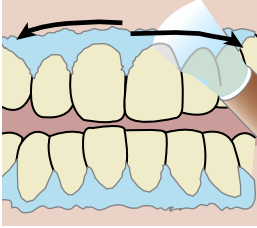


- 5 Firmemente coloque a ponta de mistura na seringa de Pola Office+ longe do paciente; Dispense uma pequena quantidade do gel em um bloco de mistura para garantir que a mistura esteja apropriada.
- 6 Aplique uma camada fina do gel diretamente em todos os dentes que serão clareados.

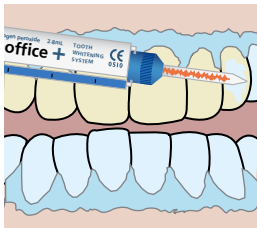


- 7 Deixe o gel na superfície por 8 minutos. A luz é opcional, caso seja utilizada respeite as instruções do fabricante.

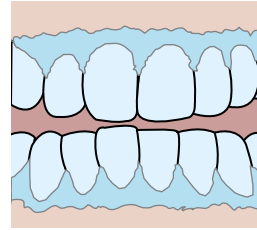

- 8 aspire toda a camada com uma ponta aspiradora.

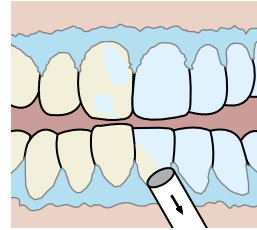

- 9 Complete os passos 6-8 três vezes (opcional 4 vezes).
- 10 Após a última aplicação aspire todo o gel, lave com água e aplique sucção.
- 11 Remova a barreira gengival.

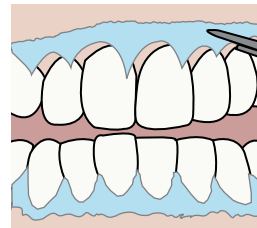

o clareador mais rápido do mundo

"83% dos avaliados
comprariam
o Pola Office+⁺"

A close-up photograph of a young man with dark, wavy hair, smiling broadly. He is shirtless and has his right hand resting on his head. The background is a bright, overexposed outdoor setting, likely a beach. The overall tone is bright and positive.

Mais branco. Mais brilhante. Você.

um sorriso mais branco e rápido



Pola Office+
kit para 3 pacientes – sem afastador

Pola Office+ kit para 3 pacientes – com afastador
3 seringas de 2.8mL de Pola Office+
3 seringas de 1g de Barreira Gengival
3 afastadores de bochecha
Acessórios
Pedido: 7700416

Pola Office+ kit para 3 pacientes – sem afastador
3 seringas de 2.8mL de Pola Office+
3 seringas de 1g de Barreira Gengival
Acessórios
Pedido: 7700415

Pola Office+ kit para 1 paciente – com afastador
1 seringa de 2.8mL de Pola Office+
1 seringa de 1g de Barreira Gengival
1 afastador de bochecha
Acessórios
Pedido: 7700431

Pola Office+ kit para 1 paciente – sem afastador
1 seringa de 2.8mL de Pola Office+
1 seringa de 1g de Barreira Gengival
Acessórios
Pedido: 7700430

visite www.polawhite.com

*Nupro Gold In-office, Zoom2!, GC Tion, Colgate Visible White e Opalescence Xtra Boost não são marcas registradas da SDI

‡ Dados do fabricante

† Dados internos baseados em avaliadores clínicos



Fabricado na Austrália pela SDI Limited, Victoria 3153, Austrália 1 800 337 003, Austria 00800 022 55 734, Brazil 0800 770 1735, França 00800 022 55 734, Alemanha 0800 100 5759, Irlanda 01 886 9577, Nova Zelândia 0800 734 034, Itália 800 780625, Espanha 00800 022 55 734, Reino Unid 00800 022 55 734, EUA e Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com

