

seT



Octubre 2008, Volumen 25,
No. 08. (cápsulas seT)

SELF ETCHING, SELF ADHESIVE RESIN CEMENT

SELBSTÄTZENDER, SELBSTKLEBENDER KUNSTSTOFF-ZEMENT

CIMENTO RESINOSO AUTO-CONDICIONANTE E AUTO-ADESIVO

CEMENTO DE RESINA, AUTOGRABANTE Y AUTOADHESIVO

RÉSINE DE SCELLEMENT AUTO-ADHÉSIVE AUTO-MORDANÇANT

CEMENTO COMPOSITO AUTOMORDENZANTE ED AUTOADESIVO

ZELF ETSEND, ZELF ADHESIEF RESIN CEMENT

SELVÆTSENDE, SELVADHÆRERENDE RESIN CEMENT

SELVETSENDE, SELVBINDENDE RESIN SEMENT

ITSE-ETSAAVA, ITSEKIINNITTYVÄ MUOVISEMENTTI

ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ, ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ

SAMOWYTRAWIAJĄCY CEMENT KOMPOZYTOWY NIE
WYMAŁAJĄCY UŻYCIA SYSTEMU WIĄŻĄCEGO

ÖNSAVAZÓ ÉS ÖNKÖTŐ MŰGYANTABÁZISÚ RAGASZTÓCEMENT

ISESÖÖVITAV, ISEADHESEERUV TSEMENT

SAMOJEDKAJOČ, SAMOADHEZIVEN SMOLNAT CEMENT

PAŠKODINOŠS, PAŠADHEZĪVS SVEĶU CEMENTS

SAVAIME ĒSDINANTIS BEI SURĪŠANTIS DERVU CEMENTAS

SAMOLEPTACÍ, ADHEZIVNÍ CEMENT ZESÍLENÝ PRYSKYŘICÍ

SAMOLEPTACÍ, ADHEZÍVNÝ, ŽIVICOVÝ CEMENT

歯科接着用レジンセメント セルフエッチングデュアルキュアタイプ

自酸蚀、自粘结树脂粘剂



SDI



Outubro de 2008, Volume 25,
nº 08 (cápsulas de seT)

O melhor cimento da SDI agora disponível em seringas



Setembro de 2010, Volume 27,
nº 07 (seringas de seT)

seT



O seT é um cimento auto-condicionante e auto-adesivo, criado para cimentação definitiva de peças protéticas de metal, resinas, e materiais cerâmicos. O seT adere quimicamente a estrutura dental e em todos os tipos de núcleo. Está disponível em cápsulas e em seringas de auto-mistura (seT PP).


Proprietário da

tecnologia  ionglass™

O seT utiliza uma tecnologia chamada *ionglass™* desenvolvida pela própria SDI por especialistas em vidro. O *ionglass™* é um vidro reativo, radiopaco, com alta liberação de íons, usado em toda linha de cimentos da SDI. Por isso, o seT libera substancialmente uma alta quantidade de flúor que auxilia na remineralização natural do dente.




Alta liberação de flúor

O seT apresenta livre movimentação de íons flúor que beneficia a estrutura dental. O flúor tem um papel significativo na prevenção da cárie. Isso inclui a formação de fluorapatita, que é mais resistente aos ácidos do que a hidroxiapatita. O flúor ajuda a proteger a estrutura dental contra a cárie.

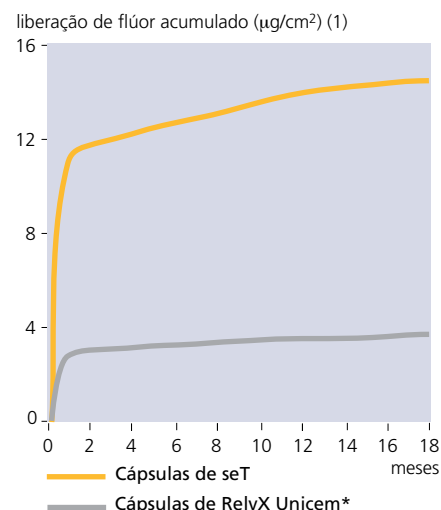

Rápido e fácil

O seT é um cimento completo: condiciona, promove adesão e cimenta a peça protética. Simples de aplicar e fácil de trabalhar. O seT produz uma espessura ideal de película e uma excelente fluidez para cimentar peças protéticas.

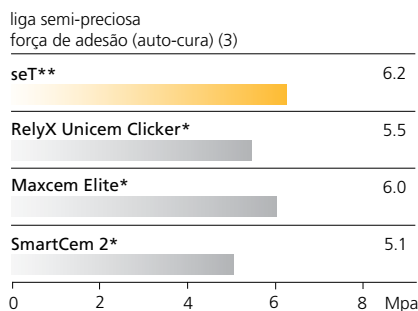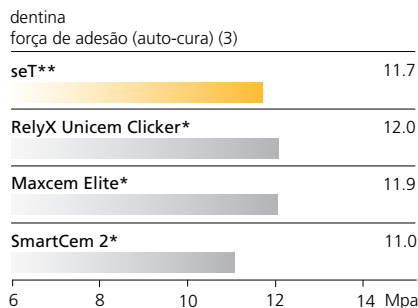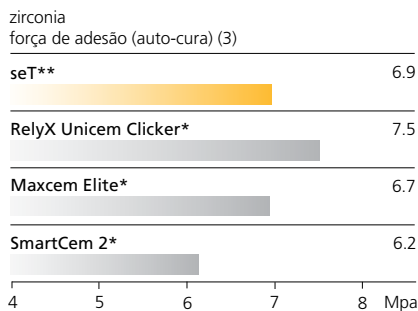

Radiopacidade

Detectável em radiografias. Devido a sua excelente radiopacidade o seT é fácil de ser detectado no exame radiográfico e com isso o profissional consegue verificar facilmente a integridade das margens de cimentação.

Sem Bisfenol A ou HEMA

O seT não contém Bisfenol A (ou derivados) ou HEMA. Utilize este produto em seus pacientes com convicção e tranquilidade.

Cura dual

Desenvolvido para combinar as vantagens da cura por reação química ou cura através da luz, o seT é o cimento ideal para qualquer situação[^].

Mínima sensibilidade pós-operatória

A utilização do seT não requer condicionamento ácido e lavagem. A camada de smear layer permanece intacta e com isso, protege o dente. Esta característica reduz drasticamente a sensibilidade pós-operatória, quando não a elimina.

Extensa variação de cores

O seT está disponível em 5 cores: Translúcido, A1, A2, OA3 e branco opaco. A extensa variação de cores maximiza as características estéticas do material.

Indicações

- Cimentação de inlays, onlays[^], prótese parcial fixa e coroas de metal, resina e cerâmica.
- Cimentação de pinos, posts e pinos rosqueáveis.

[^] Para facetas, use um adesivo (Go!, Stae, etc. de acordo com as instruções do fabricante, inclusive qualquer procedimento de condicionamento ácido) antes do uso do seT para intensificar a força de adesão. Não recomendado para cimentação de facetas que requerem um maior tempo de trabalho.
**seT PP.

Instruções:

- 1 Remova os resíduos de cimento temporário e enxágüe bem. Remova o excesso de água mantendo o preparo úmido.



- 2 Prepare a prótese e verifique sua adaptação.



- 3 Aplique o cimento na peça protética e no dente, de forma equilibrada.



- 4 Posicione a peça e aguarde 30 segundos. Limpe os excessos nos primeiros 2 segundos ou aguarde 2 minutos.



- 5 Retire o excesso de material.



- 6 Mantenha isolado até que se verifique que a peça está firme (aproximadamente 5 minutos), ou fotopolimerize por pelo menos 20 segundos.



seT



seT PP seringa com automistura refil

2 seringas de seT PP com 7g
28 pontas para a seringa de automistura

Cód. para pedido:

8805101 A1
8805102 A2
8805103 OA3
8805104 Branco opaco
8805105 Translúcido

Kit sortido de seT PP com seringas auto-mistura

Kit com 5 seringas sendo 1 de cada cor: A1, A2, OA3, Branco Opaco e Translúcido
Seringas de 7g de auto-mistura
70 pontas para a seringa de auto-mistura
Cód. para pedido 8810002

Pontas de auto-mistura para set PP

50 pontas de auto-mistura para as seringas
Cód. para pedido 8810003

Kit sortido de cápsulas de seT

Caixa com 50 cápsulas sendo 10 de cada cor: A1, A2, OA3, Branco opaco e Translúcido
Cód. para pedido 8810000

Cápsulas de seT

Caixa com 50 cápsulas
Cód. para pedido:
8805001 A1
8805002 A2
8805003 OA3
8805004 Branco opaco
8805005 Translúcido

seT PP 1 seringa com automistura refil

1 seringa de seT PP com 7g
14 pontas para a seringa de automistura

Cód. para pedido:

8805201 A1
8805202 A2
8805203 OA3
8805204 Branco opaco
8805205 Translúcido



Aplicador do Riva 2
Cód. para pedido 5545013



Aplicador do Riva
Cód. para pedido 5545009

*Cápsulas RelyX Unicem, Clicker RelyX Unicem, Maxcem Elite e SmartCem2 não são marcas registradas da SDI Limited
(1) Fonte: Al-Naimi O.T., McCabe J.F. Liberação de flúor do seT cimento auto-condicionante e auto-adesivo em relação aos produtos concorrentes. (relatório de 18 meses) Newcastle University, Reino Unido Fevereiro 2007.
(2) Dados de testes da SDI.



Fabricado na Austrália pela SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Austrália 1 800 337 003
Áustria 00800 022 55734
Brasil 0800 770 1735
França 00800 022 55 734
Alemanha 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Itália 800 780625
Nova Zelândia 0800 734 034
Espanha 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
EUA e Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

