



poladay CP

E
S
P
A
Ñ
O
L

peróxido de carbamida al 35%

SISTEMA AVANZADO DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL

INSTRUCCIONES DE USO PARA
PACIENTES Y DENTISTAS

Pola Day CP es un gel blanqueador dental de alta viscosidad que contiene pH neutro y peróxido de carbamida al 35%. Es un gel cristalino de agradable sabor con un contenido de agua lo suficiente mente alto para reducir la sensibilidad.

INDICACIONES DE USO:

- Blanqueamiento de dientes vitales decolorados.
- Blanqueamiento de dientes no-vitales decolorados.

COMPOSICIÓN: 35% de peróxido de carbamida
40% de agua
0.5% de aabor
24.5% de agentes espesantes

PESO NETO:


Depende del kit adquirido, jeringas 1.3g o jeringas 3g.
Por favor consulte el exterior del empaque.

EQUIVALENCIA A PEROXIDO DE HIDROGENO:

Pola Day CP 35% Peróxido de Carbamida =
11.7% Peróxido de Hidrógeno

INSTRUCCIONES:

1. Coloque una pequeña gota de gel en cada compartimiento de la guarda que se utilizará en el tratamiento dental.
2. Coloque la guarda con el gel alrededor de los dientes.
3. Elimine el exceso de gel de la boca con una servilleta o un suave cepillo seco.
4. Retire la guarda después de transcurrido 15 minutos del tratamiento. Enjuague la guarda y la boca con agua tibia. Nota: El tiempo del tratamiento puede tomar hasta 30 minutos si es necesario.
5. Cepille los dientes.

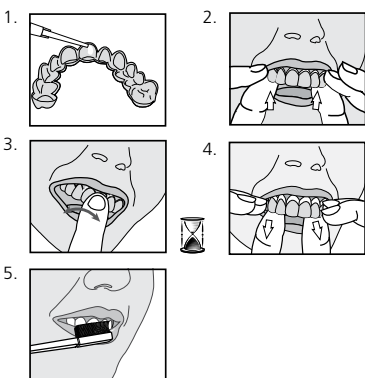

SISTEMA INICIADOR PARA CONSULTORIO (PARA DENTISTAS)

Cuando se utiliza como un sistema iniciador en la clínica dental, el tiempo del tratamiento toma 30 minutos.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacene el producto en el refrigerador (2°-8°C / 35°-45°F).
- No lo utilice después de la fecha de caducidad.
- Use este producto a temperatura ambiente.

PRECAUCIONES:


- Se debe utilizar bajo la supervisión de un dentista.
- No coma, beba o fume durante el tratamiento.
- No fume inmediatamente después de finalizado el tratamiento - espere al menos dos horas.
- Durante todo el período del tratamiento, se deben evitar o consumir con moderación los alimentos y bebidas que contengan colores fuertes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños o de mascotas.
- No se debe utilizar este producto en mujeres embarazadas o en estado lactante, o en niños menores de 14 años.
- En el caso de los pacientes que tengan un historial clínico de alergias a los químicos, se recomienda que un especialista les realice pruebas de alergias antes de utilizar este producto.
- Discontinúe el uso de este producto si se presenta algún tipo de reacción o sensibilidad inusual, y consulte a su dentista.
- No inyecte Pola Day CP en el cuerpo.
- ADVERTENCIA: LAS LEYES FEDERALES RESTRINGEN LA VENTA DE ESTE PRODUCTO POR O A PETICIÓN DE UN DENTISTA.
- La Ficha Técnica sobre Seguridad de Materiales (MSDS) se encuentra disponible en www.sdi.com.au o contacte a su representante regional.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Ojos (contacto):** Enjuague cuidadosamente con agua y busque asistencia médica si los síntomas persisten.
- **Piel/Tejido (contacto):** Enjuague cuidadosamente con agua y busque asistencia médica si los síntomas persisten.
- **Ingestión (grandes cantidades):** Beba mucha leche o agua, y busque asistencia médica.



Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

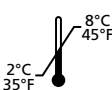

Advertencia



Causa
Irritación en piel
y ojos

Ultima Revisión: 2012-08