

# ultramat S

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT  
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE  
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD  
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE  
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ  
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER  
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER  
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER  
NOPEA KAPSELISEKOITIN  
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ  
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK  
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP  
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI  
HITRI MEŠALEC AMALGAMA  
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS  
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS  
VYSOKO RÝCHLOSTNÝ AMALGAMÁTOR  
HITRI MEŠALEC AMALGAMA  
高速アマルガムミキサー  
高速銀汞調拌机



S steht für simpel!

# ultramats



## Hochfrequenz Mischgerät

- Gleichmäßiger und genauer Mischvorgang
- Geringe Vibration und extrem geräuscharm
- Einfache Anwendung - lediglich 3 Knöpfe
- Geeignet für alle Arten von Kapseln
- Einfache Reinigung
- Anzeige bei ungenügender Stromversorgung und Sicherheitsstopp
- Duale Spannung




# ultrammat S bietet:

## So simpel,


### Lediglich 3 simple Knöpfe

Es gibt drei verschiedene Mischzeiten, 6, 8 und 10 Sekunden um alle gängigen Materialien in Kapseln anzumischen. Das Gerät kann jederzeit angehalten werden, indem diese Knöpfe gedrückt werden, oder der Deckel einfach geöffnet wird.

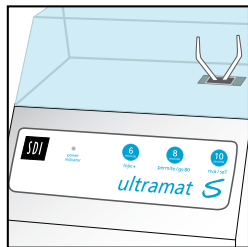

## So einfach zu reinigen!

Die hygienefreundliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Infektionskontrolle denn die glatte Kunststoffoberfläche kann mit herkömmlicher Desinfektionslösung gereinigt werden.

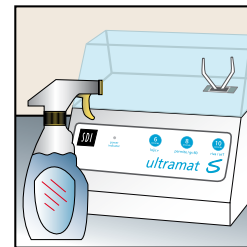


## Gleichmäßiger und genauer Mischvorgang

Der Ultramat S bietet einen per Mikroprozessor gesteuerten Timer für genaues und gleichmäßiges Mischen.




## Duale Spannung

Der Ultramat S funktioniert bei Spannungen von 100 -120V Und 220 - 240V, 50Hz und 60Hz. Er kann somit in unterschiedlichen Stromspannungsnetzen betrieben werden.

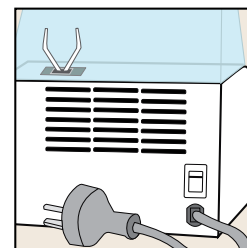


## Geringe Vibration und extrem geräuscharm

Im Gegensatz zu anderen Mischgeräten ist der Ultramat S ausgesprochen geräuscharm. Durch die minimale Vibration aller äußeren Teile steht er fest an seinem Platz.

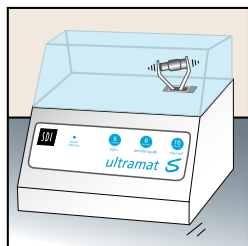


## Anzeige bei ungenügender Stromversorgung und Sicherheitsstopp

Sollte die Stromversorgung unter die benötigte Spannung von 100 - 120V und 220 - 240V fallen, so wird die Anzeige blau aufleuchten und das Gerät wird erst dann arbeiten, wenn eine korrekte Stromversorgung gewährleistet ist. So werden ungenügende Mischergebnisse vermieden.

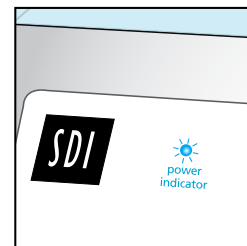



## Geeignet für alle Arten von Kapseln

In die biegsamen Mischgabeln passen eine Vielzahl von abgerundeten Kapseln (Amalgamkapseln) sowie Kapseln mit vorstehenden Applikationsdüsen (Glasionomierzementkapseln).

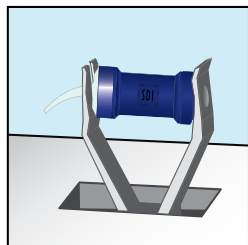


## Sicherheitsstopp

Der Ultramat S unterbricht sofort den Mischvorgang wenn der durchsichtige Deckel geöffnet wird.

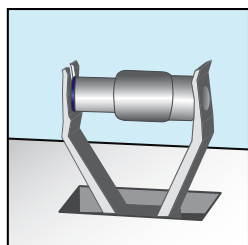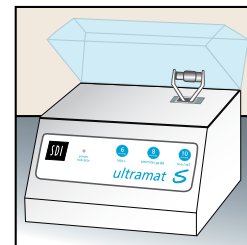

## Hochfrequenzleistung Bei energiesparendem Verbrauch

Mit einer Mischfrequenz von 4550 Oszillationen pro Minute (+/- 1%), stellt der Ultramat S sicher, dass alle Materialien vollständig angemischt sind. Dabei benötigt er relativ wenig Energie.

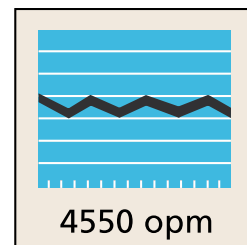

# ultramats



#### **Abmessungen:**

Breite	Tiefe	Höhe
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

#### **Spannung:**

100 - 120 Volt

220 - 240 Volt

50 - 60 Hz

#### **Gewicht:**

2,43kg

5,4lbs

#### **Ultramat S**

(Geeignet für alle Steckersysteme -  
inklusive Netzteil für das jeweilige Land)  
Artikelnummer 5546058



Hergestellt in Australien von SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australien 1800 337 003  
Österreich 00800 022 55734  
Brasilien 0800 770 1735  
Frankreich 00800 022 55 734  
Deutschland 0800 100 5759  
Irland 01 886 9577  
Italien 800 780625  
Neuseeland 0800 734 034  
Spanien 00800 022 55 734  
UK 00800 022 55 734  
USA & Kanada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)



M554652

+D036M55465218