



# CONSEAL F

TĚSNĚNÍ PRO JÁMKY A FISTURY S  
UVOLŇOVÁNÍM FLUORIDŮ



**7%**

PLNĚNÉ SUBMIKROOVÉ  
PLNIVO

**0.41mm**

PRŮMĚR HROTU

# NFZKA VISKOZITA HLUBOKA PENETRACE

Conseal F je pryskyřičný tmel s nejnižší viskozitou, který je k dispozici, což mu umožňuje rychleji a hlouběji zatékat do připravených jamek a trhlin. Tryska Conseal F, jedna třetina velikosti jiných značek, zlepšuje úplné utěsnění a retenci tím, že umožňuje hlubší pronikání do nejmenších důlků a trhlin. V sadě Conseal F je k dispozici leptací gel s nízkou viskozitou speciálně navržený pro leptání jamek a trhlin.

**BPA &  
HEMA FREE**

## 0.41mm

PRŮMĚR HROTU




## 7%

NAPLNĚNÉ A SUBMIKRONOVÉ  
PLNIVO VELIKOST 0,04  
MIKRONŮ, ABY ODOLALA  
POVRCHOVÉMU OPOTŘEBENÍ

## UVOLNUJE FLUORID

Conseal f spojuje osvědčenou technologii tesnidch materialu spol. SDI s počátečním vyvinem fluoridu a jejich dlouhodobým lečebným účinkem. Díky unikátnímu plnivu v Conseal f, jeho směsi částic s velkým povrchem, dochází k vysokému a snadnému uvolňování fluoridu. Fluorid zvyšuje prevenci vzniku kazu, remineralizaci a inhibuje demineralizaci skloviny.


### MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÉHO FLUORIDU (KUMULATIVNĚ)

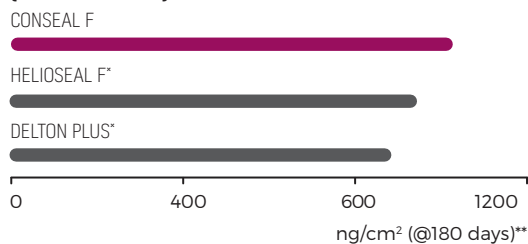

## NEJNIŽŠÍ VISKOZITA

Conseal f je sealant s nejnižší viskozitou. Tato vlastnost umožňuje rychle a hluboko zatekat do ryh a jamek. Obvyklou příčinou špatné funkce sealantu je to, že dostatečně nezateká a nevyplní všechny prostory. Vynikajícími vlastnostmi a adhezí ke stěnám vylučuje prostor pro růst bakterií. Vlastnosti Conseal f jako výjimečně pevného sealantu dále zvyšuje unikátní systém UDMA pryskyřice s nižším smršťováním a díky nepřítomnosti BIS-GMA se předchází problémům s Bisphenolem A.

### SROVNÁNÍ VISKOZITY

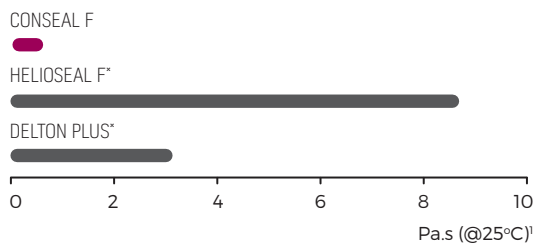

# HLUBOKE ZATEKANI

## LEPTACI GEL SUPER ETCH LV S NIZKOU VISKOZITOU

SDI vyvinula pro sealanty specialni modry leptad gel 37% kyseliny fosforecne v jednoduchem aplikacnim systemu. Super Etch LV ma nizkou viskozitu a kyselina tak muze dokonale nalepat povrch vseh jamek a fisur. Hlubsí penetrace kyseliny posiluje adhezi ke stenam a trvanlivost sealantu Conseal f.

## HLUBOKE ZATEKANI

Conseal f se dodava ve strickackach s vymenitelnymi koncovkami nebo v jednorazovych strfkackach „Komplet“. Oba systemy jsou opatreny ohnutymi, vel-mi tenkymi a kvalitnimi koncovkami, které umoznuj snadne a rychle davkovat latky i do obtfzne dostupnych mist. Koncovka (davkovad kapilara) u Conseal f ma priblizne tretinovy prumer ve srovnani s koncovkami u konkurencnfch produktu a dovoluje davkovat Conseal f i do tech nejmensfch jamek a ryh, do kterych se koncovky jinych materialu nevejdou.

## SROVNANI VELIKOSTI\*\*

Prumer vymennych koncovek u Conseal f je pouze 0,41 mm. Je vyrazne mensi nez u konkurencnich produktu.

0.41mm



CONSEAL F

1.5mm



DELTON PLUS\*

1.3mm



HELIOSEAL F\*

## DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI

Žádný bis-fenol A nebo jeho deriváty

Extrémně nízká viskozita - rychle a hluboko proniká do důtků a trhlin

Přesné a kontrolované doručení s 27 měřidly

Plněno 7% - uvolňuje fluor

Neprůhledný bílý odstín

Dodáván s leptacím gelem s nízkou viskozitou v úvodní sadě

## NABIDKA BAREV

Conseal f se dodava v odstí nu opakni bfla. Conseal se dodava v bezbarvem a svetle sedem odstínu.

## HYGIENICKA APLIKACE

Conseal f "Komplet" nabízí snadny a hygienicky zpusob aplikace sealantu, eliminuje riziko mozne kontaminace.

## BIOKOMPATIBILNI

Velice nizka rozpustnost Conseal f ve vode minimalizuje problemy v prostredf ustnf dutiny.

»tmely významně přispívají k dentálnímu veřejné zdraví.«

## KLINICKE TESTOVANI

Conseal f byl klinicky testovan na 5 363 vyplnfch u 774 detf. Nebylo popsano zadne selhanf materialu a zaver je, ze „sealant je material, který vyrazne pozitivne prispfva ke kvalite chrupu v populaci“.“2

PRED OSETRENIM



NALEPTANI POMOCI SUPER ETCH LV



APLIKACE CONSEAL F









PO OSETREN I




Fotografie laskave poskytl Dr Mitsuru Sonoda, D.D.S, Hokkaido, Japan

## INSTRUKCE

- 1** Očistete a izolujete zub  

- 2** Naleptejte povrch zubu pomocí Super Etch LV po dobu nejméně 30 sekund, nejvýše však E>0 c.kund  

- 3** Důkladně opláchnete vodou  

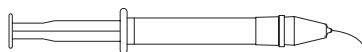- 4** Dokonale vysušte. Poznámka: suchý povrch je zcela nezbytný pro následující kroky  

- 5** Aplikovat Conseal f sealant fisur a ryh pomocí stříkacího nebo stětečku  

- 6** Osvetlete Conseal f lampou po dobu 20  


**UPOZORNĚNÍ:** vždy se ujistete, že zavít dávkovací koncovky Super Etch a Conseal f je pevně nasazen do stříkacího ky.

## DETAIL OBJEDNÁVKY



### STŘÍKÁČKA

Conseal f kit ve stříkáčkách	7850012
3x 1g (0,91ml) Conseal f stříkávka	
1x 2,5g (2ml) Super Etch stříkávka	
20 jednorázových dávkovacích koncovek	
Conseal f bulk kit ve stříkáčkách	7850013
10x 1g (0,91ml) Conseal f stříkávka	
40 jednorázových dávkovacích koncovek	

### ACCESSORIES

Dávkovací koncovky pro Conseal f a Super Etch LV stříkávky	8100061
20 jednorázových dávkovacích koncovek	



### LAHVICKA

Conseal f kit v lahvicce	7850008
2x 5,5g (5ml) Conseal f lahvicca	
2x 2,5g (2ml) Super etch stříkávka příslušenství	
Conseal f refil v lahvicce	7850006
5,5g (5ml) Conseal f lahvicca	
Conseal refil v lahvicce [svetle seda]	7850004
5,5g (5ml) Conseal sealant, svetle sedy	

[1] Chryst A (1998), Royal Melbourne Institute of Technology University Rheology and Materials Processing Centre.

[2] Messer LB, Calach H, Morgan MV (1997). The retention of pit and fissure sealants placed in primary school children by Dental Health Services, Victoria. Australian Dental Journal 42(4):223-239.

\* Delton Plus and Helioclear F are not the registered trademarks of SDI Limited.

\*\* Publikována a testovací SDI data.



YOUR SMILE. OUR VISION.



Vyrobena v Australii  
firmou SDI Limited  
3-15 Brunson Street,  
Bayswater, Victoria 3153  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIE** 1800 337 003  
**RAKOUSKO** 00800 0225 5734  
**BRAZILIE** 0800 770 1735  
**FRANCIE** 00800 0225 5734  
**NEMEČKO** 0800 100 5759

**ITALIE** 00800 0225 5734  
**NOVÝ ZELAND** 0800 808 855  
**SPANĚLSKO** 00800 0225 5734  
**VELKÁ BRITÁNIE** 00800 0225 5734  
**USA & KANADA** 1 800 228 5166