

SDI | ULTRAMAT 2

VYSOKORYCHLOSTNÍ AMALGAMÁTOR



KONZISTENTNÍ A PŘESNÁ TRITURACE

Ultramat 2 je kapslový amalgamátor, který má přesný, mikroprocesorem řízený časový spínač, dokonale a přesně časovaně rozmíchané směsi prášku pro použití s optimální klinickou charakteristikou.

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK

Ultramat 2 je vhodný pro všechny druhy kapslových dentálních materiálů.

BEZPEČNOSTNÍ KRYT

Bezpečnostní spínač automaticky přerušuje tření při otevření plastového krytu.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ OVLÁDACÍ SYSTEM

TICHÝ CHOD S NÍZKÝMI VIBRACEMI

NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

PRAKTICKY SNADNO SE ČISTÍ



FUNKCE

DOKONALE A PRESNE CASOVANE ROZMICHANI

Ultramat 2 ma presny, mikroprocesorem rizeny casovy spfnac, nastavitelny v rozmezi 0-16 sekund.

VYSOKY VYKON

Ultramat 2 ma frekvenci kmitanf 4600/min. +/-1%.

DUAL VOLTAGE

Prfstroj muze pracuje s napetfm od 120 do 240 V a 50 a 60Hz.

0-16

SEKUND
MIKROPROCESOR

4600

OSCILLATIONS

120 & 240v

VÝHODY

Dokonale a presne casovane

5 let záruka

0-16 sekund

Tichy chod s nizkymi vibracemi

dokonale a pfesne casovane


For mixing most encapsulated dental materials

Jednoduché pouziti ovladad

ROZMERY:

Sfrka	217mm	8.5"
Delka	173mm	6.75"
Vyska	180mm	7.12"
Napetf	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Vaha	2.765kg	6.095lbs

5 LET ZÁRUKA

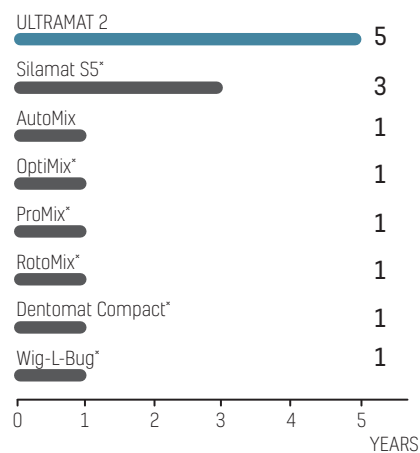

5 LET ZÁRUKA


VHODNÉ PRO VŠECHNY TOBOLKY

Ultramat 2 lze použít k tritraci zapouzdřených zubních výplňových materiálů od společnosti SDI Limited i od jiných společností. Následující tabulka uvádí některé příklady zubních výplňových materiálů zapouzdřených v SDI.

DENTAL DEVICE (CAPSULES)	TRITUARATION TIMES (SECONDS) USING ULTRAMAT 2 - SPEED SETTING: FIXED
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 spill Permite / 1, 2, 3 spill GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 spill Permite / 5 spill GS-80	6 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus / Riva Self Cure (Regular and Fast)	10



ORDER DETAILS

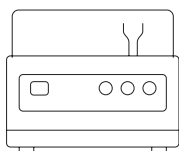

EQUIPMENT

Ultramat 2 (obsahuje napájecí kabel pro USA)	5546045
Ultramat 2 (Všechny země - zahrnuje napájecí kabel region do kterého je výrobek dodáván)	5546052
Ultramat X (Všechny země - zahrnuje napájecí kabel region do kterého je výrobek dodáván)	5546070

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat SS, Wig-L-Bug, are not registered trademarks of SDI Limited.



YOUR SMILE.
OUR VISION.



ACN 008 075 581



MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759

ITALY 00800 0225 5734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166