



AURA BULK FILL

ULTRA-UNIVERSAL-RESTAURATIONSSYSTEM



FÜLLEN,
STOPFEN,
FERTIG




SPIELEND LEICHTE FÜLLUNGEN

DAS KOMPOSIT FÜR SCHNELLE UND EINFACHE SEITENZAHNFÜLLUNGEN

- Natürliche Resultate mit nur einer Universalfarbe
- Hohe Polymerisationstiefe, keine Deckschicht nötig
- Leichte Applikation in wenigen Sekunden
- Optimales Handling dank wachsartiger Konsistenz: stopfbar und nicht klebrig.

FÜLLEN, STOPFEN, FERTIG

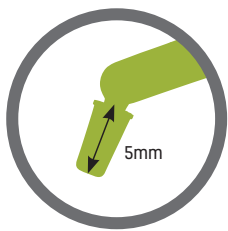


+



Ein Bulk Fill
Inkrement
bis 5 mm

20sec
LED-LICHTHÄRTUNG

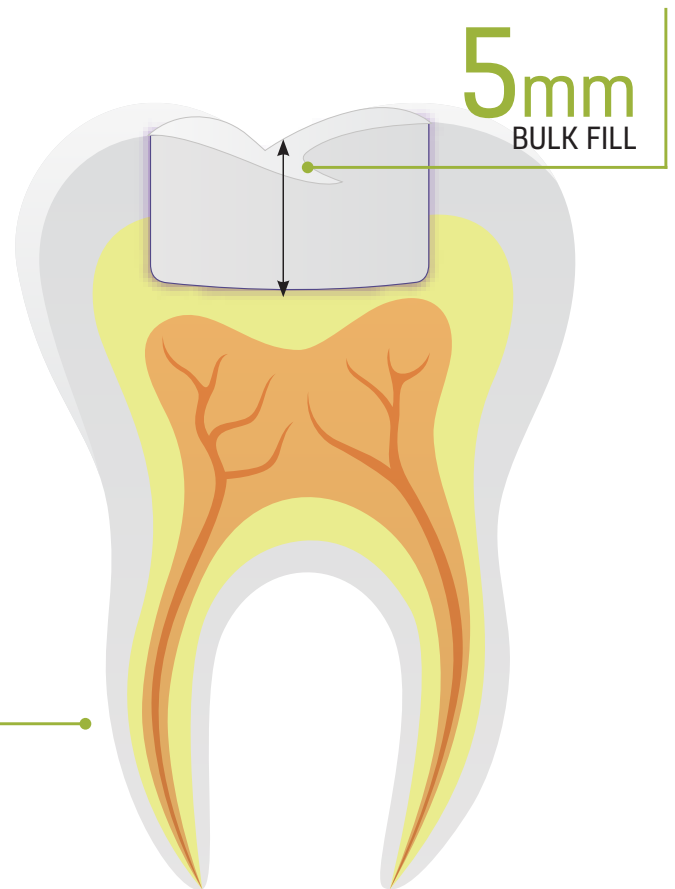

5mm
BULK FILL

ÄSTHETIK LEICHT GEMACHT FALLSTUDIEN

DR. BOB LOWE [USA]



VORHER



NACHER

DR. GREGOR THOMAS [GERMANY]



VORHER



NACHER

EINE FARBE. EINE FÜLLUNG.

GERINGE VOLUMEN-SCHRUMPUNG*

Aura Bulk Fill sorgt durch niedrigen Polymerisationsstress für langlebige Füllungen.

EXZELLENTEN BIEGEFESTIGKEIT*

Aura Bulk Fill widersteht starken Verformungskräften, ohne zu brechen.

HOHE DRUCKFESTIGKEIT*

Aura Bulk Fill hält den hohen Druckkräften im Mund stand.

2.21%

115 MPa

375 MPa

*SDI internal data

INDIKATIONEN

Restaurationen der Seitenzähne

Stumpfaufbauten

Schienung


Sandwich Technik mit Glasionomer





POLYMERISATIONSTIEFE

Die Opazität von Aura Bulk Fill ergibt sich aus den unterschiedlichen Brechungsindizes seiner zwei Bestandteile, Füller und Kunststoff. Bei der Lichthärtung ändert sich der Brechungsindex des Kunststoffs minimal und passt sich an den Index des Füllers an.

Dies senkt die Opazität vorübergehend, das Licht dringt tiefer ein, und die Polymerisationstiefe wird erhöht. Nach dem Härten gehen die Indizes wieder auseinander, und Aura Bulk Fill erhält die ideale Opazität für brillante Resultate mit Chamäleoneneffekt.

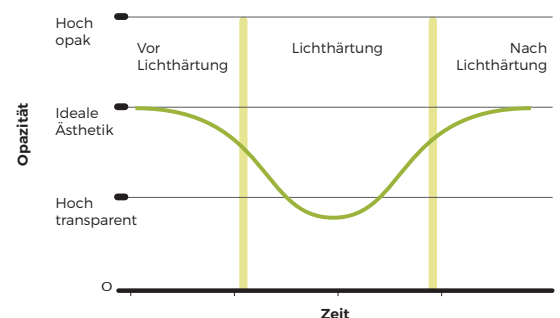

BESTELLINFORMATION

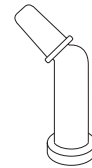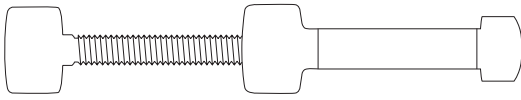

Spritzen

Spritzen - 4 g

8560012

COMPLETS

Complett Refill - 20 x 0,25 g

8565012

» Ich arbeite nun seit drei Jahren mit Aura Bulk Fill. Das Material lässt sich geschmeidig ausbringen, ist standfest und härtet extrem fest aus. Die Politur ist exzellent, und meine Seitenzahnfüllungen waren nie besser. Das Komposit eignet sich ideal für jede Füllung, egal ob in Milch- oder bleibenden Zähnen. Ich habe Aura Bulk Fill schon vielen Kollegen empfohlen und werde es weiter als mein Komposit der Wahl verwenden. «

DR LIEL GRINBAUM DMD

DIE AURA PRODUKT PALETTE

Aura
Aura Easy
Aura Bulk Fill



YOUR SMILE. OUR VISION.



04-2024

M100259 C



+D036M1002591+

MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILIEN 0800 770 1735
FRANKREICH 00800 0225 5734
DEUTSCHLAND 0800 100 5759

ITALIEN 00800 0225 5734
NEUSEELAND 0800 808 855
SPANIEN 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166