

LED radiometer

LED LIGHT CURING METER

PRÜFGERÄT FÜR DIE LICHTLEISTUNG VON LED - POLYMERISATIONSLAMPEN

FOTÔMETRO PARA LUZ DE LED

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE LAMPARAS LED

APPAREIL DE MESURE D'INTENSITE LUMINEUSE POUR LAMPE LED

RADIOMETRO PER LAMPADE FOTOPOLIMERIZZATRICI LED

LED CURING LICHT METER

LED RADIOMETER

LED-VALOKOVETTAJEN TEHOMITTARI

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LED

MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA

FÉNY INTENZÍTÁSMÉRŐ LED LÁMPÁHOZ

LED LIGHT VALGUSTUGEVUSE MÕÕDIK

MERILNIK LED LUČI

GAISMAS EMISIJAS DIOŽU LAMPAS TESTERIS


DIODINĒS (LED) LEMPOS MATUOKLIS

LED POLYMERIZAČNÍ LAMPA S REGULOVANÝM SVĚTLEM

LED POLYMERIZAČNÁ LAMPA S REGULOVANÝM SVETLOM

LED 型光重合器用ライトメーター

LED 固化光検測計

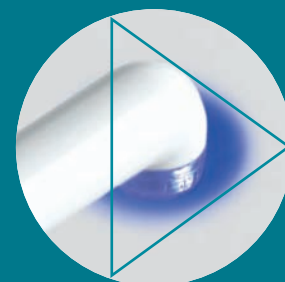

SDI

zur Überprüfung ihrer LED härtelampe

Sie verlassen sich auf Ihre Härtelampe für eine schnelle und komplette Aushärtung. Unzureichende Tiefenaushärtung ist die Hauptursache für fehlerhafte Komposit-Restaurationen.

LED Härtelampen können aus verschiedenen Gründen an Lichtleistung verlieren. Es ist sehr wichtig die Lichtleistung regelmäßig und genau zu testen. So stellen Sie sicher, dass eine konstant hohe Leistung erfolgt und dass falls notwendig, auftretende Schwierigkeiten sofort behoben werden können.



Für alle LED Härtelampen

Das LED Radiometer von SDI wurde auf alle LED Härtelampen geeicht. Es wurde entwickelt um den Bereich zwischen 400 und 525 Nanometer Wellenlänge zu messen und es zeigt Ergebnisse zwischen 0 und 2000 mW/cm² an.

Schnelles und einfaches Ablesen

Das LED Radiometer von SDI schaltet sich automatisch ein und zeigt das Ergebnis sofort mit großen digitalen Zahlen an. Die Höchstleistung wird kurz gespeichert, damit sie aufgeschrieben werden kann.

Leicht und kompakt

Das LED Radiometer mit ergonomischem Design wiegt nur 124g / 4,4oz und lässt sich einfach von einem Behandlungszimmer ins andere tragen. Es ist klein genug um auf jedes Instrumententray zu passen.

LED radiometer



LED Radiometer
Artikelnummer 5600028
1 x LED Radiometer
1 x 9 Volt Batterie (eingebaut)



Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

