

SDI | LUNA FLOW

FLIESSFÄHIGES UNIVERSALKOMPOSIT



PERFEKT
FLIESSFÄHIG
PERFEKT
STANDFEST

SDI FEIERT SEIN 50-JÄHRIGES BESTEHEN



LUNA FLOW

Luna Flow ist ein neues, extra festes, in zwei Viskositäten erhältliches fließfähiges Komposit.

Mit seiner Mischung verschieden großer ultrafeiner Füller für optimierte Verarbeitungs-, mechanische und optische Eigenschaften bietet Luna Flow hohe Röntgenopazität, kontrollierbare Applikation, leichte und exakte Farbanpassung, Farbstabilität, exzellente Festigkeit und Verschleißbeständigkeit.

Dies macht Luna Flow zu einer fantastischen, universellen Option für Lining, Unterfüllungen, Reparaturen von Provisorien oder Restaurationen und Klasse-V-Füllungen sowie andere Indikationen.

» «Tolles Produkt! So leicht applizierbar. Luna Flow ist perfekt, speziell die niedrige Viskosität. Ich liebe es.» «

🇨🇦 DR GERARD MELKI - KANADA



» «Luna Flow steht für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Dentalmaterialien bei SDI.» «

🇪🇸 DR MARIO GONZALEZ BONILLA - SPANIEN



FÜLLUNGEN MIT DER KOMBINATION LUNA FLOW UND LUNA 2



🇨🇦 Aufnahmen von Dr. Fay Goldstep & George Freedman - Kanada



🇪🇸 Aufnahmen von Dr. Jose Amengual Lorenzo - Spanien

» «SDI Produkte machen die tägliche Praxis schneller und rentabler, da sie zeitsparend beste Resultate liefern. SDI Komposite bieten exzellentes Handling, fantastisches Finish und natürlichen Glanz.» «

🇧🇷 PROF DR MARCO AURELIO CHAVES - BRASILIEN



🇦🇺 Aufnahmen von Dr. Bill Gergis, Gründer von Biomimetic Aesthetic Dentistry - Australien

PERFEKT FLIESSFÄHIG UND STANDFEST

Luna Flow ist in zwei Viskositäten erhältlich, je nach Ihrem klinischen Bedarf.

Luna Flow bietet exzellentes Handling und maximale Kontrolle bei der Applikation. Das hochwertige Komposit fließt wenn gewünscht, bleibt dann standfest und zieht keine Fäden.

Wenn noch mehr Flow gefragt ist, wählen Sie Luna Flow LV - die Option mit niedriger Viskosität.



FÜLLUNG MIT LUNA FLOW




🇨🇦 Aufnahmen von Dr. Carla Cohn, Kanada

NATÜRLICHE, ZAHNÄHNLICHE OPTIK BEI JEDEM LICHT

Mit Hilfe der „Logical Shade Matching Technology“ mit Chamäleoneffekt wurden die Farben von Luna Flow mit Helligkeit als Priorität entwickelt, und die Pigmente logisch ansteigend arrangiert, dies vereinfacht und beschleunigt die Abgleichung mit der Vita Classical® Farbskala.

Luna Flow imitiert mit Chamäleoneffekt und innovativer Farbanpassungstechnologie die Optik natürlicher Zähne bei allen Lichtquellen. Das bietet Ihren Patienten lebensechte Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz.

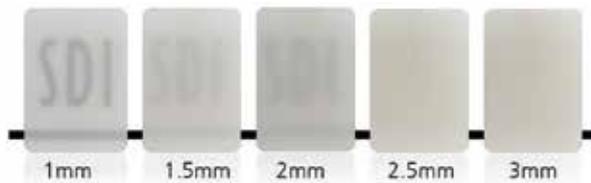

Transluzenz bei verschiedenen Stärken von Luna Flow Farbe A2



Scannen Sie den QR-Code zum Gratis-Download des kompletten Klinischen Transluzenz-Leitfadens und weiterer Informationen zu Luna Flow.

RÖNTGENOPAZITÄT LUNA FLOW
265 % Al
RÖNTGENOPAZITÄT DENTIN
100 % Al



Quelle: Interne Testdaten



**HOHE DRUCKFESTIGKEIT
421 MPa**

Luna Flow hat eine außerordentlich hohe Druckfestigkeit von 421 MPa. Die Kaukräfte sind ihrem Wesen nach meist Druckkräfte, daher eignet sich Luna Flow gut für Seitenzahnfüllungen, die der okklusalen Belastung standhalten.



**HOHE BIEGEFESTIGKEIT
128 MPa**

Luna Flow widersteht Kaukräften ähnlich wie Dentin. Luna Flow eignet sich ideal für Klasse-V-Kavitäten, bei denen Flexibilität wichtig für verlässlich langlebige Füllungen und zufriedene Patienten ist.



**ÜBERRAGENDE RÖNTGENOPAZITÄT
265 % Al**

Luna Flow zeigt dank seiner beeindruckenden Röntgenopazität (265 % Al) einen deutlichen Kontrast zu natürlichem Dentin/Schmelz (100 % / 170 % Al). Dies macht Diagnosen leichter und präziser.

FÜLLUNGEN MIT DER KOMBINATION LUNA FLOW UND LUNA 2



Aufnahmen von Dr. Teo Vaca - Spanien


» » „Farbanpassung und Handling von Luna Flow sind überragend. Die Füllungen fügen sich nahtlos ein.“ « «

DR FERNANDA ZEVIANI - AUSTRALIEN




PERFEKTE POLIERBARKEIT

Die Füllerformulierung von Luna Flow sorgt für exzellente Politur, Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit.

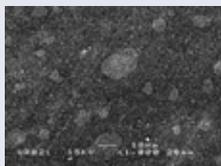

REM vor dem Finieren und Polieren

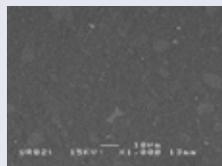

REM nach dem Finieren und Polieren

QUELLE: Unabhängiger Test der Unité de Recherches Biomatériaux Innovants et Interfaces (URB2I-EA 4462 Paris Descartes).

Leitung: Dr. Jean-Pierre Attal

GEBRAUCHSANWEISUNG


- 1 Die Zahnoberfläche mit Super Etch 37 % Phosphorsäure 10 Sekunden anätzen.



- 2 Gründlich spülen, überschüssiges Wasser entfernen und feucht halten.



- 3 Zipbond Universal anleitungsgemäß auftragen, 5 Sekunden mit sanftem Luftstrahl trocknen und 10 Sekunden lichterhärten.

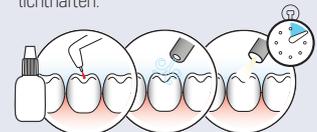

- 4 Luna Flow in Schichten von 2 mm oder weniger applizieren, 20 Sekunden lichterhärten, finieren und polieren.



BESTELLINFORMATIONEN



LUNA FLOW INTRO KIT SPRITZEN

20 x Einmalkanülen 20-Gauge (1 Packung à 20)	8566125
2 x LUNA FLOW Spritze A2	
2 x LUNA FLOW Spritze A3	



LUNA FLOW SPRITZE 2 G NACHFÜLLPACKUNGEN

LUNA FLOW Syr A1 - Vita®	8566101
LUNA FLOW Syr A2 - Vita®	8566102
LUNA FLOW Syr A3 - Vita®	8566103
LUNA FLOW Syr A3.5 - Vita®	8566104
LUNA FLOW Syr B1 - Vita®	8566106
LUNA FLOW Syr B2 - Vita®	8566107
LUNA FLOW Syr C2 - Vita®	8566110
LUNA FLOW Syr Opaque OA2: Opaker mit Farbe A2	8566115
LUNA FLOW Syr Opaque OA3: Opaker mit Farbe A3	8566116
LUNA FLOW Syr I - Inzisal: stärker transluzent, schmelz-ähnlich	8566118
LUNA FLOW Syr XB - Extra-Bleach-Farbe: entspricht OM2 Vita®	8566121
LUNA FLOW Syr 2XB - 2 x Extra-Bleach- Farbe: entspricht OM1 Vita®	8566122



LUNA FLOW LV INTRO KIT SPRITZEN

20 x Einmalkanülen 20-Gauge (1 Packung à 20)	8566225
2 x LUNA FLOW LV Spritze A2	
2 x LUNA FLOW LV Spritze A3	



LUNA FLOW LV SPRITZE NACHFÜLLPACKUNGEN 2G

LUNA FLOW LV Syr A1 - Vita®	8566201
LUNA FLOW LV Syr A2 - Vita®	8566202
LUNA FLOW LV Syr A3 - Vita®	8566203
LUNA FLOW LV Syr A3.5 - Vita®	8566204
LUNA FLOW LV Syr B1 - Vita®	8566206
LUNA FLOW LV Syr B2 - Vita®	8566207
LUNA FLOW LV Syr C2 - Vita®	8566210
LUNA FLOW LV Syr Opaque OA2: Opaker mit Farbe A2	8566215
LUNA FLOW LV Syr Opaque OA3: Opaker mit Farbe A3	8566216
LUNA FLOW LV Syr I - Inzisal: stärker transluzent, schmelzähnlich	8566218
LUNA FLOW LV Syr XB - Ex- tra-Bleach-Farbe: entspricht OM2 Vita®	8566221
LUNA FLOW LV Syr 2XB - 2 x Ex- tra-Bleach-Farbe: ent-spricht OM1 Vita®	8566222

LUNA FLOW BULK KITS SPRITZEN

5 x 2g Spritze LUNA FLOW 20 x Applikationskanülen [1 Packung à 20]	
LUNA FLOW BULK KIT A1 Entspricht Vita® A1	8566130
LUNA FLOW BULK KIT A2 Entspricht Vita® A2	8566131
LUNA FLOW BULK KIT A3 Entspricht Vita® A3	8566132

LUNA FLOW LV BULK KITS SPRITZEN

5 x 2 g Spritze LUNA FLOW LV 20 x Applikationskanülen [1 Packung à 20]	
LUNA FLOW LV BULK KIT A1 Entspricht Vita® A1	8566230
LUNA FLOW LV BULK KIT A2 Entspricht Vita® A2	8566231
LUNA FLOW LV BULK KIT A3 Entspricht Vita® A3	8566232

KLINISCHER TIPPS

Die Bleach-Farben XB und 2XB eignen sich exzellent für Füllungen nach Zahnaufhellung mit Pola (SDI Limited) oder auch bei milchig-weißen Zähnen.

POLA
ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

Luna Flow ist mit Zipbond Universal (SDI Limited) verwendbar - dem fluoridabgebenden Ein-Komponenten-Universaladhäsiv mit exzellentem Handling und desensibilisierender Wirkung.

SDI | ZIPBOND
UNIVERSAL ADHESIVE

LUNA FLOW RESTAURATION ANSEHEN

Scannen Sie den folgenden QR-Code.



YOUR SMILE.
OUR VISION.



HERGESTELLT IN AUSTRALIEN
von SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIEN 1800 337 003
ÖSTERREICH 00800 0225 5734
BRASIEN 0800 770 1735
FRANKREICH 00800 0225 5734
DEUTSCHLAND 0800 100 5759

ITALIEN 00800 0225 5734
NEUSEELAND 0800 808 855
SPANIEN 0800 0225 5734
GROSSBRITANNIEN 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166