

SDI

WAVE
WAVE MV
WAVE HV

FLOURIDFREISETZENDES, FLIESSFÄHIGES,
RÖNTGENSICHTBARES KOMPOSIT




NORMAL,
MITTELVISKOS
UND
HOCHVISKOS

VIELSEITIGES FLOWABLE FÜR IHRE KLINISCHEN SITUATIONEN

Wave, Wave MV und Wave HV sind vielseitige, fluoridabgebende, röntgenopake, lichthärtende fließfähige Komposite für Füllungen in Front- und Seitenzähnen. Wave ist ein sehr fließfähiges Material von extrem niedriger Viskosität, Wave MV ist mittelviskos und Wave HV ist hochviskos.

AUSWAHL AN 3 VISKOSITÄTEN

Die verschiedenen Konsistenzen und Viskositäten in der Wave Produktpalette bieten dem Benutzer eine Auswahlmöglichkeit für alle klinischen Anforderungen.

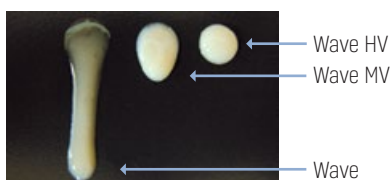

Verlauf am 90° Winkel nach 2 Minuten

SDI Flowable	Ähnlich wie
Wave	UltraSeal XT Plus*
	Premise Flowable*
Wave MV	Filtek Supreme Plus Flowable*
	Heliomolar Flow*
	Tetric Flow*
	Revolution Formula 2*
	Flow-It! ALC*
	Point 4 Flowable*
Wave HV	Filtek Flow*
	AeliteFlo LV*
	Esthet-X Flow*
	AeliteFlo*


** Keine eingetragenen Marken von SDI Limited

13
FARBEN



FLUORIDFREISETZUNG

Der karieshemmende Effekt von Fluoriden verbessert die Remineralisierung und hemmt die Demineralisierung des Schmelzes. In einem feuchten Umfeld fungieren orale Flüssigkeiten als Träger für die Fluorid Ionen in Wave, Wave MV und Wave HV, die vom Resin in den Zahn diffundieren.

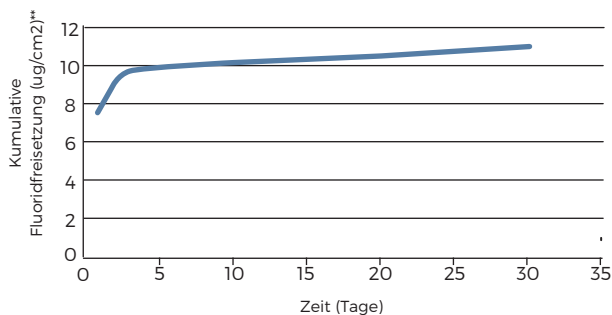


** Quelle: Attar, N. and Turgut, MD. [2003] 'Fluoride Release and Uptake Capacities of Fluoride-Releasing Restorative Materials', Operative Dentistry, 28(4), pp. 395-402.

DRUCKFESTIGKEIT

DRUCKFESTIGKEIT

Die hohe Druckfestigkeit von Wave, Wave MV und Wave HV erweitert die Anwendungsmöglichkeiten und ermöglicht mehrmalige Anwendung.

MPa @ 24 HOURS**

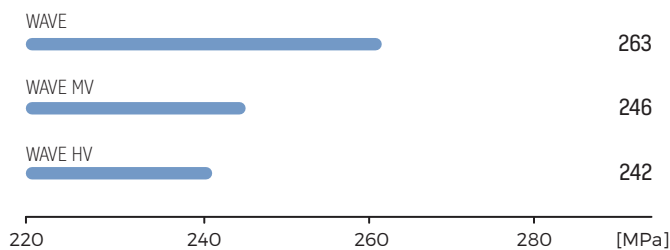

VORTEILE

Hohe Druckfestigkeit

Nanotechnologie

Drei verschiedene Viskositäten



UMFANGREICHE FARBAUSWAHL

Die Wave-Reihe 13 Farben von Wave eignen sich für alle Front- und Seitenzahnfüllungen: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, 0A2, Gingival und Bleach. Die Farbe Gingival empfiehlt sich für zervikale Läsionen bei älteren Patienten. Für Zähne, die heller als B1 sind, gibt es die Farbe Bleach.

FÜLLER

Wave, Wave MV und Wave HV enthalten speziell behandelte Füller für maximale Polierbarkeit, Verschleißfestigkeit und Belastbarkeit. Dank dieser speziell behandelten Füller lässt sich das Material auch leichter auspressen.

RÖNTGENSICHTBARKEIT

Wave, Wave MV und Wave HV sind alle röntgensichtbar. Dadurch kann Sekundärkaries an den Schnittstellen leichter erkannt werden.

NATÜRLICHE FLUORESZENZ

Wave, Wave MV und Wave HV enthalten einen fluoreszenten Bestandteil, welcher die Zähne unter ultraviolettem Licht perfekt und natürlich aussehen lässt. Es wird nicht bemerkt!



Wave auf den Zähnen unter UV Licht

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- 1** Zahn reinigen und isolieren
- 2** Überschüssiges Wasser entfernen. Vorzugsweise feucht halten, eine trockene Oberfläche ist auch akzeptabel
- 3** Ein Adhäsiv, z.B. Zipbond (SDI Limited)* gründlich benetzend auf alle Innenflächen auftragen.
- 4** Mit trockener, ölfreier Luft kräftig verblasen*. Die Oberfläche glänzend belassen.
- 5** Nach Anleitung des Adhäsiv-Herstellers lichterhärten.
- 6.1** Restaurationen der Klasse V oder
- 6.2** Tunnelpräparationen oder
- 6.3** Fissurenversiegelung oder
- 6.4** Minimalinvasiven Restaurationen der Klassen I, II, III, IV oder bei anderen Indikationen wie benötigt
- 7** Das Komposit mit einer Hochleistungs-LED-Lampe (440-480 nm) mit mindestens 500 mW/cm², z.B. Radii Xpert (SDI Limited), in Schichten von 2 mm lichterhärten.
- 8** Polieren und Finieren

* Nach Anleitung des Adhäsiv-Herstellers

BESTELLINFORMATION



EINZELSPRITZEN

Wave Spritzen

1 x 1 g Einzelspritze
5 Einwegtips

	WAVE	WAVE MV	WAVE HV
A1	7510102	8310102	8210102
A2	7510203	8310203	8210203
A3	7510304	8310304	8210304
A3.5	7510405	8310405	8210405
B1	7511101	8311101	8211101
B2	7511211	8311211	8211211
B3	7511314		
C2	7512223	8312223	8212223
C3	7512324		
D3	7513334		
OA2	7510204	8310204	8210204
Incisal	7514142		
Gingival (A5)	7514143		
Bleach	7514147	8314147	8214147

TIPS

Einwegtips für Wave Einzelspritzen

20 x Einwegtips (20 Gauge)	7500001
200 x Einwegtips (20 Gauge)	8100062

Einwegtips für Wave MV & HV Einzelspritzen

20 x Einwegtips (18 Gauge)	8100065
----------------------------	---------

KITS

Wave EinführungsKit

4 x 1 g Einzelspritzen A2, B3, C3, OA2	
20 Einwegtips	7500000

Wave HV EinführungsKit

4 x 1 g Einzelspritzen A2, B2, C2, OA2	
20 Einwegtips	8200000

Wave Vorratspackung

10 x 1 g Einzelspritzen	
40 Einwegtips	
A1	7500011
A2	7500012
A3	7500013



YOUR SMILE. OUR VISION.



MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILIEN 0800 770 1735
FRANKREICH 00800 0225 5734
DEUTSCHLAND 0800 100 5759
ITALIEN 00800 0225 5734

NEUSEELAND 0800 808 855
SPANIEN 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166