



ULTRAMAT 2

AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD



VIBRADOR MULTI-USO, DE ALTA VELOCIDAD

Ultramat 2, ofrece una mezcla de una gran precisión. Además, se puede usar con la mayoría de capsulas disponibles en el sector dental. Su alta potencia desarrolla 4600 oscilaciones por minuto, pero sin incrementar consumo de energía. Lo mejor de todo es que es robusto y fiable, con una garantía de 5 años, que le asegura una compra duradera.

MEZCLADOR MULTI-USO

Ultramat 2 es un mezclador multi-uso ideal para todo tipo de materiales dentales encapsulados.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Un micro-switch detiene automáticamente la trituración al levantar la tapa de Ultramat 2.

SISTEMA DE CONTROL TÁCTIL SIMPLE

SILENCIOSO Y ESTABLE

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

CÓMODO Y FÁCIL DE LIMPIAR



CARACTERÍSTICAS

TRITURACIÓN EXACTA Y CONSISTENTE

Ultramat 2 incluye un cronómetro (oscilador de cuarzo) de 0-16 segundos controlado por un microprocesador.

ALTO RENDIMIENTO DE ENERGÍA

Ultramat 2 es un mezclador con alto rendimiento de energía, ya que tiene una frecuencia de 4600 oscilaciones por minuto +/- 1%.

VOLTAJE DUAL

Ultramat 2 opera con voltajes entre 120 y 240v, 50 y 60Hz. Es compatible con múltiples voltajes y frecuencias de energía.

0-16
SEGUNDOS/
TEMPORIZADOR

4600
OSCILACIONES

**120 &
240v**

VENTAJAS

Trituración exacta y consistente

Garantía de 5 años

Temporizador ajustable de 0 a 16 segundos

Silencioso y estable

Trituración exacta y consistente

For mixing most encapsulated dental materials


Seguro y fácil de usar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	217mm	8.5"
Profundidad	173mm	6.75"
Altura	180mm	7.12"
Voltaje	120 / 240 voltios	50 / 60 Hz
Peso	2.765kg	6.095lbs

5 AÑOS
DE GARANTÍA.

5 AÑOS DE GARANTÍA

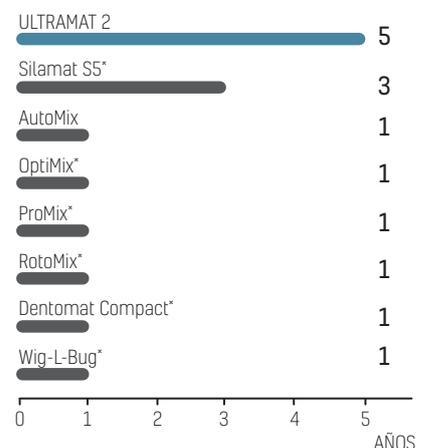


ADAPTABLE A TODAS LAS CAPSULAS

Ultramat 2 sirve para mezclar capsulas de material restaurador de SDI y de otras marcas. La lista siguiente indica ejemplos para productos de la marca SDI.

TIPO DE PRODUCTO (CAPSULES)	TIEMPO DE MEZCLA(SEGUNDOS) A USAR CON ULTRAMAT 2
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 spill Permite / 1, 2, 3 spill GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 spill Permite / 5 spill GS-80	6 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus / Riva Self Cure [regular y rápido]	10



REFERENCIAS DE PEDIDO

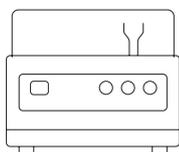

EQUIPO

Ultramat 2 (USA - includes power cord for USA)	5546045
Ultramat 2 (All countries - includes power cord for the region the product is shipped to)	5546052
Ultramat X (All countries - includes power cord for the region the product is shipped to)	5546070

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, are not registered trademarks of SDI Limited.



YOUR SMILE.
OUR VISION.



ACN 008 075 581



MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 0225 5734

NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166