

SDI | **POINTS**

APPLICATEURS À USAGE UNIQUE



APPLICATEURS À USAGE UNIQUE

Les applicateurs à usage unique Points sont utilisés pour transférer rapidement de petites quantités de matériau dans des zones difficiles d'accès. Les applicateurs Points sont résistants aux solvants courants contenus dans les différents matériaux dentaires.

FIBRES RÉSISTANTES AUX SOLVANTS

Les fibres des applicateurs Points sont résistantes aux environnements difficiles et aux solvants.

FIBRES NON- ABSORBANTES, NON- PELUCHEUSES

Les fibres ne se détacheront pas durant la procédure. La solution demeure dans les fibres jusqu'à l'application.



TROIS FORMATS

Les applicateurs Points sont présentés en trois dimensions, ultrafines, fines et médium, ce qui permet de prélever la quantité de produit nécessaire pour l'application clinique.

CODE COULEUR ERGONOMIQUE

Un code couleur ergonomique pour simplifier les procédures au fauteuil.

UN PRODUIT FLEXIBLE ET DOUX

Les pinceaux- applicateurs Points peuvent être recourbés ce qui maximise l'accessibilité.

CONDITIONNEMENTS

POINTS

Points violet - superfine 1 x 400 Points violet - super fines	8100122
Points vert foncé - fine 1 x 400 Points vert foncé - fines	8100116
Points bleu foncé - médium 1 x 400 Points bleu foncé - médium	8100118
Points Dispenser	8100131

Assortiment Points - Toutes les tailles 1 x 100 Points violet - ultrafines 1 x 100 Points vert foncé - fines 1 x 100 Points vert clair - fines 1 x 100 Points bleu foncé - médium	8100123
Points vert clair - fine 1 x 400 Points vert clair - fine	8100117
Points bleu clair - médium 1 x 400 Points bleu clair - médium	8100119

INDICATIONS

Application de scellement de sillons

Application d'adhésifs

Application de gel de mordançage

Application de fonds de cavité


Application de révélateurs de plaque

Élimination des excès de produit

Application de produits dans les canaux radiculaires

INSTRUCTIONS

- 1 Les applicateurs Points peuvent être utilisés droits ou recourbés

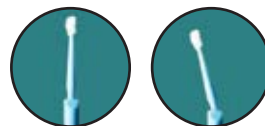

- 2 Tremper l'applicateur Points dans la solution puis appliquer le produit à l'endroit désiré

- 3 Jeter l'applicateur après utilisation

Suggestion : Lorsque plusieurs produits doivent être appliqués, utiliser des applicateurs Points de couleurs différentes afin d'éviter toute confusion.



YOUR SMILE. OUR VISION.



05-2023

M810306 C



+0036M8103061X

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
Par SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
www.sdi.com.au

BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
IRLANDE 01 886 9577
ITALIE 800 780625

NOUVELLE ZÉLANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 022 55 734
ROYAUME-UNI 00800 022 55 734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166