



AURA BULK FILL

MATÉRIAU RÉPARATEUR, ULTRA UNIVERSEL



CONDENSER,
SCULPTER
C'EST FINI!



RESTAURATIONS POSTERIEURES SIMPLIFIEES

RESTAURATIONS POSTERIEURES EN COMPOSITE RAPIDES ET SIMPLES

- Finition d'aspect naturel avec une seule teinte universelle
- Polymérisation profonde en une seule couche
- Mise en place aisée en quelques secondes
- La consistance est agréable, compacte et non collante pour optimiser la manipulation

CONDENSER, SCULPTER ET C'EST FINI



+




Remplissage de la cavité pouvant aller jusqu'à 5 mm

20sec

Photopolymérisation LED

5mm
BULK FILL

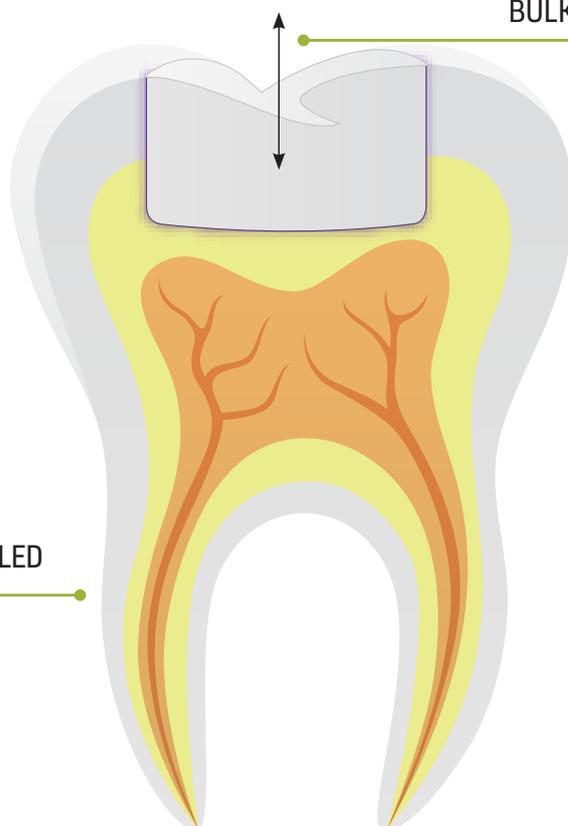

ESTHETIQUES REALISABLES CAS CLINIQUES

DR BOB LOWE [USA]



DR. GREGOR THOMAS [GERMANY]



UNE SEULE TEINTE UNIVERSELLE

FAIBLE COEFFICIENT DE RETRACTION VOLUMÉTRIQUE*

Aura Bulk Fill présente un très faible taux de rétraction pour donner des restaurations durables.

RESISTANCE A LA FLEXION ELEVEE*

Aura Bulk Fill résiste à d'importantes déformations sans se fracturer.

RESISTANCE A LA COMPRESSION ELEVEE*

Aura Bulk Fill résiste à d'importantes forces de compression dans la bouche.

2.21%

115MPa

375MPa

* Données internes de SDI

INDICATIONS

Restaurations postérieures

Reconstruction de moignon

Attelles

Technique sandwich avec verre ionomère




PROFONDEUR DE LA POLYMÉRISATION

L'opacité d'aura bulk fill est une résultante de la différence d'index de réfraction de ses deux composants, la charge et la résine.


Le processus de polymérisation modifie légèrement l'index de réfraction de la résine et des charges

Ceci réduit temporairement l'opacité, en permettant une pénétration plus profonde pour une grande profondeur de polymérisation.

Après la polymérisation, l'index sécarte à nouveau pour atteindre l'opacité idéale pour la finition brillante, façon caméléon, d'aura bulk fill.

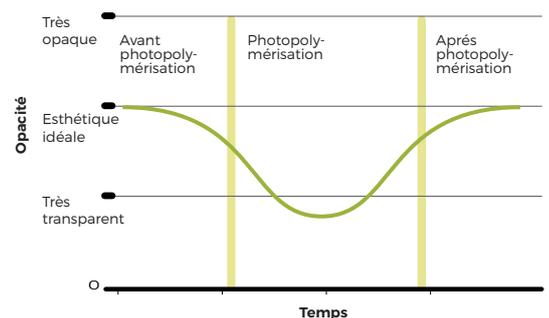


GAMME DISPONIBLE

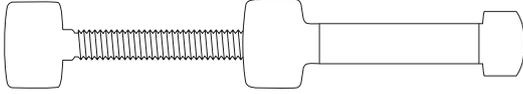

SERINGUES

Recharge seringue - 4g

8560012

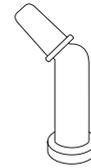

COMPULES

Recharge Compules - 20x 0.25g = 5g total

8565012

» Cela fait à présent trois ans que j'utilise aura bulk fill. La résine a une consistance agréable et polymérise fortement. Le rendu final est incroyable et mes composites précédents n'ont jamais été aussi bons. Les caractéristiques sont idéales pour n'importe quelle restauration, dents lactéales ou permanentes. J'ai recommandé ce produit à un grand nombre de confrères et j'envisage de continuer à utiliser l'aura bulk fill comme mon principal composite. «

DR LIEL GRINBAUM DMD

GAMME AURA

Aura
Aura Easy
Aura Bulk Fill



YOUR SMILE.
OUR VISION.



04-2024

M100260 C



+D036M1002601X

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
par SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUTRICHE 00800 0225 5734
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
ITALIE 00800 0225 5734

NOUVELLE ZÉLANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 0225 5734
ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166