



RIVA CEM

CIMENT DE SCHELLEMENT AU VERRE
IONOMÈRE ENRICHIS EN RÉSINE




RÉSINE DE SCÉLLEMENT PÂTE/ PÂTE FACILE À MÉLANGER POUR LES SCÉLLEMENTS DÉFINITIFS DES RESTAURATIONS INDIRECTES

Riva cem est auto polymérisable, radio opaque, matériau de scellement pâte/pâte au verre ionomère à libération élevée de fluor. Il est indiqué pour le scellement permanent de base métal et renforce le coeur céramique.



SYSTÈME DE MÉLANGE
PÂTE/PÂTE FACILE

 ionglass™

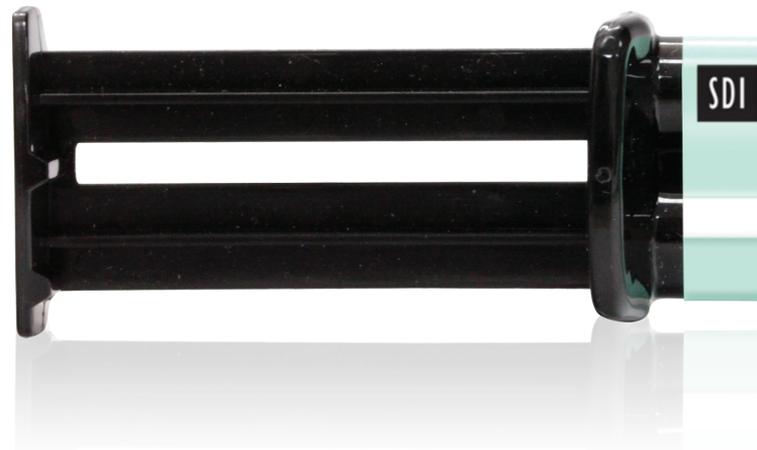

GRANDE RÉSISTANCE À LA
COLORATION

RIVA CEM EST DISPONIBLE EN
TEINTE UNIVERSELLE JAUNE
LÉGER EN SERINGUE DOUBLE
QUI PEUT FACILEMENT ÊTRE
MÉLANGÉ À LA MAIN.



RIVA CEM

1 X 8.5G SERINGUE RIVA CEM



RÉSISTANCE
D'ADHESION ÉLEVÉE

CARACTERISTIQUES CLES

Option polymérisation légère pour un enlèvement rapide des excès de ciment

Résistance d'adhésion élevée

Grande résistance à la coloration

Libération prolongée de fluorure

Sans Bisphénol A

Système pâte / pâte facile à mélanger



OPTION POLYMERISATION
LÉGÈRE POUR UN
ENLÈVEMENT RAPIDE
ET FACILE DES EXCÈS
DE CIMENT



LIBÉRATION PROLONGÉE
DE FLUORURE

Photopolymérisation de tous les excès pendant 5 secondes en utilisant une lampe led [460-480 nm émission]. Puis, les excès peuvent facilement être enlevés en utilisant une sonde, après 1 minute 45 secondes, lorsque le ciment devient caoutchouteux.


RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT [MPA]



RIVA CEM

INDICATION	TYPE DE RESTAURATION
PFM	Couronnes & bridges
Résine	Couronnes, bridges, inlay, onlay & tenons fibrés
Métaux	Couronnes, bridges, inlay & onlay, appareil d'orthodontie
Céramique (haute résistance)	Couronnes & bridges
Toutes céramique	Inlays

GAMME DISPONIBLE

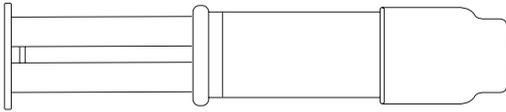

SERINGUES

Riva Cem 8800700
1 x 8.5g riva cem seringue

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de travail	1'45"
Temps de prise	4'30"
Résistance au cisaillement [MPa] - Dentine	13.03 ± 3.40
Résistance au cisaillement [MPa] - Email	9.99 ± 3.17
Résistance à la compression [MPa]	108



YOUR SMILE. OUR VISION.



FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
par SDI Limited,
Bayswater, Victoria 3153
Australie 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUTRICHE 00800 0225 5734
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
ITALIE 00800 0225 5734

NOUVELLE-ZÉLANDE 0800 734 034
ESPAGNE 00800 0225 5734
ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166