

# SDI | ULTRAMAT 2

VIBREUR UNIVERSEL



# VIBREUR UNIVERSEL DE DERNIERE GENERATION

Le vibreur Ultramat 2 assure une trituration constante et précise. L'Ultramat 2 permet d'utiliser tous types de capsules de matériaux dentaires. L'Ultramat 2 vibre à une vitesse de 4600 oscillations par minute + ou - 1%. Il est économique car il peut être utilisé en basse tension. La robustesse et la fiabilité de l'Ultramat 2 permettent **une garantie de 5 ans**, ce qui en fait un achat durable.

## VIBREUR UNIVERSEL

Ultramat 2 permet l'utilisation de tous types de capsules de matériaux dentaires.

## APPAREIL SÛR

Le micro-switch automatique arrête la vibration si le capot est ouvert.

## TOUCHE DE CONTROLE SIMPLE ET RAPIDE

VIBRATION SILENCIEUSE

FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

NETTOYAGE PRATIQUE ET SIMPLE



# CARACTÉRISTIQUES

## TRITURATION CONTRÔLÉE ET PRÉCISE

De 0 à 16 secondes, un microprocesseur à quartz contrôle le temps d'oscillation.

## RAPIDE, ET EFFICACE

L'Ultramat 2 est ultra rapide grâce à une fréquence de mixage de 4600 oscillations par minute + ou -1%.

## HAUTE ET BASSE TENSION

L'ultramat fonctionne en 120 et 240v, 50 et 60 Hz.

# 0-16

TRITURATION  
CONTRÔLÉE

# 4600

OSCILLATIONS

# 120 & 240v

## AVANTAGES

Trituration contrôlée et précise

5 ans de garantie

Oscillations de 0 à 16 secondes

Trituration silencieuse

Mélange optimal et constant


Pour le mélange de la plupart des matériaux dentaires en capsule

Simple d'utilisation

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur	217mm	8.5"
Profondeur	173mm	6.75"
Hauteur	180mm	7.12"
Voltage	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Poids	2.765kg	6.095lbs

## 5 ANS DE GARANTIE

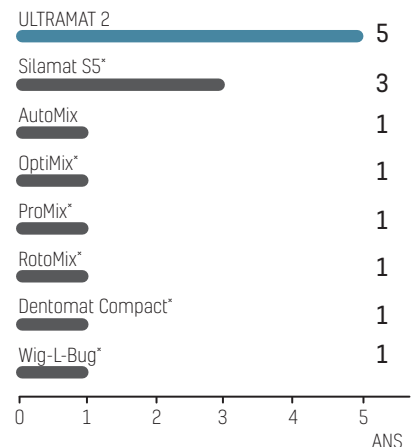

\*N'est pas une marque déposée de SDI

# 5 ANS DE GARANTIE.


## POUR TOUS TYPES DE CAPSULES

L'Ultramat 2 peut être utilisé pour la trituration de tous types de capsules de matériaux dentaires de SDI aussi bien que de toutes autres origines. Le tableau ci-dessous liste quelques exemples de capsules de matériaux SDI en capsules.

MATERIAUX DENTAIRE (CAPSULES)	TEMPS DE TRITURATION (SECONDES) AVEC ULTRAMAT 2
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 doses Permite / 1, 2, 3 doses GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 doses Permite / 5 doses GS-80	6 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus / Riva Self Cure (Régulier et Rapide)	10



## GAMME DISPONIBLE

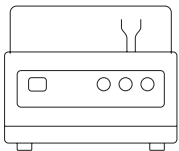

### APPAREILS

<b>Ultramat 2</b> (Tous pays : est inclus un câble d'alimentation adapté au pays où est expédié l'Ultramat 2)	5546052
<b>Ultramat X</b> (Tous pays : est inclus un câble d'alimentation adapté au pays où est expédié l'Ultramat 2)	5546070



YOUR SMILE.  
OUR VISION.



FABRIQUÉ EN AUSTRALIE  
par SDI Limited,  
Bayswater, Victoria 3153

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIE** 1800 337 003  
**AUTRICHE** 00800 0225 5734  
**BRÉSIL** 0800 770 1735  
**FRANCE** 00800 0225 5734  
**ALLEMAGNE** 0800 100 5759

**ITALIE** 00800 0225 5734  
**NOUVELLE-ZÉLANDE** 0800 808 855  
**ESPAGNE** 00800 0225 5734  
**ROYAUME-UNI** 00800 0225 5734  
**ÉTATS-UNIS ET CANADA** 1 800 228 5166