



AURA BULK FILL

MATERIALE DA RESTAURO ULTRA UNIVERSALE



RIEMPI,
MODELLA
E VIA




LA SEMPLICITÀ DI BULK FILL.

RESTAURI POSTERIORI IN COMPOSITO SEMPLICI E VELOCI.

- Finitura dall'aspetto naturale con una sola tonalità universale.
- Elevata profondità di polimerizzazione senza la necessità di uno strato di materiale superiore.
- Facile applicazione in pochi secondi.
- La consistenza cerosa è compatta e non appiccicosa, ideale per ottimizzare la manipolazione.

RIEMPI, MODELLA E VIA

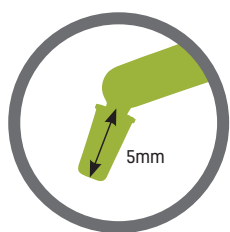

+




profondità di riempimento di 5 mm

20sec

Fotopolimerizzare con lampada a LED

5mm
BULK FILL

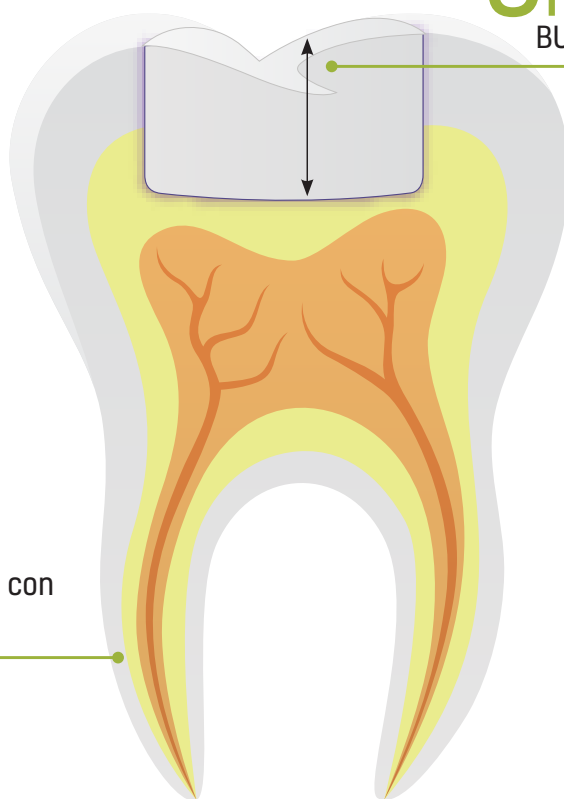

ESTETICA RAGGIUNTA

CASI STUDIO

DR BOB LOWE [USA]



PRIMA

DOPO

DR. GREGOR THOMAS [GERMANY]



PRIMA

DOPO

UNA SOLA TONALITÀ. UN SOLO RESTAURO.

BASSO RITIRO VOLUMETRICO

Aura bulk fill consente uno stress ridotto per fornire restauri duraturi.

ECCELLENTE RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Aura bulk fill resiste alle deformazioni maggiori senza fratturarsi.

ELEVATA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

Aura bulk fill resiste alle alte forze di compressione in bocca.

2.21%

115MPa

375MPa

*SDI internal data

INDICAZIONI

Restauri posteriori

Ricostruzione di monconi

Splintaggio


Tecnica a sandwich con vetro-ionomero




PROFONDITÀ DI POLIMERIZZAZIONE

L'opacità del riempimento di aura bulk fill è una funzione della differenza nell'indice di rifrazione dei suoi due componenti, il materiale di riempimento e la resina.

Il processo di polimerizzazione altera leggermente l'indice di rifrazione della resina, per eguagliare l'indice di rifrazione del materiale di riempimento. Ciò riduce temporaneamente l'opacità, consentendo una penetrazione più profonda per una maggiore profondità di polimerizzazione. Dopo la polimerizzazione, l'indice si ripristina per raggiungere l'opacità ideale per una finitura brillante, lo stile camaleontico, di aura bulk fill.

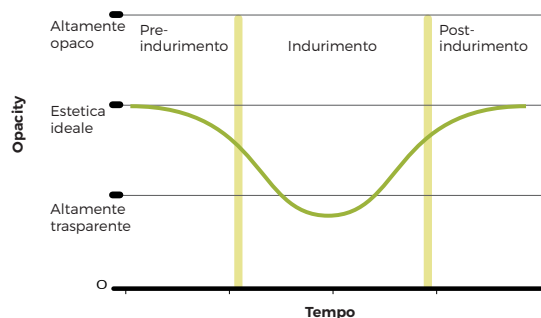


CODICI DI RIORDINO

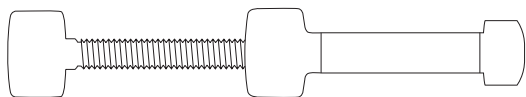

SIRINGHE

Ricambi siringhe - 4g

8560012

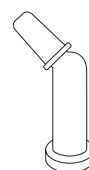

CAPSULE

Ricambio capsule - 20x 0.25g = 5g total

8565012

» Adopero aura bulk fill da tre anni. La resina fuoriesce in modo regolare senza ritirarsi e polimerizza in modo estremamente forte. Lo smalto è sorprendente e i miei restauri in composito posteriori non sono mai stati migliori di così. Possiede le caratteristiche ideali per qualsiasi restauro, denti primari o permanenti. Ho consigliato questo prodotto a molti colleghi e penso di continuare a utilizzare aura bulk fill come mio principale composito. «

DR LIEL GRINBAUM DMD

GAMMA DI PRODOTTI AURA

Aura
Aura Easy
Aura Bulk Fill
Aura Easyflow



YOUR SMILE. OUR VISION.



04-2024

M100327 E



+D036M1003271

PRODOTTO IN AUSTRALIA
da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILE 0800 770 1735
FRANCIA 00800 0225 5734
GERMANIA 0800 100 5759
ITALIA 00800 0225 5734

NUOVA ZELANDA 0800 808 855
SPAGNA 00800 0225 5734
REGNO UNITO 00800 0225 5734
USA e CANADA 1 800 228 5166