

gs-80

ECONOMICAL, HIGH STRENGTH ADMIX AMALGAM

WIRTSCHAFTLICHES MISCHPARTIKEL AMALGAM, HOHE DRUCKFESTIGKEIT

AMÁLGAMA ADMIX ECONÔMICA E DE ALTA RESISTÊNCIA

AMALGAMA MEZCLA, ALTA RESISTENCIA, ECONOMICA

AMALGAME MIXTE SPHERES ET COPEAUX, A FORTE RESISTANCE

A LA COMPRESSION ET ECONOMIQUE



ECONOMISCH, VERSTERKT ADMIX AMALGAAM

RIMELIG OG STERKT, ADMIX AMALGAM

ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

徳用強力アドミックスアマルガム

經濟型、高強度混合型銀汞合金

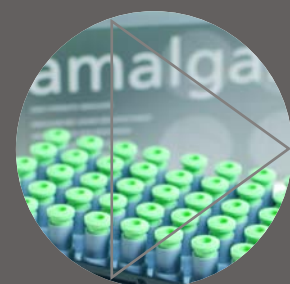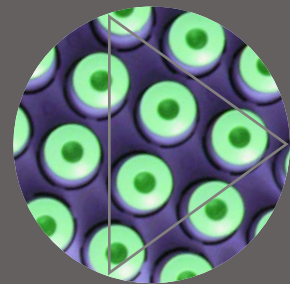

SDI

amalgama non gamma 2 a particelle miste, economica

gs-80



L'amalgama a particelle miste, non gamma 2, tecnicamente avanzata, ad un prezzo competitivo.

La forza elevata di GS-80 e l'alterazione dimensionale positiva assicurano la lunga durata del restauro e la soddisfazione del paziente.

Dal 1986, anno in cui GS-80 fu lanciata sul mercato, sono stati realizzati con successo più di 200 milioni di restauri.

Proprietà fisiche


composizione	Ag 40%, Sn 31.3%, Cu 28.7%, Hg 47.9%
particelle della lega	sferiche e miste
resistenza alla compressione in 1 ora	225MPa (32,625psi)
resistenza alla compressione in 24 ore	510MPa (73,950psi)
resistenza alla trazione diametrale in 1 ora	22MPa (3,190psi)
resistenza alla trazione diametrale in 24 ore	54MPa (7,830psi)
deformazione statica in 7 giorni	0.1%
alterazione dimensionale in 24 ore	+2µm/cm

Modellazione ottimale

La miscela omogenea di GS-80, la facilità di applicazione, condensazione, lucidatura, modellazione, posizionamento e l'ottima qualità dei contatti interprossimali assicurano un ottimo restauro.

Alta resistenza alla compressione

La sua alta resistenza alla compressione, riduce notevolmente il rischio di fratture del restauro,⁽¹⁾ assicurandone una lunga durata nel tempo.

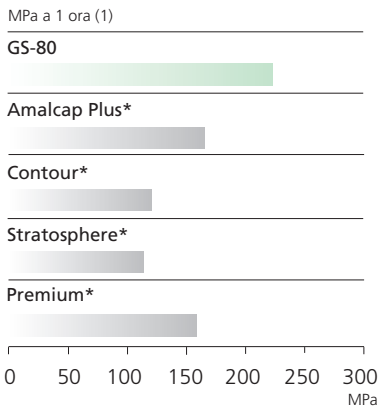


Sistema delle capsule

Le capsule SDI sono studiate per dare un'accurata e consistente omogeneità ad ogni miscelazione.




Alterazione dimensionale positiva

L'alterazione dimensionale positiva di GS-80 assicura un'eccellente chiusura marginale.⁽¹⁾ Valori negativi possono contribuire alla sensibilità post-operatoria.

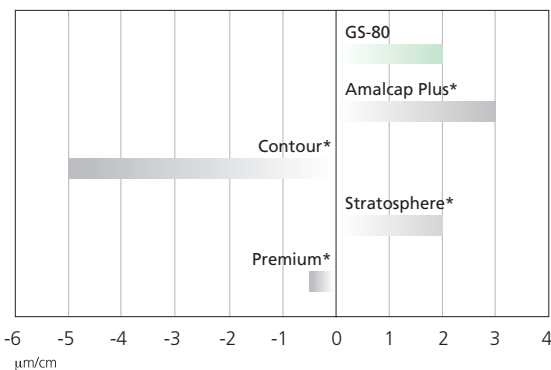

Maggiore scelta dei tempi di lavorazione e della dimensione delle capsule

L'ampia scelta dei tempi di lavorazione e di applicazione consente di modellare senza difficoltà anche i restauri più estesi.

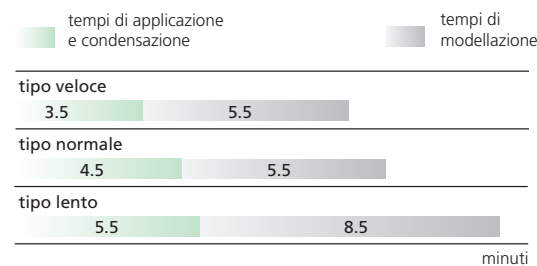

Ultramat 2

Ultramat 2 a doppio voltaggio, dotato di timer e controllato da un microprocessore ad alta precisione, consente una triturazione uniforme ed accurata, garantendo un trattamento e caratteristiche cliniche della miscela ottimali.



Capsule convenzionali

I colori dello stantuffo indicano le diverse dosi:



La parte rimanente della capsula indica la velocità di lavorazione:



NOTA: la capsula da 5 dosi è disponibile solo nel tipo normale.



gs-80



Confezioni da 50 capsule – una dose 400mg di lega

4401404 tipo lento
4401303 tipo normale
4401202 tipo veloce

Confezioni da 50 capsule – due dosi 600mg di lega

4402404 tipo lento
4402303 tipo normale
4402202 tipo veloce

Confezioni da 50 capsule – tre dosi 800mg di lega

4403404 tipo lento
4403303 tipo normale
4403202 tipo veloce

Confezioni da 50 capsule – cinque dosi 1200mg di lega

4405000 tipo normale

Barattoli da 500 capsule – una dose 400mg di lega

4421404 tipo lento
4421303 tipo normale
4421202 tipo veloce

Barattoli da 500 capsule – due dosi 600mg di lega

4422404 tipo lento
4422303 tipo normale
4422202 tipo veloce

Barattoli da 500 capsule – tre dosi 800mg di lega

4423404 tipo lento
4423303 tipo normale
4423202 fast set

Barattoli da 500 capsule – cinque dosi 1200mg di lega

4425000 tipo normale

gs-80 tavolette

4450303 tipo normale 5oz
4450505 tipo normale 1oz
4440303 tipo normale 150g
4440404 tipo normale 30g

gs-80 polvere

4460303 tipo normale 5oz
4470303 tipo normale 30g
4480303 tipo normale 50g
4490303 tipo normale 250g

Le capsule GS-80 sono conformi agli standard ISO 24234, ed alla Specifica nr.1 ANSI/ADA.

*Amalcap Plus, Contour, Stratosphere e Premium non sono marchi registrati di SDI Limited.

(1) Fonte pubblicata e dati dei test eseguiti da SDI.



Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



M440007 B

+D036M4400071S