



GS-80

ECONOMICAL, HIGH STRENGTH,
ADMIX AMALGAM



AMALGAMA NON GAMMA 2 A PARTICELLE MISTE, ECONOMICA

L'amalgama a particelle miste, non gamma 2, tecnicamente avanzata, ad un prezzo competitivo.

La forza elevata di GS-80 e l'alterazione dimensionale positiva assicurano la lunga durata del restauro e la soddisfazione del paziente.

Dal 1986, anno in cui GS-80 fu lanciata sul mercato, sono stati realizzati con successo più di 200 milioni di restauri.

**NON INTACCATA
DAI FLUIDI**

**MICRO-INFILTRAZIONI
RIDOTTE AL MINIMO**

**ALTA RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE**

MODELLAZIONE OTTIMALE

La miscela omogenea di GS-80, la facilità di applicazione, condensazione, lucidatura, modellazione, posizionamento e l'ottima qualità dei contatti interprossimali assicurano un ottimo restauro.



ULTRAMAT 2

Ultramat 2 a doppio voltaggio, dotato di timer e controllato da un microprocessore ad alta precisione, consente una triturazione uniforme ed accurata, garantendo un trattamento e caratteristiche cliniche della miscela ottimali.




ALTA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

ALTERAZIONE DIMENSIONALE POSITIVA


L'alterazione dimensionale positiva di GS-80 assicura un'eccellente chiusura marginale.⁽¹⁾ Valori negativi possono contribuire alla sensibilità post-operatoria.

ALTA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE @ 1 ORA ⁽¹⁾

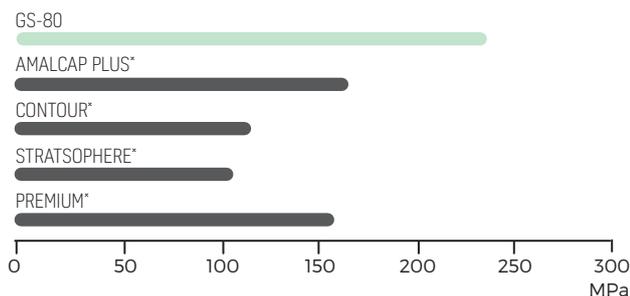

ALTERAZIONE DIMENSIONALE POSITIVA


L'alterazione dimensionale positiva di GS-80 assicura un'eccellente chiusura marginale.⁽¹⁾ Valori negativi possono contribuire alla sensibilità post-operatoria.

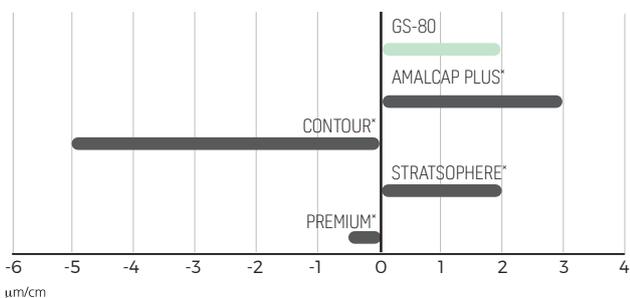

MAGGIORE SCELTA DEI TEMPI DI LAVORAZIONE E DELLA DIMENSIONE DELLE CAPSULE

L'ampia scelta dei tempi di lavorazione e di applicazione consente di modellare senza difficoltà anche i restauri più estesi.

TEMPI DI APPLICAZIONE E CONDENSAZIONE

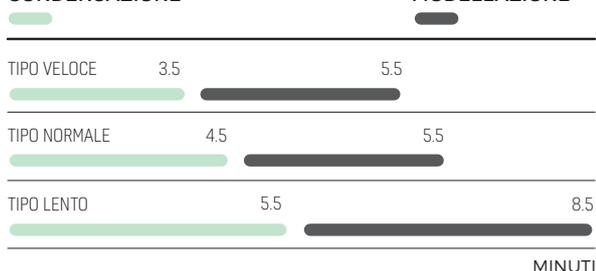


PROPRIETÀ FISICHE

composizione:	Ag 40%, Sn 31.3%, Cu 28.7%, Hg 47.9%
particelle della lega	sferiche e miste
resistenza alla compressione in 1 ora	225MPa [32,625psi]
resistenza alla compressione in 24 ore	510MPa [73,950psi]
resistenza alla trazione diametrale in 1 ora	22MPa [3,190psi]
resistenza alla trazione diametrale in 24 ore	54MPa [7,830psi]
deformazione statica in 7 giorni	0.1%
alterazione dimensionale in 24 ore	+2µm/cm


SISTEMA DELLE CAPSULE

Le capsule SDI sono studiate per dare un'accurata e consistente omogeneità ad ogni miscelazione.

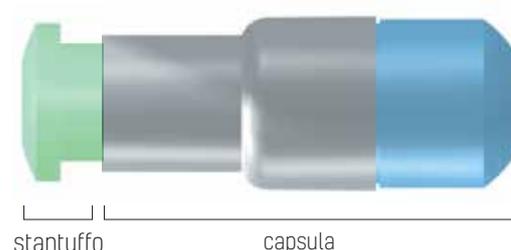

CAPSULE CONVENZIONALI

I colori dello stantuffo indicano le diverse dosi:

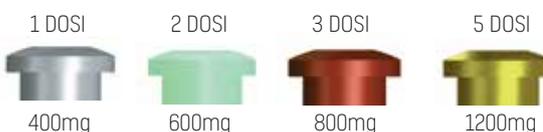

La parte rimanente della capsula indica la velocità di lavorazione:



NOTA: la capsula da 5 dosi è disponibile solo nel tipo normale.

CODICI DI RIORDINO



GS-80 CAPSULE

Confezioni da 50 capsule - una dose 400mg di lega

tipo normale	4401203
tipo veloce	4401202

Confezioni da 50 capsule - due dose 600mg di lega

tipo lento	4402404
tipo normale	4402303
tipo veloce	4402202

Confezioni da 50 capsule - tre dose 800mg di lega

tipo normale	4403303
tipo veloce	4403202

Confezioni da 50 capsule - cinque dosi 1200mg di lega

tipo normale	4405000
--------------	---------

Barattoli da 500 capsule - una dose 400mg di lega

tipo lento	4421404
tipo normale	4421403
tipo veloce	4421402

Jars of 500 capsules - Two Spill 600mg alloy

tipo normale	4422303
tipo veloce	4422202



Jars of 500 capsules - Three Spill 800mg alloy

tipo normale	4423303
tipo veloce	4423202

Jars of 500 capsules - Five Spill 1200mg alloy

tipo normale	4425000
--------------	---------

Le capsule GS-80 sono conformi agli standard ISO 24234, ed alla Specifica nr.1 ANSI/ADA.
 *Amalcap Plus, Contour, Stratosphere e Premium non sono marchi registrati di SDI Limited.
 [1] Fonte pubblicata e dati dei test eseguiti da SDI.

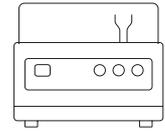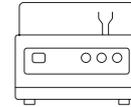

ATTREZZATURA

Ultramat 2 Vibratore multiuso ad alta velocità	5546052
Ultramat S Vibratore multiuso ad alta velocità	5546058

TEMPI DI MISCELAZIONE

Ultramat 2	
Frequenza	Fixed (4550 rpm)
1, 2 & 3 dosi	8 ± 1 sec
5 dosi	6 ± 1 sec
Ultramat S	
Frequenza	Fixed (4600 rpm)
1, 2 & 3 dosi	8 ± 1 sec
5 dosi	6 ± 1 sec



YOUR SMILE. OUR VISION.



PRODOTTO IN AUSTRALIA
 by SDI Limited
 3-15 Brunson Street,
 Bayswater, Victoria 3153
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILE 0800 770 1735
FRANCIA 00800 0225 5734
GERMANIA 0800 100 5759

ITALIA 00800 0225 5734
NUOVA ZELANDA 0800 808 855
SPAGNA 00800 0225 5734
REGNO UNITO 00800 0225 5734
USA E CANADA 1 800 228 5166