

# LED radiometer

LED LIGHT CURING METER

PRÜFGERÄT FÜR DIE LICHTLEISTUNG VON LED - POLYMERISATIONSLAMPEN

FOTÔMETRO PARA LUZ DE LED

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE LAMPARAS LED

APPAREIL DE MESURE D'INTENSITE LUMINEUSE POUR LAMPE LED

RADIOMETRO PER LAMPADE FOTOPOLIMERIZZATRICI LED

LED CURING LICHT METER

LED RADIOMETER

LED-VALOKOVETTAJEN TEHOMITTARI

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LED

MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA

FÉNY INTENZÍTÁSMÉRŐ LED LÁMPÁHOZ

LED LIGHT VALGUSTUGEVUSE MÕÕDIK

MERILNIK LED LUČI

GAISMAS EMISIJAS DIOŽU LAMPAS TESTERIS


DIODINĒS (LED) LEMPOS MATUOKLIS

LED POLYMERIZAČNÍ LAMPA S REGULOVANÝM SVĚTLEM

LED POLYMERIZAČNÁ LAMPA S REGULOVANÝM SVETLOM

LED 型光重合器用ライトメーター

LED 固化光検測計

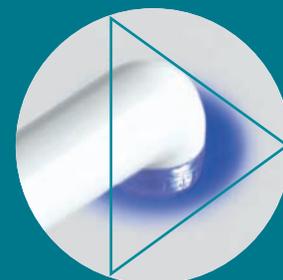

SDI

# per controllare la vostra lampada LED

Voi fate affidamento sulla vostra lampada LED per le polimerizzazioni veloci e ad alta intensità. La polimerizzazione incompleta è la maggior causa di fallimento delle resine composite.

Per diversi motivi, le lampade fotopolimerizzatrici LED possono perdere intensità. Diventa imperativo verificare periodicamente l'efficacia della luce emessa, per essere certi di prestazioni eccellenti oppure, se necessario, per correggere un problema di intensità.



## **Per tutte le lampade fotopolimerizzatrici LED**

Il LED Radiometer SDI è calibrato per tutte le lampade fotopolimerizzatrici LED. E' concepito per misurare l'intensità di luce emessa nello spettro della lunghezza d'onda di 400 e 525 nanometri e per fornire letture da 0 a 2000mW/cm<sup>2</sup>.

## **Letture facile ed istantanea**

Il LED Radiometer SDI si accende automaticamente, dando una lettura digitale immediata, con numeri ben visibili. La lettura più elevata viene mantenuta temporaneamente per la memorizzazione.

## **Leggero e compatto**

Con il peso di soli 124gr./ 4.4 oz e la sua linea ergonomica, il LED Radiometer è uno strumento facile da trasportare da una stanza all'altra. Inoltre, è abbastanza piccolo per poter stare in qualsiasi vassoio.



Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)



radiometer

LED



**LED Radiometer**  
Riordino 5600028  
1 radiometro LED  
1 batteria da 9V (installata)