

# SDI | ULTRAMAT S

VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ



# SEMPLICISSIMO: SOLO 3 PULSANTI

Tre impostazioni per il tempo (6, 8 e 10 secondi) consentono di miscelare tutti i materiali in capsule. L'unità può essere arrestata in qualsiasi momento premendo questi pulsanti durante il funzionamento o semplicemente sollevando il coperchio.

## FACILE DA PULIRE!

Il rivestimento igienico monosuperficie facilita la pulizia per il controllo delle infezioni e la superficie in plastica non porosa può essere pulita con qualsiasi disinfettante di uso dentistico.

## VIBRAZIONE ESTREMAMENTE SILENZIOSA

A differenza di altri vibratorii per amalgama, Ultramat S è poco rumoroso. La vibrazione ridotta di tutti i componenti esterni garantisce che non si sposti dalla propria posizione.

## ADATTO A TUTTE LE CAPSULE

Le forcelle pieghevoli consentono di inserire molti tipi di capsule arrotondate (capsule di amalgama) oltre a quelle con ugelli sporgenti (capsule di vetroionomero).



# FUNZIONES

## MISCELAZIONE PRECISA E ACCURATA

Il timer dell'oscillatore controllato dal microprocessore di Ultramat S garantisce una miscelazione precisa e accurata.

## ALTA POTENZA, BASSO CONSUMO

Con una frequenza di miscelazione di 4550 oscillazioni al minuto (+/- 1%), Ultramat S garantisce la miscelazione completa di qualsiasi materiale dentale con un consumo energetico relativamente ridotto.

## DOPPIO VOLTAGGIO

Ultramat S è compatibile con diversi voltaggi e frequenze di alimentazione: 100-120 V e 220-240 V, 50 e 60 Hz.

# 0-10

SECOND  
MICROPROCESSORE

# 4550

OSCILLANTE

# 120 & 240v

## VANTAGGI

Miscelazione precisa ed accurata

Vibrazione estremamente silenziosa

Semplice da usare: solo 3 pulsanti

Adatto a tutte le capsule

Facile da pulire

Indicatore di bassa corrente e funzione di arresto

2 anni di garanzia

Doppio voltaggio

## DATI TECNICI

Larghezza	217mm	8.5"
Profondità	173mm	6.75"
Altezza	180mm	7.12"
Voltaggio	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Peso	2.43kg	5.4lbs

## INDICATORE DI BASSA CORRENTE E FUNZIONE DI ARRESTO

Se l'alimentazione non rientra nei limiti indicati (100-120 V e 220-240 V), l'indicatore di corrente sarà blu e intermittente e l'apparecchio non funzionerà finché non riceverà l'alimentazione corretta. Questo consente di prevenire la miscelazione insufficiente dei materiali.

## FUNZIONE DI SICUREZZA

Ultramat S arresta immediatamente la miscelazione quando viene aperto il coperchio trasparente.


## ADATTO A TUTTE LE CAPSULE

Le forcelle pieghevoli consentono di inserire molti tipi di capsule arrotondate (capsule di amalgama) oltre a quelle con ugelli sporgenti (capsule di vetroionomero).

DENTAL DEVICE (CAPSULES)	TRITUARATION TIMES (SECONDS) USING ULTRAMAT S - SPEED SETTING: FIXED
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 spill Permite / 1, 2, 3 spill GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 spill Permite / 5 spill GS-80	8 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Self Cure (Regular and Fast) Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus /	10



## DETTAGLI DELL'ORDINE

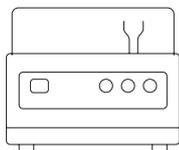

### EQUIPMENT

**Ultramat S** 5546058  
(Per tutti i paesi: include cavo di alimentazione per la regione di consegna)  
Codice di riordino

**Ultramat 2**  
(Per tutti i paesi: include cavo di alimentazione per la regione di consegna)  
Codice di riordino

\*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, are not registered trademarks of SDI Limited.



YOUR SMILE.  
OUR VISION.



ACN 008 075 581



+D036M5546571D

MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited  
3-15 Brunsdon Street,  
Bayswater, Victoria 3153 Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIA** 1800 337 003  
**AUSTRIA** 00800 0225 5734  
**BRAZIL** 0800 770 1735  
**FRANCE** 00800 0225 5734  
**GERMANY** 0800 100 5759

**ITALY** 00800 0225 5734  
**NEW ZEALAND** +64 21 400 323  
**SPAIN** 00800 0225 5734  
**UNITED KINGDOM** 00800 0225 5734  
**USA & CANADA** 1 800 228 5166