

COMPOSITE FLUIDO CON RILASCIO DI FLUORO




REGOLARE, MEDIA & ALTA VISCOSITÀ

UN FLOW PER TUTTE LE TUE ESIGENZE CLINICHE

Wave, Wave MV e Wave HV sono compositi fluidi versatili, a rilascio di fluoro, radiopachi e fotopolimerizzabili, progettati per restauri anteriori e posteriori. Wave ha una viscosità estremamente bassa, Wave MV possiede una viscosità media e Wave HV è un composito fluido ad alta viscosità.

SCELTA DI 3 VISCOSITÀ


L'ampio numero di viscosità disponibili nella gamma Wave assicura al dentista una scelta appropriata per ogni condizione clinica.

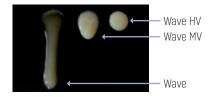

Flusso a 90°


Flow SDI	Simile a
Wave	UltraSeal XT Plus*
wave	Premise Flowable*
Wave MV	Filtek Supreme Plus Flowable* Heliomolar Flow* Tetric Flow*
Wave HV	Revolution Formula 2*
	Flow-It! ALC*
	Point 4 Flowable*
	Filtek Flow*
	AeliteFlo LV*
	Esthet-X Flow*
	AeliteFlo*

^{*}Non sono marchi registrati di SDI Limited

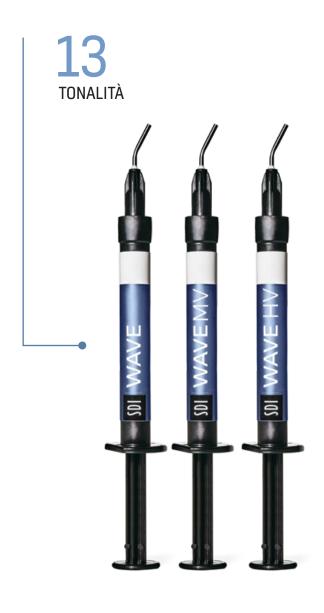

RILASCIO DI FLUORO

L'effetto cariostatico del fluoro promuove la rimineralizzazione ed inibisce la demineralizzazione dello smalto. In un ambiente acquoso gli ioni di fluoro contenuti in Wave, Wave MV e Wave HV si diffondono dalla resina al dente circostante. Questo movimento di ioni è reso possibile dal passaggio del liquido orale dentro e fuori dalla resina e dal dente, che agisce da veicolo per gli ioni di fluoro.

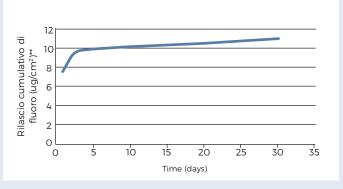


^{**} Fonte: Attar, N. e Turgut, MD. (2003) "Fluoride Release and Uptake Capacities of Fluoride-Releasing Restorative Materials", Operative Dentistry, 28(4), pagg. 395-402.

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

L'elevata resistenza alla compressione di Wave, Wave MV e Wave HV rende questi prodotti adatti in molteplici applicazioni.

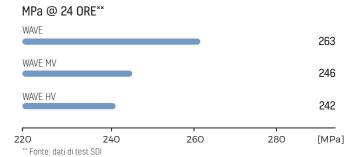

COLORI SPECIALI

La gamma Wave 13 tonalità di Wave sono adatte a tutti i restauri anteriori e posteriori: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OA2, Gengival e Bleach. La tonalità Gengival serve a ripristinare le lesioni cervicali nei pazienti anziani. Per i denti più chiari di B1 è disponibile la tonalità Bleach.

VANTAGGI

Elevata resistenza alla compressione

Nanotecnologia

Tre viscosità



FILLER

Wave, Wave MV e Wave HV contengono filler appositamente trattati per massimizzare la lucidabilità, la resistenza all'usura e la forza. La facilità di estrusione è migliorata con l'aggiunta di questi filler appositamente trattati.

RADIOPACITA'

Wave, Wave MV e Wave HV sono visibili ai raggi X e pertanto consentono l'identificazione di carie secondarie all'interfaccia.


FLUORESCENZA NATURALE


Wave, Wave MV e Wave HV contengono un agente fluorescente che dona ai denti un aspetto naturale sotto le luci ultraviolette. Nessuno lo saprà!




Wave sui denti naturali sotto la luce UV.


ISTRUZIONI

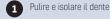

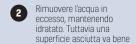

Applicare l'agente adesivo, come Zipbond (SDI Limited)*, per saturare tutte le superfici interne

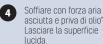

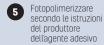













6 Iniettare Wave, Wave MV o Wave HV direttamente, in incrementi di 2mm o inferiori in:

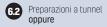

6.4 Restauri minimi di I. II, III e IV classe, oppure altre indicazioni

Fotopolimerizzare il composito utilizzando una lampada LED ad alta potenza (440-480 nm) con un minimo di 500 mW/cm2, come Radii Xpert (SDI Limited), con incrementi di 2 mm.



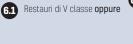



Sigillature di solchi e



8 Lucidare e rifinire



*Secondo le istruzioni del produttore dell'agente adesivo

CODICI DI RIORDINO



SIRIN	GHE		
	_:		

5 Puntali monouso

Wave Ricambi in siringa 1 x 1g Siringa

	WAVE	WAVE MV	WAVE HV
A1	7510102	8310102	8210102
A2	7510203	8310203	8210203
A3	7510304	8310304	8210304
A3.5	7510405	8310405	8210405
B1	7511101	8311101	8211101
B2	7511211	8311211	8211211
B3	7511314		
C2	7512223	8312223	8212223
C3	7512324		
D3	7513334		
0A2	7510204		8210204
Incisal	7514142		
Gingival (A5)	7514143		
Bleach	7514147	8314147	8214147

PUNTALI

Puntali monouso per siringhe Wa	ve
20 aghetti monouso (20 Gauge)	7500001
200 aghetti monouso (20 Gauge)	8100062

Puntali monouso per siringhe Wave MV e HV

•	-	
20 aghetti monouso		8100065
(18 Gauge)		

KITS

KITS	
Wave kit introduttivo siringhe	'
4 siringhe da 1g A2, B3, C3, OA2 20 aghetti monouso	7500000
Wave HV kit introduttivo siringhe	'
4 siringhe da 1g A2, B2, C2, OA2 20 aghetti monouso	8200000
Wave confezione bulk 10 siringhe da 1g 40 aghetti monouso	
A1	7500011
A2	7500012
Δ3	7500013



YOUR **OUR** SMILE. **VISION**.



C € 0297



PRODOTTO IN AUSTRALIA by SDI Limited 3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153 www.sdi.com.au **AUSTRALIA** 1800 337 003 **AUSTRIA** 00800 0225 5734 **BRASILE** 0800 770 1735 **FRANCIA** 00800 0225 5734 **GERMANIA** 0800 100 5759 ITALIA 00800 0225 5734 NUOVA ZELANDA 0800 808 855 SPAGNA 00800 0225 5734 REGNO UNITO 00800 0225 5734 USA E CANADA 1 800 228 5166

^{*} Non sono marchi registrati SDI Limited.

^{**} Fonti -Pubblicate e dati dei test SDI.