



AURA BULK FILL

ULTRA UNIWERSALNY MATERIAŁ DO ODBUDOWY



WYPEŁNIJ,
MODELUJ
I GOTOWE




ŁATWOŚĆ ODBUDOWY JEDNOWARSTWOWEJ

SZYBKA I PROSTA ODBUDOWA KOMPOZYTOWA W ODCINKU BOCZNYM.

- Naturalny końcowy wygląd za pomocą jednego uniwersalnego odcienia.
- Duża głębokość polimeryzacji bez potrzeby stosowania techniki warstwowej.
- Łatwa aplikacja w kilka sekund.
- Optymalna konsystencja ułatwiająca aplikację i modelowanie.

5mm
JEDNOWARSTWOWE
WYPEŁNIENIE

WYPEŁNIJ, MODELUJ I GOTOWE

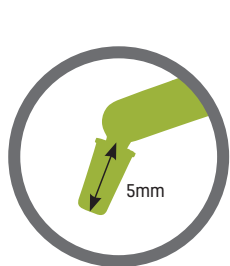


+



Jednoetapowe
wypełnienie
w warstwie do 5mm

20sek
polimeryzacja lampą LED

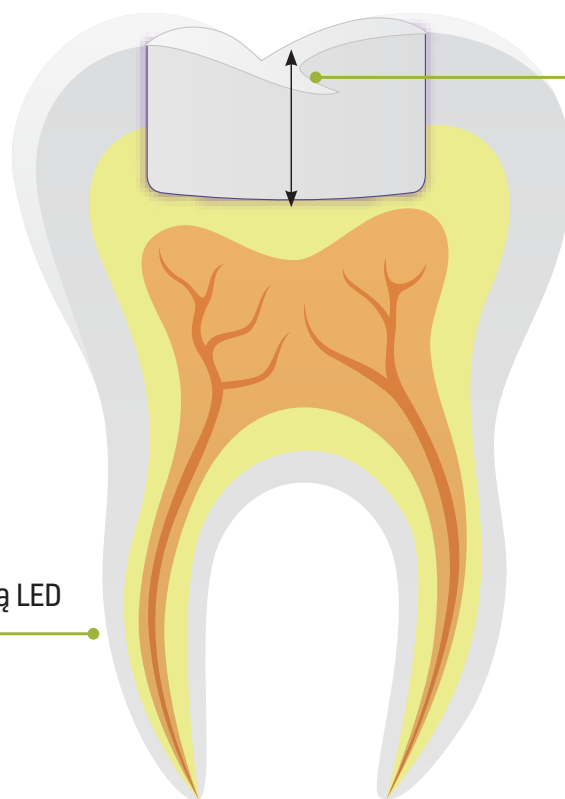

NAJLEPSZA MOŻLIWA ESTETYKA STUDIUM PRZYPADKÓW

DR BOB LOWE [USA]



PRZED



PO

DR. GREGOR THOMAS [GERMANY]



PRZED



PO

JEDEN ODCIEŃ. JEDNO WYPEŁNIENIE.

NISKI SKURCZ OBJĘTOŚCIOWY*

Aura bulk fill charakteryzuje się niskim skurczem polimerizacyjnym redukując naprężenia wewnętrzne co daje trwałe i wytrzymałe wypełnienia.

DOSKONAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE*

Aura bulk fill jest odporny na duże naprężenia bez uszkodzenia.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE*

Aura bulk fill jest odporny na siły zgryzowe w jamie ustnej.

2.21%

115MPa

375MPa

*Dane wewnętrzne SDI

WSKAZANIA

Odbudowy w odcinku tylnym

Odbudowa zrębu koronowego

Szynowanie


Technika kanapkowa z użyciem gładjonomeru




GŁĘBOKOŚĆ POLIMERYZACJI

Przezierność materiału aura bulk fill zależy od współczynnika załamania światła żywicy i wypełniacza, dwóch składników kompozytu. Proces polimeryzacji zmienia nieznacznie współczynnik załamania światła żywicy, który jest wtedy podobny do współczynnika załamania światła wypełniacza.

To powoduje chwilowe zwiększenie przezierności materiału. Dzięki temu zwiększa się głębokość polimeryzacji. Po utwardzeniu kompozytu oba współczynniki załamania światła wracają do wartości wyjściowych. Materiał staje się bardziej nieprzezierny dając doskonały efekt estetyczny.

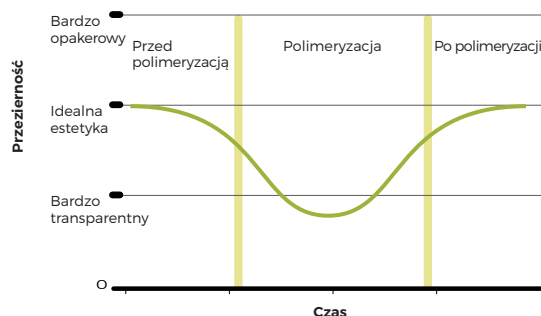


KODY ZAMÓWIEŃ

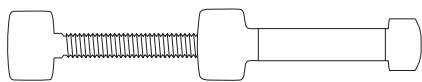

STRZYKAWKI

Strzykawki - 4g

8560012

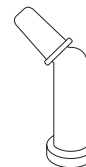

KOMPIULE

Kompiule - 20x 0.25g = 5g łącznie

8565012

» Praca kompozytem aura bulk fill jest szybka, niezawodna i ekonomiczna. Odpowiednia konsystencja, idealna adaptacja brzeżna i doskonała polerowalność sprawiają, że to kompozyt z wyboru do wypełnień w odcinku bocznym. aura bulk fill to materiał idealny w codziennej pracy. «

DR LIEL GRINBAUM DMD

WYBÓR WŚRÓD KOMPOZYTÓW

Aura
Aura Easy
Aura Bulk Fill



YOUR SMILE.
OUR VISION.



WYPRODUKOWANO W AUSTRALII
przez SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALII 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZYLIA 0800 770 1735
FRANCJA 00800 0225 5734
NIEMCY 0800 100 5759

WŁOCHY 00800 0225 5734
NOWA ZELANDIA 0800 808 855
HISZPANIA 00800 0225 5734
WIELKA BRYTANIA 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166